

ACTIVESHOP[®]

NÁVOD K POUŽITÍ

**Skládací masážní stůl Balance ze dřeva, 3
segmenty, 186 x 60 cm**



Dovozce:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Vratislav, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026



Naskenujte pro
jiný
jazyky

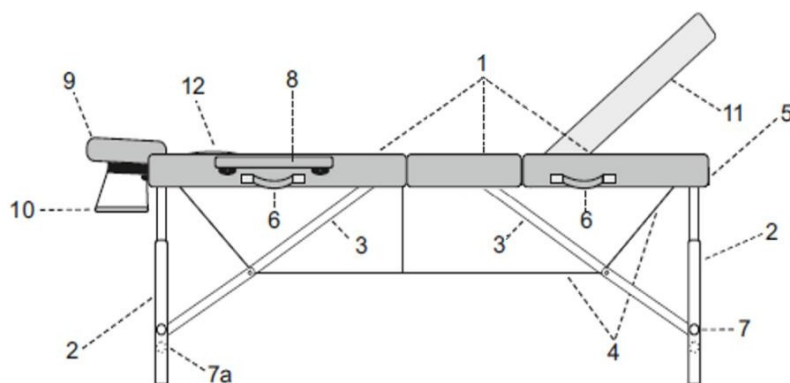
Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.

Před prvním použitím si prosím přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

Skládací masážní stůl BALANCE s dřevěnými nohami je praktické a univerzální řešení, vytvořené s ohledem na každodenní práci masérů, fyzioterapeutů a dalších odborníků. Třídílná konstrukce zajišťuje stabilitu a pohodlí jak pro osobu provádějící ošetření, tak pro pacienta. Díky kompaktním
Díky svým rozměrům, nízké hmotnosti a přiložené tašce se skvěle hodí i pro práci na cestách – umožňuje rychlé a pohodlné složení a přenášení.

Technické údaje	
Materiál potahu	Syntetická kůže
Výplň	Pěna
Maximální nosnost	225 kg

Konstrukce zařízení:



1. Desky stolu
2. Nohy
3. Podpěry desky
4. Napínací lanko
5. Zámek kufríkový
6. Převrácené úchyty
7. Šrouby / kolíky pro nastavení výšky
- 7a. Přídavné šrouby
8. Područky
9. Opěrka hlavy
10. Polička pod paže
11. Nastavitelná deska
12. Zátka výřezu pro obličej

Návod k montáži

1. Složený stůl připomíná kufr. Otevřete zámky a rozložte desky stolu
2. Vyjměte příslušenství (područky, opěrku hlavy a poličku pod paže)
3. Rozložte nohy na vnější straně stolu



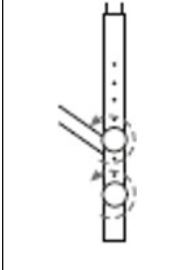
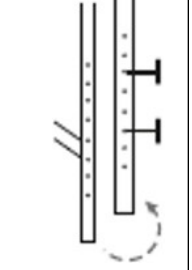
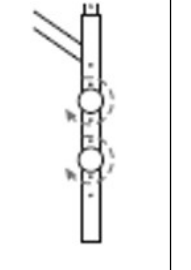
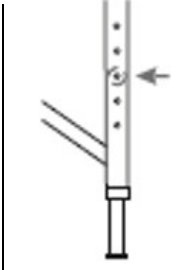
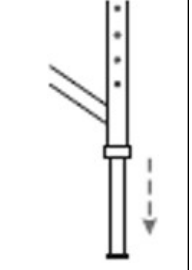
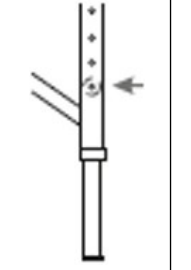
4. Postavte stůl na nohy a přitlačte jej v místě spojení desek
5. Zkontrolujte napnutí lanka
6. Nastavte požadovanou výšku desky podle níže uvedeného návodu
7. Zasuňte područky do otvorů na boku stolu

8. Připevněte polštář k opěrce hlavy pomocí suchých zipů a poté zasuňte opěrku hlavy do otvorů v horní části postele. Pomocí západky zajistěte opěrku hlavy ve zvolené poloze.



Polici pod paže lze připevnit dvěma způsoby

Nastavení výšky:

1	2	3	Stoly	Popis činnosti
			Dřevěné	1. Odšroubujte šrouby, kterými jsou konzoly připevněny k nohám stolu. 2. Nastavte podpěry do požadované výšky. 3. Utáhněte šrouby.
			Hliníkové	1. Zatlačte zajišťovací čep. 2. Přesuňte držák k desce do požadované polohy. 3. Vyrovnajte otvor s čepem.

Nastavení opěradla:

- Po otevření spony na konci stolu (na straně naproti opěrce hlavy) můžete opěrku zvednout a nastavit ji do požadované polohy.
- Po nastavení opěradla sponu opět zapněte.



Upozornění

- Před uložením pacienta se ujistěte, že jsou vnější nohy správně roztažené a že lanka jsou v dobrém technickém stavu a jsou správně napnutá.
- Maximální nosnost masážního stolu je 225 kg.

Doporučení:

1. Stůl je určen pro použití v interiéru.
2. Je zakázáno měnit polohu stolu, pokud je zatížen.
3. Je zakázáno prudce vyskakovat na stůl, stejně jako sedat, klečet a opírat se přímo o opěrku hlavy a loketní opěrky.
4. Stůl smí být přepravován pouze ve složeném stavu a se zajištěným zámkem.
5. Při skládání stolu je třeba dbát na uspořádání lan. Lana nesmí být přiskřípnutá.
6. Stůl by měl být používán a skladován mimo dosah přímých zdrojů ohně a tepla.
7. Při správném používání může stůl bezporuchově sloužit po mnoho let.
8. Škody vzniklé v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů nejsou důvodem k reklamaci.

Rozměry zařízení



Rozměry ve složeném stavu 93 x 60 x 15 cm

Čištění a údržba:

Aby byl výrobek v dobrém technickém stavu a měl co nejdelší životnost, je třeba jej pravidelně čistit a udržovat.

- Povrch lůžka – používejte čistý, měkký hadřík. Můžete použít malé množství speciálního prostředku na čištění a impregnaci syntetické kůže.
- Povrchy ze dřeva nebo překližky čistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem a poté důkladně osušte. Nepoužívejte žádné chemické prostředky.

Upozornění!

Dřevo jako přírodní materiál se může vyznačovat rozdíly v uspořádání letokruhů, barevných odstínech a výskytem přírodních prvků, jako jsou pruhy nebo tečky. Nejedná se o vadu výrobku – naopak, svědčí o jeho autentičnosti a přírodním původu. Tyto vlastnosti nejsou důvodem k reklamaci.

Bezpečnostní opatření:

1. Zařízení je profesionální přístroj určený k použití v kosmetických salonech. Používání zařízení výhradně kvalifikovaným kosmetickým personálem umožňuje předejít nežádoucím účinkům během ošetření.
2. Zařízení nesmíte rozebírat ani se pokoušet jej používat k jiným účelům, než jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze. Veškeré servisní práce a opravy smí provádět výhradně pracovník autorizovaného servisu (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Zařízení nesmí být instalováno ani obsluhováno v blízkosti tekutin, na vlhkých místech nebo mokřýma rukama. Dbejte na to, aby se do zařízení nedostaly žádné tekutiny.
4. V následujících případech je nutné okamžitě vytáhnout zástrčku ze zásuvky a kontaktovat autorizovaný servis společnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.: a) do zařízení vnikla kapalina, b) zařízení vydává podivný zápach, kouř nebo vydává podivné zvuky, c) napájecí kabel byl poškozen, d) zařízení bylo převráceno nebo došlo k poškození jeho krytu.
5. Na kabely nesmí být položeny žádné předměty. Zařízení neinstalujte na místech, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky po každém ukončení práce se zařízením.
7. Do vnitřku zařízení nesmí být vkládány žádné cizí předměty. Pokud se do vnitřku zařízení dostane nežádoucí předmět, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte prodejce nebo výrobce.
8. Zařízení nesmí být umístěno na nestabilním vozíku, polici nebo vozidle. V případě pádu může dojít k poškození zařízení.
9. Aby byla zaručena stanovená životnost zařízení, doporučuje se před opětovným stisknutím tlačítka napájení počkat jednu minutu (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájení musí odpovídat specifikaci uvedené na typovém štítku. V opačném případě hrozí riziko nesprávné funkce zařízení, jeho poškození nebo dokonce vznícení.

UPOZORNĚNÍ

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizovaný servis – tím se vyhnete nebezpečí.
2. Toto zařízení mohou používat děti ve věku nejméně 8 let, osoby s omezenými fyzickými a mentálními schopnostmi a také osobami, které nejsou seznámeny s fungováním tohoto zařízení, pokud jim bude zajištěn odpovídající dohled nebo poučení o správném a bezpečném používání a pokud jim budou srozumitelná související rizika.
3. Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby, které nemají dostatečné znalosti o jeho používání.
4. Zařízení není určeno k hraní pro děti. Nedovolte dětem, aby si s tímto zařízením hrály.
5. Toto elektrické zařízení není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým zařízením může představovat riziko poškození zdraví nebo vést ke smrti, proto je třeba zařízení používat a uchovávat mimo dosah dětí.

Likvidace zařízení



V zájmu ochrany životního prostředí je v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních nutné vyřazená elektrická zařízení sbírat odděleně a odevzdávat je do sběrných míst pro vyřazená elektrická a elektronická zařízení. Je třeba dodržovat pokyny pro likvidaci tohoto typu zařízení a nevazujte je do kontejnerů na domácí odpad.

Na konci své životnosti obsahují tato zařízení stále plnohodnotné součásti vhodné k recyklaci, proto je třeba je předat k recyklaci do příslušných sběrných míst nebo společnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Skladování a přeprava

Zařízení by mělo být přepravováno při teplotě v rozmezí od (–)20 °C do (+)40 °C výhradně v originálním obalu. Skladujte jej v dobře větrané místnosti s relativní vlhkostí nejvýše 90 %. Provozní teplota od (+)10 °C do (+)40 °C. Během procesů při skladování a přepravě se zařízení nesmí házet ani upouštět a nesmí být vystaveno mechanickým otřesům ani povětrnostním vlivům.