

ACTIVESHOP[®]

NÁVOD K POUŽITÍ

Azzurro F-18A pohlcovač prachu z pedikúry




Dovozce

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud DC
2A 54-610 Wrocław,
Polsko
www.activeshop.com.pl
Rew. A/05/2024



Rozměry

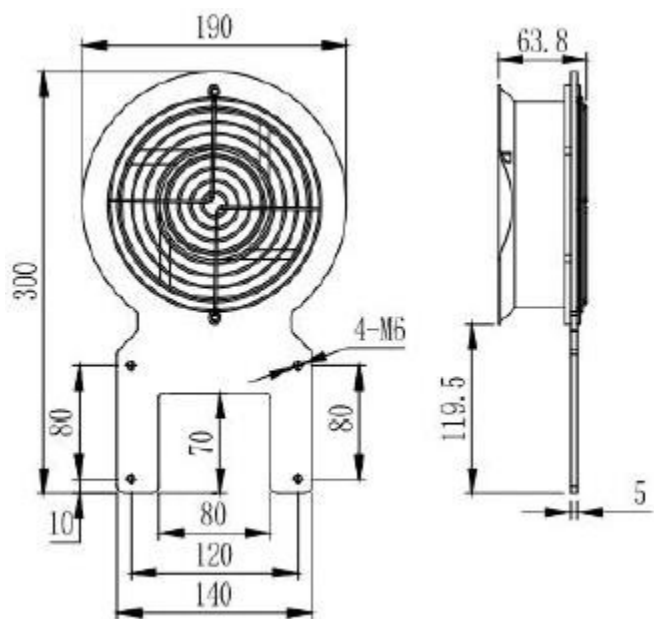

Konstrukce absorbéru umožňuje jeho montáž na podnožku nebo přímo na léčebné křeslo.

Technické údaje

Jmenovité napětí	220-240 V, 50/60 Hz
Napájení	38 W
Otáčky turbíny	2800/3200 OT/MIN
Objem filtrovaného vzduchu	345/406 m3 za hodinu
Hladina hluku	51/58 dB
Rozměry	13,5 cm (dovnitř) 19 cm (ven)

Použití

Konstrukce tlumiče umožňuje jeho připevnění k podnožce nebo přímo k léčebnému křeslu.

Stiskněte spínací tlačítko, ventilátor začne pracovat. Opětovným stisknutím spínacího tlačítka ventilátor přestane pracovat.



Pytel

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických ordinacích. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím účinkům během ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis poskytovaný společností ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
(a) do spotřebiče se dostala kapalina, (b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky,
c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) přístroj byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.
5. Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neinstalujte spotřebič na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky vždy, když ukončíte práci se spotřebičem.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Nepokládejte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájecí zdroj musí odpovídat specifikacím uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce shoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.
2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž o používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do kontejnerů na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES týkající se odpadu použitých elektrických a elektronických použitých elektrospotřebičů.

elektrozařízení musí být shromažďovány odděleně a odevzdávány na sběrných místech pro použitá elektronická a elektrická zařízení.

Vyřazené a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být odevzdány k recyklaci. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také ve společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Spotřebič by měl být přepravován při teplotě (-) 20 °C až (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladování a přepravy nesmí být zařízení hozeno nebo upuštěno, vystaveno mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.