

ACTIVESHOP®

GEBRAUCHSANWEISUNG

Azzurro F18 Fußpflegestaubabsauger





Importeur

ACTIVESHOP Sp.z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud DC 2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rew. A/05/2024



Abmessungen

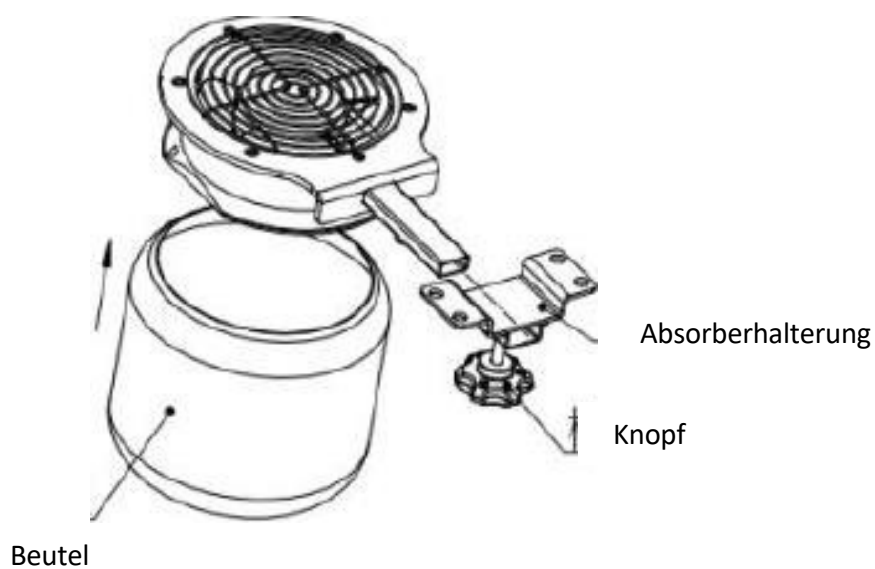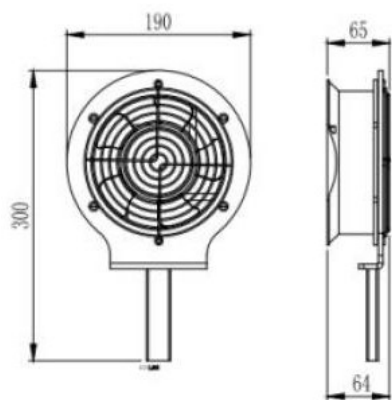

Lösen Sie den Knopf und stecken Sie das Vierkantrohr des Absorbers in die Halterung, dann ziehen Sie den Knopf fest.

Drücken Sie den Schaltknopf, der Ventilator beginnt zu arbeiten. Durch erneutes Drücken des Schaltknopfes schaltet sich der Ventilator ab.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Gebrauch in Schönheitssalons. Die Bedienung des Geräts nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal vermeidet unerwünschte Folgen während der Behandlung.
2. Das Gerät darf nicht demontiert oder für andere als die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
3. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen auf und bedienen Sie es nicht, damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
4. Ziehen Sie in den folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an ein von ACTIVESHOP Ltd. autorisiertes Servicezentrum:
(a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, (b) das Gerät gibt einen seltsamen Geruch ab, raucht oder macht seltsame Geräusche,
c) das Netzkabel wurde beschädigt, d) das Gerät wurde umgestoßen oder sein Gehäuse wurde beschädigt.
5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
6. Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.
9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, eine Pause von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen Störung an eine autorisierte Kundendienststelle, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts verwendet werden, wenn eine Aufsicht oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe aufhalten.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTES



Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen umweltgerecht bei den Recyclingstellen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Zum Schutz der Umwelt müssen gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Abfall gebrauchte elektrische und elektronische gebrauchte Elektrogeräte müssen Elektrogeräte getrennt gesammelt und an Sammelstellen für gebrauchte elektronische und elektrische Geräte abgegeben werden.

Altgeräte enthalten vollständig verwertbare Bestandteile und sollten daher dem Recycling zugeführt werden. Daher sollten sie bei den entsprechenden Sammelstellen sowie bei der ACTIVESHOP GmbH abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur von (-) 20 °C bis (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75%. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.