

ACTIVESHOP®

KASUTUSJUHEND

Azzurro F18 pediküüri tolmuimeja





Importija

ACTIVESHOP Sp.z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud DC
2A 54-610 Wrocław, Poola
www.activeshop.com.pl
Rew. A/05/2024



Mõõtmed

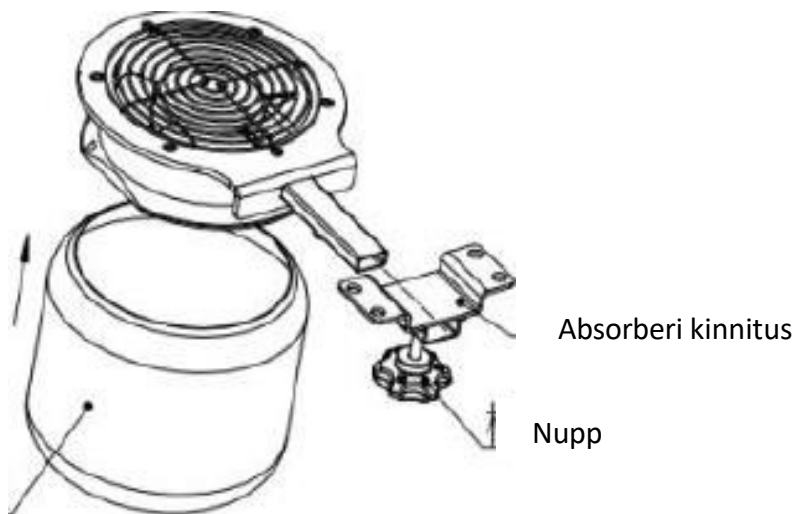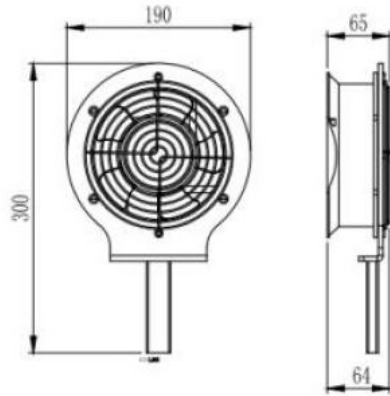

Kott

Absorberi kinnitus

Nupp

Lõdvendage nuppu ja sisestage neelduri nelinurkne toru kinnitusse, seejärel pingutage nuppu.

Vajutage lülitusnuppu, ventilaator hakkab tööle. Vajutage uuesti lülitusnuppu, ventilaator lõpetab töötamise.

OHUTUSMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib ebasoovitavaid tagajärgi ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, märgade kohtade läheduses või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgmistel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja pöörduge ACTIVESHOP Ltd. poolt pakutud volitatud teeninduskeskuse poole:
(a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalisi helisid, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.
6. Turvalisuse huvides tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks soovitatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) järgida üheminutilist intervalli.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuse või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii vältite ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seadme ohutu kasutamise kohta, et mõista sellega seotud riske.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada majapidamisjäätmete konteinerites. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonnakaitse eesmärgil vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ, mis käsitleb jäätmeid kasutatud elektrilised ja elektroonilised kasutatud elektriseadmed kasutatud elektriseadmed

tuleb elektriseadmed eraldi koguda ja anda kasutatud elektroonika- ja elektriseadmete kogumispunktidesse.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need ringlussevõtuks ära anda. Seetõttu tuleks need üle anda asjakohastes kogumispunktides ja ka ACTIVESHOP OÜ-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.