

ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

Přenosná frézka aku VIVA 305



Dovozce:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/08/2024



Technické údaje

Jmenovité napětí	5V 2A
Výstupní napětí	7,4V 3A
Napájení	36W
Rychlost otáčení	35 000 OTÁČEK ZA MINUTU

Rozměry



Pozor


1. Přístroj je třeba pravidelně čistit, aby se na něm nehromadily nečistoty, prach a jiné nežádoucí látky. Jejich nahromadění může vést k nesprávné funkci jednotky nebo dokonce k poškození zařízení.
2. Není dovoleno omotávat napájecí kabel kolem přístroje, může to způsobit jeho nefunkčnost.
3. Vždy se ujistěte, že je spotřebič napájen ze zdroje se správným jmenovitým napětím. Ujistěte se, že je zástrčka správně zasunuta do zásuvky. V opačném případě by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo popálení.
4. Kabel se nesmí upravovat, natahovat, nadměrně ohýbat ani kroutit.
5. Na kabel se nesmí pokládat nic těžkého.
6. Zabraňte vniknutí prachu nebo jiných škodlivých prvků do zástrčky, základny nebo hlavice použitím pohlcovačů prachu.

7. Do přístroje neútočte a neházejte s ním. Pokud dojde k poškození zařízení v důsledku nárazu nebo pádu, nelze jej dále používat.
8. Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo opravovat. V případě oprav se obraťte na distributora u kterého bylo zařízení zakoupeno, nebo v autorizovaném servisním středisku.

Konstrukce zařízení



Připojení hlavy Vstup
kabelu USB C

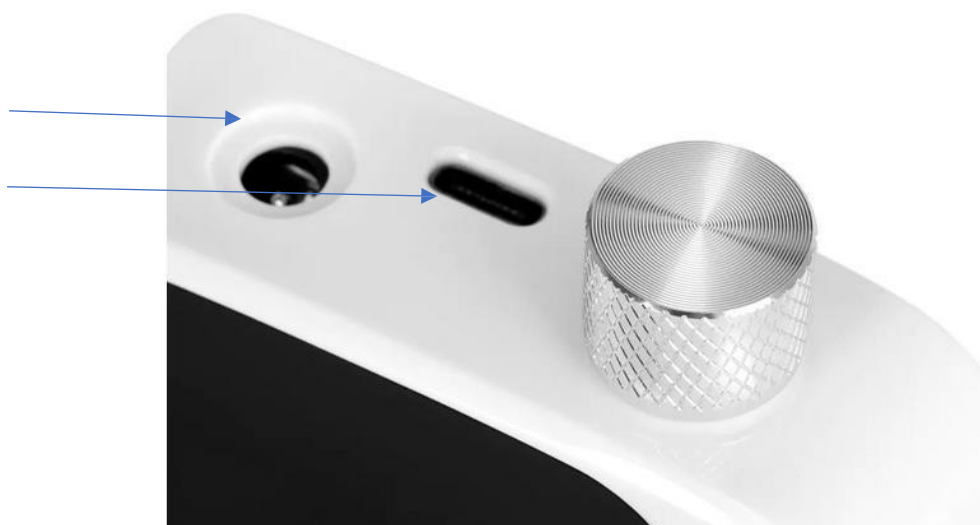

Návod k obsluze:

1. Zkontrolujte, zda je nůž správně umístěn a zajištěn na místě. Hlava je vybavena systémem otočného zámku aby bylo možné frézu snadno nasadit a sejmout.
2. Spusťte stroj tlačítkem Start/Stop.
3. Pomocí knoflíku nastavte rychlost (otáčky za minutu) otáčením knoflíku doleva nebo doprava.
4. Stisknutím tlačítka můžete zvolit směr otáčení.
5. Po dokončení snižte otáčky na minimum a přístroj vypněte.
6. Zařízení má baterii s kapacitou 200 mAh, která umožňuje 8-10 hodin provozu na jedno nabití. na jedno nabití. V případě potřeby připojte zařízení k nabíjení až po dokončení.

Výměna nože

1. Chcete-li vyměnit nůž, otočte knoflíkem Twist Lock proti směru hodinových ručiček směrem k otevřenému nápisu visacího zámku.
2. V tomto okamžiku můžete vyměnit nůž tak, že jej vysunete z vřetena a nahradíte novým.
3. Jakmile je fréza ve vřetenu, otočte knoflíkem Twist Lock ve směru hodinových ručiček směrem ke značce "zavřeného visacího zámku", dokud neuslyšíte charakteristické "cvaknutí".
4. Požadovaná rychlost frézování závisí na typu a materiálu frézy. V tomto ohledu se řiďte informacemi výrobce.

Upozornění

Na obrazovce se může objevit chyba Er1, pokud je řezačka nesprávně vložena nebo není správně nasazena. zablokován.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Spotřebič je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Manipulace s přístrojem pouze kvalifikovaným personálem zabrání nežádoucím následkům při ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servis (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, mokřích prostor nebo s mokřýma rukama - aby se do spotřebiče nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte spotřebič ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis společnosti ACTIVESHOP s.r.o.:
V případě, že se do spotřebiče dostala tekutina, b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) došlo k převržení spotřebiče nebo poškození jeho pouzdra.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky vždy, když s přístrojem skončíte práci.
7. Do otvoru přístroje nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Přístroj nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu se může přístroj poškodit.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě je v opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných p o r u c h se obraťte na odborníka. autorizované servisní středisko, abyste předešli jakémukoli nebezpečí.
2. Tento přístroj mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a osoby nezkušené a neznalé zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo jsou poučeny o bezpečném používání zařízení tak, aby pochopily související rizika.
3. Zařízení není určeno pro hru dětí. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby, které nejsou dostatečně obeznámeny s používáním spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto jej používejte a skladujte mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES týkající se použitých elektrických spotřebičů by měly být použité elektrické spotřebiče sbírat odděleně a odevzdávat na sběrných místech pro použitá elektrická a elektronická zařízení.

Vyřazené a staré spotřebiče obsahující plně recyklovatelné součásti by proto měly být předány k recyklaci. Měly by se proto odevzdávat na příslušných sběrných místech a lze je také odevzdat společnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě v rozmezí (-) 20 °C až (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj by měl být skladován v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.