

ACTIVESHOP®

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Azzurro Special 152 kozmetikai szék



Importőr:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, épület DC2A 54-610
Wrocław, Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026

A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT

Ez a kézikönyv részletes információkat tartalmaz a készülék használatáról és karbantartásáról. A készülék használata előtt olvassa el a mellékelt kézikönyvet. A készüléket a leírásnak megfelelően használja. Őrizze meg ezt a kézikönyvet, és győződjön meg arról, hogy minden, aki a készüléket használhatja, ismeri annak tartalmát.

Műszaki adatok:

Méretetek: 119 x 60 x 53 cm


Súly: 14 kg

Maximális terhelés: 150 kg

Magasságállítás: 55–75 cm A háttámla
előre-hátra állítása: 0–5 cm Dőlésszög-
állítás: 10°

Felépítés:

1. A szék háttámlája és ülése
2. Gázrugó
3. A szék alapja
4. Görgők

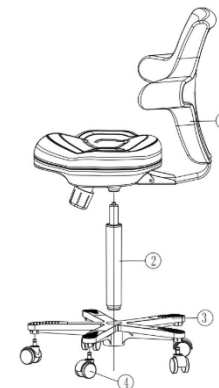

Összeszerelés:

1. Egyes modelleknél a szék háttámlája és ülése nincs összeszerelve. Ebben az esetben a háttámlát be kell csúsztatni az ülés rögzítőjébe, majd a mellékelt 3 csavarral rögzíteni.
 2. Szerelje fel a görgőket az alvázra úgy, hogy azokat benyomja.
 3. Helyezze be a rugós mechanizmust a vastagabbik végével az aljzatba.
 4. Helyezze az ülőfelületet a rugós mechanizmusra
- Figyelem. Egyes modelleknél a rugómechanizmus műanyag burkolattal van ellátva (az üléshez való csatlakozásnál). Az ülés felszerelése előtt ellenőrizze, hogy eltávolították-e a műanyag védőburkolatot. Ellenkező esetben az összeszerelés után nem lesz lehetséges a függőleges helyzet megváltoztatása.

Kezelés:

Függőleges állítás:

Az ülés leengedéséhez nyomja meg a képen jelzett kart, miközben az ülésen ül, vagy más módon terheli azt.


Az ülés felemeléséhez nyomja meg a képen jelzett kart anélkül, hogy egyidejűleg terelné az ülést.



A háttámla dőlésszögének beállítása:


Húzza ki a kar végét, hogy feloldja a dőlésszög állítását. Nyomja meg a háttámlát, és állítsa be a kívánt pozícióba. Ezután tolja be a kar végét a háttámla pozíciójának rögzítéséhez.

Figyelem: a használt rögzítő mechanizmus típusától függően a háttámlát az üléshez közelebb állítani – először az ellenkező irányba kell megnyomni (a nyílnak megfelelően a mellékelt ábrán látható nyílnak megfelelően).

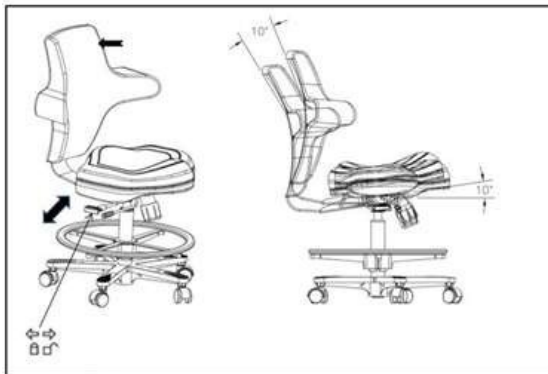

Az ülés vízszintes beállítása:

Az ülés előre vagy hátra, emelje meg a jelölt a k épét, majd tolja az ülést a kívánt pozícióba. A kar elengedése után az ülés a kiválasztott pozícióban marad.

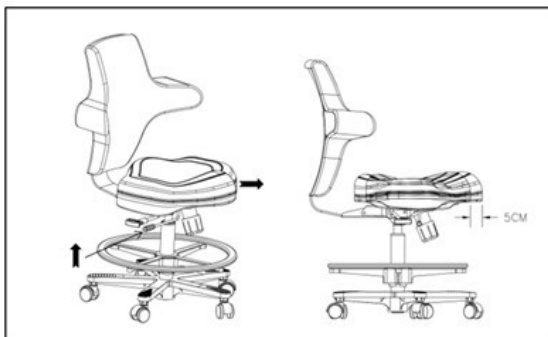

Ajánlások:

1. Ne lépje túl a szék ajánlott terhelését, az ajánlott súly túllépése maradandó károsodást okozhat (max. 150 kg).
2. Ne használjon maró hatású anyagokat, színezékeket, valamint olajos tisztítószerket a szék tisztításához.
3. A nem megfelelő tisztítószer az anyag károsodását, korróziót vagy egyéb károsodásokat okozhatnak.
4. A szék rendszeresen tisztítani kell, hogy a szennyeződések ne tapadjanak rá tartósan. A kárpit szennyeződéseinek eltávolításához a legbiztonságosabb módszer a langyos szappanos víz használata.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag az eredeti csomagolásában szabad szállítani, (–) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75% relatív páratartalom mellett kell tárolni. Üzemi hőmérséklet: (+) 10 °C és (+) 40 °C között. Tárolás és szállítás során a készüléket nem szabad dobálni vagy leejteni, mechanikai rázkódásnak vagy időjárási hatásoknak kitenni.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. A készülék professzionális eszköz, amelyet kozmetikai salonokban kell használni. A készülék kizárólag képzett kozmetikai szakemberek általi kezelése biztosítja, hogy a kezelés során ne lépjenek fel nem kívánt mellékhatások.
2. A készüléket tilos szétszerelni, illetve a jelen használati utasításban megjelölt céloktól eltérő célokra használni. Minden szervizelési és javítási munkát kizárólag az autorizált szerviz (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) munkatársa végezhet.
3. A készüléket tilos folyadékok közelében, nedves helyeken vagy nedves kézzel üzembe helyezni vagy kezelni – ügyeljen arra, hogy folyadék ne kerüljön a készülékbe.
4. A következő esetekben azonnal húzza ki a dugaszt a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot az ACTIVESHOP Sp. z o.o. által nyújtott hivatalos szervizzel:
a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt bocsát ki, vagy furcsa hangokat ad, c) a tápkábel megsérült, d) a készülék felborult, vagy a burkolata megsérült.
5. Ne tegyen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze el a készüléket olyan helyen, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból minden használat után húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
7. Semmit sem szabad a készülék nyílásába dugni. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval vagy a gyártóval. 8. A készüléket nem szabad instabil kocsira, polcra vagy járműre helyezni. Esés esetén a készülék megsérülhet.
9. A készülék megadott élettartamának biztosítása érdekében ajánlott egy perc szünetet tartani, mielőtt újra megnyomná a bekapcsoló gombot (a bekapcsolás és a kikapcsolás között, illetve fordítva).
10. Az áramellátásnak meg kell felelnie a típustáblán feltüntetett specifikációnak. Ellenkező esetben fennáll a készülék hibás működésének, megrongálódásának, sőt akár kiégésének kockázata.

FIGYELEM:

1. A tápkábel megrongálódása vagy egyéb meghibásodások esetén vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizzel – ezzel elkerülheti a veszélyt.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint fizikai vagy szellemi képességeikben korlátozott személyek, illetve a készülék használatában tapasztalatlan és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, amennyiben biztosított a felügyelet vagy a biztonságos használatra vonatkozó oktatás, hogy a kapcsolódó veszélyek érthetőek legyenek.
3. A készülék nem gyermekek számára készült. Tilos a gyermekeknek a készülékkel játszani.
4. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha gyermekek vagy a készülék használatában nem jártas személyek tartózkodnak a közelében.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. A készülék helytelen használata vagy az azzal való érintkezés egészségkárosodást vagy halált okozhat, ezért a készüléket gyermekektől elzárva kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



A használt elektromos készülékeket, eszközöket és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően az újrahasznosító központokba kell szállítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni. Be kell tartani a következő szabályokat az ilyen típusú berendezések hulladékkezelése. A környezet védelme érdekében

a használt elektromos és elektronikus berendezésekről szóló 2012/19/EK irányelvnek megfelelően a használt elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni, majd el kell juttatni a használt elektronikus és elektromos berendezések gyűjtőhelyeire. Élettartamuk végén a régi készülékek is tartalmazznak teljes értékű, újrahasznosítható alkatrészeket, ezért azokat újrahasznosításra kell átadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokra kell eljuttatni, de átadhatók az ACTIVESHOP Sp. z o.o. cégnek is.