

ACTIVESHOP®


ISTRUZIONI PER L'USO

Pulitore a ultrasuoni UC-002



Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/04/2024

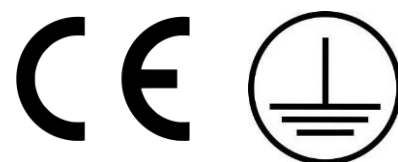

Dati tecnici:

Tensione	220V - 240V 50Hz
Potenza	65W
Frequenza di vibrazione	40kHz
Dimensioni	295 x 230 x 207 mm
Dimensioni del contenitore	245 x 147 x 77 mm
Capacità del serbatoio	2,5 l
Livello minimo del fluido	1 l
Livello massimo del fluido	2 l
Timer	90-480 s

- Scollegare l'unità prima di riempire il serbatoio. Non superare la linea "MAX" per evitare un riempimento eccessivo.
- Non riempire il serbatoio con sostanze chimiche abrasive o corrosive. Ciò potrebbe causare la fuoriuscita della lavatrice con conseguenti danni.
- Non utilizzare la lavatrice se il cavo o la spina sono danneggiati. Se danneggiati, rivolgersi a un centro di assistenza per l'ispezione e la riparazione.
- Conservare la lavatrice in un luogo sicuro.
- La lavatrice non deve mai essere lasciata incustodita quando è collegata alla rete elettrica.
- Non utilizzare la lavatrice mentre si fa il bagno.
- Scollegare la lavatrice immediatamente dopo l'uso.
- Non immergere la lavatrice in acqua per evitare folgorazioni.
- Non versare acqua dalla parte anteriore della lavatrice per non danneggiare il display.

Struttura e accessori della lavatrice:



1. Livello massimo del liquido
2. Livello minimo del liquido
3. Serbatoio
4. Display
5. Indicatore di temperatura
6. Pulsante di controllo della temperatura
7. Pulsante di accensione/spegnimento
8. Pulsante per l'accensione degli ultrasuoni
9. Pulsante per la funzione di disaerazione
10. Pulsante di regolazione del tempo

Pannello di controllo e funzioni:

- 1. Pulsante di accensione/spegnimento.** Serve per accendere e spegnere la lavatrice.
- 2. Pulsante per gli ultrasuoni.** Serve per attivare la funzione ultrasuoni. È necessario impostare prima il tempo di funzionamento. In caso contrario, la funzione non verrà attivata.
- 3. Display.** Indica la temperatura attuale. Quando la funzione ultrasuoni è attivata, indica il tempo di funzionamento rimanente.
- 4. Impostazione della temperatura.** Quando si preme il pulsante di regolazione della temperatura, il lavacristalli riscalda automaticamente l'acqua e mantiene la temperatura del liquido a circa 60 °C. Il colore blu dell'indicatore di temperatura indica che il liquido è in fase di riscaldamento. Il colore rosso indica che è stata raggiunta la temperatura desiderata. **Nota:** la lavatrice riscalda automaticamente il liquido per mantenerne la temperatura. L'indicatore diventa automaticamente blu per la durata del riscaldamento.
- 5. Pulsante Degas.** Serve per attivare la funzione di degassificazione. All'accensione, la lavatrice imposta automaticamente il tempo di funzionamento a 90 secondi e la spia di funzionamento della lavatrice lampeggia in verde. In alcuni casi, a causa di reazioni chimiche, nella soluzione del lavaggio possono comparire bolle d'aria (gas). Le bolle di gas impediscono il normale funzionamento della lavatrice. L'attivazione della funzione di degassificazione aiuta a rimuovere le bolle di gas e quindi a migliorare le prestazioni della lavatrice.
- 6. Controllo del tempo di funzionamento della soluzione.** Consente di impostare il tempo di funzionamento della lavatrice. Impostazioni possibili: 90s, 180s, 280s, 380s e 480s.

CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE

1. Non accendere la lavatrice senza acqua. L'accensione della lavatrice senza acqua può danneggiarla.
2. Non sovraccaricare la lavatrice con un funzionamento continuo. Dopo 30 minuti di funzionamento continuo, lasciare la lavatrice inattiva per altri 10 minuti.
3. Non lasciare l'acqua nella lavatrice in modo permanente. Versare l'acqua o la soluzione fuori dalla lavatrice dopo l'uso. Lasciare l'acqua o la soluzione nella lavatrice per lungo tempo può danneggiarla.
4. Prendetevi cura dell'esterno della lavatrice. Eliminare immediatamente ogni residuo di acqua o soluzione. Usare un asciugamano umido per pulire la lavatrice. Asciugare dopo il lavaggio.
5. Non collegare il dispositivo alla corrente elettrica con le mani bagnate o umide.
6. Conservare in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce del sole.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Rimuovere il coperchio, inserire i prodotti nel serbatoio e riempirlo d'acqua. L'acqua deve pulire gli oggetti da pulire, ma non deve superare il livello massimo del liquido.
2. Rimettere il coperchio e collegare la lavatrice alla rete elettrica. Premere il pulsante "On/off" per avviare la macchina. Il display visualizza la temperatura dell'acqua.
3. Premere il pulsante di regolazione del tempo per selezionare il tempo di funzionamento desiderato. Il display visualizza 90s, premere nuovamente il pulsante per passare a 180 secondi. Ogni clic successivo modifica il tempo di 100 secondi.
4. Premere il pulsante Ultrasuoni per attivare la funzione ultrasuoni. Il LED si illumina di verde. Se si desidera interrompere gli ultrasuoni, premere nuovamente il pulsante e il LED si spegnerà.
5. Premere il pulsante di regolazione della temperatura per selezionare la temperatura di lavaggio desiderata. Il LED si accende in blu. Se si preme nuovamente il pulsante, l'apparecchio smette di riscaldarsi e il LED si spegne. La temperatura massima di lavaggio è di 60 °C.
6. Al termine del lavoro, scollegare l'apparecchio, versare l'acqua residua e asciugare l'apparecchio.

METODI DI PULIZIA



Pulizia ordinaria

Utilizzare l'acqua secondo le istruzioni per l'uso. Versare l'acqua al termine del lavoro.



Lavaggio in soluzione

Preparare la soluzione detergente secondo le raccomandazioni del produttore. Fare attenzione a non superare la concentrazione della soluzione. Ciò potrebbe danneggiare le guarnizioni della lavatrice, con il conseguente rischio di allagamento dei componenti elettronici. Al termine, riempire la lavatrice con acqua, accenderla per 90 secondi e poi versare i residui fuori dalla lavatrice. In questo modo si evitano danni alla lavatrice dovuti al contatto prolungato con i prodotti chimici.



Lavaggio in lotti

Quando si lavano oggetti che non entrano nella bacinella, si può immergere una parte dell'oggetto nel lavaggio e poi pulire l'altra parte.

Lasciare il coperchio aperto durante la pulizia, ma ricordarsi di non toccare l'acqua nella vasca.



Pulizia avanzata (per attrezzature molto sporche)

Procedere come per il lavaggio con soluzione. Quindi sostituire l'acqua con acqua pulita e ripetere il processo.

Articoli non adatti alla pulizia con il pulitore a ultrasuoni:

- Alta gioielleria (perle, smeraldi, oggetti in avorio, perline, conchiglie, agata).
- Articoli saldati, rivestiti e incollati
- Altri oggetti come legno, vetro rivestito, ceramica, filtri di macchine fotografiche.

MISURE DI SICUREZZA

1. L'apparecchio è un'apparecchiatura professionale destinata all'uso nei saloni di bellezza. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita conseguenze indesiderate durante il trattamento.
2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Non installare o utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate - in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'apparecchio.
4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato dalla ACTIVESHOP Sp. z o.o. nei seguenti casi:
 - a) un liquido è penetrato nell'apparecchio, b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o fa strani rumori, c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o il suo involucro è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per sicurezza, togliere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si finisce di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'unità su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di rispettare un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con l'apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o provocare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio in conformità alle norme di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nella spazzatura domestica. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Per proteggere l'ambiente, in conformità alla Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli apparecchi elettrici usati devono essere raccolti separatamente e consegnati ai centri di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere inviati al ritrattamento. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati, oltre che all'ACTIVSHOP SA.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'apparecchio deve essere trasportato a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. Conservare l'apparecchio in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.