

ACTIVESHOP[®]

ISTRUZIONI PER L'USO

Poltrona cosmetica idraulica Sillon 210



Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Breslavia, Polonia

www.activeshop.com.pl Rev.

A/05/2025





Cerca altre
lingue




Dimensioni:





Montaggio:

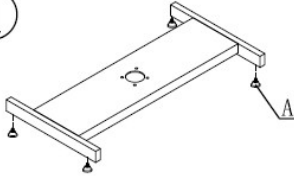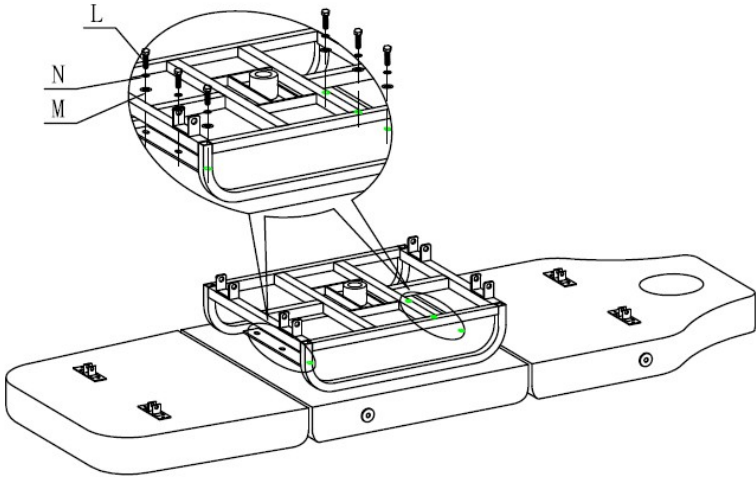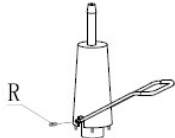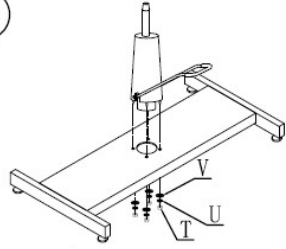A  4pcs	B  M6 4pcs	C  M6X35 4pcs	D  2pcs	E  M5X8 8pcs	F  4pcs	G  2pcs	H  M12X80 4pcs
I  φ12 4pcs	J  M12 4pcs	K  2pcs	L  M8X25 6pcs	M  φ8 6pcs	N  φ8 6pcs	O  M10X25 1pcs	P  φ10 1pcs
Q  φ10 1pcs	R  2pcs	S  1pcs	T  M6 4pcs	U  M6 4pcs	V  M6 4pcs	① 	
④ 						② 	
						③ 	
CH-210							


1. Inserire le rondelle nella base della poltrona.
2. Montare la leva di regolazione dell'altezza sull'attuatore utilizzando l'elemento R.
3. Posizionare il cilindro sulla base della poltrona, quindi serrarlo utilizzando gli elementi V, U e T.
4. Posizionare il telaio metallico del sedile sul fondo della poltrona, quindi fissarlo utilizzando gli elementi L, M e N.

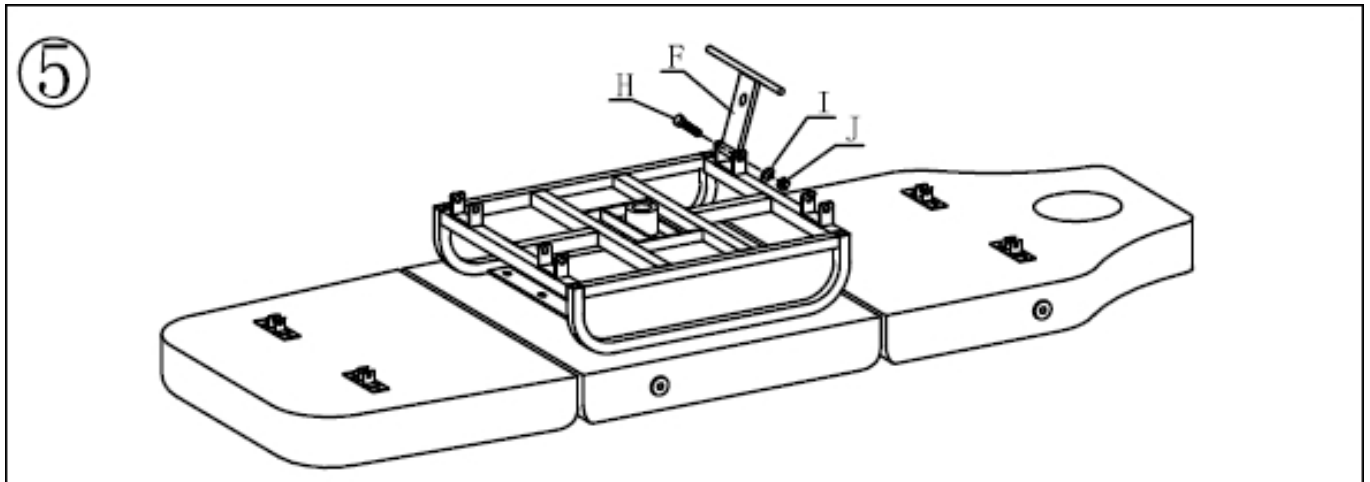


5. Montare l'elemento F serrandolo con gli elementi I, J e H.

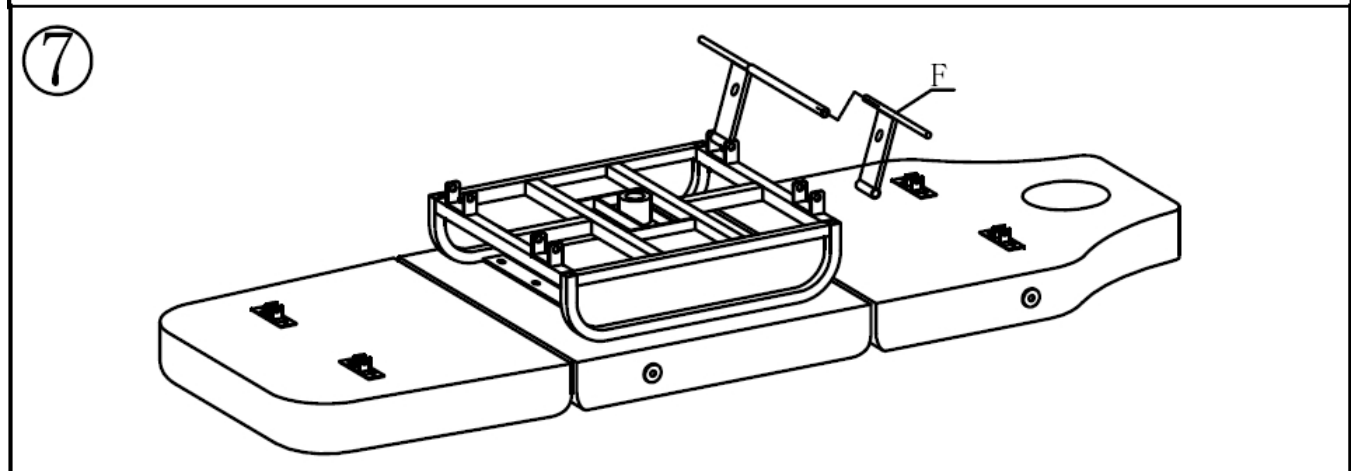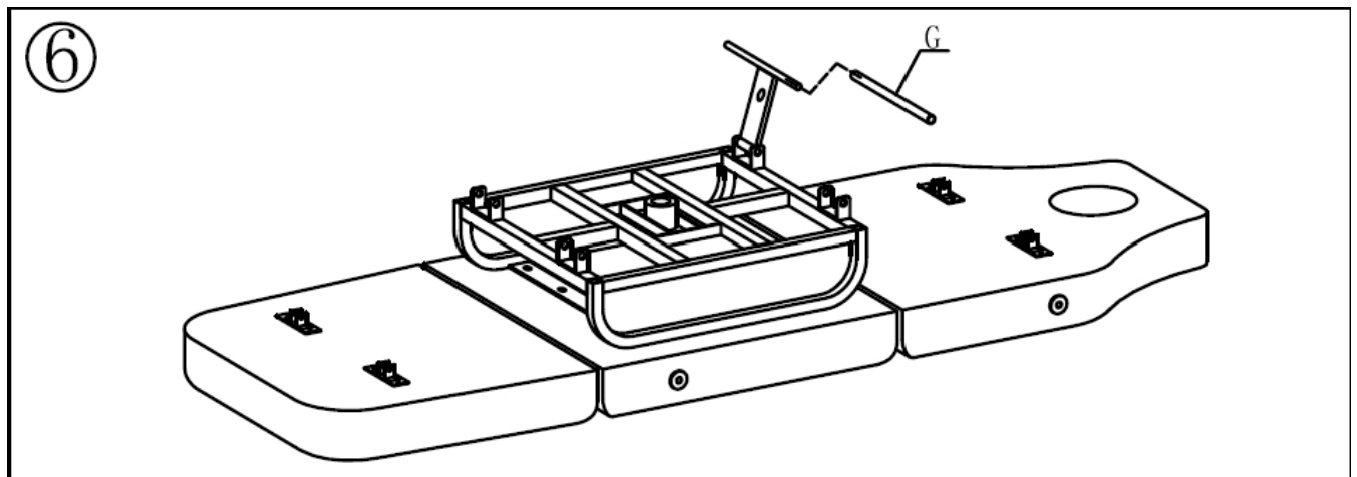


- 6,7. Utilizzare l'elemento G per collegare tra loro i due elementi F.

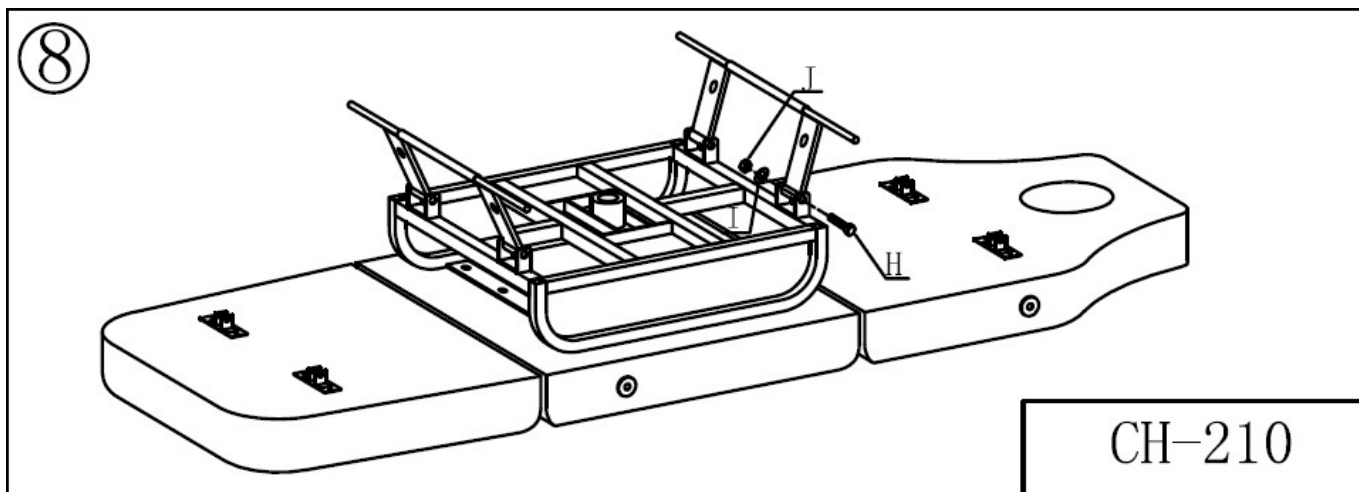

8. Serrare utilizzando gli elementi J e H, quindi ripetere l'operazione dall'altro lato.

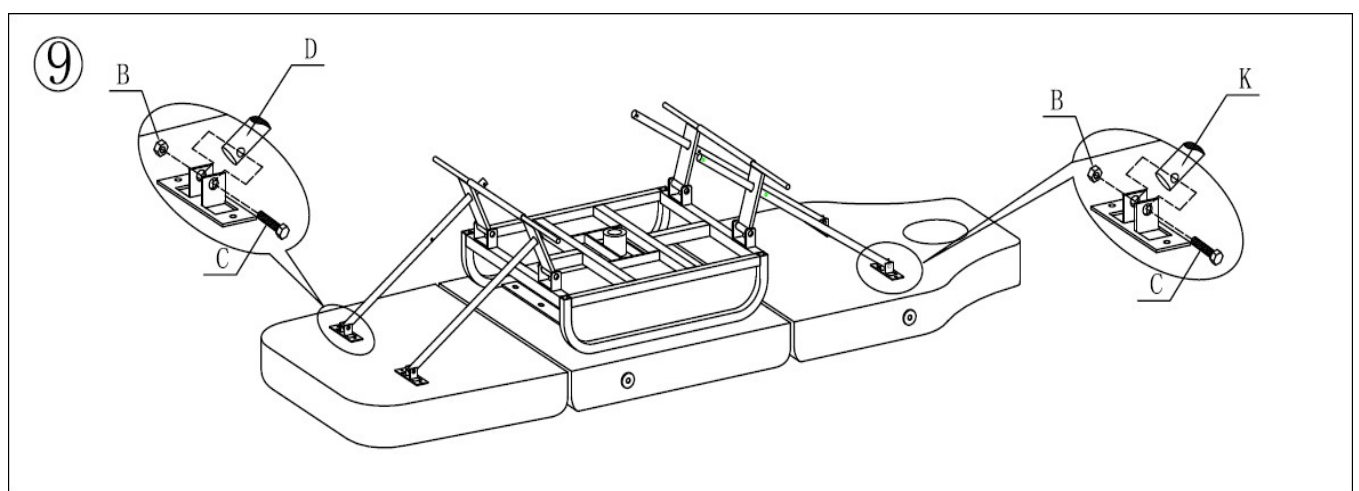


9. Inserire gli elementi D e K, quindi serrarli utilizzando B e C.

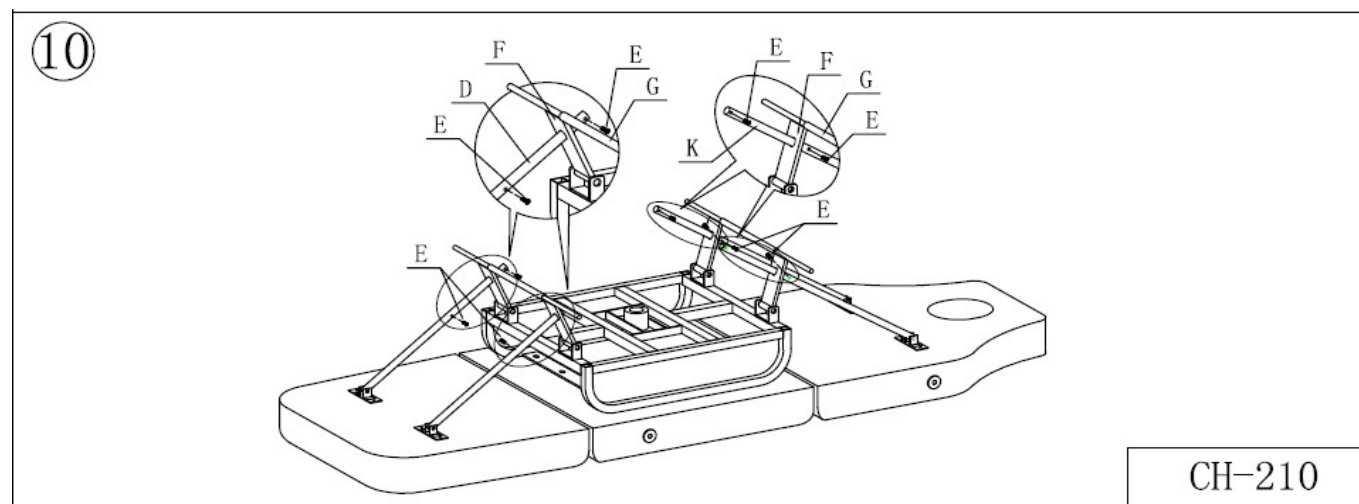


10. Fissare i supporti utilizzando gli elementi E.


11

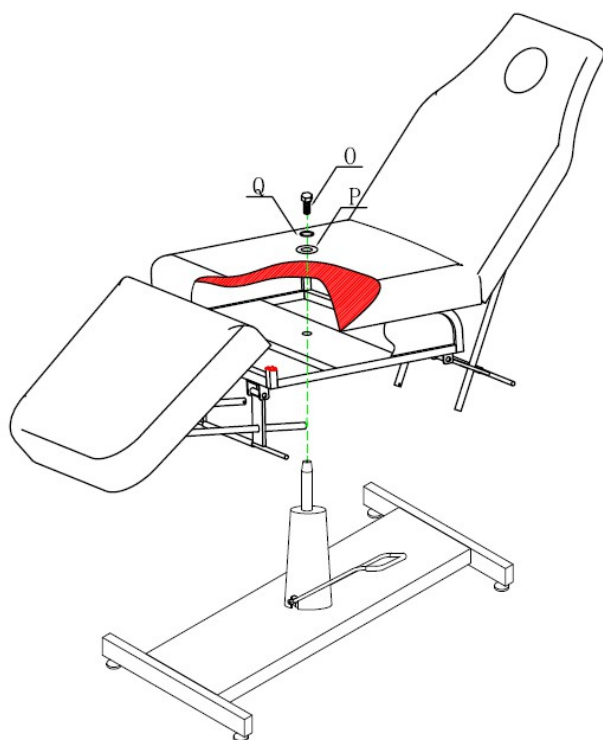

12

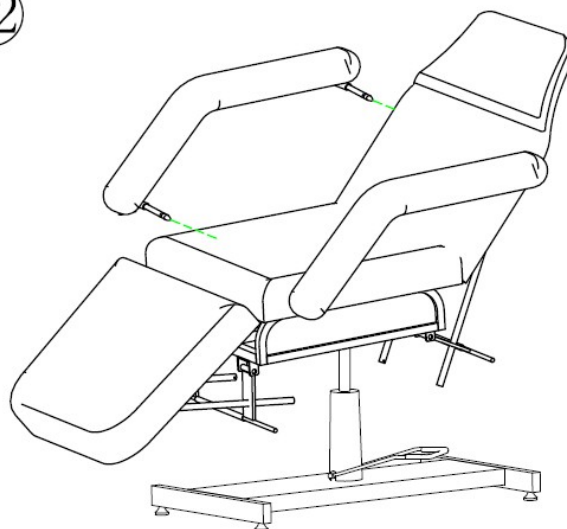

13

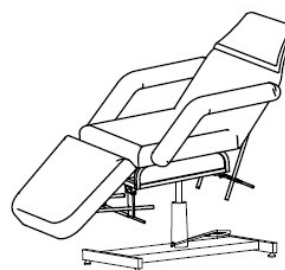

CH-210

11. Posizionare il sedile sul perno dell'attuatore, quindi serrarlo utilizzando gli elementi Q, P e O.

12. Inserire i braccioli come mostrato nell'illustrazione.

Funzioni del sedile:

- Sollevamento della poltrona: sollevare la poltrona premendo sulla leva
- Abbassamento della poltrona: spingere verso il basso fino a completa chiusura
- Blocco della rotazione della poltrona: sollevare la leva al massimo

Attenzione!

Non sedersi bruscamente né gettare pesi sulla poltrona. È vietato spostare o trasportare la poltrona quando vi sono persone o altri pesi sopra. Non salire sulla poltrona con i piedi o le ginocchia, dondolarsi, sedersi sui braccioli e non sedersi in più di una persona alla volta.

Pulizia e disinfezione dell'apparecchio:

Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica prima di iniziare la pulizia.

Per mantenere la superficie della poltrona in buone condizioni, è necessario pulirla regolarmente. Ricordarsi di pulire e disinfettare la poltrona dopo ogni utilizzo. Si consiglia di eseguire una disinfezione accurata una volta al mese.

I Superfici metalliche e plastiche

Per pulire le superfici metalliche e plastiche e i comandi, strofinarli con un panno umido. Per pulire i punti difficili da raggiungere o gli angoli, è utile utilizzare una piccola spazzola. Non utilizzare una quantità eccessiva di liquido per pulire il dispositivo. Successivamente, disinfettare il dispositivo con un liquido adeguato.

II Superfici in acciaio inossidabile

Il modo migliore per pulirle è utilizzare una soluzione detergente delicata. L'ammoniaca e la maggior parte dei solventi possono essere utilizzati per rimuovere le macchie difficili. Evitare soluzioni a base di cloro.

III Superfici metalliche verniciate o cromate

- Non utilizzare getti d'acqua (doccia, idropultrici ad alta pressione) per la pulizia.
- Non pulire in condizioni di alta temperatura e alta umidità dell'aria, non esporre il dispositivo a condizioni che potrebbero causare la contaminazione da liquidi.
- Non utilizzare solventi e acidi per la pulizia.

IV Superficie della poltrona

- Pulire uniformemente la superficie della poltrona con un detergente specifico per la pelle, quindi strofinarla con un panno morbido e pulito.

Manutenzione:

1. Pulizia quotidiana

Rimuovere la polvere con un panno morbido e asciutto.

2. Rimozione dello sporco ostinato

Come è noto, è difficile rimuovere lo sporco ostinato con un semplice panno asciutto. In questo caso, è necessario utilizzare prima un panno morbido con un detergente neutro diluito, quindi pulire con un panno asciutto.

3. È vietato l'uso di benzene, diluenti, benzina o altri solventi.

Questi prodotti possono danneggiare la pelle o causare la corrosione del prodotto.

4. Conservazione e condizioni di utilizzo

Non esporre il prodotto alla luce solare intensa o all'umidità. In caso contrario, il prodotto potrebbe danneggiarsi.

MISURE DI SICUREZZA

Il dispositivo è un apparecchio professionale destinato all'uso nei centri estetici. L'utilizzo del dispositivo esclusivamente da parte di personale estetico qualificato consente di evitare effetti indesiderati durante il trattamento.

Non smontare il dispositivo né tentare di utilizzarlo per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale d'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da personale autorizzato (azienda ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

Non installare né utilizzare il dispositivo in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo che nessun liquido possa penetrare all'interno del dispositivo.

Scollegare immediatamente la spina dalla presa di corrente e contattare il servizio di assistenza autorizzato fornito dalla società ACTIVESHOP Sp. z o.o. nei seguenti casi:

a) del liquido è penetrato nell'apparecchio, b) l'apparecchio emana uno strano odore, fumo o rumori strani,
c) il cavo di alimentazione è danneggiato, d) l'apparecchio è stato rovesciato o il suo involucro è danneggiato.

Non appoggiare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in luoghi dove qualcuno potrebbe calpestare il cavo di alimentazione.

Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente ogni volta che si termina di utilizzare l'apparecchio.

Non inserire alcun oggetto nell'apertura del dispositivo. Se un oggetto estraneo penetra nell'apertura, scollegare il cavo dalla presa di corrente e contattare il distributore o il produttore.

Non collocare il dispositivo su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. In caso di caduta, il dispositivo potrebbe danneggiarsi.

Per garantire la durata prevista del dispositivo, si consiglia di attendere un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).

L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di un funzionamento errato dell'apparecchio, di danni o addirittura di incendio.

ATTENZIONE:

In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione o di altri guasti, contattare un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.

Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche o mentali e da persone con scarsa esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, purché siano sorvegliate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchiatura, in modo che i rischi connessi siano comprensibili.

Il dispositivo non è destinato al gioco dei bambini. Non consentire ai bambini di giocare con il dispositivo.

Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone che non hanno una conoscenza sufficiente del suo utilizzo si trovano nelle vicinanze.

Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o causare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Gli apparecchi elettrici, le attrezzature e gli imballaggi usati devono essere consegnati a centri di riciclaggio delle materie prime in conformità con le norme di tutela dell'ambiente. Gli apparecchi elettrici non devono essere gettati nei contenitori dei rifiuti domestici. È necessario attenersi alle norme relative allo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di proteggere l'ambiente in conformità con la direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le apparecchiature elettriche usate

devono essere raccolti separatamente e poi consegnati ai punti di raccolta.

raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Alla fine del loro ciclo di vita, anche i vecchi dispositivi contengono componenti di valore che possono essere riciclati, pertanto devono essere consegnati per essere riciclati. È quindi necessario consegnarli agli appositi punti di raccolta, ma è anche possibile consegnarli alla società ACTIVESHOP Sp. z o.o.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO

Il dispositivo deve essere trasportato a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C esclusivamente nella confezione originale. Conservare il dispositivo in un luogo ben ventilato con umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio da (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante lo stoccaggio e il trasporto, non gettare o far cadere il dispositivo, né esporlo a urti meccanici o agenti atmosferici.

