

ACTIVESHOP[®]

MODE D'EMPLOI

Fauteuil cosmétique hydraulique Sillon 210



Importateur :

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Pologne

www.activeshop.com.pl Rev.

A/05/2025





Scan for
different
languages




Dimensions :





Montage :

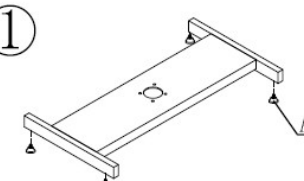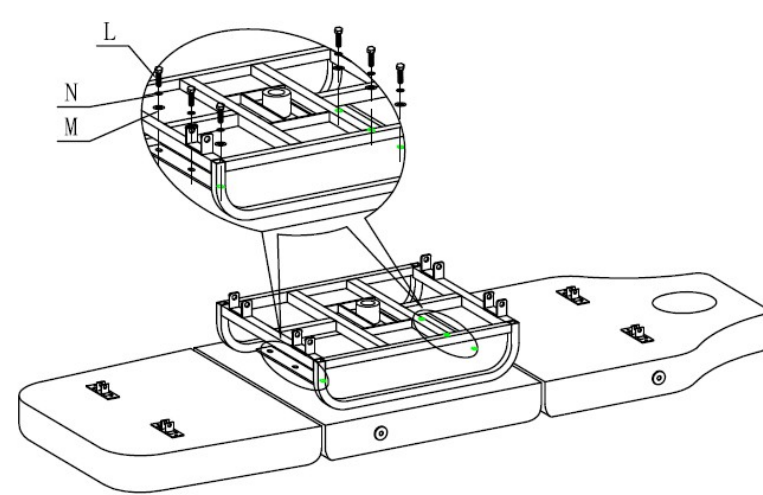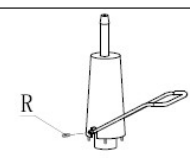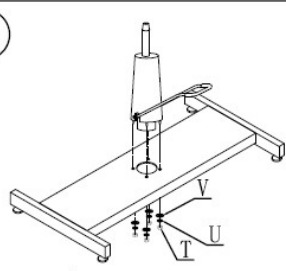A  4pcs	B  M6 4pcs	C  M6X35 4pcs	D  2pcs	E  M5X8 8pcs	F  4pcs	G  2pcs	H  M12X80 4pcs
I  φ12 4pcs	J  M12 4pcs	K  2pcs	L  M8X25 6pcs	M  φ8 6pcs	N  φ8 6pcs	O  M10X25 1pcs	P  φ10 1pcs
Q  φ10 1pcs	R  2pcs	S  1pcs	T  M6 4pcs	U  M6 4pcs	V  M6 4pcs	① 	
④ 						② 	
						③ 	
CH-210							


1. Insérez les rondelles dans la base du siège.
2. Installez le levier de réglage de la hauteur sur le vérin à l'aide de l'élément R.
3. Placez le vérin sur la base du fauteuil, puis serrez-le à l'aide des éléments V, U et T.
4. Placez le cadre métallique de l'assise sous le fauteuil, puis fixez-le à l'aide des éléments L, M et N.

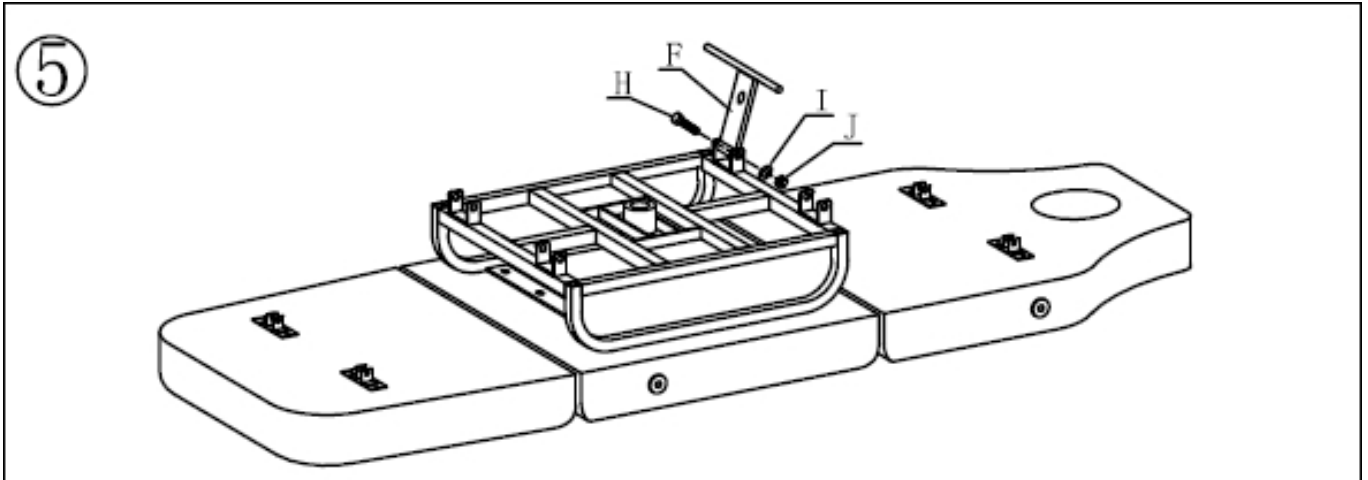


5. Installez l'élément F en le serrant à l'aide des éléments I, J et H.

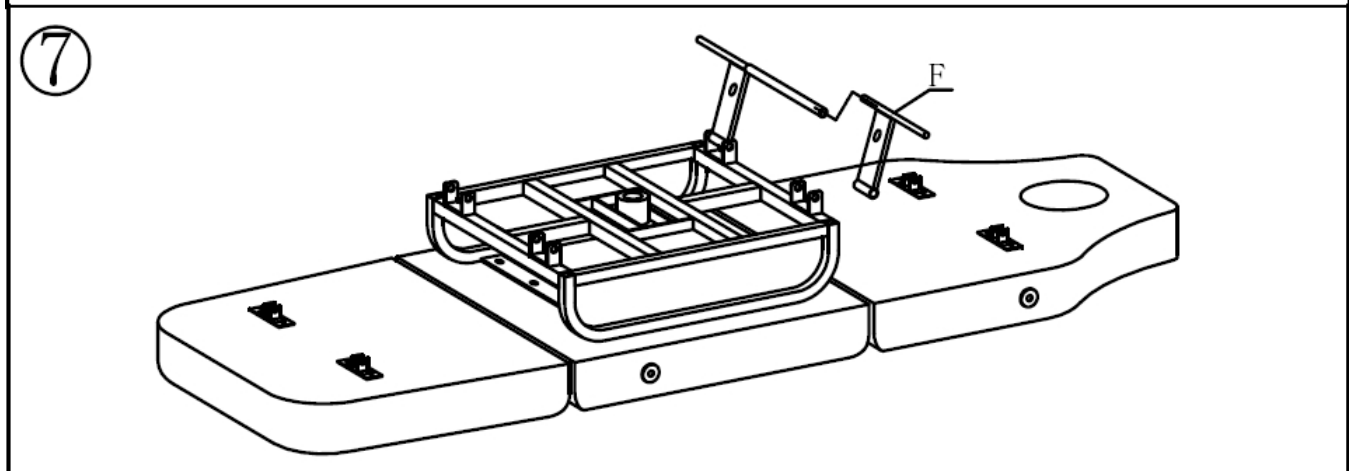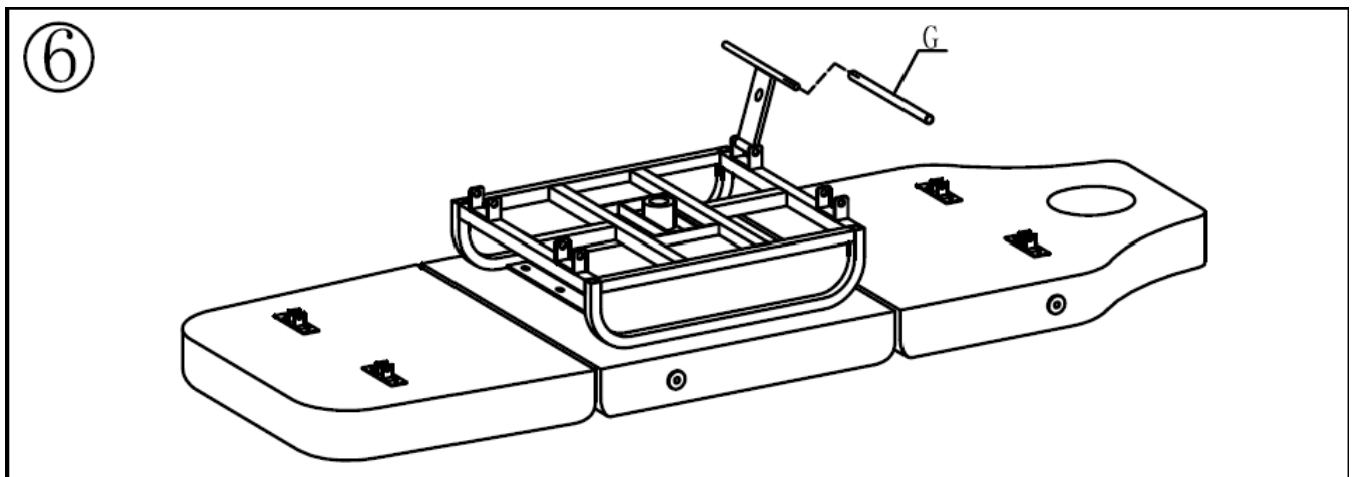


- 6,7. Utilisez l'élément G pour relier les deux éléments F entre eux.

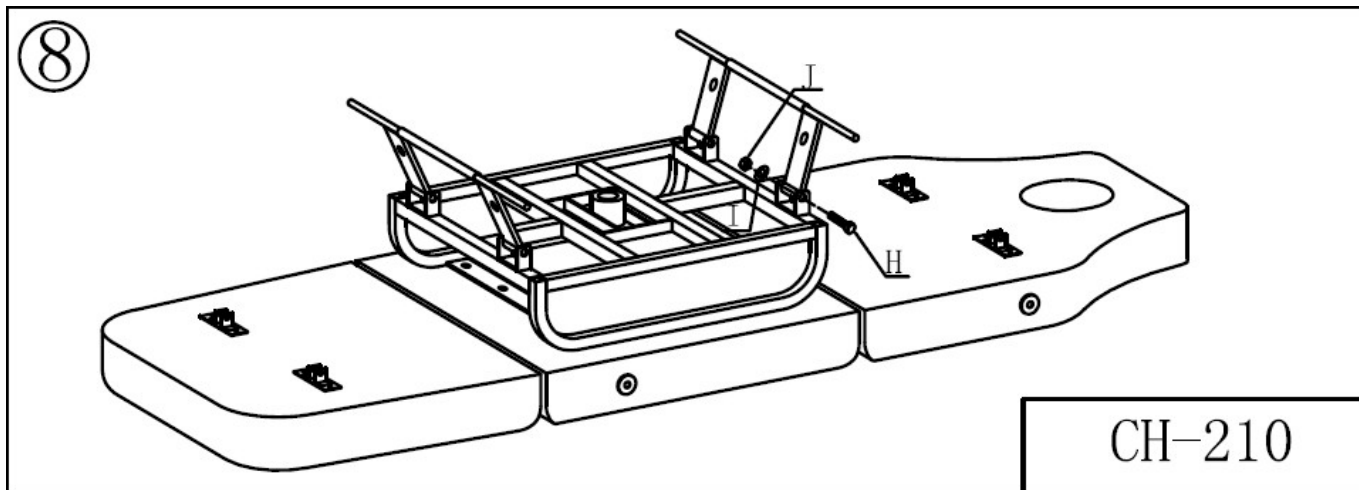


8. Serrez à l'aide des éléments J et H, puis répétez l'opération de l'autre côté.

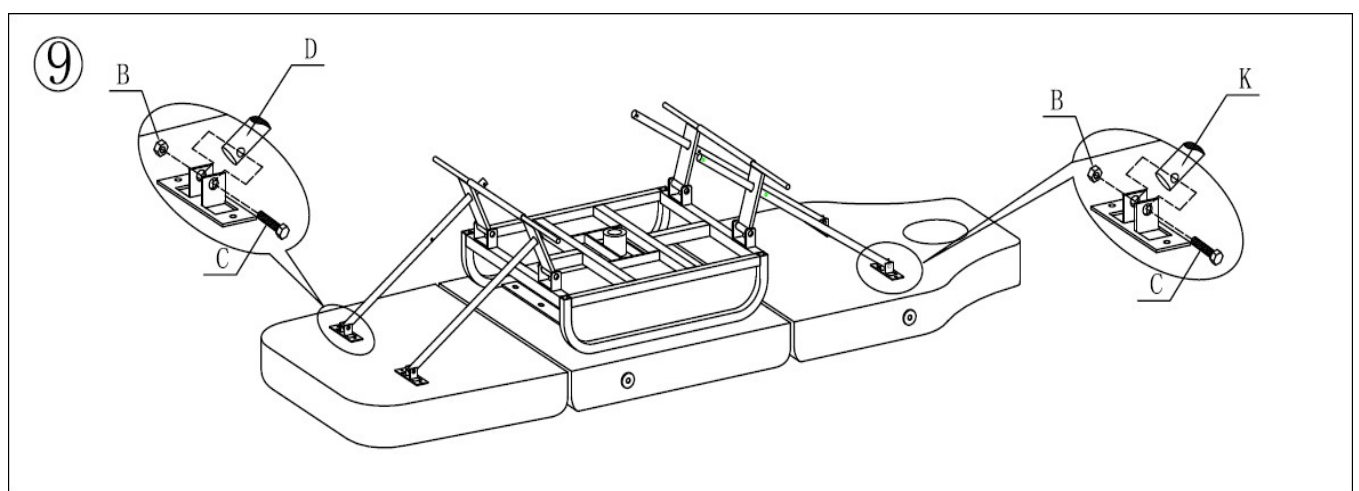

9. Insérez les éléments D et K, puis vissez-les à l'aide des éléments B et C.

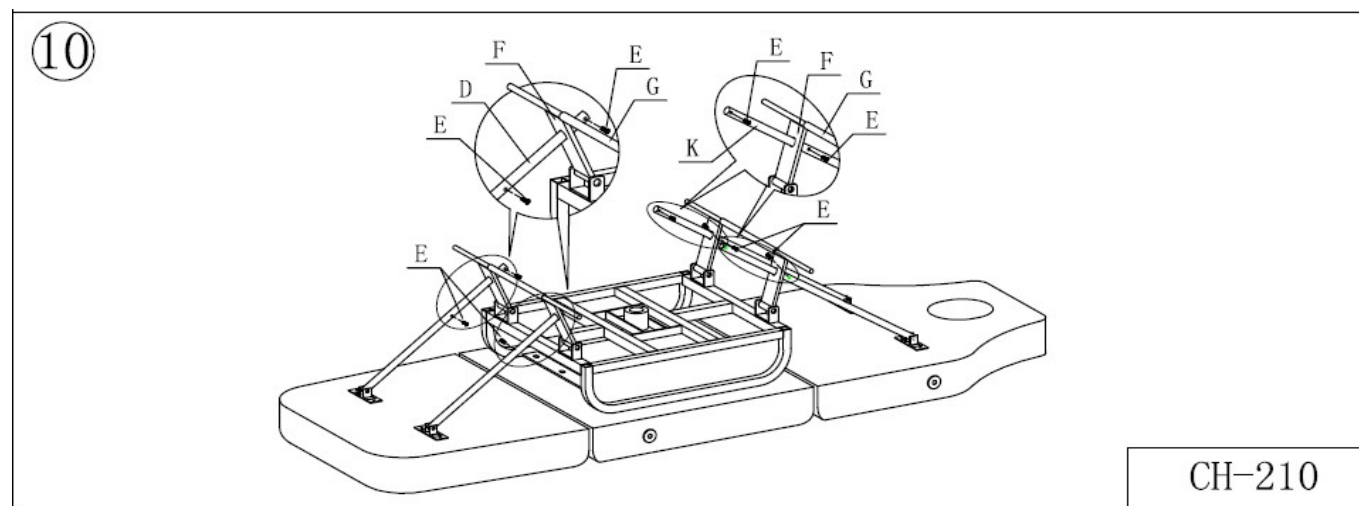

10. Fixez les supports à l'aide des éléments E.

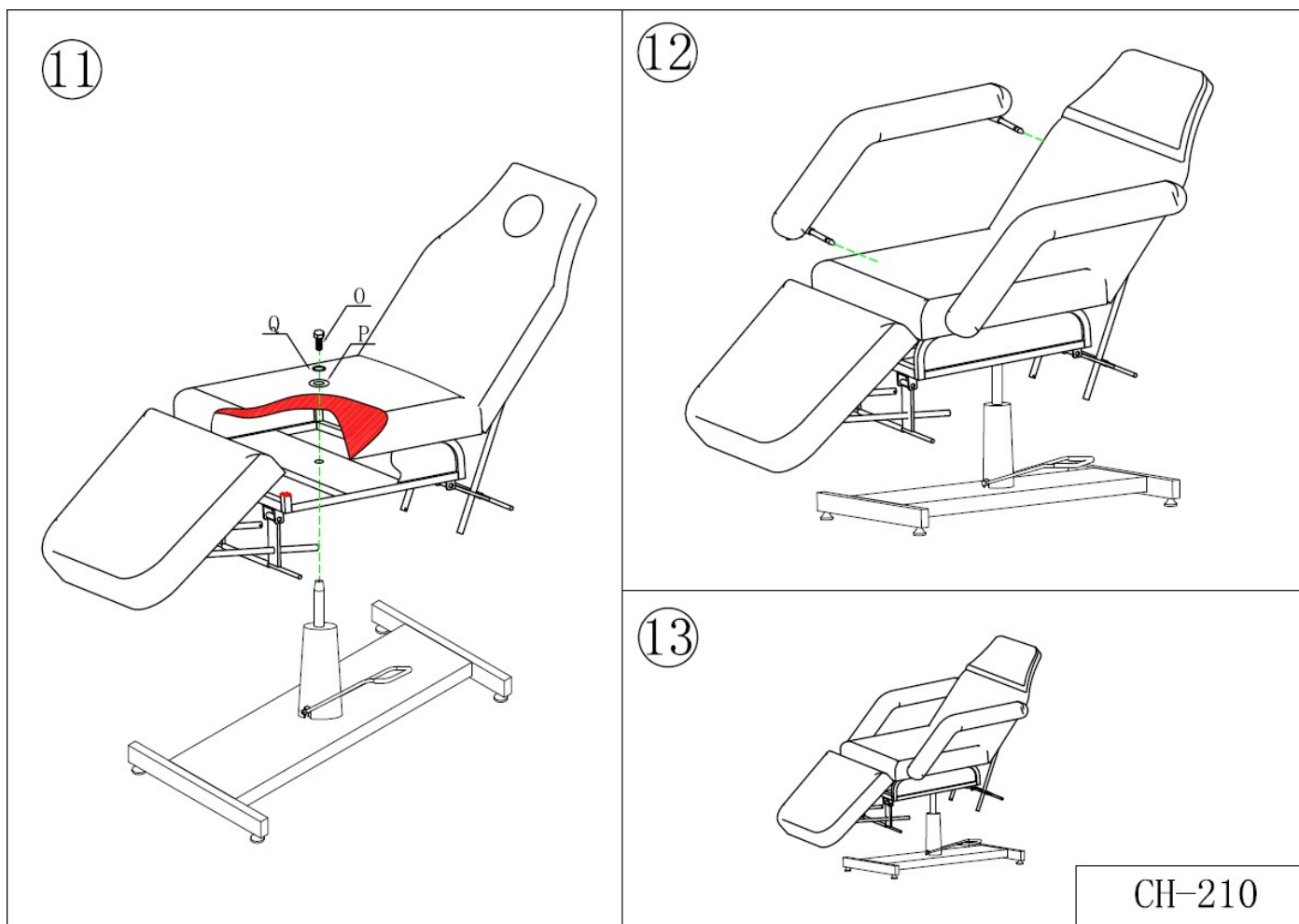

11. Placez le siège sur la tige du vérin, puis serrez-le à l'aide des éléments Q, P et O.

12. Insérez les accoudoirs comme indiqué sur l'illustration.

Fonctions du siège :

- Relevage du siège : relevez le siège en appuyant sur le levier
- Abaissement du siège : appuyez vers le bas jusqu'à ce qu'il soit complètement abaissé
- Blocage de la rotation du siège : relevez le levier au maximum

Attention !

Ne vous asseyez pas brusquement et ne jetez pas de poids sur le fauteuil. Il est interdit de déplacer ou de transporter le fauteuil lorsqu'il y a des personnes ou d'autres poids dessus. Ne vous mettez pas debout ou à genoux sur le fauteuil, ne vous balancez pas, ne vous asseyez pas sur les accoudoirs et ne vous asseyez pas à plus d'une personne.

Nettoyage et désinfection de l'appareil :

Débranchez l'appareil avant de commencer le nettoyage.

Pour maintenir la surface du fauteuil en bon état, il convient de la nettoyer régulièrement. N'oubliez pas de nettoyer et de désinfecter le fauteuil après chaque utilisation. Il est recommandé d'effectuer une désinfection approfondie une fois par mois.

I Surfaces métalliques et plastiques

Pour nettoyer les surfaces métalliques et plastiques ainsi que les commandes, essuyez-les avec un chiffon humide. Une petite brosse est idéale pour nettoyer les endroits ou les coins difficiles d'accès. N'utilisez pas trop de liquide pour nettoyer l'appareil. Désinfectez ensuite l'appareil avec un liquide approprié.

II Surfaces en acier inoxydable

Il est préférable de les nettoyer avec une solution détergente douce. L'ammoniaque et la plupart des solvants peuvent être utilisés pour éliminer les taches tenaces. Évitez les solutions à base de chlore.

III Surfaces métalliques peintes ou chromées

- N'utilisez pas de jets d'eau (douche, canons à eau à haute pression) pour le nettoyage.
- Ne nettoyez pas à haute température et dans des conditions d'humidité élevée, n'exposez pas l'appareil à des conditions pouvant entraîner une contamination par des liquides.
- N'utilisez pas de solvants ni d'acides pour le nettoyage.

IV Surface du siège

- Essuyez uniformément la surface du fauteuil avec un produit spécial pour le nettoyage du cuir, puis essuyez-la avec un chiffon propre et doux.

Entretien :

- 1. Nettoyage quotidien**
Dépoussiérez à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- 2. Élimination des salissures tenaces**
Comme on le sait, il est difficile d'éliminer les salissures tenaces à l'aide d'un simple chiffon sec. Dans ce cas, il convient d'abord d'utiliser un chiffon doux imbibé d'un détergent neutre dilué, puis d'essuyer avec un chiffon sec.
- 3. Il est interdit d'utiliser du benzène, des diluants, de l'essence ou d'autres solvants.**
Ces produits peuvent endommager le cuir ou corroder le produit.
- 4. Stockage et conditions d'utilisation**
N'exposez pas le produit à une lumière solaire intense ou à l'humidité. Cela pourrait endommager le produit.

MESURES DE SÉCURITÉ

L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les salons de beauté. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel cosmétique qualifié permet d'éviter les effets indésirables pendant le traitement.

Il est interdit de démonter l'appareil ou de tenter de l'utiliser à des fins autres que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués exclusivement par un employé du service après-vente agréé (société ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

Il est interdit d'installer ou d'utiliser l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec les mains mouillées, afin qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.

Débranchez immédiatement la fiche de la prise et contactez le service après-vente agréé par la société ACTIVESHOP Sp. z o.o. dans les cas suivants :

a) du liquide s'est infiltré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, de la fumée ou émet des bruits étranges, c) le cordon d'alimentation est endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier est endommagé.

Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.

Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise après chaque utilisation de l'appareil.

Ne rien insérer dans l'ouverture de l'appareil. Si un corps étranger pénètre dans l'ouverture, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le distributeur ou le fabricant.

Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. En cas de chute, l'appareil pourrait être endommagé.

Afin de garantir la durée de vie prévue de l'appareil, il est recommandé d'attendre une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt, et vice versa).

L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications indiquées sur la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement, d'être endommagé, voire de brûler.

ATTENTION :

En cas d'endommagement du cordon d'alimentation ou d'autres pannes, contactez un service après-vente agréé afin d'éviter tout danger.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques ou mentales réduites, ainsi que par des personnes inexpérimentées et ne connaissant pas l'appareil, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, afin qu'elles comprennent les dangers associés à son utilisation.

L'appareil n'est pas destiné à être utilisé comme un jouet par les enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes ne disposant pas des connaissances suffisantes pour l'utiliser se trouvent à proximité.

Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut présenter un risque pour la santé ou entraîner la mort. C'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et conservé hors de portée des enfants.

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL



Les appareils électriques, les instruments et les emballages usagés doivent être remis à des centres de recyclage des matières premières, conformément aux règles de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les poubelles ménagères. Il convient de respecter les règles relatives à l'élimination de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement, conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les

doivent être collectés séparément, puis transférés vers des points de collecte

collecte des équipements électroniques et électriques usagés. À la fin de leur durée de vie, les anciens appareils contiennent des éléments recyclables de grande valeur, c'est pourquoi ils doivent être remis pour être recyclés. Ils doivent donc être remis à des points de collecte appropriés, mais ils peuvent également être remis à la société ACTIVESHOP Sp. z o.o.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-) 20 °C et (+) 50 °C, exclusivement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé et à une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température d'utilisation comprise entre (+) 10 °C et (+) 40 °C. Pendant le stockage et le transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou laissé tomber, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des intempéries.

