

ACTIVESHOP[®]

GEBRUIKSAANWIJZING

Hydraulische schoonheidsstoel Sillon 210



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polen

www.activeshop.com.pl

Rev. A/05/2025





Scan voor
andere
talen



Afmetingen:




Montage:

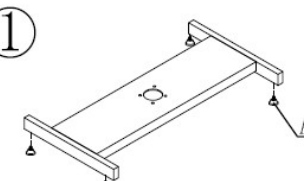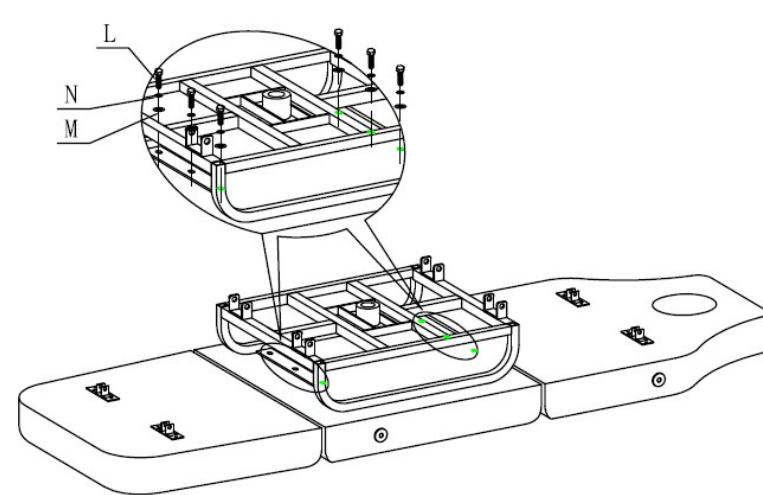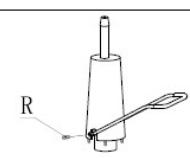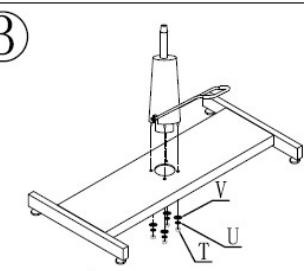A  4pcs	B  M6 4pcs	C  M6X35 4pcs	D  2pcs	E  M5X8 8pcs	F  4pcs	G  2pcs	H  M12X80 4pcs
I  φ12 4pcs	J  M12 4pcs	K  2pcs	L  M8X25 6pcs	M  φ8 6pcs	N  φ8 6pcs	O  M10X25 1pcs	P  φ10 1pcs
Q  φ10 1pcs	R  2pcs	S  1pcs	T  M6 4pcs	U  M6 4pcs	V  M6 4pcs	① 	
④ 						② 	
						③ 	



CH-210

CH-210


1. Schuif de afstandhouders in de voet van de stoel.
2. Monteer de hoogteverstelhendel op de cilinder met behulp van onderdeel R.
3. Plaats de cilinder op de basis van de stoel en zet hem vast met behulp van de onderdelen V, U en T.
4. Plaats het metalen frame van de zitting op de onderkant van de stoel en bevestig het met behulp van de onderdelen L, M en N.

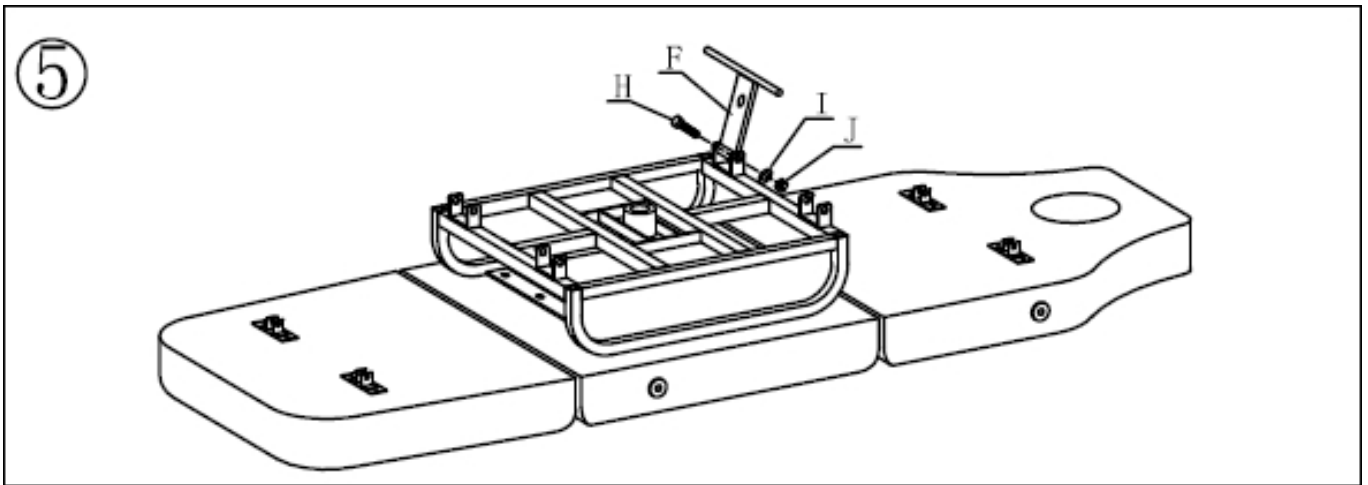


5. Monteer onderdeel F door het vast te zetten met onderdelen I, J en H.

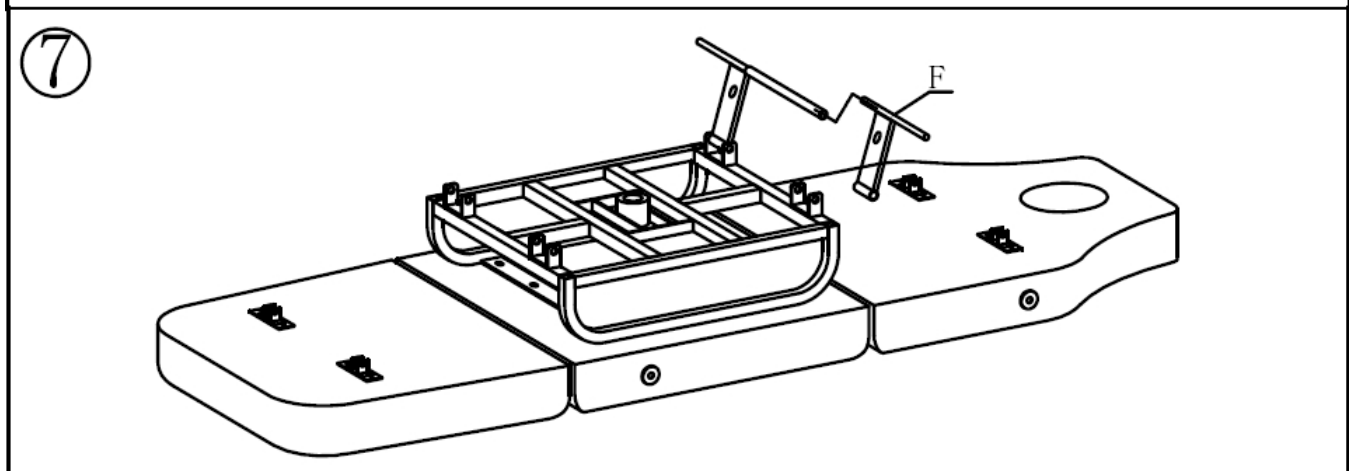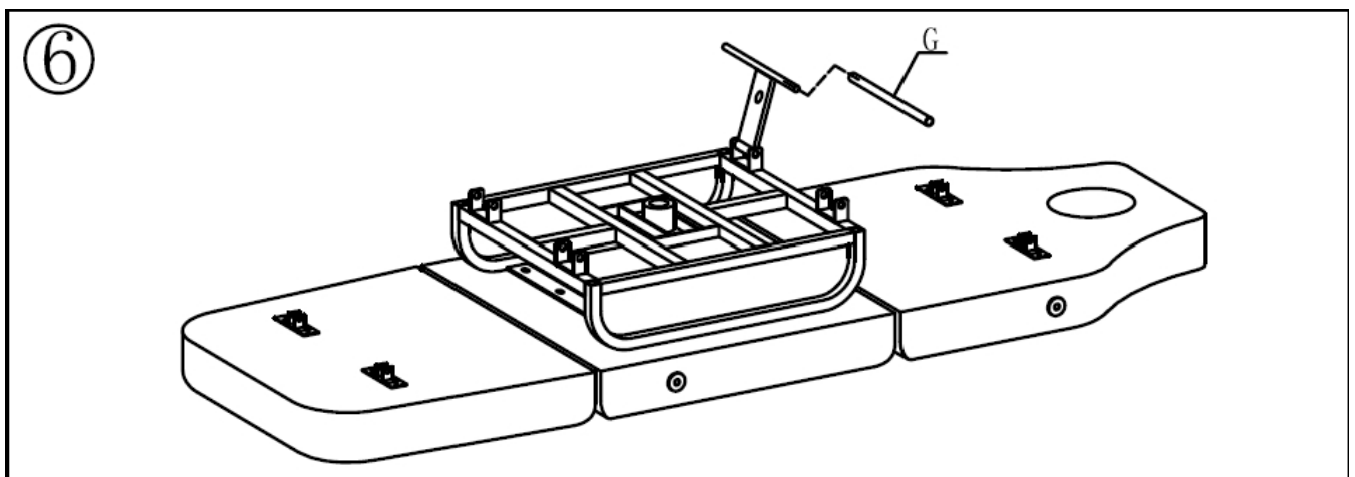


- 6,7. Gebruik element G om twee elementen F met elkaar te verbinden.

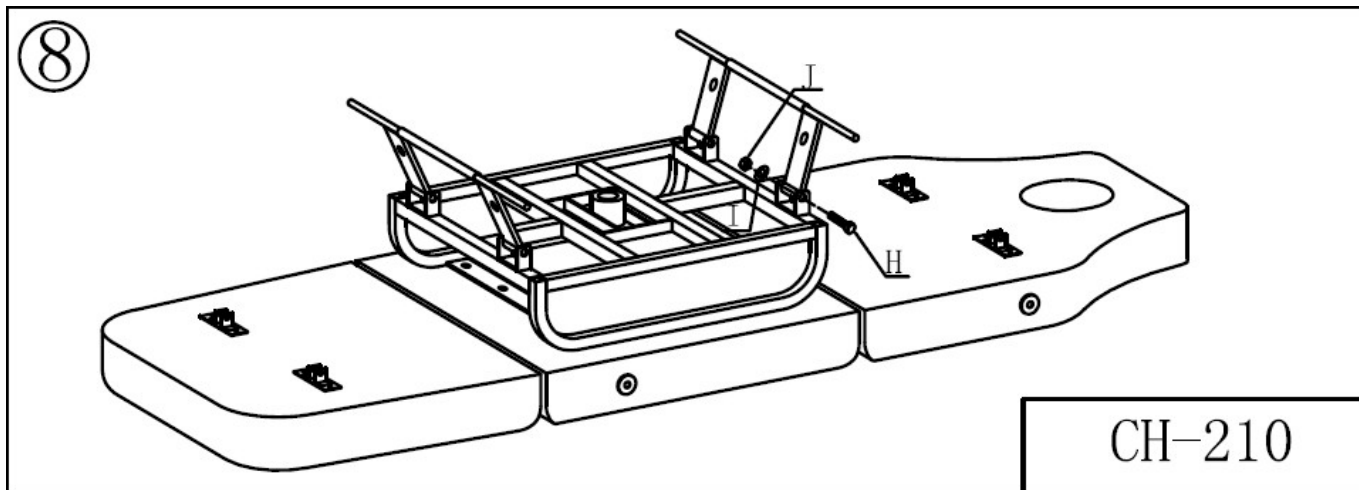


8. Draai vast met behulp van de onderdelen J en H en herhaal dit aan de andere kant.

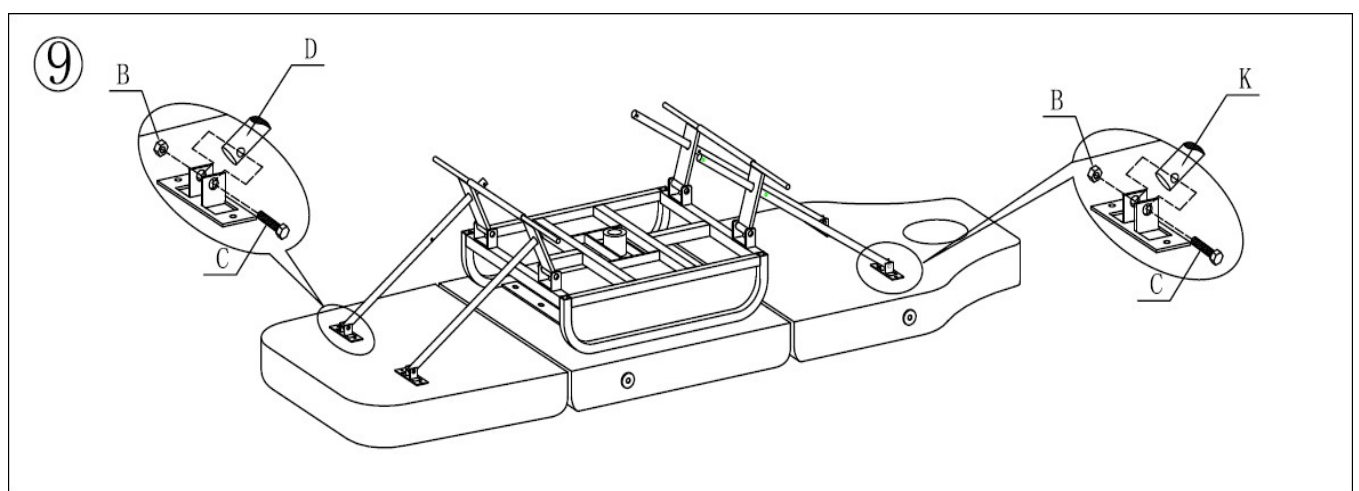

9. Schuif de onderdelen D en K erin en schroef ze vast met B en C.

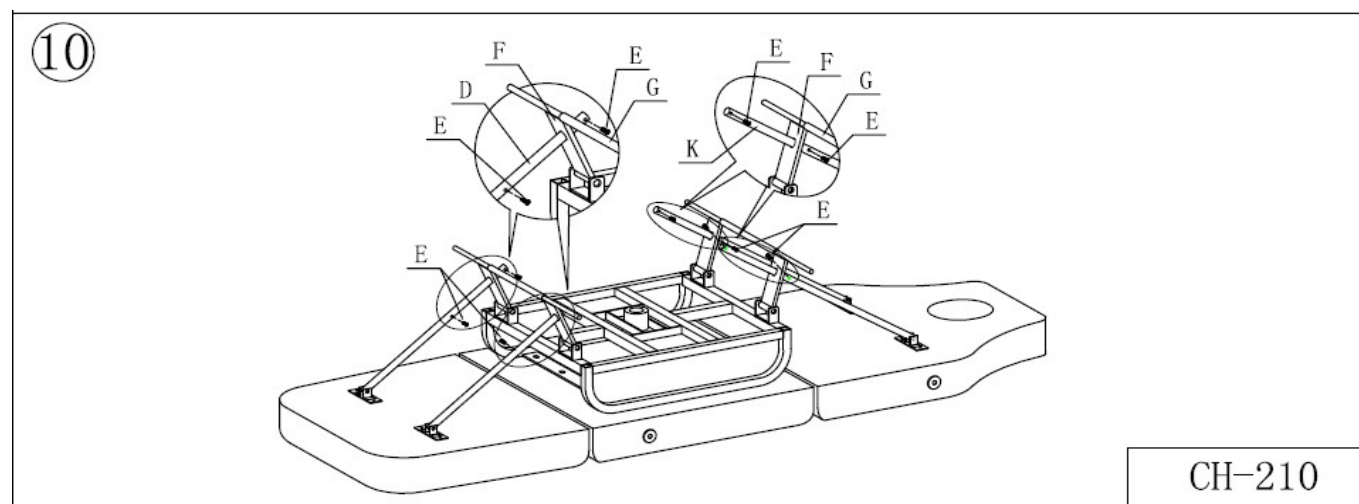

10. Zet de steunen vast met behulp van elementen E.

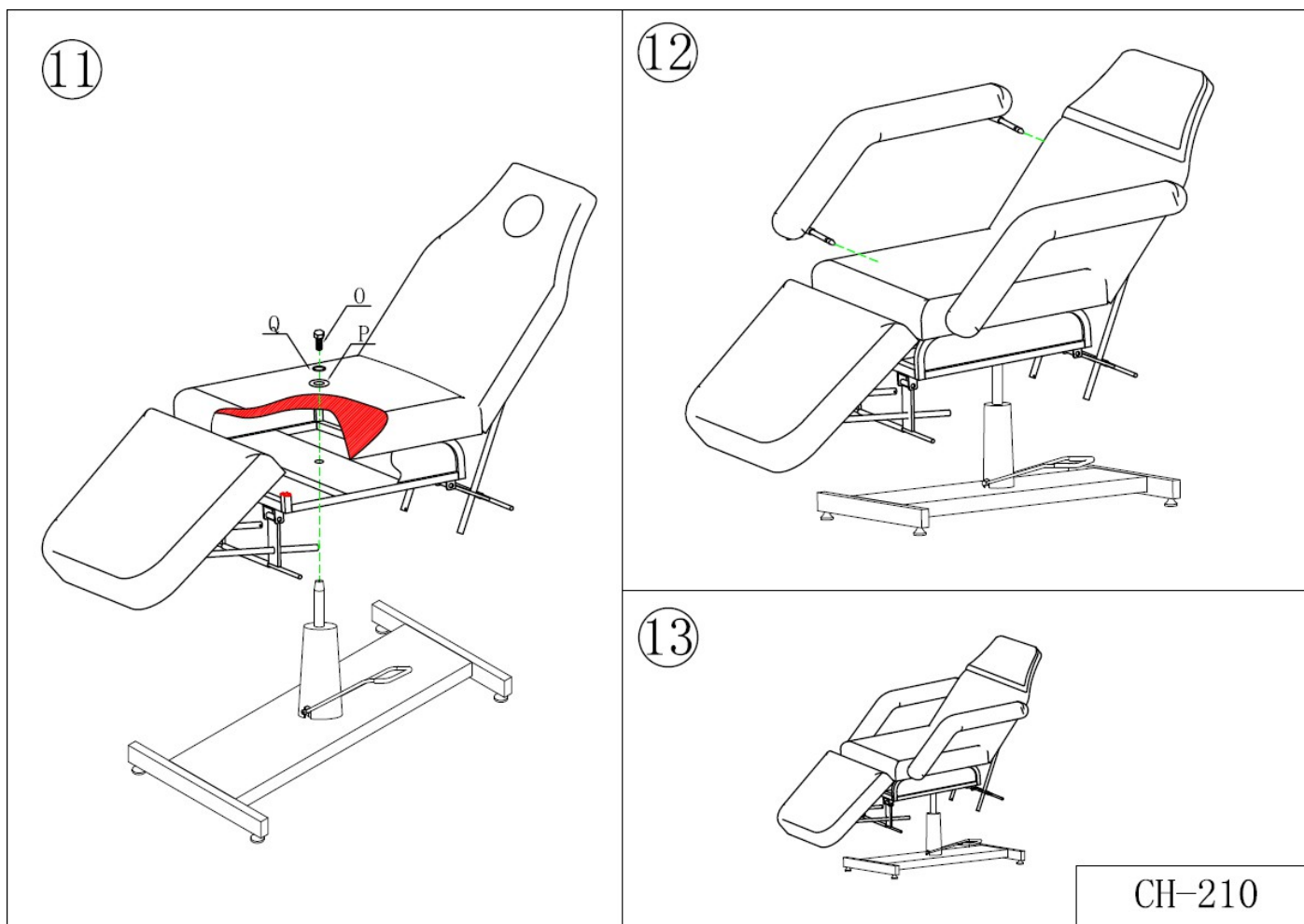

11. Plaats de stoel op de as van de cilinder en zet hem vast met onderdelen Q, P en O.

12. Schuif de armleuningen in zoals weergegeven in de afbeelding.

Functies van de stoel:

- De stoel omhoog zetten: druk op de hendel om de stoel omhoog te zetten
- De stoel laten zakken: druk de hendel naar beneden totdat de stoel volledig is gezakt
- Draaiblokkering van de stoel: til de hendel zo ver mogelijk omhoog

Let op!

Ga niet plotseling zitten en gooi geen zware voorwerpen op de stoel. Het is verboden om de stoel te verplaatsen of te verplaatsen terwijl er personen of andere zware voorwerpen op zitten. Ga niet met uw voeten of knieën op de stoel staan, schommel niet, ga niet op de armleuningen zitten en laat niet meer dan één persoon op de stoel zitten.

Reiniging en desinfectie van het apparaat:

Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet voordat u met het reinigen begint.

Om het oppervlak van de stoel in goede staat te houden, moet u deze regelmatig reinigen. Vergeet niet om de stoel na elk gebruik te reinigen en te desinfecteren. Het wordt aanbevolen om één keer per maand een grondige desinfectie uit te voeren.

I Metalen en plastic oppervlakken

Om metalen en plastic oppervlakken en bedieningselementen te reinigen, veegt u ze af met een vochtige doek. Voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen of hoeken kunt u het beste een kleine borstel gebruiken. Gebruik niet te veel reinigingsvloeistof voor het apparaat. Desinfecteer het apparaat vervolgens met een geschikte vloeistof.

II Roestvrijstalen oppervlakken

Het beste kunt u een milde detergentoplossing gebruiken. Ammoniak en de meeste oplosmiddelen kunnen worden gebruikt om hardnekkige vlekken te verwijderen. Vermijd oplossingen op basis van chloor.

III Geverfde of verchroomde metalen oppervlakken

- Gebruik geen waterstralen (douche, hogedrukreinigers) om het apparaat schoon te maken.
- Reinig niet bij hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid, stel het apparaat niet bloot aan omstandigheden die kunnen leiden tot vervuiling door vloeistoffen.
- Gebruik geen oplosmiddelen of zuren voor het reinigen.

IV Oppervlak van de stoel

- Veeg het oppervlak van de stoel gelijkmatig af met een speciaal reinigingsmiddel voor leer en wrijf het vervolgens af met een schone, zachte doek.

Onderhoud:

1. **Dagelijkse reiniging**
Verwijder stof met een zachte, droge doek.
2. **Hardnekkig vuil verwijderen**
Zoals bekend is het moeilijk om hardnekkig vuil te verwijderen met een gewone droge doek. In dat geval moet u eerst een zachte doek met verdund neutraal reinigingsmiddel gebruiken en vervolgens met een droge doek afvegen.
3. **Het is verboden om benzeen, verdunningsmiddelen, benzine of andere oplosmiddelen te gebruiken.**
Deze middelen kunnen het leer beschadigen of corrosie van het product veroorzaken.
4. **Opslag en gebruiksomstandigheden**
Stel het product niet bloot aan fel zonlicht of vocht. Dit kan het product beschadigen.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Het apparaat mag uitsluitend door gekwalificeerd schoonheidspersoneel worden bediend om ongewenste effecten tijdens de behandeling te voorkomen.

Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een medewerker van een erkende servicepartner (ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

Het apparaat mag niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen worden geïnstalleerd of bediend, zodat er geen vloeistoffen in het apparaat kunnen komen.

Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de erkende serviceafdeling van ACTIVESHOP Sp. z o.o. in de volgende gevallen:

a) er vloeistof in het apparaat is terechtgekomen, b) het apparaat een vreemde geur verspreidt, rook afgeeft of vreemde geluiden maakt,

c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgevallen of de behuizing is beschadigd.

Leg geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op plaatsen waar iemand op het netsnoer kan trappen.

Om veiligheidsredenen moet u de stekker uit het stopcontact halen nadat u het apparaat hebt gebruikt.

Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening terechtkomt, haal dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of fabrikant.

Plaats het apparaat niet op een onstabiele kar, plank of voertuig. Bij een val kan het apparaat beschadigd raken.

Om de vastgestelde levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen om een minuut te wachten voordat u de aan/uit-knop opnieuw indrukt (tussen het in- en uitschakelen en omgekeerd).

De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet correct functioneert, beschadigd raakt of zelfs in brand vliegt.

OPMERKING:

Neem bij beschadiging van het netsnoer of andere storingen contact op met een erkende serviceafdeling om gevaar te voorkomen.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van minimaal 8 jaar en door personen met verminderde fysieke of mentale capaciteiten en personen zonder ervaring en kennis van het apparaat, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat, zodat de risico's begrijpelijk zijn.

Het apparaat is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer kinderen of personen die onvoldoende kennis hebben van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.

Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Onjuist gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan een risico voor de gezondheid vormen of tot de dood leiden. Gebruik en bewaar het apparaat daarom buiten het bereik van kinderen.

AFVOER VAN HET APPARAAT



Afgedankte elektrische apparaten, instrumenten en verpakkingen moeten worden ingeleverd bij recyclingcentra voor grondstoffen, in overeenstemming met de regels voor milieubescherming. Elektrische apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Ter bescherming van het milieu, overeenkomstig Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moeten afgedankte

elektrische apparaten apart worden ingezameld en vervolgens worden afgevoerd naar inzamelpunten

inzameling van gebruikte elektronische en elektrische apparatuur. Aan het einde van hun levensduur bevatten oude apparaten nog waardevolle onderdelen die geschikt zijn voor recycling, daarom moeten ze worden ingeleverd voor hergebruik. Ze moeten daarom worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten, maar ze kunnen ook worden ingeleverd bij ACTIVESHOP Sp. z o.o.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (–) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 75%. De bedrijfstemperatuur ligt tussen (+) 10 °C en (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of laten vallen, blootgesteld aan mechanische schokken of weersinvloeden.

