

ACTIVESHOP®

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Fotoliu cosmetic hid. Basic 210



Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2024

Înainte de a utiliza fotoliul cosmetic, citiți conținutul instrucțiunilor anexate și efectuați următorii pași:

1. Asigurați-vă că toate elementele de ambalare au fost îndepărtate.
2. Asigurați-vă că scaunul este în stare de funcționare.
3. Așezați scaunul în zona în care va fi utilizat.

Atenție.

Copiii și persoanele neautorizate nu trebuie să utilizeze acest dispozitiv. Copiii trebuie supravegheați și nu trebuie să se joace în apropierea scaunului cosmetic.

Dimensiunile aparatului:



Lungime când este complet extins: 184cm, Înălțime


min. 65cm,

Înălțime max. 79 cm

Sarcina maximă a scaunului: 150kg.


- Fotoliul este reglabil manual cu ajutorul pârghiilor de dedesubt. În acest fel, unghiul suportului pentru picioare și al spătarului poate fi reglat.
- Înălțimea fotoliului este reglabilă cu ajutorul mânerului de reglare a scaunului.
- În plus, cotierele sunt detașabile pentru a facilita accesul la zonele de tratament.
- Perna situată pe tetieră este, de asemenea, detașabilă, facilitând efectuarea tratamentelor atunci când persoana este întinsă pe burtă.
- Scaunul poate fi desfășurat într-o poziție înclinată.
- Scaunul poate fi rotit la 360°.

Pentru a regla poziția spătarului/dirijabilului pentru picioare, trageți maneta de sub scaun și apoi înclinați spătarul/dirijabilul pentru picioare în poziția corectă.

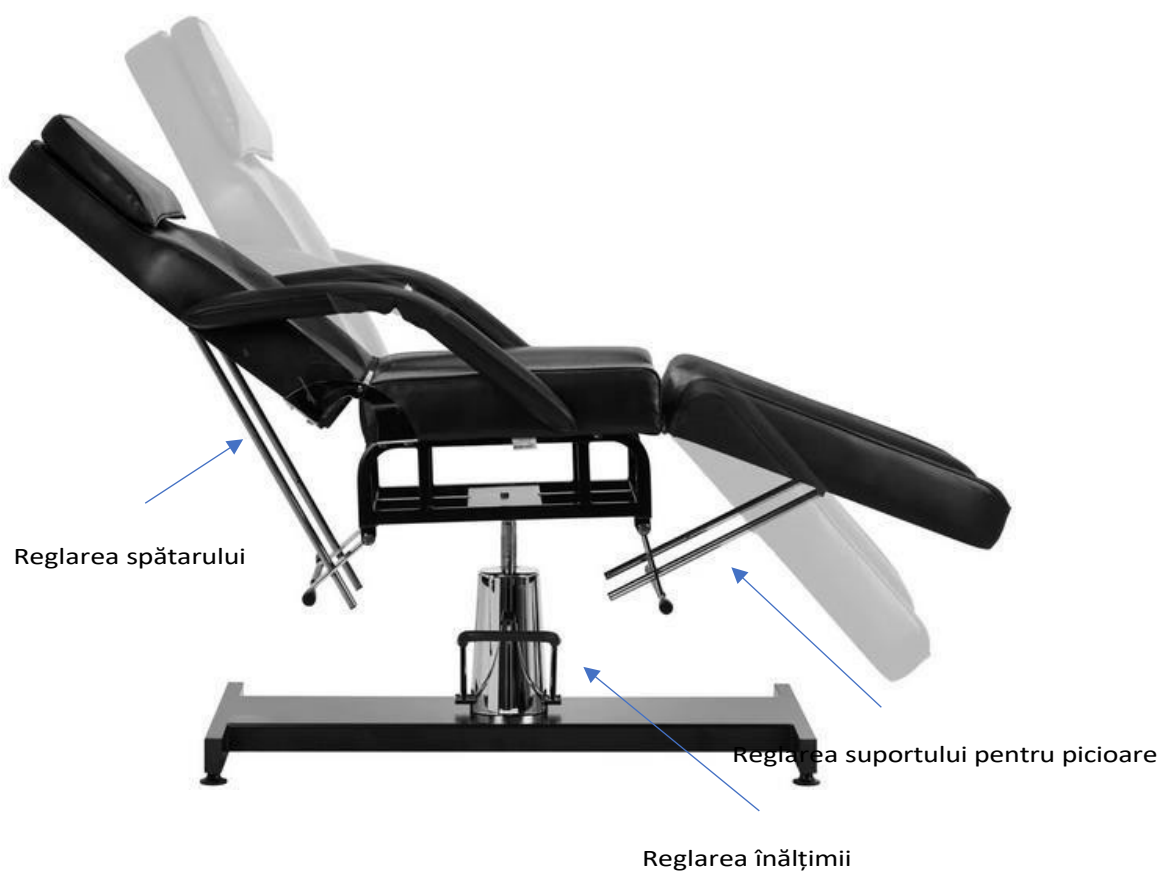


Asamblare:

1. Înșurubați scaunul la cadru.
2. Montați scaunul pe cilindru cu "push fit".
3. Strângeți șurubul de blocare acționator-șezut.
4. Montați suporturile în spătar și scaun.
5. Montați suporturile în suportul pentru picioare și în scaun.

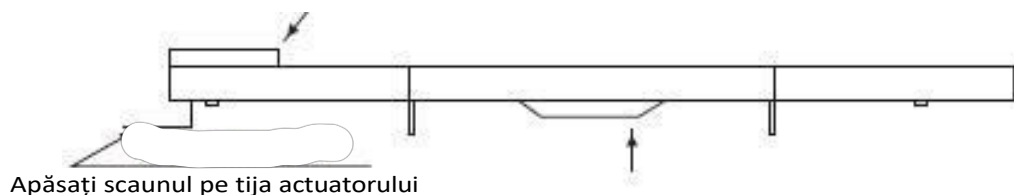

Apăsați scaunul pe tija actuatorului

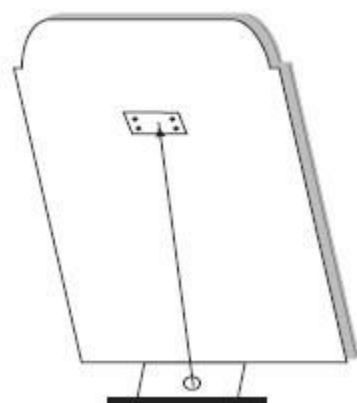

Treceți suportul prin orificiu și strângeți cu șurubul.

În poziție pe spătar, înșurubați suportul fixându-l prin orificiu cu un șurub (la fel și pentru suporturile pentru picioare).

Curățarea și întreținerea:

- Pentru a menține suprafața scaunului în stare bună, aceasta trebuie curățată în mod regulat. Nu uitați să curățați și să dezinfectați scaunul după fiecare utilizare. Vă recomandăm să efectuați o dezinfecție completă o dată pe lună.

I Suprafețe metalice și din plastic

- Pentru a curăța suprafețele și comenzile din metal și plastic, ștergeți-le cu o cârpă umedă. O perie mică va funcționa cel mai bine pentru curățarea zonelor greu accesibile sau a colțurilor.
- Nu utilizați prea mult lichid pentru a curăța aparatul. Apoi dezinfectați aparatul cu un lichid adecvat.

II Suprafețe din oțel inoxidabil

- Curățarea cu o soluție ușoară de detergent va funcționa cel mai bine. Amoniacul și majoritatea solvenților pot fi utilizați pentru a îndepărta petele dificile. Soluțiile pe bază de clor nu trebuie evitate.

III Suprafețe metalice vopsite sau cromate

- Nu utilizați jeturi de apă (dușuri, tunuri de apă de înaltă presiune) pentru curățare.
- Nu curățați la temperaturi ridicate și umiditate ridicată. Nu expuneți unitatea la condiții care pot duce la contaminarea cu lichide.
- Nu utilizați solvenți sau acizi pentru curățare.

IV Suprafața scaunului

- Ștergeți uniform suprafața scaunului cu un detergent special pentru piele și apoi ștergeți-o cu o cârpă curată și moale.

Întreținere

Deconectați unitatea înainte de întreținere.

1. Reparațiile trebuie să fie efectuate de personal experimentat și autorizat de producător. Reparațiile efectuate de personal neautorizat pot cauza răniri sau deteriorări ale aparatului pentru care producătorul nu este responsabil.
2. Utilizați numai piese de schimb originale aprobate de producător.
3. Nu utilizați scaunul electric de înfrumusețare sau accesoriile dacă acestea nu funcționează corespunzător.
4. Toate lucrările de întreținere și reparații trebuie să fie documentate.

Măsuri de întreținere

Verificați comenzile și cablajul acestora o dată pe săptămână. Verificați starea și funcționarea următoarelor elemente cel puțin o dată la șase luni:

1. Cablul de alimentare cu energie electrică și atașamentul acestuia
2. Cablajul motorului
3. Cutia de comandă și cablajul acesteia
4. Dacă sunt atașate accesorii
5. Funcționarea normală a sistemului de închidere

Dacă constatați defecțiuni, nu mai utilizați echipamentul și contactați un centru de service autorizat. Numai personalul cu experiență sau autorizat poate deschide sau înlocui actuatorul / unitatea de comandă.

Dacă orice parte a echipamentului este deteriorată, scoateți cablul de alimentare din priză și opriți utilizarea acestuia. Apoi anunțați departamentul de service.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloane de înfrumusețare. Operarea aparatului numai de către personal calificat în cosmetică evită consecințele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați service-ul autorizat oferit de ACTIVESHOP Ltd. în următoarele cazuri
(a) a intrat lichid în aparat, (b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau scoate sunete ciudate,
c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa sa a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.

9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).

10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita pericolele.

2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și cunoștințe privind echipamentul, dacă se asigură supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea echipamentului în condiții de siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.

3. Aparatul nu este destinat să fie folosit de copii. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.

4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.

5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate constitui un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Aruncați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare în conformitate cu normele de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșul de gunoi menajer. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipamente. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de echipamente electrice trebuie colectate separat și apoi predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui să fie trimise pentru prelucrare. Prin urmare, acestea ar trebui predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Unitatea trebuie transportată la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați unitatea într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, aparatul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.