

ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

**Skládací masážní stůl Balance, dřevěný,
2dílný, 186 x 60 cm**



Dovozce:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Vratislav, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026



Naskenujte pro
jiný
jazyky

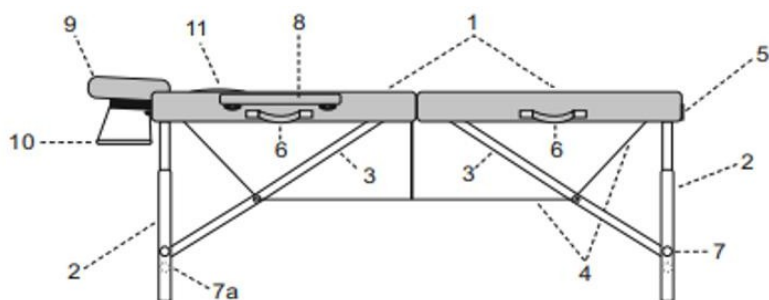
Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.

Před prvním použitím si prosím přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

Skládací masážní stůl BALANCE s dřevěnými nohama je praktické a všestranné řešení, vytvořené s ohledem na každodenní práci masérů, fyzioterapeutů a dalších odborníků. Dvoudílná konstrukce zajišťuje stabilitu a pohodlí jak pro osobu provádějící ošetření, tak pro pacienta. Díky kompaktním rozměrům, nízké hmotnosti a přiložené tašce se skvěle hodí i pro mobilní práci – umožňuje rychlé a pohodlné skládání a přenášení.

Technické údaje	
Materiál čalounění	Syntetická kůže
Výplň	Pěna
Maximální nosnost	225 kg

Konstrukce zařízení:



1. Desky stolu
2. Nohy
3. Podpěry desky
4. Napínací lanko
5. Zámek kufříkový
6. Převrácené úchyty
7. Šrouby / kolíky pro nastavení výšky
- 7a. Přídavné šrouby
8. Područky
9. Opěrka hlavy
10. Polička pod paže
11. Zátka výřezu pro obličej

Návod k montáži

1. Složený stůl připomíná kufr. Otevřete zámky a rozložte desky stolu
2. Vyjměte příslušenství (područky, opěrku hlavy a poličku pod paže)
3. Rozložte nohy na vnější stranu stolu

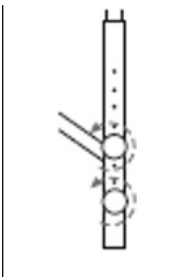
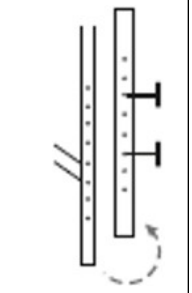
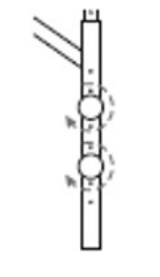
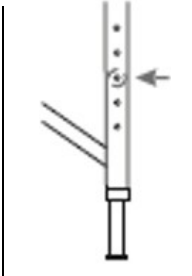
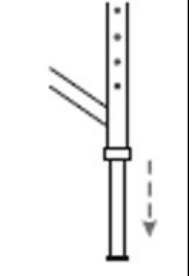
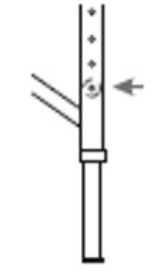


4. Postavte stůl na nohy a přitlačte jej v místě spojení desek
5. Zkontrolujte napnutí lan
6. Nastavte výšku desky podle níže uvedeného návodu

7. Zasuňte područky do otvorů na boku stolu
8. Připevněte polštář k opěrce hlavy pomocí suchých zipů a poté zasuňte opěrku hlavy do otvorů v horní části postele. Pomocí západky zajistěte opěrku hlavy ve zvolené poloze.



Nastavení výšky:

1	2	3	Stoly	Popis činnosti
			Dřevěné	1. Odšroubujte šrouby, kterými jsou konzoly připevněny k nohám stolu. 2. Nastavte podpěry do požadované výšky. 3. Zašroubujte šrouby.
			Hliníkové	1. Zatlačte na zajišťovací čep. 2. Přesuňte podpěru desky do požadované polohy. 3. Vyrovnajte otvor s čepem.

Pozor

- Před uložením pacienta se ujistěte, že jsou vnější nohy správně roztažené a že lanka jsou v dobrém technickém stavu a správně napnutá.
- Maximální nosnost masážního stolu je 225 kg.

Doporučení:

1. Stůl je určen pro použití v interiéru.
2. Je zakázáno měnit polohu stolu, pokud je zatížen.
3. Je zakázáno prudce vyskakovat na stůl, stejně jako sedat, klečet a opírat se přímo o opěrku hlavy a loketní opěrky.
4. Stůl lze přepravovat pouze ve složeném stavu a se zajištěným zámekem.
5. Při skládání stolu je třeba dbát na správné uspořádání lan. Lana nesmíte přiskřípnout.
6. Stůl by měl být používán a skladován mimo dosah přímých zdrojů ohně a tepla.
7. Při správném používání může stůl bezporuchově sloužit po mnoho let.

8. Poškození vzniklá v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů nejsou důvodem k reklamaci.

Rozměry zařízení



Rozměry po složení 93 x 60 x 15 cm

Čištění a údržba:

Aby byl výrobek udržován v dobrém technickém stavu a byla zajištěna jeho maximální životnost, je třeba jej pravidelně čistit a udržovat.

- Povrch postele – používejte čistý, měkký hadřík. Můžete použít malé množství speciálního přípravku na čištění a impregnaci syntetické kůže.
- Povrchy ze dřeva nebo překližky čistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem a poté důkladně osušte. Nepoužívejte žádné chemické prostředky.

Upozornění!

Dřevo jako přírodní materiál se může vyznačovat rozdíly v uspořádání letokruhů, odstínech barvy a výskytem přírodních prvků, jako jsou šmouhy nebo tečky. Nejedná se o vadu výrobku – naopak, svědčí o jeho autentičnosti a přírodním původu. Tyto vlastnosti nejsou důvodem k reklamaci.

Bezpečnostní opatření:

1. Toto zařízení je profesionální přístroj určený k použití v kosmetických salonech. Používání přístroje výhradně kvalifikovaným kosmetickým personálem umožňuje předejít nežádoucím účinkům během ošetření.
2. Zařízení nesmí být rozebíráno ani nesmí být používáno k jiným účelům, než jsou uvedeny v tomto návodu k použití. Veškeré servisní práce a opravy smí provádět výhradně pracovník autorizovaného servisu (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Zařízení nesmí být instalováno ani obsluhováno v blízkosti tekutin, na vlhkých místech nebo mokřýma rukama. Je třeba dbát na to, aby se do zařízení nedostaly žádné tekutiny.
4. V následujících případech je nutné okamžitě vytáhnout zástrčku ze zásuvky a kontaktovat autorizovaný servis společnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.: a) do zařízení vnikla kapalina, b) zařízení vydává podivný zápach, kouř nebo podivné zvuky, c) napájecí kabel je poškozený, d) zařízení se převrhlo nebo došlo k poškození jeho krytu.

5. Na kabely nesmí být položeny žádné předměty. Zařízení neinstalujte na místech, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů je třeba po každém ukončení práce se zařízením vytáhnout napájecí kabel ze zásuvky.
7. Do vnitřku zařízení nesmí být vkládány žádné cizí předměty. V případě, že se do vnitřku dostane nežádoucí předmět, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte prodejce nebo výrobce.
8. Zařízení nesmí být umístěno na nestabilním vozíku, polici nebo vozidle. V případě pádu může dojít k poškození zařízení.
9. Aby byla zaručena stanovená životnost zařízení, doporučuje se dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájení musí odpovídat specifikaci uvedené na typovém štítku. V opačném případě hrozí riziko nesprávné funkce zařízení, jeho poškození nebo dokonce vznícení.

UPOZORNĚNÍ

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizovaný servis – tím se vyhnete nebezpečí.
2. Toto zařízení mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby s omezenými fyzickými a duševními schopnostmi, jakož i osobami, které nejsou seznámeny s fungováním tohoto zařízení, pokud jim bude zajištěn odpovídající dohled nebo poučení o správném a bezpečném používání a pokud budou s tím související rizika srozumitelná.
3. Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby, které nemají dostatečné znalosti o jeho používání.
4. Zařízení není určeno k hraní pro děti. Nedovolte dětem, aby si s tímto zařízením hrály.
5. Toto elektrické zařízení není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým zařízením může představovat riziko poškození zdraví nebo vést ke smrti, proto je třeba zařízení používat a uchovávat mimo dosah dětí.

Likvidace zařízení



V zájmu ochrany životního prostředí je v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních nutné vyřazená elektrická zařízení sbírat odděleně a odevzdávat je do sběrných míst pro vyřazená elektrická a elektronická zařízení. Je třeba dodržovat pokyny pro likvidaci tohoto typu zařízení a nevhazujte je do kontejnerů na domácí odpad.

Na konci své životnosti obsahují tato zařízení stále plnohodnotné součásti vhodné k recyklaci, proto je třeba je předat k recyklaci do příslušných sběrných míst nebo společnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Skladování a přeprava

Zařízení by mělo být přepravováno při teplotě v rozmezí od (–)20 °C do (+)40 °C výhradně v originálním obalu. Skladujte jej v dobře větrané místnosti s relativní vlhkostí nejvýše 90 %. Provozní teplota od (+)10 °C do (+)40 °C. Během procesů při skladování a přepravě se zařízení nesmí házet ani upouštět a nesmí být vystaveno mechanickým otřesům ani povětrnostním vlivům.