

ACTIVESHOP[®]

GEBRAUCHSANWEISUNG

Azzurro F-18A Fußpflegestaubabsorber




Importeur

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud DC 2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rew. A/05/2024



Abmessungen

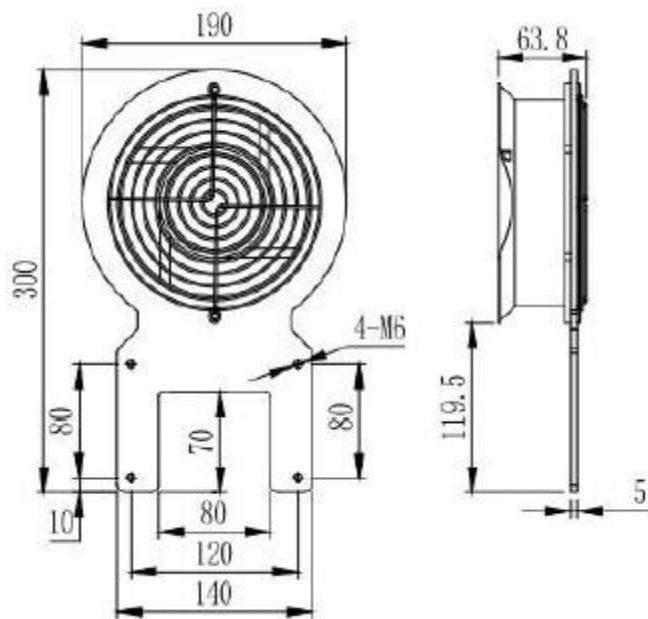

Die Konstruktion des Absorbers ermöglicht die Montage an einer Fußstütze oder direkt am Behandlungstuhl.

Technische Daten

Nennspannung	220-240 V, 50/60 Hz
Leistung	38 W
Drehzahl der Turbine	2800/3200 U/MIN
Gefilterte Luftmenge	345/406 m3 pro Stunde
Geräuschpegel	51/58 dB
Abmessungen	13,5 cm (innen) 19 cm (außen)

Verwendung

Der Absorber ist so konzipiert, dass er an einer Fußstütze oder direkt am Behandlungstuhl angebracht werden kann.

Drücken Sie den Schalter, das Gebläse läuft an. Drücken Sie den Schaltknopf erneut, der Ventilator hört auf zu laufen.



Sack

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist eine professionelle Ausrüstung für den Einsatz in kosmetischen Praxen. Die Bedienung des Geräts nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal vermeidet unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
3. Installieren oder bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
4. Ziehen Sie in folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst der Firma ACTIVESHOP GmbH:
(a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, (b) das Gerät verströmt einen seltsamen Geruch, raucht oder macht seltsame Geräusche,
c) das Netzkabel wurde beschädigt, d) das Gerät wurde umgestoßen oder sein Gehäuse wurde beschädigt.
5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
6. Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.
9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, eine Pause von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar abbrennt.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen Störung an eine autorisierte Kundendienststelle, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung und Vertrautheit mit dem Gerät benutzt werden, wenn eine Beaufsichtigung oder Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe aufhalten.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und aufbewahrt werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTES



Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen umweltgerecht bei den Recyclingstellen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Zum Schutz der Umwelt müssen gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Abfall gebrauchte elektrische und elektronische gebrauchte Elektrogeräte müssen Elektrogeräte getrennt gesammelt und an Sammelstellen für gebrauchte elektronische und elektrische Geräte abgegeben werden.

Altgeräte enthalten vollständig verwertbare Bestandteile und sollten daher dem Recycling zugeführt werden. Deshalb sollten sie bei den entsprechenden Sammelstellen sowie bei ACTIVESHOP Ltd. abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur von (-) 20 °C bis (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75%. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.