

ACTIVESHOP®

Návod k použití

UV-C sterilizátor Germix, jednoduchý, HQ
YM9001A



Dovozce:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2026



Sterilizátor Germix je bezpečný způsob bezpečné a účinné dezinfekce bez použití chemických roztoků nebo vysokých teplot. Činnost přístroje je založena na baktericidním působení UV záření – ultrafialového světla o vlnové délce 100–280 nm, zejména 254 nm, tedy UV-C, které dopadá přímo na povrch, účinně ničí živé formy mikroorganismů. Umožňuje efektivní suchou dezinfekci, při které není zařízení vystaveno mechanickému poškození nebo otupení. Dokonale vyčistí povrchy nástrojů, jako jsou nůžky, hřebeny, kartáče, kleště, pinzety nebo čepele strojků.

Technické údaje	
Výkon	220 W
Napětí	220–240 V 50 Hz
Doba sterilizace	30–45 min

Použití

1. UV sterilizátor slouží k dezinfekci nástrojů z kovů, plastů, dřeva a kompozitních materiálů (nůžky, hřebeny, pinzety atd.)
2. Dezinfekce se provádí pomocí UV záření, díky čemuž není zařízení vystaveno mechanickému poškození. UV sterilizace spočívá v ozáření materiálu ultrafialovým zářením.
3. Toto záření mění strukturu nukleových kyselin, proto působí nejsilněji na vegetativní formy mikroorganismů.
4. Zařízení se ideálně hodí do kosmetických salonů, SPA, estetické medicíny a kadeřnických salonů.

Návod k použití

1. Položte přístroj na stabilní podložku, vložte nástroje a uzavřete UV sterilizátor.
Nástroje vkládané do zásuvky sterilizátoru by měly být čisté, suché a předem umyté. Neměly by se navzájem překrývat.
2. Připojte sterilizátor k elektrické síti. Zapněte přístroj tlačítkem zapnout/vypnout.
3. Doba sterilizace je přibližně 30–45 minut.
4. Po uplynutí požadované doby vypněte sterilizátor tlačítkem zapnutí/vypnutí.
5. Otevřete sterilizátor a vyjměte předměty (není to povinné – můžete je také nechat v nádobě).
6. Nástroje jsou připraveny k použití.

Důležité

1. Víčko sterilizátoru musí být vždy zavřené, když je sterilizátor zapnutý.
2. Je zakázáno otevírat přístroj před dokončením sterilizace a zhasnutím LED diod.
3. Nesmí dojít ke kontaktu s vodou nebo žíravými chemikáliemi.
4. Složitější prvky by měly být co nejvíce rozloženy a demontovány, aby byla sterilizace nástrojů co nejefektivnější.


Doporučení

1. Ujistěte se, že jste zařízení nainstalovali na rovný a stabilní povrch, abyste omezili riziko pádu a poškození.
2. Nikdy nenechávejte připojené zařízení bez dozoru.
3. Používejte zařízení v souladu s účelem popsáním v návodu.
4. Nikdy nepoužívejte tento přístroj, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku.
5. Nepoužívejte zařízení, pokud nefunguje správně nebo pokud spadlo, bylo poškozeno nebo se dostalo

do vody.

6. Netahejte přímo za kabel, abyste vyjmuli zástrčku ze zásuvky.
7. Výrobek je určen výhradně pro vnitřní použití. Nevystavujte jej přímému působení povětrnostních vlivů.
8. Zařízení pravidelně čistěte, abyste zabránili hromadění nečistot. Nejlepší je čistit zařízení vlhkým hadříkem.
9. Neomotávejte napájecí kabel kolem zařízení.

Rozměry

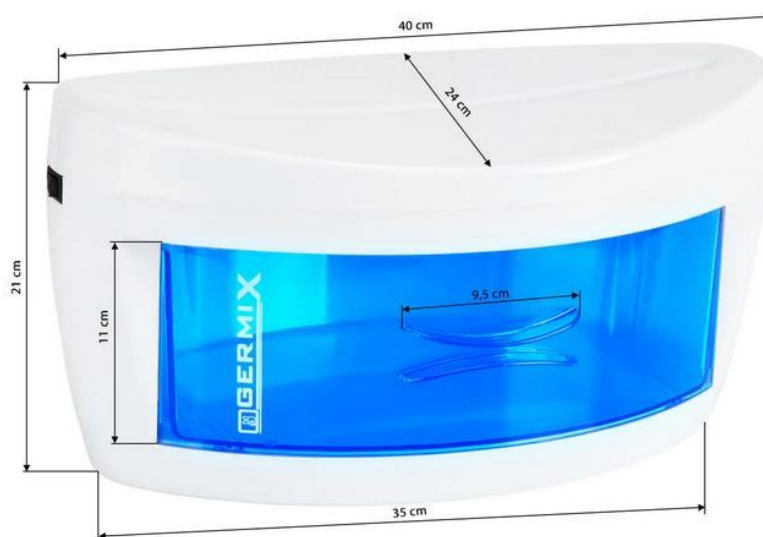

Bezpečnostní opatření

1. Toto zařízení je profesionální přístroj určený k použití v kosmetických salonech. Používání přístroje výhradně kvalifikovaným kosmetickým personálem umožňuje předejít nežádoucím účinkům během ošetření.
2. Zařízení nesmí být rozebíráno ani nesmí být používáno k jiným účelům, než jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze. Veškeré servisní práce a opravy smí provádět výhradně pracovník autorizovaného servisu (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Zařízení nesmí být instalováno ani obsluhováno v blízkosti tekutin, na vlhkých místech nebo mokřýma rukama. Je třeba dbát na to, aby se do zařízení nedostaly žádné tekutiny.
4. V následujících případech je nutné okamžitě vytáhnout zástrčku ze zásuvky a kontaktovat autorizovaný servis společnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.: a) do zařízení vnikla kapalina, b) zařízení vydává podivný zápach, kouř nebo podivné zvuky, c) napájecí kabel je poškozený, d) zařízení se převrhlo nebo došlo k poškození jeho krytu.
5. Na kabely nesmí být položeny žádné předměty. Zařízení neinstalujte na místech, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů je třeba po každém ukončení práce se zařízením vytáhnout napájecí kabel ze zásuvky.
7. Do vnitřku zařízení nesmí být vkládány žádné cizí předměty. V případě, že se do vnitřku dostane nežádoucí předmět, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte prodejce nebo výrobce.
8. Zařízení nesmí být umístěno na nestabilním vozíku, polici nebo vozidle. V případě pádu může dojít k poškození zařízení.

9. Aby byla zaručena stanovená životnost zařízení, doporučuje se dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájení musí odpovídat specifikaci uvedené na typovém štítku. V opačném případě hrozí riziko nesprávné funkce zařízení, jeho poškození nebo dokonce vznícení.

UPOZORNĚNÍ

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizovaný servis – tím se vyhnete nebezpečí.
2. Toto zařízení mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby s omezenými fyzickými a duševními schopnostmi, jakož i osobami, které nejsou seznámeny s fungováním tohoto zařízení, pokud jim bude zajištěn odpovídající dohled nebo poučení o správném a bezpečném používání a pokud budou srozumitelná související rizika.
3. Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby, které nemají dostatečné znalosti o jeho používání.
4. Zařízení není určeno k hraní pro děti. Nedovolte dětem, aby si s tímto zařízením hrály.
5. Toto elektrické zařízení není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým zařízením může představovat riziko poškození zdraví nebo vést ke smrti, proto je třeba zařízení používat a uchovávat mimo dosah dětí.

Likvidace zařízení



V zájmu ochrany životního prostředí je v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních nutné vyřazená elektrická zařízení sbírat odděleně a odevzdávat je do sběrných míst pro vyřazená elektrická a elektronická zařízení. Je třeba dodržovat pokyny pro likvidaci tohoto typu zařízení a nevhazujte je do kontejnerů na domácí odpad.

Na konci své životnosti obsahují tato zařízení stále plnohodnotné součásti vhodné k recyklaci, proto je třeba je předat k recyklaci do příslušných sběrných míst nebo společnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Skladování a přeprava

Zařízení by mělo být přepravováno při teplotě v rozmezí od (–)20 °C do (+)40 °C výhradně v originálním obalu. Skladujte jej v dobře větrané místnosti s relativní vlhkostí nejvýše 90 %. Provozní teplota od (+)10 °C do (+)40 °C. Během procesů při skladování a přepravě se zařízení nesmí házet ani upouštět a nesmí být vystaveno mechanickým otřesům ani povětrnostním vlivům.