

ACTIVESHOP[®]

Használati utasítás

Germix HQ YM9001A egykamrás UV-C
sterilizáló



Importőr:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, épület
DC2A 54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2026



A **Germix sterilizáló** biztonságos és hatékony fertőtlenítési módszer, amely nem igényel vagy magas hőmérséklet alkalmazása nélkül. A készülék működése az UV-sugárzás baktericid hatásán alapul – 100–280 nm hullámhosszúságú ultraibolya fény, különösen a 254 nm-es, azaz UV-C sugárzás, amely közvetlenül a felületre, hatékonyan elpusztítja a mikroorganizmusok élő formáit. Lehetővé teszi a hatékony száraz fertőtlenítést, amelynek során a felszerelés nem ki van téve mechanikai károsodásnak vagy elhasználódásnak. Kiválóan megtisztítja olyan eszközök felületét, mint az ollók, fésűk, kefék, körömvágók, csipeszek vagy borotvapengék.

Műszaki adatok	
Teljesítmény	220 W
Feszültség	220–240 V, 50 Hz
Sterilizálási idő	30–45 perc

Alkalmazás

1. Az UV-sterilizáló fém, műanyag, fa és kompozit anyagokból készült eszközök (ollók, fésűk, csipeszek stb.) fertőtlenítésére szolgál.
2. A fertőtlenítés UV-sugarakkal történik, így a felszerelés nem kerül kitéve mechanikai károsodásnak. Az UV-sterilizálás az anyag ultraibolya sugárzással történő besugárzásán alapul.
3. Ez a sugárzás megváltoztatja a nukleinsavak szerkezetét, ezért a legerőteljesebb hatást a mikroorganizmusok vegetatív formáira gyakorolja.
4. A készülék ideális kozmetikai szalonokban, SPA-kban, esztétikai orvoslásban és fodrászszalonokban.

Használati utasítás

1. Helyezze a készüléket stabil felületre, majd tegye be az eszközöket, és csukja be az UV-sterilizálót.
A sterilizáló fiókjába helyezett eszközöknek tisztáknak, szárazaknak és előzetesen lemosottaknak kell lenniük. Emellett nem szabad egymásra helyezkedniük.
2. Csatlakoztassa a sterilizálót az áramellátáshoz. Kapcsolja be a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal.
3. A sterilizálás időtartama körülbelül 30–45 perc.
4. A kívánt idő letelte után kapcsolja ki a sterilizálót a be-/kikapcsoló gombbal.
5. Nyissa ki a sterilizálót, és vegye ki a tárgyakat (ez nem kötelező – a tárgyakat a tartályban is hagyhatja).
6. A szerszámok készen állnak a használatra.

Fontos

1. A sterilizáló fedelét mindig zárva kell tartani, amikor a készülék be van kapcsolva.
2. Tilos a készüléket kinyitni, mielőtt a sterilizálási folyamat befejeződött és a LED-ek kialudtak.
3. Nem szabad vízzel vagy maró hatású vegyi anyagokkal érintkezésbe hozni.
4. A bonyolult szerkezetű elemeket a lehető legnagyobb mértékben szét kell nyitni és szétszerelni, hogy a szerszámok sterilizálása a lehető leghatékonyabban történjen.


Ajánlások

1. Győződjön meg arról, hogy a készüléket sík és stabil felületre helyezte, hogy csökkentsék a leesés és a sérülés kockázatát.
2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a csatlakoztatott készüléket.
3. Használja a készüléket a használati utasításban leírt rendeltetésszerűen.
4. Soha ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a csatlakozó megsérült.
5. Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, vagy ha leejtette, megsérült, vagy vízbe esett.

vízbe.

6. Ne a kábelt húzza meg közvetlenül, amikor a dugót kiveszi a konnektorból.
7. A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne tegye ki közvetlen időjárási hatásoknak.
8. A készüléket rendszeresen tisztítsa meg, hogy megakadályozza a szennyeződések felhalmozódását. A készüléket leginkább nedves ruhával tisztítsa meg.
9. Ne tekerje a tápkábelt a készülék köré.

Méretetek

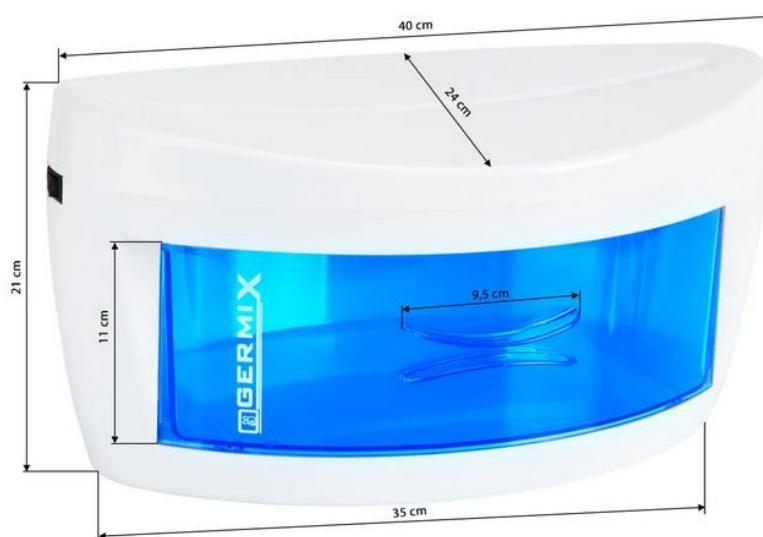

Biztonsági előírások

1. A készülék professzionális eszköz, amelyet kozmetikai salonokban kell használni. A készülék kizárólag képzett kozmetikai szakemberek általi kezelése biztosítja, hogy a kezelés során ne lépjenek fel nem kívánt mellékhatások.
2. A készüléket tilos szétszerelni, illetve a jelen használati utasításban megjelölt céloktól eltérő célokra használni. Minden szervizelési és javítási munkát kizárólag az autorizált szerviz (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) munkatársa végezhet.
3. A készüléket tilos folyadékok közelében, nedves helyeken vagy nedves kézzel telepíteni vagy kezelni. Gondoskodjon arról, hogy folyadék ne kerüljön a készülékbe.
4. A következő esetekben azonnal húzza ki a dugaszt a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot az ACTIVESHOP Sp. z o.o. által nyújtott hivatalos szervizzel: a) folyadék jutott a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt bocsát ki, vagy furcsa hangokat ad, c) a tápkábel megsérült, d) a készülék felborult, vagy a burkolata megsérült.
5. Ne tegyen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze el a készüléket olyan helyen, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból minden használat után húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
7. Tilos idegen tárgyakat helyezni a készülék belsejébe. Ha nem kívánt tárgy kerül a készülék belsejébe, húzza ki a kábelt a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. A készüléket tilos instabil kocsira, polcra vagy járműre helyezni. Esés esetén a készülék megsérülhet.

9. A készülék meghatározott élettartamának biztosítása érdekében ajánlott egy perc szünetet tartani a bekapcsoló gomb ismételt megnyomása előtt (a bekapcsolás és a kikapcsolás között és fordítva).
10. Az áramellátásnak meg kell felelnie a típustáblán feltüntetett specifikációnak. Ellenkező esetben fennáll a készülék hibás működésének, megrongálódásának, sőt akár kiégésének kockázata.

FIGYELEM

1. A tápkábel megrongálódása vagy egyéb meghibásodások esetén vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizzel – ezzel elkerülheti a veszélyt.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű személyek, valamint a berendezés működésével nem ismerős személyek is használhatják, feltéve, hogy megfelelő felügyeletet biztosítanak számukra, vagy megfelelő utasítást kapnak a biztonságos és helyes használatról, és megértik az ezzel járó veszélyeket.
3. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha gyermekek vagy a készülék használatában nem jártas személyek tartózkodnak a közelében.
4. A készülék nem gyermekek számára készült. Ne engedje, hogy gyermekek a készülékkel játsszanak.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. A készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségkárosodást vagy halált okozhat, ezért a készüléket gyermekektől elzárva kell használni és tárolni.

A készülék

ártalmatlanítása



A környezet védelme érdekében, a használt elektromos és elektronikus berendezésekről szóló 2012/19/EK irányelvnek megfelelően a használt elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni, és azokat a használt elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőhelyeire kell eljuttatni. Be kell tartani az ilyen típusú berendezések hulladékkezelésére vonatkozó szabályokat, és azokat nem szabad a háztartási hulladékot tartalmazó konténerekbe dobni.

Élettartamuk végén ezek a készülékek továbbra is teljes értékű, újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosítás céljából el kell juttatni a megfelelő gyűjtőpontokba vagy az ACTIVESHOP Sp. z o.o. céghez.

Tárolás és szállítás

A készüléket kizárólag (-)20 °C és (+)40 °C közötti hőmérsékleten, eredeti csomagolásában. A készüléket jól szellőző helyiségben, legfeljebb 90%-os relatív páratartalom mellett kell tárolni. Üzemi hőmérséklet: (+)10 °C és (+)40 °C között. A folyamatok során tárolás és szállítás során tilos a készüléket ledobni vagy leejteni, valamint mechanikai rázkódásoknak vagy időjárási hatásoknak kitenni.