

ACTIVESHOP[®]

Bruksanvisning

UV-C-sterilisator Germix enkel HQ YM9001A



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2026



Germix-sterilisatorn är ett säkert sätt att desinficera på ett säkert och effektivt sätt utan användning av eller hög temperatur. Enhetens funktion baseras på den bakteriedödande effekten av UV-strålning – ultraviolett ljus med en våglängd på 100–280 nm, särskilt 254 nm, det vill säga UV-C, som faller direkt på ytan och effektivt förstör levande mikroorganismer. Den möjliggör effektiv torrdesinfektion, där utrustningen inte utsätts för mekanisk skada eller slitage. Den rengör perfekt ytorna på redskap som saxar, kammar, borstar, tänger, pincetter eller rakblad.

Tekniska data	
Effekt	220 W
Spänning	220–240 V 50 Hz
Sterilisationstid	30–45 min

Användningsområde

1. UV-sterilisatorn används för att desinficera verktyg av metall, plast, trä och kompositmaterial (saxar, kammar, pincetter m.m.)
2. Desinfektionen utförs med UV-strålar, vilket innebär att utrustningen inte utsätts för mekaniska skador. UV-sterilisering innebär att materialet bestrålas med ultraviolett strålning.
3. Strålningen förändrar strukturen hos nukleinsyrorna, vilket gör att den har starkast effekt på vegetativa former av mikroorganismer.
4. Enheten är perfekt för skönhetssalonger, spa, estetisk medicin och frisörsalonger.

Användning

1. Placera apparaten på ett stabilt underlag, lägg sedan in verktygen och stäng UV-sterilisatorn.
Verktygen som placeras i sterilisatorns låda ska vara rena, torra och förtvättade. De får inte heller ligga ovanpå varandra.
2. Anslut sterilisatorn till elnätet. Starta enheten med på/av-knappen.
3. Sterilisationstiden är ca 30–45 minuter.
4. När den önskade tiden har gått ska sterilisatorn stängas av med på/av-knappen.
5. Öppna sterilisatorn och ta ut föremålen (detta är inte obligatoriskt – de kan även lämnas kvar i behållaren).
6. Verktygen är nu klara att användas.

Viktigt

1. Sterilisatorns lock måste alltid vara stängt när den är påslagen.
2. Det är förbjudet att öppna enheten innan steriliseringsprocessen är avslutad och LED-lamporna slocknat.
3. Enheten får inte komma i kontakt med vatten eller frätande kemikalier.
4. Komplexa komponenter bör öppnas och demonteras så mycket som möjligt för att steriliseringen av verktygen ska kunna genomföras så effektivt som möjligt.


Rekommendationer

1. Se till att du har placerat enheten på en plan och stabil yta för att minska risken för att den faller och skadas.
2. Lämna aldrig enheten ansluten utan uppsikt.
3. Använd enheten enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
4. Använd aldrig enheten om sladden eller kontakten är skadad.
5. Använd inte apparaten om den inte fungerar som den ska eller om den har tappats, skadats eller hamnat

i vatten.

6. Dra inte direkt i sladden för att dra ut kontakten ur uttaget.
7. Produkten är endast avsedd för inomhusbruk. Utsätt den inte för direkt väderpåverkan.
8. Rengör enheten regelbundet för att förhindra att smuts ansamlas. Rengör enheten helst med en fuktig trasa.
9. Vik inte strömkabeln runt enheten.

Mått

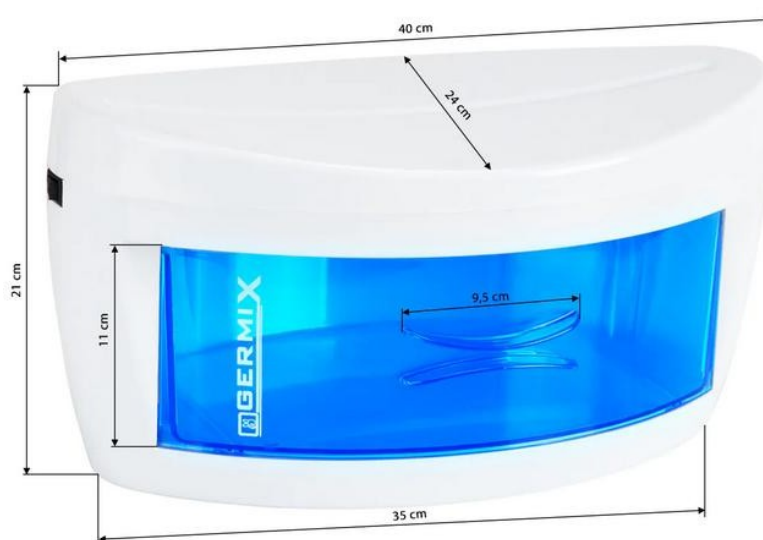

Säkerhetsåtgärder

1. Enheten är en professionell apparat avsedd för användning på skönhetssalonger. Genom att endast låta kvalificerad skönhetspersonal använda enheten undviks oönskade effekter under behandlingen.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. Allt underhålls- och reparationsarbete måste utföras av personal från en auktoriserad serviceverkstad (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Enheten får inte installeras eller användas i närheten av vätskor, fuktiga platser eller med våta händer. Se till att inga vätskor kommer in i enheten.
4. Dra omedelbart ut kontakten ur vägguttaget och kontakta den auktoriserade servicen som tillhandahålls av företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall: a) vätska har trängt in i enheten, b) enheten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden är skadad, d) enheten har välts eller höljet har skadats.
5. Lägg inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på platser där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut strömsladden ur vägguttaget varje gång du är klar med enheten.
7. Frammed föremål får inte placeras inuti enheten. Om ett främmande föremål hamnar inuti enheten ska du dra ut strömkabeln ur eluttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Enheten får inte placeras på en ostabil vagn, hylla eller ett fordon. Om enheten faller kan den skadas.

9. För att garantera enligt angiven livslängd rekommenderas att du väntar en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan påslagning och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på typskylten. I annat fall finns det risk för felaktig funktion, skador på enheten eller till och med brand.

VARNING

1. Vid skador på strömkabeln eller andra fel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad – detta för att undvika risker.
2. Denna enhet får användas av barn som är minst 8 år gamla, av personer av personer med nedsatt fysisk eller mental funktionsförmåga, samt av personer som inte är bekanta med hur utrustningen fungerar, förutsatt att de får lämplig övervakning eller instruktioner om korrekt och säker användning och att de risker som är förknippade med detta är förstådda.
3. Lämna inte enheten utan uppsikt när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur enheten ska användas befinner sig i närheten.
4. Enheten är inte avsedd att användas som leksak av barn. Låt inte barn leka med enheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning av eller kontakt med den kan utgöra en risk för hälsan eller leda till dödsfall, därför ska enheten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

Avfallshantering



För att skydda miljön, i enlighet med direktiv 2012/19/EU om uttjänta elektriska och elektroniska apparater, ska uttjänta elektriska apparater samlas in separat och lämnas till samlingsställen för uttjänta elektriska och elektroniska apparater. Följ anvisningarna för avfallshantering av denna typ av utrustning och inte slänga den i hushållsavfall.

När utrustningen inte längre är användbar innehåller den fortfarande fullvärdiga komponenter som kan återvinnas, därför ska den lämnas in för återvinning till lämpliga samlingsställen eller till företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Förvaring och transport

Enheten ska transporteras vid en temperatur mellan (–)20 °C och (+)40 °C, uteslutande i originalförpackningen. Den ska förvaras i ett välventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 90 %. Drifttemperatur mellan (+)10 °C och (+)40 °C. Under processer Vid lagring och transport får enheten inte kastas eller tappas, och den får inte utsättas för mekaniska stötar eller väderpåverkan.