

ACTIVESHOP[®]

ISTRUZIONI PER L'USO

Poltrona cosmetica hyd. A 210



Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polonia

www.activeshop.com.pl Rev.

A/03/2025

Scansione
per
diverse
lingue




Dimensioni:




Montaggio:


1. Avvitare l'attuatore alla base
2. Spingere verso l'interno la linguetta dell'asta dell'attuatore.
3. Montare il coperchio.
4. Portare la linguetta dell'asta dell'attuatore nella posizione esterna dell'asta.
5. Montare la sede sull'attuatore
6. Serrare le viti
7. Inserire le staffe nello schienale e nel sedile

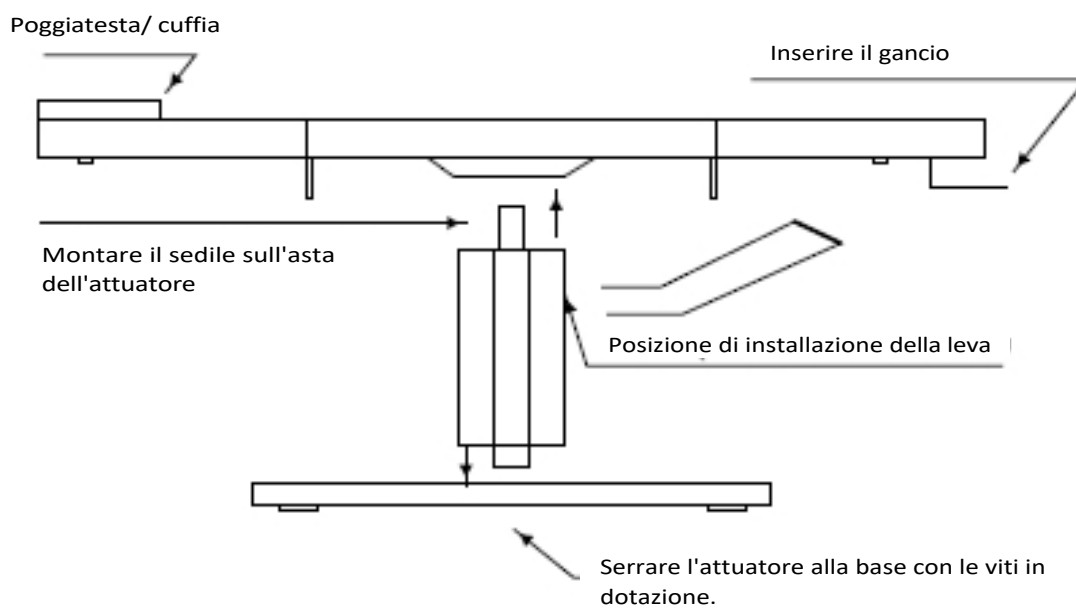

Attuatore:

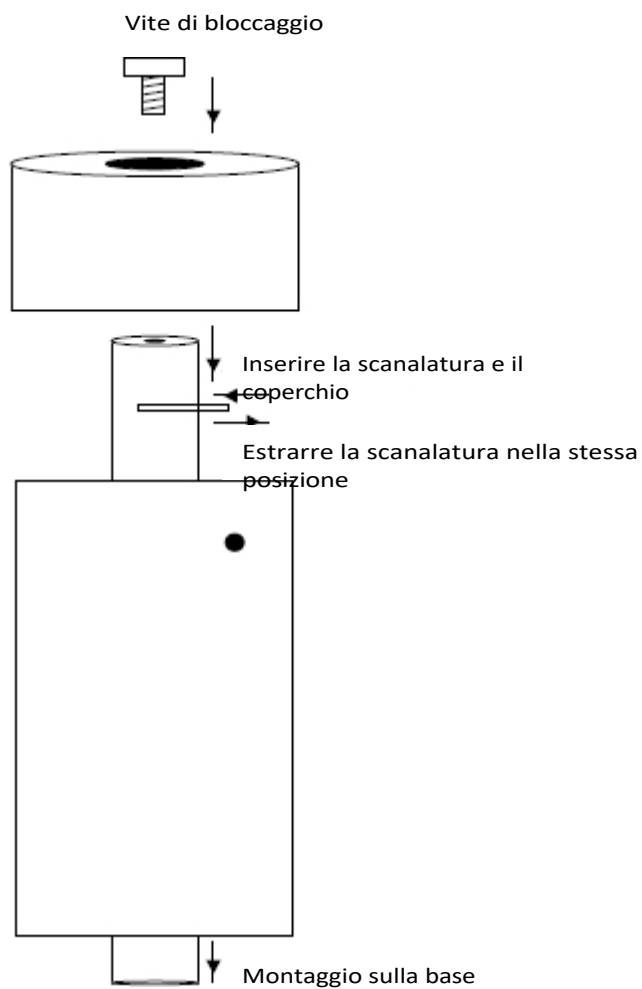

Installazione della staffa

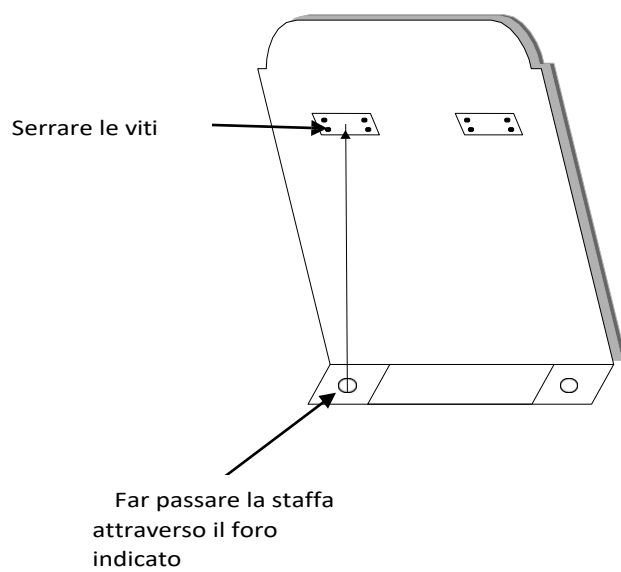

Funzioni del sedile:

- Sollevare il sedile: sollevare il sedile premendo la leva.
- Abbassare il sedile: spingere verso il basso fino a quando il sedile si abbassa completamente
- Blocco della rotazione del sedile: sollevare la leva il più possibile verso l'alto.

Attenzione

Non sedersi bruscamente e non scaricare il peso sul sedile. È vietato spostare o trasportare la sedia quando vi sono persone o carichi. Non salire sulla sedia con i piedi o le ginocchia, non dondolarsi, non sedersi sui braccioli e non sedersi su più di una persona.

Pulizia e disinfezione dell'unità:

Scollegare l'unità prima di pulirla.

Per mantenere la superficie del sedile in buone condizioni, pulirla regolarmente. Ricordarsi di pulire e disinfettare la poltrona dopo ogni utilizzo. Si consiglia di eseguire una disinfezione accurata una volta al mese.

I Superfici in metallo e plastica

Per pulire le superfici e i comandi in metallo e plastica, passare un panno umido. Per pulire le aree o gli angoli più difficili da raggiungere, è sufficiente una piccola spazzola. Non usare troppo liquido per pulire l'apparecchio. Disinfettare poi l'apparecchio con un liquido adatto.

II Superfici in acciaio inox

La pulizia con una soluzione detergente delicata è la soluzione migliore. L'ammoniaca e la maggior parte dei solventi possono essere utilizzati per rimuovere le macchie più resistenti. Evitare le soluzioni a base di cloro.

III Superfici metalliche verniciate o cromate

- Non utilizzare getti d'acqua (docce, cannoni ad alta pressione) per la pulizia.
- Non pulire in presenza di temperature e umidità elevate e non esporre l'unità a condizioni che potrebbero causare la contaminazione da parte di liquidi.
- Non utilizzare solventi o acidi per la pulizia.

IV Superficie del sedile

- Pulire uniformemente la superficie del sedile con un detergente speciale per la pelle e poi passare un panno pulito e morbido.

Manutenzione:

1. Pulizia quotidiana

Rimozione della polvere con un panno morbido e asciutto.

2. Rimozione dello sporco ostinato

Come sapete, è difficile rimuovere lo sporco ostinato con un normale panno asciutto. In questo caso, utilizzare prima un panno morbido con un detergente neutro diluito e poi passare un panno asciutto.

3. È vietato l'uso di benzene, diluenti, benzina o altri solventi.

Questi agenti possono danneggiare la pelle o corrodere il prodotto.

4. Condizioni di stoccaggio e di funzionamento

Non esporre il prodotto alla luce solare intensa o all'umidità. In caso contrario, il prodotto potrebbe danneggiarsi.

MISURE DI SICUREZZA

Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale da utilizzare negli interventi di chirurgia estetica. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita effetti indesiderati durante il trattamento.

L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

Non installare o utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate - in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'apparecchio.

Sc Collegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato dalla ACTIVESHOP Ltd. nei seguenti casi:

- (a) un liquido è entrato nell'apparecchio, (b) l'apparecchio emette un odore strano, fuma o emette suoni strani, c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato rovesciato o il suo alloggiamento è stato danneggiato.

Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.

Per motivi di sicurezza, staccare il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si finisce di lavorare con l'apparecchio.

Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.

Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.

Per garantire la durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).

L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.

L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.

Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.

Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o provocare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio nel rispetto dei principi di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nei contenitori dei rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Per proteggere l'ambiente, in conformità alla Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte separatamente e consegnate ai centri di riciclaggio.

apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte separatamente e consegnate ai seguenti punti di raccolta

raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche. Al termine della loro vita utile, i vecchi apparecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il trattamento. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati, nonché alla ACTIVESHOP Ltd.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'apparecchio deve essere trasportato a temperature comprese tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. Conservare l'apparecchio in un luogo ben ventilato con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.