

ACTIVESHOP[®]

INSTRUCCIONES DE USO

Sillón cosmético hyd. A 210



Importador:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polonia

www.activeshop.com.pl

Rev. A/03/2025




Escanead
o para
diferentes
idiomas

Dimensiones:




Montaje:


1. Atornillar el accionamiento a la base
2. Introducir la lengüeta del vástago del accionamiento hacia dentro
3. Montar la tapa.
4. Llevar la lengüeta del vástago del accionamiento a la posición exterior del vástago
5. Montar el asiento en el accionamiento
6. Apretar con tornillos
7. Montar los soportes en el respaldo y el asiento

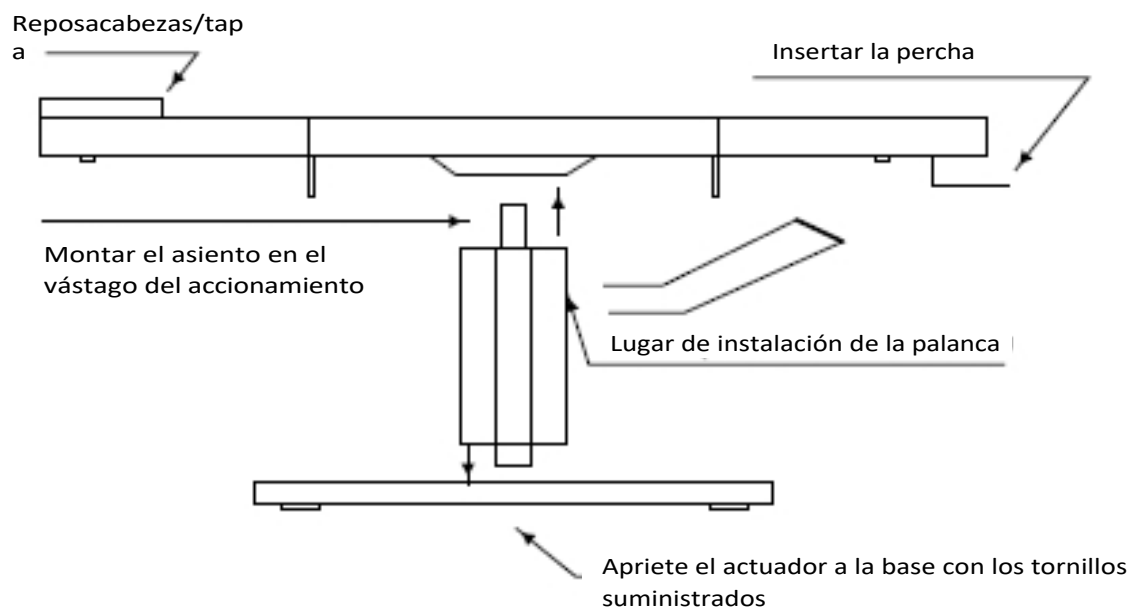

Actuador:

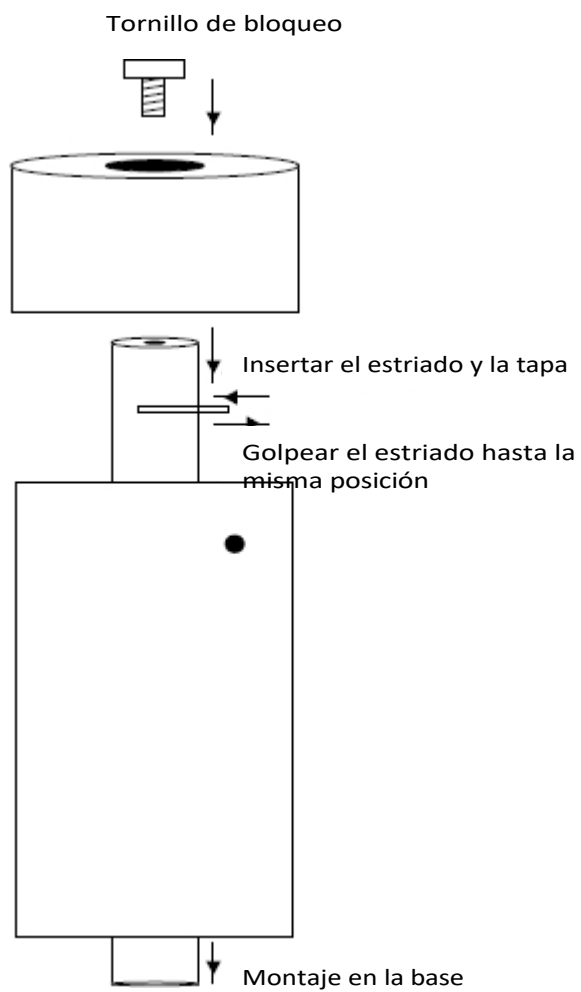

Instalación del soporte

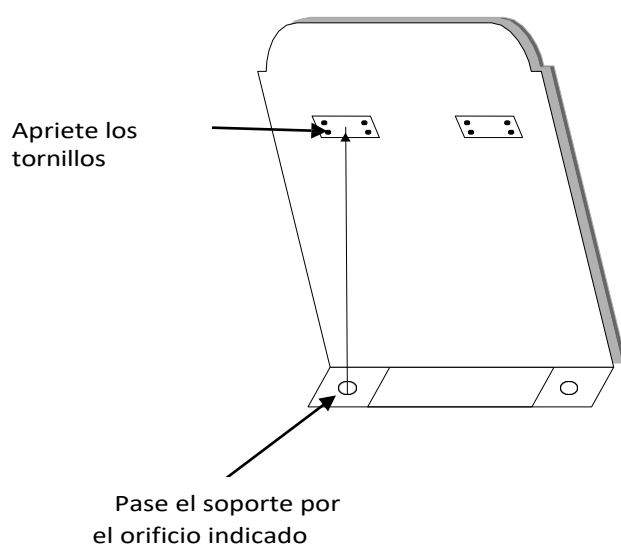

Funciones del asiento:

- Levantar el asiento: levante el asiento presionando la palanca.
- Bajar el asiento: empuje hacia abajo hasta que el asiento descienda por completo
- Bloqueo de rotación del asiento: levante la palanca lo máximo posible.

Precaución

No se siente bruscamente ni descargue su peso sobre el asiento. Está prohibido mover o transportar la silla mientras haya personas o cargas sobre ella. No apoye los pies o las rodillas en la silla, no se balancee, no se siente en los reposabrazos ni se siente más de una persona.

Limpieza y desinfección de la unidad

Desenchufe la unidad antes de limpiarla.

Para mantener la superficie del asiento en buen estado, límpiela con regularidad. Recuerde limpiar y desinfectar la silla después de cada uso. Recomendamos realizar una desinfección a fondo una vez al mes.

I Superficies de metal y plástico

Para limpiar las superficies y los mandos de metal y plástico, pásales un paño húmedo. Para limpiar zonas o rincones de difícil acceso, un cepillo pequeño funcionará bien. No utilice demasiado líquido para limpiar el aparato. A continuación, desinfecte el aparato con un líquido adecuado.

II Superficies de acero inoxidable

Lo mejor es limpiar con una solución de detergente suave. El amoníaco y la mayoría de los disolventes pueden utilizarse para eliminar manchas difíciles. Evite las soluciones a base de cloro.

III Superficies metálicas pintadas o cromadas

- No utilice chorros de agua (duchas, cañones de agua a alta presión) para limpiar.
- No limpie a altas temperaturas y alta humedad, no exponga la unidad a condiciones que puedan provocar la contaminación por líquidos.
- No utilice disolventes ni ácidos para la limpieza.

IV Superficie del asiento

- Limpie uniformemente la superficie del asiento con un limpiador especial para cuero y, a continuación, pásele un paño limpio y suave.

Mantenimiento:

1. Limpieza diaria

Quitar el polvo con un paño suave y seco.

2. Eliminación de la suciedad persistente

Como sabe, es difícil eliminar la suciedad persistente con un paño seco normal. En este caso, utilice primero un paño suave con detergente neutro diluido y, a continuación, pase un paño seco.

3. Está prohibido el uso de benceno, diluyentes, gasolina u otros disolventes.

Estos agentes pueden dañar la piel o corroer el producto.

4. Condiciones de almacenamiento y funcionamiento

No exponga el producto a la luz solar intensa ni a la humedad. De lo contrario, el producto podría resultar dañado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

El aparato es un equipo profesional para uso en cirugías estéticas. El manejo del aparato sólo por personal cosmético cualificado evita efectos indeseables durante el tratamiento.

El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en estas instrucciones de uso. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por un técnico autorizado (empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, en lugares húmedos o con las manos mojadas, para que no penetren líquidos en el aparato.

Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o. en los siguientes casos

- (a) ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o emite sonidos extraños, c) se ha dañado el cable de alimentación, d) se ha volcado el aparato o se ha dañado su carcasa.

No coloque objetos sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.

Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación cada vez que termine de trabajar con el aparato.

No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si se introduce un objeto extraño en la abertura, desenchufe el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.

No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.

Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda respetar un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).

La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

PRECAUCIÓN:

En caso de daños en el cable de alimentación u otras anomalías de funcionamiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado; de este modo evitará cualquier peligro.

Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y con falta de experiencia y conocimiento del equipo, si se proporciona supervisión o instrucciones sobre cómo utilizar el equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.

El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.

No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.

Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y guardarse fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL APARATO



Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en centros de reciclaje de acuerdo con los principios de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben desecharse en los contenedores de basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Con el fin de proteger el medio ambiente, de conformidad con la Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos y electrónicos usados deben recogerse por separado y entregarse en los centros de reciclaje.

eléctricos usados deben recogerse por separado y entregarse en los siguientes puntos de recogida

recogida de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. Al final de su vida útil, los aparatos viejos contienen componentes totalmente reciclables y, por lo tanto, deben entregarse para su reprocesamiento. Por lo tanto, deben ser entregados a los puntos de recogida adecuados, así como a ACTIVESHOP Ltd.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El aparato debe transportarse a temperaturas comprendidas entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. Almacene el aparato en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el dispositivo no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.