

ACTIVESHOP®

GEBRUIKSAANWIJZING

Cosmetische fauteuil hyd. A 210



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polen

www.activeshop.com.pl Rev.

A/03/2025

Scannen
voor
verschillen
de talen




Afmetingen:




Montage:


1. Schroef de actuator op de basis
2. Duw het lipje op de actuatorstang naar binnen
3. Plaats de afdekking.
4. Schuif het lipje op de actuatorstang naar de positie aan de buitenkant van de stang
5. Plaats de zitting op de actuator
6. Vastzetten met schroeven
7. Bevestig de beugels in de rugleuning en zitting

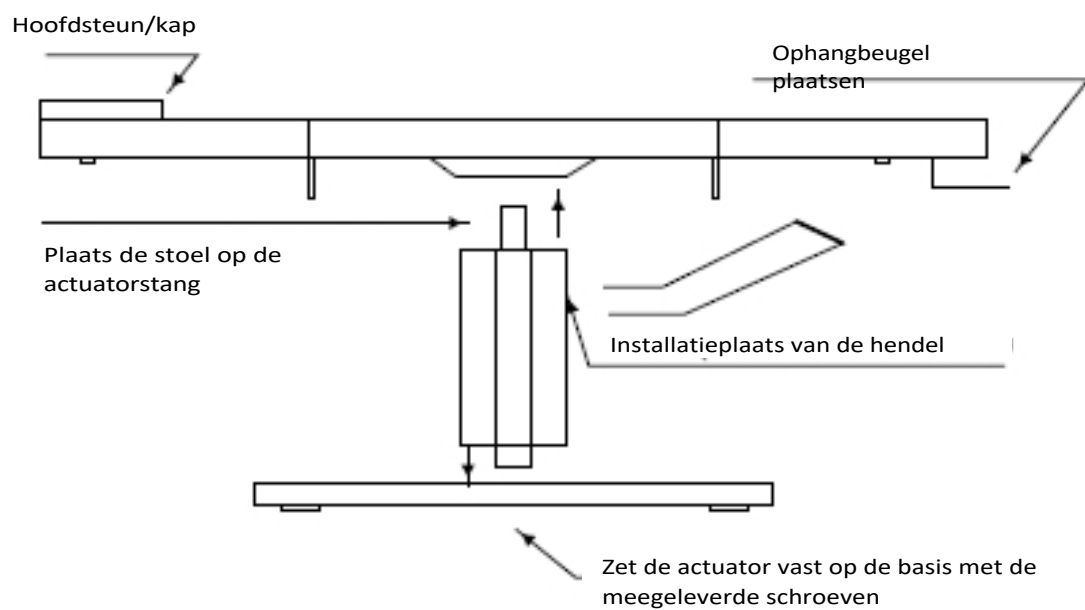

Bedieningshendel:

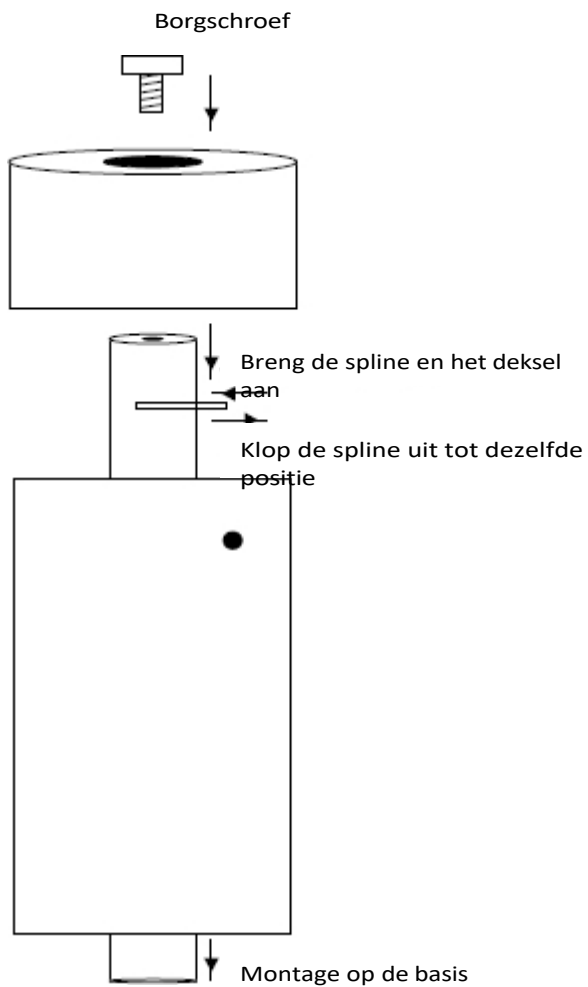

De beugel installeren

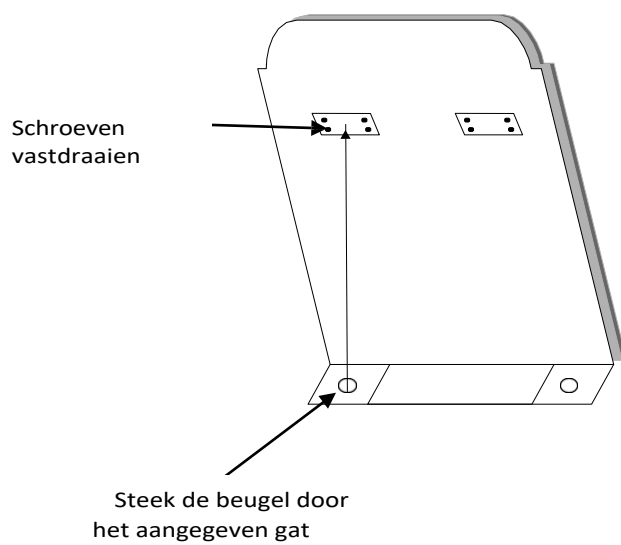

Functies van de stoel:

- Stoel verhogen: zet de stoel omhoog door op de hendel te drukken.
- Zitting laten zakken: druk naar beneden totdat de zitting helemaal naar beneden komt
- Zitvergrendeling: til de hendel zo ver mogelijk omhoog

Voorzichtig

Ga niet abrupt zitten en gooi uw gewicht niet op de stoel. Het is verboden de stoel te verplaatsen of te dragen terwijl er personen of lasten op staan. Ga niet met uw voeten of knieën op de stoel staan, schommel niet, ga niet op de armleuningen zitten en ga niet op meer dan één persoon zitten.

Het apparaat reinigen en desinfecteren

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.

Maak het zitoppervlak regelmatig schoon om het in goede staat te houden. Vergeet niet om de stoel na elk gebruik te reinigen en te desinfecteren. Wij raden aan de stoel één keer per maand grondig te desinfecteren.

I Metalen en kunststof oppervlakken

Veeg metalen en kunststof oppervlakken en bedieningselementen schoon met een vochtige doek. Om moeilijk bereikbare plaatsen of hoeken schoon te maken, werkt een kleine borstel goed. Gebruik niet te veel vloeistof om het apparaat schoon te maken. Desinfecteer het apparaat vervolgens met een geschikte vloeistof.

II Oppervlakken van roestvrij staal

Schoonmaken met een mild schoonmaakmiddel werkt het beste. Ammoniak en de meeste oplosmiddelen kunnen worden gebruikt om hardnekkige vlekken te verwijderen. Vermijd chloorhoudende oplossingen.

III Geverfde of verchromde metalen oppervlakken

- Gebruik geen waterstralen (douches, hogedrukwaterkanonnen) voor het reinigen.
- Reinig niet bij hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid en stel het apparaat niet bloot aan omstandigheden die kunnen leiden tot verontreiniging door vloeistoffen.
- Gebruik geen oplosmiddelen of zuren voor het reinigen.

IV Oppervlak van de zitting

- Veeg het oppervlak van de stoel gelijkmatig af met een speciale leerreiniger en veeg het vervolgens af met een schone, zachte doek.

Onderhoud:

1. **Dagelijks schoonmaken**

Stof verwijderen met een zachte, droge doek.

2. **Hardnekkig vuil verwijderen**

Zoals je weet, is het moeilijk om hardnekkig vuil te verwijderen met een normale droge doek. Gebruik in dit geval eerst een zachte doek met verdund neutraal reinigingsmiddel en veeg het daarna af met een droge doek.

3. **Het gebruik van wasbenzine, verdunners, benzine of andere oplosmiddelen is verboden.**

Deze middelen kunnen de huid beschadigen of het product aantasten.

4. **Opslag- en gebruiksomstandigheden**

Stel het product niet bloot aan sterk zonlicht of vocht. Doet u dit niet, dan kan het product beschadigd raken.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik bij cosmetische ingrepen. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste effecten tijdens de behandeling.

Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegde servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP L t d.).

Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.

Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service van ACTIVESHOP Ltd:

(a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden,

c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.

Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan gaan staan.

Haal om veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.

Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.

Plaats het apparaat niet op een wankel karretje, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.

Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van een minuut aan te houden voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).

De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring met en kennis van de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden of instructies worden gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.

De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.

Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en opgeborgen.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsprincipes. Elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moeten gebruikte

elektrische apparatuur apart worden ingezameld en afgegeven bij de volgende inzamelpunten

inzameling van afgedankte elektronische en elektrische apparatuur. Aan het einde van hun levensduur bevatten oude apparaten volledig recycleerbare onderdelen en moeten ze dus worden ingeleverd voor herverwerking. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en bij ACTIVESHOP Ltd.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij temperaturen tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.