

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>

## NAVODILA ZA UPORABO

Kozmetični fotelj hyd. A 210



**Uvoznik:**

z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Poljska

[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)

Rev. A/03/2025

Skeniranj  
e za  
različne  
jezike




## Dimenzije:




## Montaža:


1. Privijajte aktuator na podstavek.
2. Zavihek na stebli aktuatorja potisnite navznoter
3. Namestite pokrov.
4. Zavihek na stebli aktuatorja potisnite v položaj na zunanji strani stebila.
5. namestite sedež na aktuator
6. Privijte z vijaki.
7. Namestite nosilce v naslonjalo in sedež.

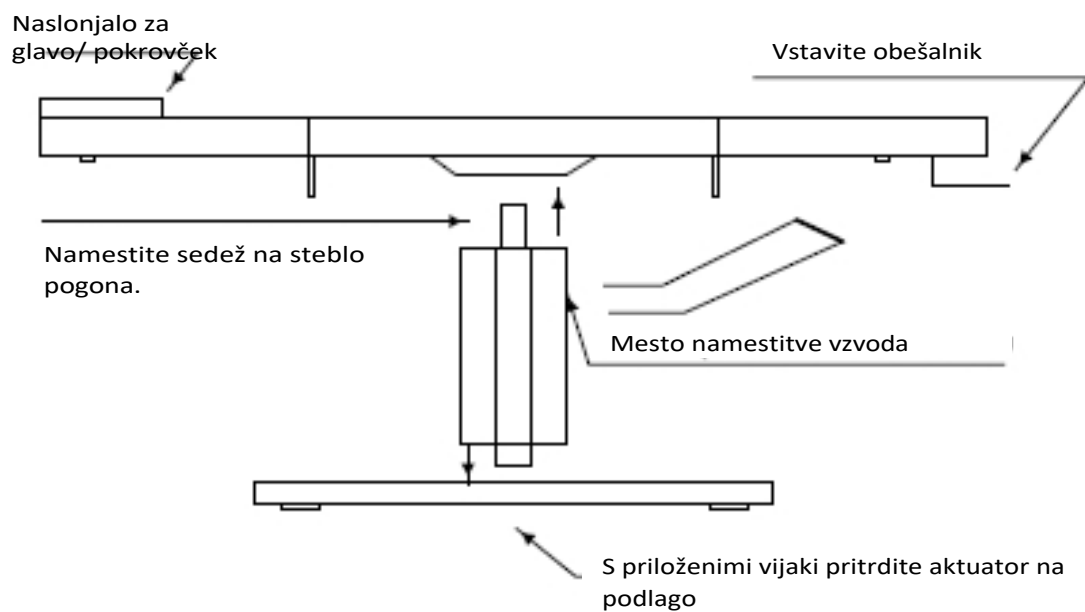

## Aktuator:

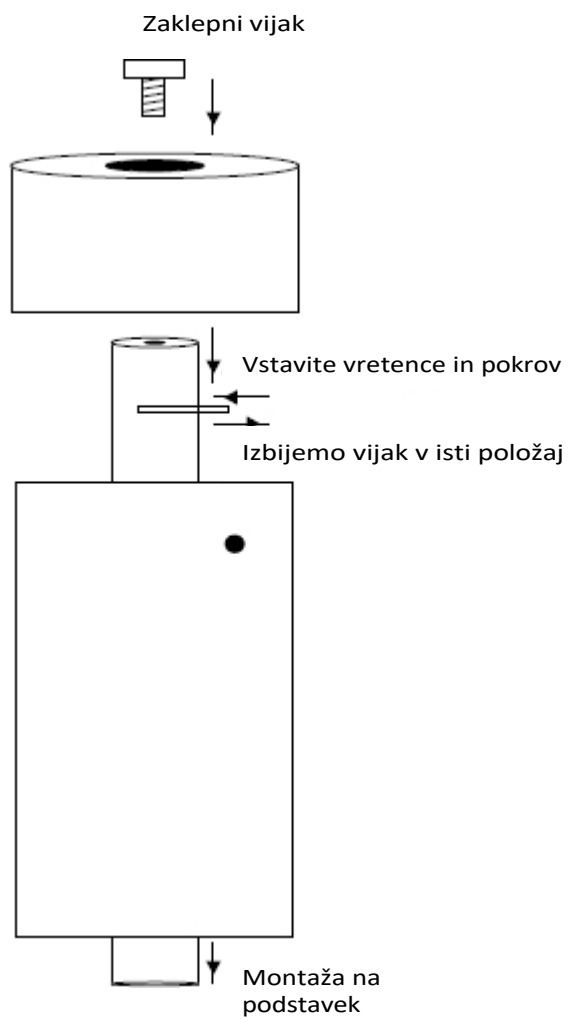

## Namestitev nosilca

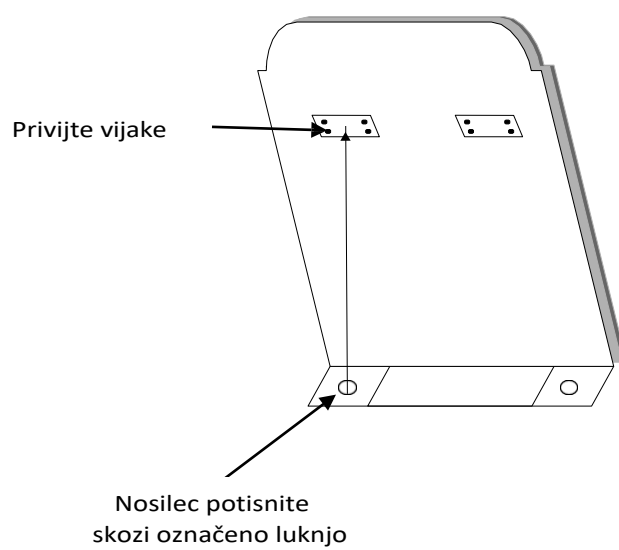

## **Funkcije sedeža:**

- dvig sedeža: s pritiskom na vzvod dvignite sedež
- spuščanje sedeža: pritisnite na ročico, dokler se sedež popolnoma ne spusti
- Blokada obračanja sedeža: dvignite vzvod čim bolj navzgor.

## **Opozorilo:**

Ne sedite nenadoma in ne mečite teže na sedež. Prepovedano je premikati ali prenašati stol, ko so na njem ljudje ali bremena. Na stolu ne stojte z nogami ali koleni, se ne zibajte, ne sedite na naslonjalih za roke in ne sedite na več kot eni osebi.

## **Čiščenje in razkuževanje enote:**

Pred čiščenjem enoto izključite iz električnega omrežja.

Da bi ohranili površino sedeža v dobrem stanju, jo redno čistite. Ne pozabite očistiti in razkužiti stola po vsaki uporabi. Priporočamo, da temeljito razkuževanje opravite enkrat na mesec.

## **I Kovinske in plastične površine**

Kovinske in plastične površine ter upravljalne elemente očistite tako, da jih obrišete z vlažno krpo. Za čiščenje težko dostopnih območij ali kotov se dobro obnese majhna krtača. Za čiščenje naprave ne uporabljajte preveč tekočine. Nato aparat razkužite z ustrezno tekočino.

## **II Površine iz nerjavečega jekla**

Najbolje se obnese čiščenje z blago raztopino detergenta. Za odstranjevanje težkih madežev lahko uporabite amoniak in večino topil. Izogibajte se raztopinam na osnovi klora.

## **III Lakirane ali kromirane kovinske površine**

- Za čiščenje ne uporabljajte vodnih curkov (prhe, visokotlačni vodni topovi).
- Ne čistite pri visokih temperaturah in visoki vlažnosti, enote ne izpostavljajte pogojem, ki bi lahko povzročili onesnaženje s tekočino.
- Za čiščenje ne uporabljajte topil ali kislin.

## **IV Površina sedeža**

- Površino sedeža enakomerno obrišite s posebnim čistilom za usnje in jo nato obrišite s čisto, mehko krpo.

## **Vzdrževanje:**

### **1. Vsakodnevno čiščenje**

Odstranjevanje prahu z mehko, suho krpo.

### **2. Odstranjevanje trdovratne umazanije**

Kot veste, je trdovratno umazanijo težko odstraniti z običajno suho krpo. V tem primeru najprej uporabite mehko krpo z razredčenim nevtralnimi čistilnim sredstvom in nato obrišite s suho krpo.

### **3. Uporaba benzena, razredčil, bencina ali drugih topil je prepovedana.**

Ta sredstva lahko poškodujejo kožo ali razjedajo izdelek.

### **4. Pogoji skladiščenja in delovanja**

Izdelka ne izpostavljajte močni sončni svetlobi ali vlagi. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb izdelka.

## **VARNOSTNI UKREPI**

Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih ordinacijah. Z napravo lahko upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, s čimer se izognete neželenim učinkom med zdravljenjem.

Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih za uporabo. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščen servis (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, na mokrih mestih ali z mokrimi rokami - tako, da v napravo ne pridejo tekočine.

V naslednjih primerih napravo takoj izključite iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis, ki ga zagotavlja podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.:

(a) v napravo je vstopila tekočina, (b) naprava oddaja nenavaden vonj, dim ali nenavadne zvoke,

c) je poškodovan napajalni kabel, d) se je naprava prevrnila ali je bilo poškodovano njeno ohišje.

Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.

Zaradi varnosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z aparatom.

V odprtino aparata ne vstavljajte nobenih predmetov. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.

Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko ob padcu poškoduje.

Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) ohranite interval ene minute.

Napajalnik mora ustrezati specifikacijam, navedenim na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se naprava pokvari, poškoduje ali celo pregoreva.

## **POZOR:**

V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.

To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.

Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.

Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe brez zadostnega znanja o uporabi naprave.

Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

## ODSTRANJEVANJE NAPRAVE



Uporabljene električne naprave, napeljave in embalažo odstranite v centrih za recikliranje v skladu z načeli varstva okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnike za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi, je treba izrabljeno

električno opremo je treba zbirati ločeno in jo oddati na naslednjih zbirnih mestih

zbiranje odpadne elektronske in električne opreme. Stare naprave po koncu življenjske dobe vsebujejo komponente, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v predelavo. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in družbi ACTIVESHOP Ltd.

## SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturi od (-) 20 °C do (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Napravo shranjujte v dobro prezračenem prostoru z relativno vlažnostjo zraka največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.