

ACTIVESHOP[®]

BRUKSANVISNING

Kosmetisk fåtölj hyd. A 210



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polen

www.activeshop.com.pl

Rev. A/03/2025

Skanna
för olika
språk




Dimensioner:




Montering:


1. Skruva fast manöverdonet på basen
2. Skjut fliken på ställdonets spindel inåt
3. Montera locket.
4. Skjut fliken på ställdonets spindel till läget på utsidan av spindeln
5. Montera sätet på ställdonet
6. Dra åt med skruvar
7. Montera fästena i ryggstöd och sits

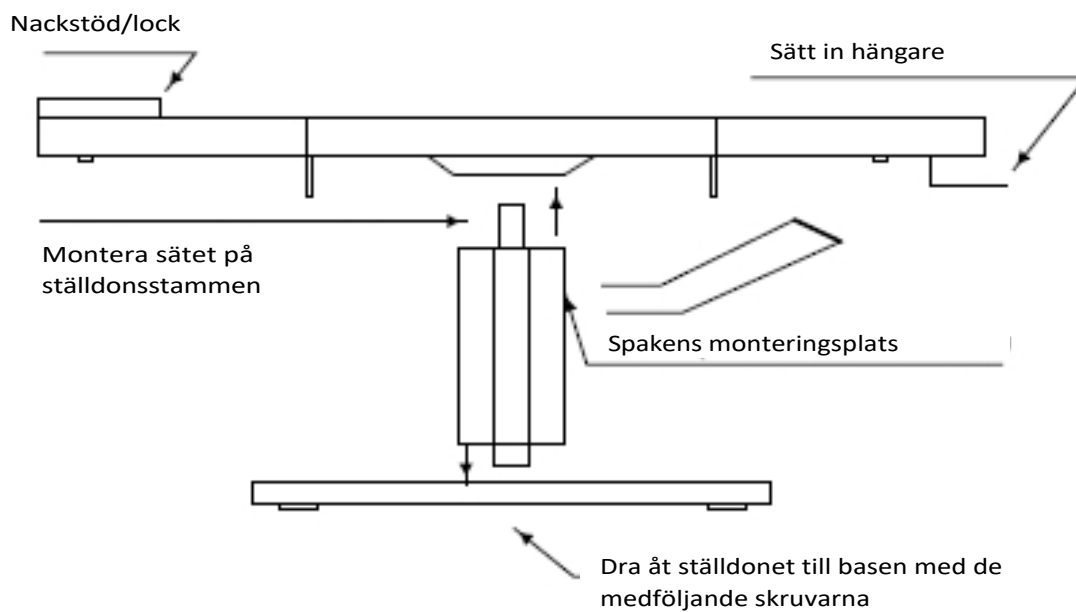

Manöverdon:

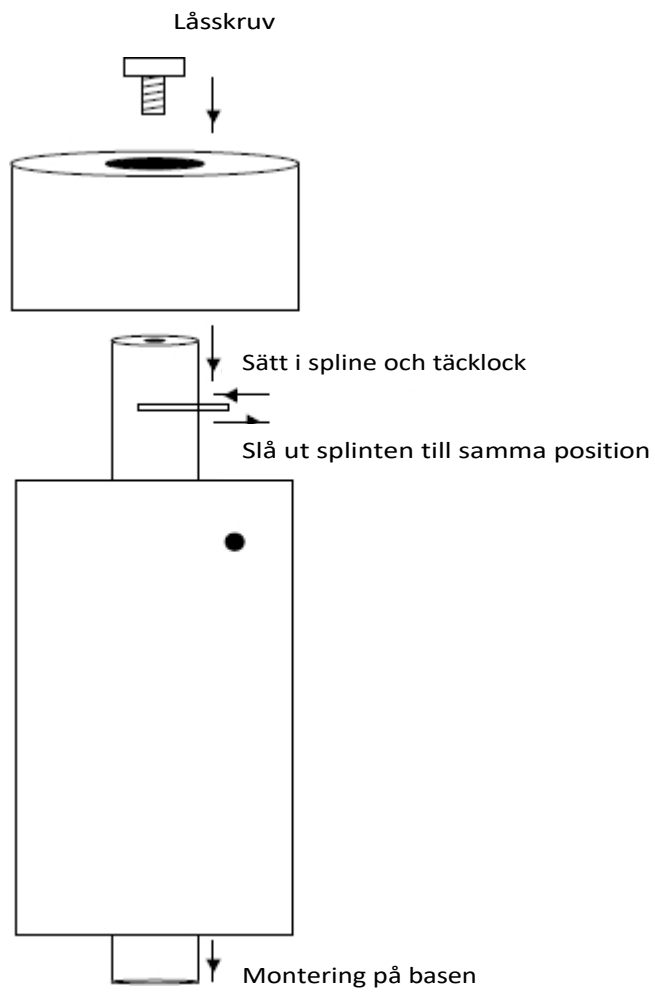

Montering av konsolen

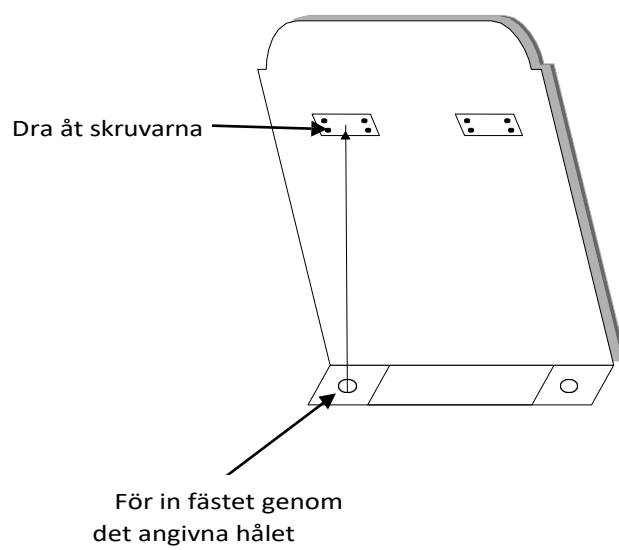

Funktioner för sitsen:

- Höja sitsen: höj sitsen genom att trycka på spaken
- Sänka sitsen: tryck nedåt tills sitsen sjunker helt
- Sätets rotationsspärr: lyft spaken så långt upp som möjligt

Försiktighetsåtgärd

Sitt inte plötsligt och lägg inte din vikt på sitsen. Det är förbjudet att flytta eller bära stolen när personer eller last befinner sig på den. Stå inte på stolen med fötterna eller knäna, gunga inte, sitt inte på armstöden och sitt inte på mer än en person.

Rengöring och desinficering av enheten:

Koppla ur enheten före rengöring.

För att hålla sittytan i gott skick bör du rengöra den regelbundet. Kom ihåg att rengöra och desinficera stolen efter varje användning. Vi rekommenderar att du utför en grundlig desinfektion en gång i månaden.

I Metall- och plastytor

För att rengöra ytor och reglage av metall och plast, torka av dem med en fuktig trasa. För att rengöra svåråtkomliga områden eller hörn fungerar en liten borste bra. Använd inte för mycket vätska för att rengöra apparaten. Desinficera sedan apparaten med en lämplig vätska.

II Ytor av rostfritt stål

Rengöring med ett mildt rengöringsmedel fungerar bäst. Ammoniak och de flesta lösningsmedel kan användas för att ta bort svåra fläckar. Undvik klorbaserade lösningar.

III Målade eller förkromade metallytor

- Använd inte vattenstrålar (duschar, högtrycksvattenkanoner) för rengöring.
- Rengör inte i höga temperaturer och hög luftfuktighet, utsätt inte enheten för förhållanden som kan leda till vätskekontaminering.
- Använd inte lösningsmedel eller syror för rengöring.

IV Sitsens yta

- Torka sitsens yta jämnt med ett speciellt läderrengöringsmedel och torka sedan av den med en ren, mjuk trasa.

Underhåll:

1. **Daglig rengöring**

Avlägsna damm med en mjuk, torr trasa.

2. **Avlägsnande av envis smuts**

Som du vet är det svårt att få bort envis smuts med en vanlig torr trasa. Använd i så fall först en mjuk trasa med utspätt neutralt rengöringsmedel och torka sedan med en torr trasa.

3. **Det är förbjudet att använda bensen, thinner, bensin eller andra lösningsmedel.**

Dessa medel kan skada huden eller korrodera produkten.

4. **Förvaring och driftförhållanden**

Utsätt inte produkten för starkt solljus eller fukt. Om du inte gör det kan produkten skadas.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Apparaten är en professionell utrustning för användning vid kosmetiska operationer. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade effekter under behandlingen undvikas.

Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i apparaten.

Dra omedelbart ut stickkontakten ur eluttaget och kontakta ACTIVESHOP Ltd.:s auktoriserade serviceverkstad i följande fall

(a) vätska har trängt in i apparaten, (b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud,

c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts eller dess hölje har skadats.

Placera inga föremål på kablarna. Installera inte apparaten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.

Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med apparaten.

För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.

Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.

För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderas ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).

Strömförsörjningen måste överensstämja med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

Om nätsladden skadas eller om det uppstår andra fel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du faror.

Denna apparat får användas av barn från 8 års ålder och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och bristande erfarenhet och kunskap om utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.

Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.

Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.

Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter

Elektrisk utrustning samlas in separat och lämnas till följande samlingsställen

Insamling av avfall som utgörs av eller innehåller elektronisk eller elektrisk utrustning. Gamla apparater som är uttjänta innehåller komponenter som kan återvinnas helt och hållet och bör därför lämnas in för upparbetning. Därför ska de lämnas till lämpliga samlingsställen och till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Apparaten får endast transporteras i sin originalförpackning vid en temperatur på (-) 20 °C till (+) 50 °C. Förvara apparaten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.