

ACTIVESHOP®

GEBRAUCHSANWEISUNG


Sillon Classic 4 motorischer elektrischer Kosmetikstuhl mit Wiege

Modell: C501A



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

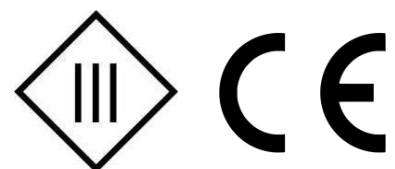

***BEVOR SIE DIESES PRODUKT BENUTZEN, LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG*.**


Diese Anleitung enthält ausführliche Informationen über den Betrieb und die Wartung des Geräts. Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie die beiliegende Anleitung. Verwenden Sie das Gerät wie beschrieben. Bewahren Sie diese Anleitung auf und sorgen Sie dafür, dass alle Personen, die das Gerät benutzen könnten, mit ihr vertraut sind.

Der elektrische Kosmetikstuhl Sillon ist ein professionelles Gerät, das sich perfekt für jeden Schönheitssalon eignet. Er ist ideal für Massagen, kosmetische und auch physiotherapeutische Behandlungen. Der Sessel wurde so konzipiert, dass man während der Behandlung bequem darauf liegen kann. Der Sessel besteht aus vier Teilen und einem abnehmbaren Kissen. An beiden Seiten des Sessels befinden sich Griffe, an denen die Fernbedienung aufgehängt werden kann, so dass sie immer griffbereit ist.

Belastbarkeit des Produkts: 150 kg


Die maximale Tragfähigkeit des Sitzkörpers beträgt 150 kg. Heben Sie nicht mehr als das angegebene Gewicht, das der Sitz tragen kann.

Springen Sie nicht auf die Rückenlehne und üben Sie keinen starken Druck auf die Armlehnen aus, um die Struktur des Produkts nicht zu beschädigen.

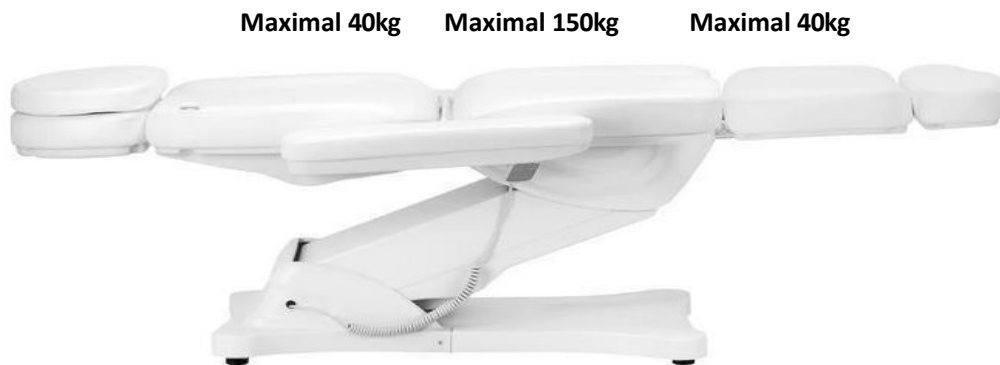

Hinweis

Für die Verpackung werden Pappe und Umkartons mit insgesamt 10 Papierschichten verwendet, um den Schutz Ihrer Produkte zu gewährleisten. Wir empfehlen, die Originalverpackung für eine spätere Verwendung aufzubewahren, insbesondere für Rücksendungen während der Garantiezeit. Aus Sicherheitsgründen sind zwei Personen erforderlich, um den Stuhl aus dem Karton zu heben. Stellen Sie sich beim Anheben auf beide Seiten der Kopf- und Fußstütze des Stuhls. Denken Sie daran, dass der Sessel nur von der Kopf- und Fußstütze aus angehoben werden kann, nicht von einer der beiden Seiten der Armlehnen.

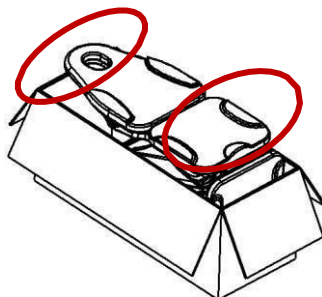

Vergewissern Sie sich vor der Benutzung des Sessels, dass die Verpackung unversehrt ist und während des Transports nicht beschädigt wurde. Sollte es ein Problem geben, benachrichtigen Sie bitte das Transportunternehmen oder den Kundendienst innerhalb von 2 Tagen nach Erhalt des Geräts. Vergewissern Sie sich, dass alle Zubehörteile zum Zeitpunkt der Lieferung vollständig sind. Wenn Sie bei der Lieferung feststellen, dass Zubehörteile fehlen, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Kundendienst.


Der elektrische Kosmetikstuhl muss in geschlossenen, trockenen Räumen verwendet werden. Die Temperatur im Raum sollte zwischen $+10^{\circ}$ und -40° und die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 30% und 75% liegen. Wenn der elektrische Kosmetikstuhl Temperaturen unter 0° ausgesetzt war, warten Sie mindestens 5 Stunden, bevor Sie ihn benutzen, damit das Gerät Zeit hat, Raumtemperatur zu erreichen.

Bevor Sie den elektrischen Kosmetikstuhl benutzen, lesen Sie die Gebrauchsanweisung und führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Verpackungsmaterialien entfernt worden sind.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Stuhl funktionstüchtig ist.
3. Stellen Sie den elektrischen Kosmetikstuhl an den Ort, an dem er benutzt werden soll.
4. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.

Achtung! Kinder und unerfahrene Personen dürfen dieses Gerät nicht benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden und dürfen nicht in der Nähe des elektrischen Kosmetikstuhls spielen. Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen den Netzstecker und lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Ziehen Sie auch das Netzkabel aus der Steckdose.

Abmessungen des Geräts:

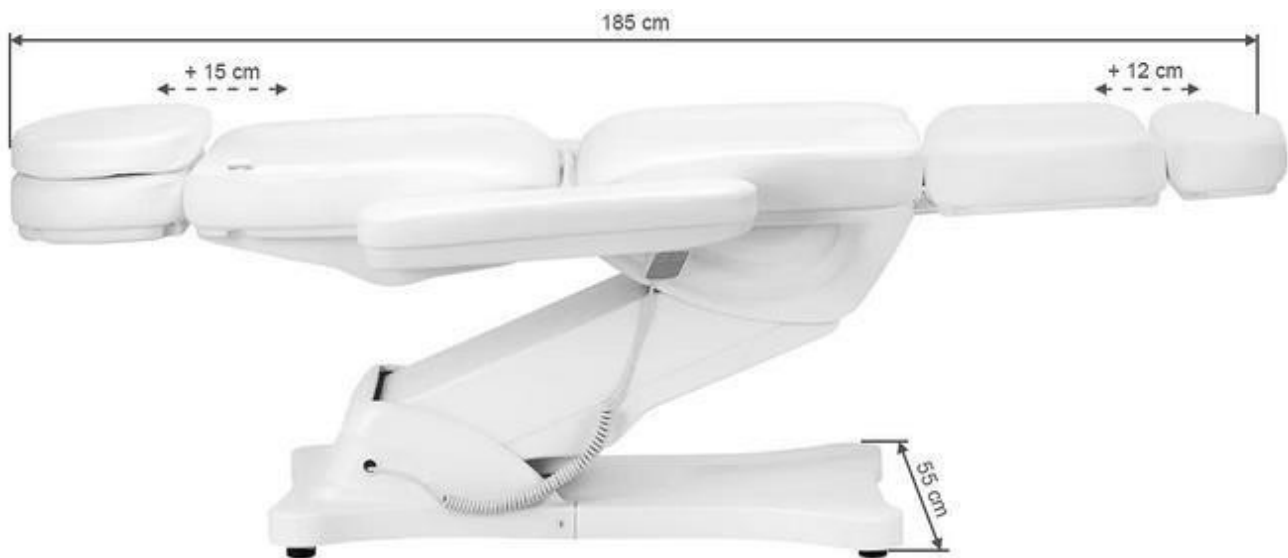



Aufbau des Geräts:

Polsterung

Kopfstütze

Rückenlehne

Armlehne

Sitz

Fußstütze

Hebevorrichtung

Kunststoffsockel



Warnung

1. Die Fußstütze ist nicht dafür ausgelegt, das volle Gewicht eines Erwachsenen zu tragen.
2. Setzen Sie sich nicht direkt auf die Armlehne und die Fußstütze.
3. Verwenden Sie den elektrischen gynäkologischen Untersuchungsstuhl nicht in der Nähe von brennbaren Gasen.
4. Heben Sie nicht mehr Gewicht, als der Stuhl tragen kann.
5. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen den Steckdosen nicht mehr als 2 Meter beträgt.

Vorsicht

1. Schließen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen immer an eine geerdete Steckdose an.
2. Binden Sie das Netzkabel nicht an das Gerät. Durch Anheben oder Ziehen am Netzkabel kann dieses beschädigt werden. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel in einer Notsituation leicht entfernt werden kann.
3. Ziehen Sie das Netzkabel heraus, bevor Sie den elektrischen Kosmetiksessel bewegen, damit es nicht zwischen Teilen des Sessels eingeklemmt wird.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, ziehen Sie sofort das Kabel ab, benutzen Sie den Stuhl nicht und wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundendienstzentrum. Verwenden Sie nur das Original-Netzkabel.
5. Lassen Sie nicht zu, dass eine Person, die die Behandlung nicht durchführt, die Fernbedienung bedient.
6. Stellen Sie keine Gegenstände unter den Sitz.
7. Vergewissern Sie sich, dass um den Sitz herum genügend Freiraum vorhanden ist, damit er frei ein- und ausgeklappt werden kann.
8. Vergewissern Sie sich, dass sich keine scharfen oder schädlichen Gegenstände in der Nähe des Sitzes befinden, die das Gerät beschädigen könnten.
9. Nehmen Sie keine eigenen Änderungen am Gerät vor. Wenn der Stuhl nicht ordnungsgemäß funktioniert, verwenden Sie ihn nicht mehr und wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum.

Benutzung des Geräts:


1. Schließen Sie das Netzkabel an die externe Stromversorgung 110V~240V an.

Installationsmethode der Armlehne:


Der Sitz muss sich in einer horizontalen Position befinden, damit die Armlehnen angebracht werden können. Schieben Sie die Armlehne in das Loch an der Seite der Rückenlehne. Die Armlehne muss fest sitzen. Drehen Sie sie nach rechts oder links, damit sie richtig einrastet. Verfahren Sie mit der anderen Armlehne genauso. Die Armlehne steht senkrecht zum Boden (unabhängig von der Neigung des Sitzes). Sie kann um 180° gedreht werden.




2. Manuelle Steuerungsfunktion (Hubhöhe: 58~ 82 cm vom Boden)

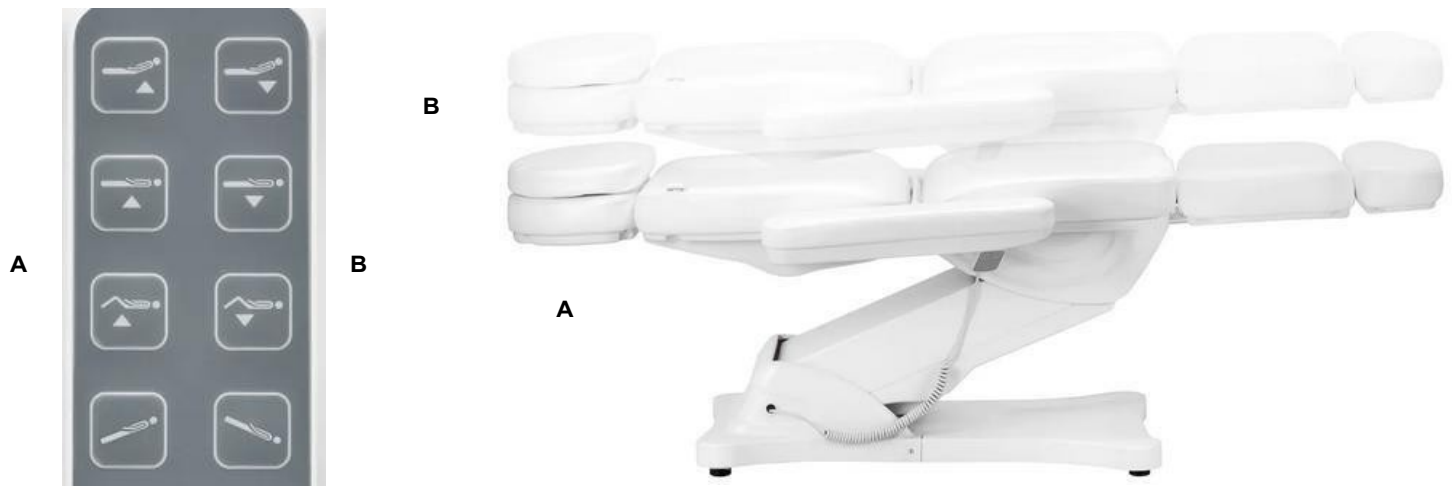

3. Manuelle Steuerfunktion (Rückenaneigungswinkel 0-80 °, Beineigungswinkel 0-90 °)

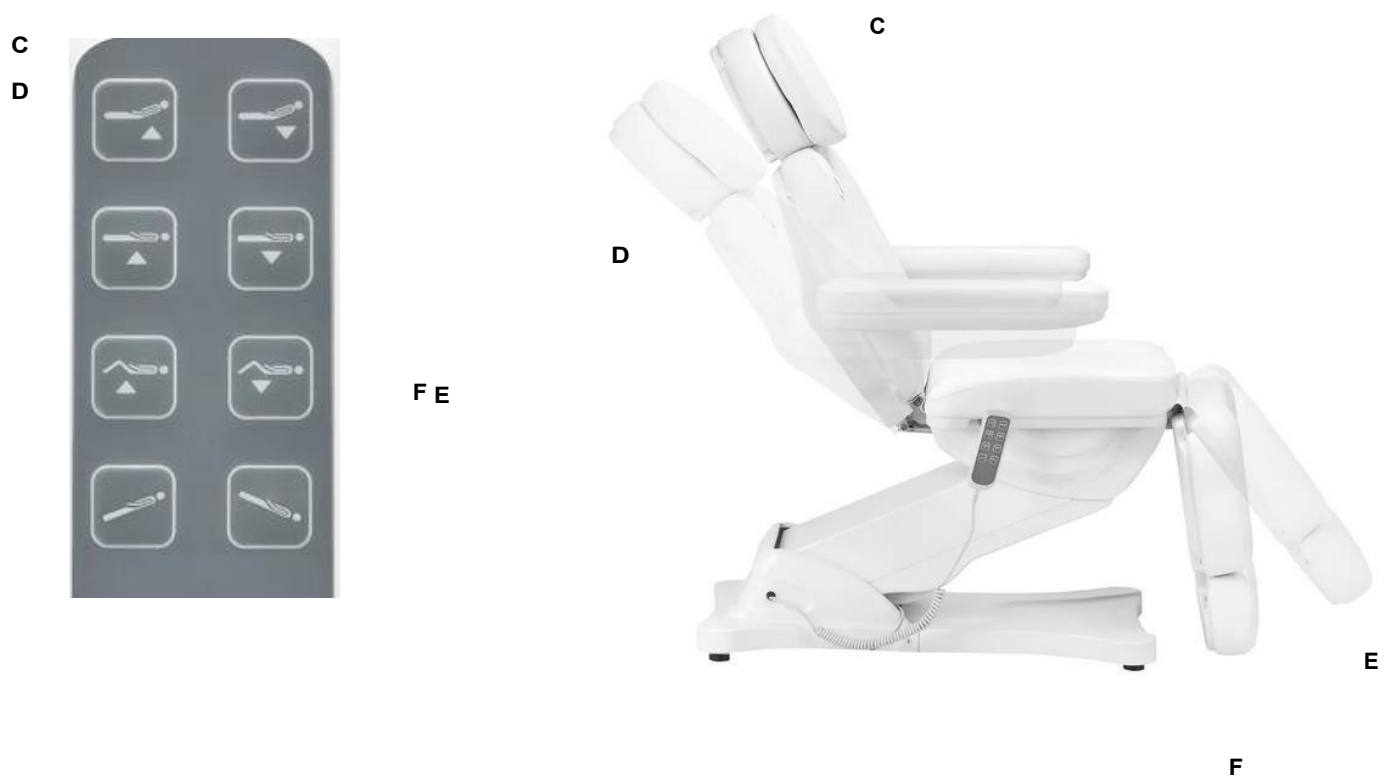

4. Einziehbare Fußstütze (Fußstütze, Länge: 0~ 12cm)

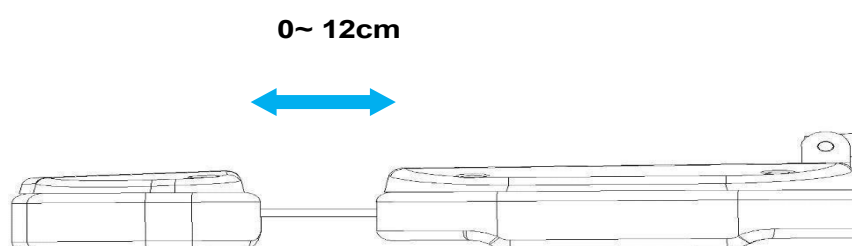

5. Wiegefunktion (die Sitzfläche des Stuhls kann angewinkelt werden - eine sogenannte Wiege. Wenn die Rückenlehne abgesenkt und die Fußstütze angehoben wird, entsteht eine ebene Fläche.



Reinigung und Desinfektion des Geräts:

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Stuhls regelmäßig, um sie in gutem Zustand zu halten. Denken Sie daran, den Stuhl nach jedem Gebrauch zu reinigen und zu desinfizieren. Wir empfehlen, einmal im Monat eine gründliche Desinfektion durchzuführen.

I Metall- und Kunststoffoberflächen

- Zum Reinigen von Metall- und Kunststoffoberflächen und Bedienelementen wischen Sie diese mit einem feuchten Tuch ab. Für schwer zugängliche Stellen oder Ecken eignet sich eine kleine Bürste.

Bürste funktioniert gut. Verwenden Sie nicht zu viel Flüssigkeit zur Reinigung des Geräts. Desinfizieren Sie das Gerät anschließend mit einer geeigneten Flüssigkeit.

II Oberflächen aus rostfreiem Stahl

- Die Reinigung mit einer milden Spülmittellösung funktioniert am besten. Ammoniak und die meisten Lösungsmittel können zur Entfernung hartnäckiger Flecken verwendet werden. Vermeiden Sie Lösungen auf Chlorbasis.

III Lackierte oder verchromte Metalloberflächen

- Verwenden Sie zur Reinigung keine Wasserstrahlen (Duschen, Hochdruckreiniger).
- Reinigen Sie nicht bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit und setzen Sie das Gerät keinen Bedingungen aus, die zu einer Verunreinigung durch Flüssigkeiten führen können.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel oder Säuren.
- Wischen Sie die Oberfläche des Sitzes gleichmäßig mit einem speziellen Lederreiniger ab und wischen Sie sie anschließend mit einem sauberen, weichen Tuch nach.

Wartung

Trennen Sie das Gerät vor der Wartung vom Stromnetz.

1. Reparaturen sollten von erfahrenem und vom Hersteller autorisiertem Personal durchgeführt werden. Reparaturen durch nicht autorisiertes Personal können zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen, für die der Hersteller nicht verantwortlich ist.
2. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Originalersatzteile.
3. Benutzen Sie den elektrischen Kosmetikstuhl oder das Zubehör nicht, wenn sie nicht ordnungsgemäß funktionieren.
4. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen dokumentiert werden.

Wartungsmaßnahmen

Überprüfen Sie die Bedienelemente und ihre Verkabelung einmal pro Woche. Überprüfen Sie den Zustand und die Funktion der folgenden Teile mindestens einmal pro Halbjahr:

1. Stromkabel und dessen Befestigung
2. Motorverkabelung
3. den Schaltkasten und dessen Verkabelung
4. ob Zubehörteile angebracht sind
5. die normale Funktion des Schließsystems

Wenn Sie Mängel feststellen, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle. Nur erfahrenes oder autorisiertes Personal darf den Antrieb/die Steuereinheit öffnen oder austauschen.

Wenn ein Teil des Geräts beschädigt ist, ziehen Sie den Netzstecker und verwenden Sie es nicht mehr. Wenden Sie sich dann an den Kundendienst.

Fehlersuche

Problem	Lösungsmöglichkeiten
Die manuelle Steuerung reagiert nicht	Prüfen Sie, ob die Schnittstelle für den Anschluss der Handsteuerung lose ist (prüfen Sie, dass kein Problem mit der Leiterplatte vorliegt) und markieren Sie die ursprüngliche Position des Steckers.
Der Motor spricht nicht an	Position des Motorsteckers ändern

Für den Austausch des Schaltkastens und die Bestellung anderer Ersatzteile wenden Sie sich bitte an den Kundendienst und beschreiben Sie das Problem, bevor Sie Kontakt aufnehmen:

1. Modell

2. Datum des Kaufs

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Schönheitssalons. Die Bedienung des Gerätes nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal vermeidet unerwünschte Folgen während der Behandlung.

2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.

3. Installieren oder bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das G e r ä t gelangen.

4. Ziehen Sie in folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst der Firma ACTIVESHOP GmbH:

(a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, (b) das Gerät verströmt einen seltsamen Geruch, raucht oder macht seltsame Geräusche,

c) das Netzkabel wurde beschädigt, d) das Gerät wurde umgestoßen oder sein Gehäuse wurde beschädigt.

5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.

6. Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.

7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.

8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.

9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).

10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines fehlerhaften Beschädigung oder sogar Verbrennung des Geräts. **VORSICHT!**

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen Störung an eine autorisierte Kundendienststelle, um jegliche Gefahr zu vermeiden.


2. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Vertrautheit mit dem Gerät verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen werden, so dass sie die damit verbundenen Risiken verstehen.

3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.

4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe aufhalten.

5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTES

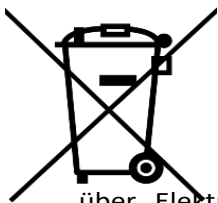

Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Einrichtungsgegenstände und Verpackungen gemäß den Umweltschutzbestimmungen bei Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU

über Elektro- und Elektronik-Altgeräte die Umwelt zu schützen, müssen Elektro-Altgeräte getrennt gesammelt und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden. Altgeräte enthalten vollständig recycelbare Bestandteile und sollten daher der Wiederaufbereitung zugeführt werden. Daher sollten sie bei den entsprechenden Sammelstellen sowie bei ACTIVESHOP Ltd. abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75 %. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.