

ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽITIE

Hydraulické kozmetické kreslo Sillon 210



Dovozca:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Poľsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/05/2025






Vyhľadaj
e rôzne
jazyky




Rozmery:





Montáž:

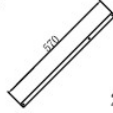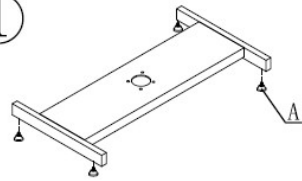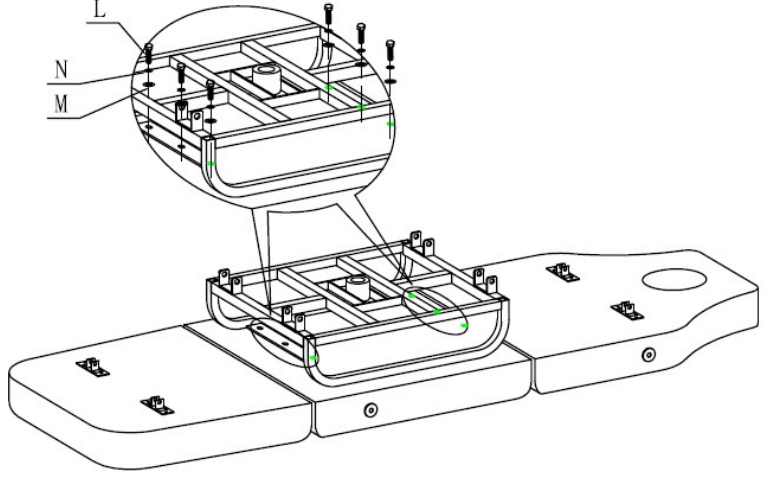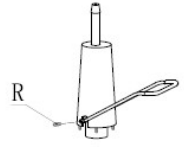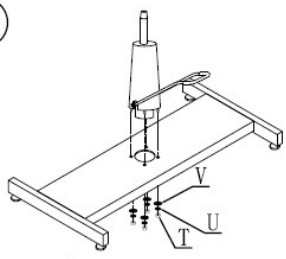A  4pcs	B  M6 4pcs	C  M6X35 4pcs	D  2pcs	E  M5X8 8pcs	F  4pcs	G  2pcs	H  M12X80 4pcs
I  ø12 4pcs	J  M12 4pcs	K  2pcs	L  M8X25 6pcs	M  ø8 6pcs	N  ø8 6pcs	O  M10X25 1pcs	P  ø10 1pcs
Q  ø10 1pcs	R  2pcs	S  1pcs	T  M6 4pcs	U  M6 4pcs	V  M6 4pcs	<div>①</div> 	
<div>④</div> 						<div>②</div> 	
						<div>③</div> 	
						CH-210	


1. Vložte podložky do základne stoličky.
2. Namontujte páku na nastavenie výšky na pohon pomocou komponentu R.
3. Umiestnite valec na základňu stoličky a utiahnite ho pomocou dielov V, U a T.
4. Umístíte kovový rám sedadla na spodnú stranu stoličky a potom ho upevníte pomocou komponentov L, M a N.

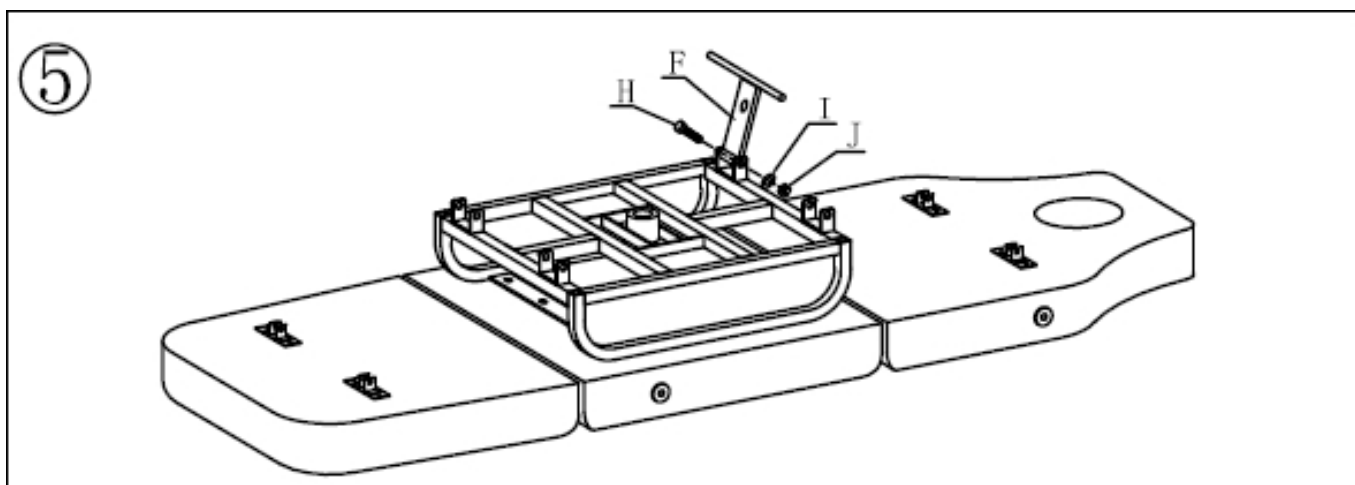


5. Namontujte komponent F a utiahnite ho komponentmi I, J a H.

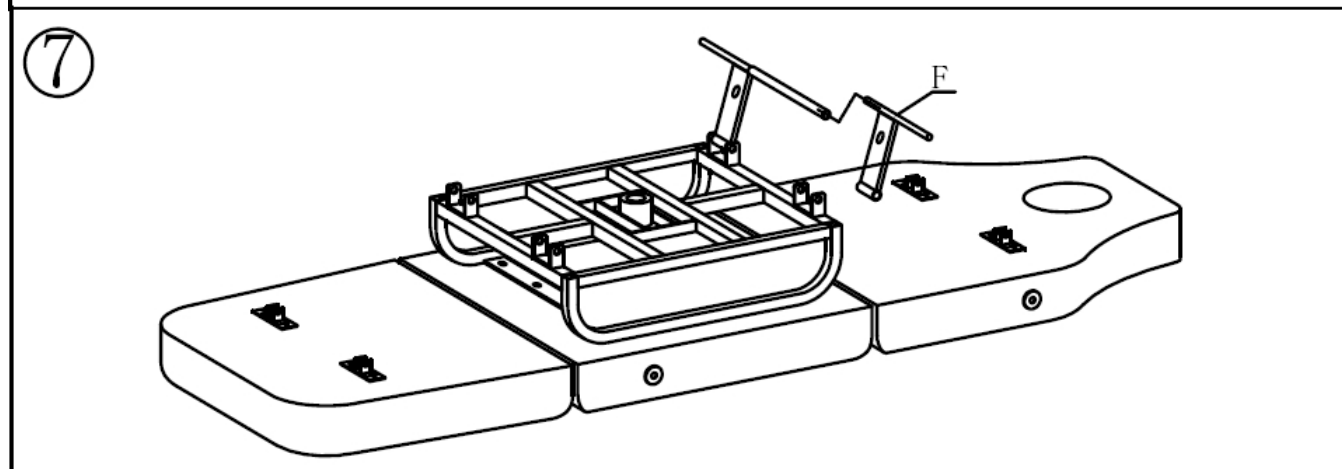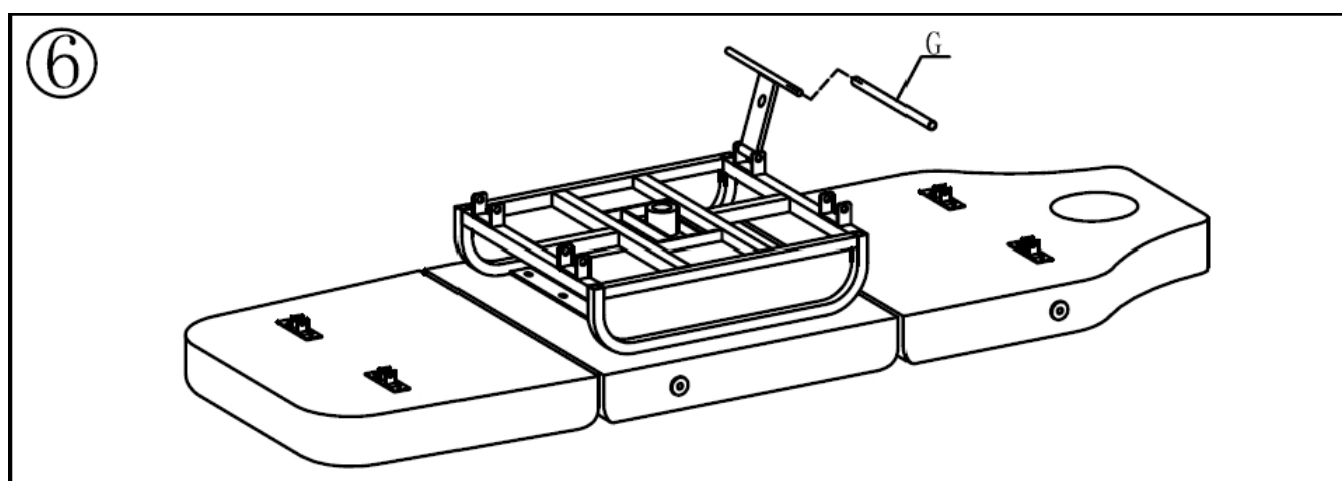


- 6,7. Pomocou komponentu G spojte dva komponenty F.

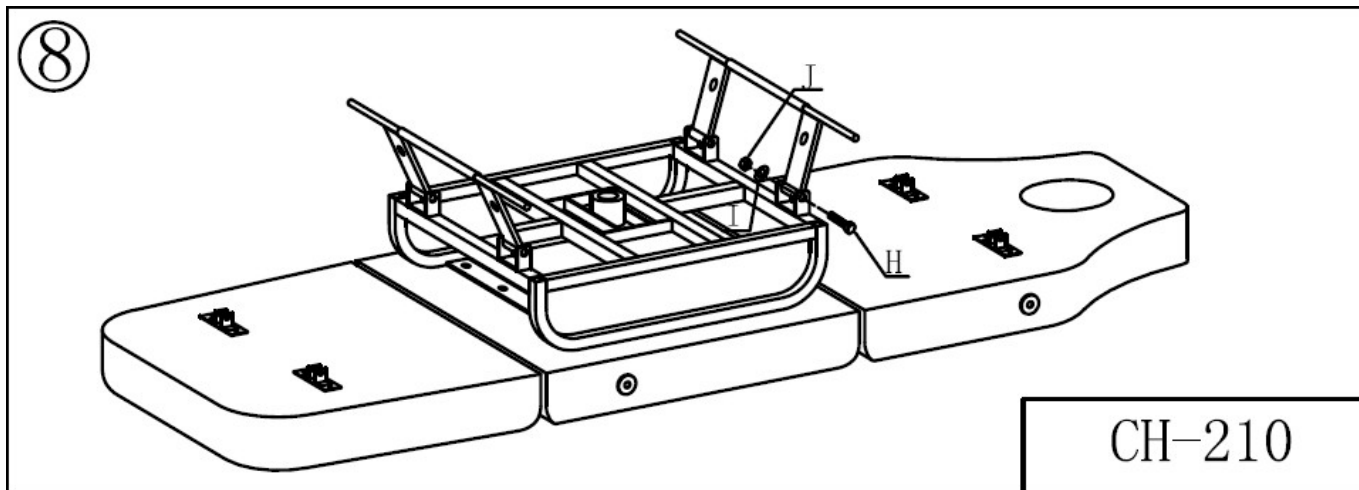

8. Upevnite pomocou prvkov J a H, potom zopakujte na druhej strane.

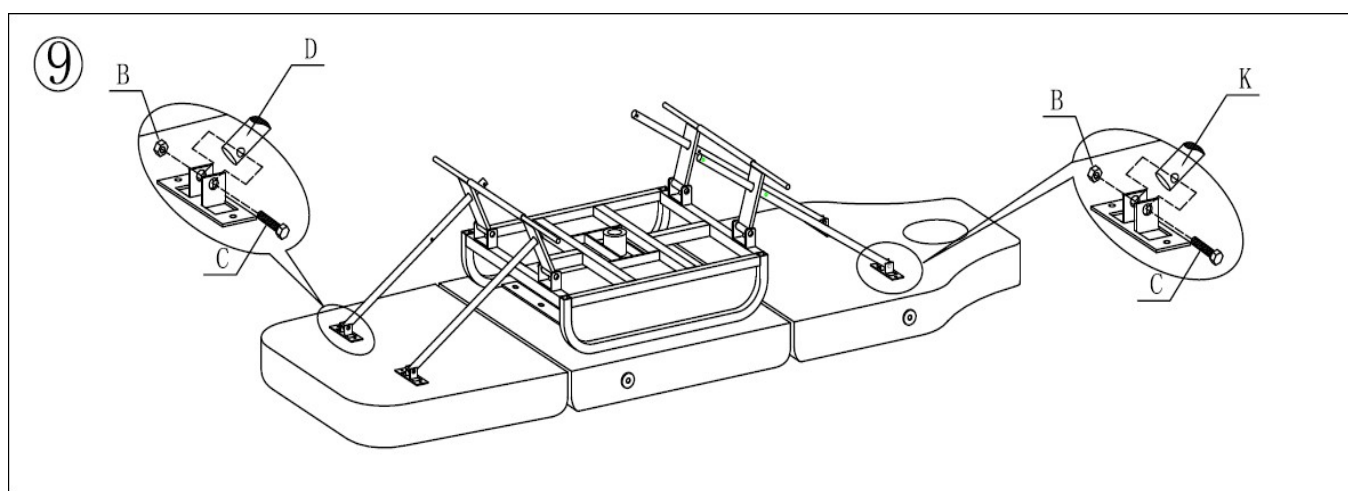


9. Vložte prvky D a K a potom ich pripevnite pomocou B a C.

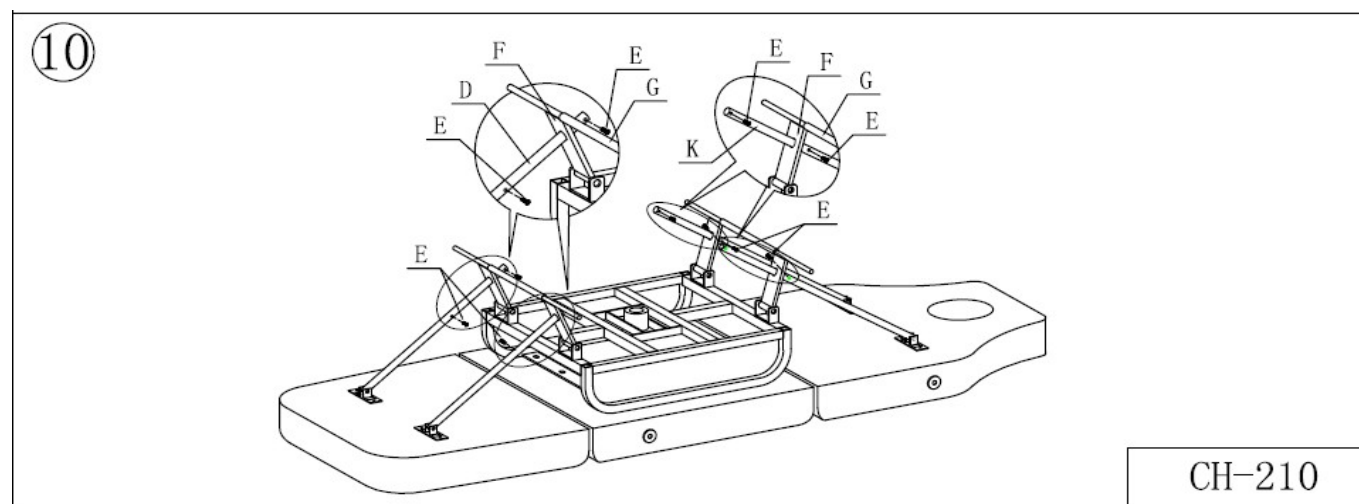


10. Upevnite konzoly pomocou prvkov E.


11

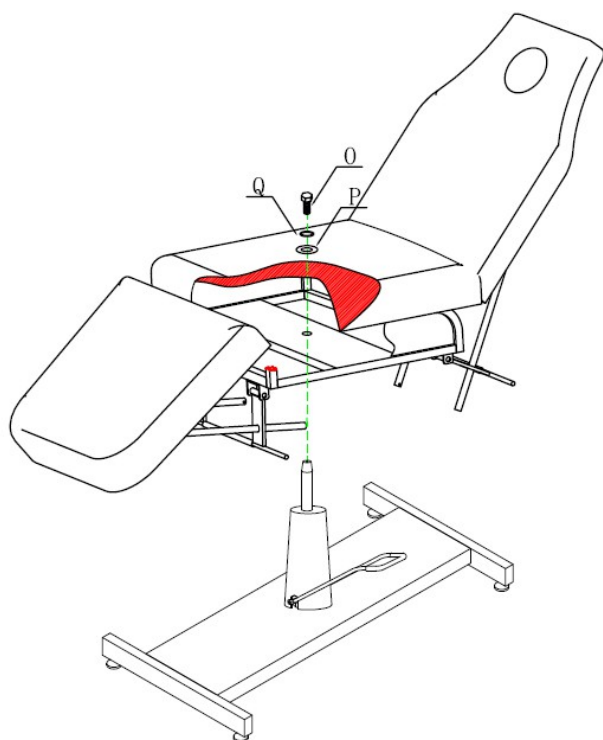

12

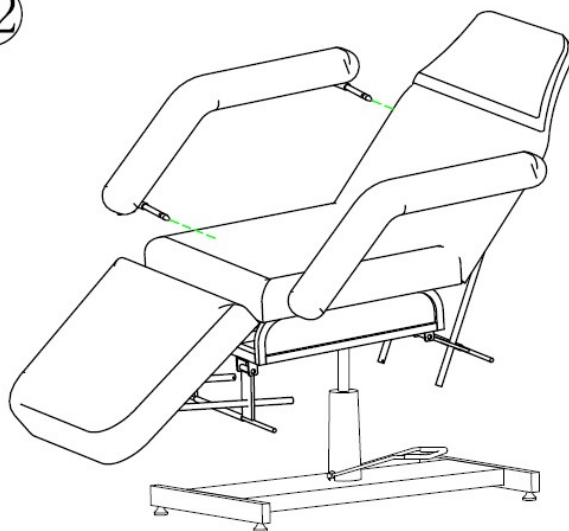

13

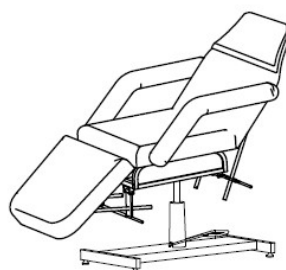

CH-210

11. Umiestnite sedadlo na čap pohonu a potom ho utiahnite pomocou prvkov Q, P a O.

12. Vložte podrúčky podľa obrázku.

Funkcie stoličky:

- Zdvihnutie stoličky: stoličku zdvihnite stlačením páky
- Spustenie stoličky: stlačte páku, kým sa stolička úplne nespustí
- Aretačné zariadenie otáčania sedadla: zdvihnite páku až na doraz

Upozornenie!

Nesadajte si náhle a nehádzte na stoličku ťažké predmety. Je zakázané presúvať alebo prenášať stoličku, ak na nej sedia ľudia alebo sa na nej nachádzajú ťažké predmety. Nestojte na stoličke nohami alebo kolenami, nehojdajte sa na nej, nesadajte si na podrúčky a nedovoľte, aby na nej sedelo viac ako jedna osoba.

Čistenie a dezinfekcia zariadenia:

Pred čistením odpojte zariadenie od napájania.

Aby povrch stoličky zostal v dobrom stave, je potrebné ju pravidelne čistiť. Nezabudnite stoličku po každom použití vyčistiť a dezinfikovať. Raz za mesiac sa odporúča vykonať dôkladnú dezinfekciu.

I Kovové a plastové povrchy

Na čistenie kovových a plastových povrchov a ovládacích prvkov ich utrite vlhkou handričkou. Na čistenie ťažko dostupných miest alebo rohov sa dobre hodí malá kefka. Na zariadenie nenanášajte príliš veľa čistiaceho prostriedku. Potom zariadenie dezinfikujte vhodnou tekutinou.

II Povrchy z nehrdzavejúcej ocele

Najlepšie funguje jemný čistiaci prostriedok. Na odstránenie odolných škvŕn môžete použiť amoniak a väčšinu rozpúšťadiel. Vyhnite sa roztokom na báze chlóru.

III Lakované alebo pochrómované kovové povrchy

- Na čistenie nepoužívajte vodné trysky (sprcha, vysokotlakové vodné delá).
- Nečistite pri vysokých teplotách a vysokej vlhkosti, nevystavujte zariadenie podmienkam, ktoré môžu viesť k znečisteniu tekutinou.
- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani kyseliny.

IV Povrch sedadla

- Povrch stoličky rovnomerne utrite špeciálnym čistiacim prostriedkom na kožu a potom utrite čistou, mäkkou handričkou.

Údržba:

1. **Denné čistenie**
Prach odstráňte mäkkou suchou handričkou.
2. **Odstránenie odolných nečistôt**
Ako vieme, odolné nečistoty je ťažké odstrániť bežnou suchou handričkou. V takýchto prípadoch najskôr použite mäkkú handričku s riedeným neutrálnym čistiacim prostriedkom a potom utrite suchou handričkou.
3. **Je zakázané používať benzén, riedidlá, benzín alebo iné rozpúšťadlá.**
Tieto prostriedky môžu poškodiť kožu alebo spôsobiť koróziu výrobku.
4. **Podmienky skladovania a prevádzky**
Nevystavujte výrobok silnému slnečnému žiareniu ani vlhkosti. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu výrobku.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Zariadenie je profesionálny prístroj určený na použitie v kozmetických salónoch. Zariadenie smie obsluhovať iba kvalifikovaný kozmetický personál, aby sa predišlo nežiaducim účinkom počas ošetrovania.

Zariadenie nerozoberajte a nepoužívajte na iné účely, ako sú uvedené v tejto používateľskej príručke. Všetky servisné a opravárske práce smie vykonávať výlučne autorizovaný servisný technik (ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

Neinštalujte ani neprevádzkujte zariadenie v blízkosti tekutín, vlhkých miest alebo s mokрыmi rukami, aby sa do zariadenia nemohli dostať žiadne tekutiny.

V nasledujúcich prípadoch ihneď vytiahnite zástrčku zo zásuvky a kontaktujte autorizované servisné stredisko spoločnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.:

a) do zariadenia sa dostala tekutina, b) zariadenie vydáva zvláštny zápach, dym alebo podivné zvuky,

c) napájací kábel je poškodený, d) zariadenie bolo prevrátené alebo je poškodený jeho kryt.

Na káble nekladte žiadne predmety. Neinštalujte zariadenie na miesta, kde by niekto mohol šliafnuť na napájací kábel.

Z bezpečnostných dôvodov po každom použití zariadenia odpojte napájací kábel zo zásuvky.

Do otvoru v zariadení nevkladajte žiadne predmety. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, odpojte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.

Neumiestňujte zariadenie na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. Zariadenie sa môže poškodiť, ak spadne.

Aby bola zaručená stanovená životnosť zariadenia, odporúča sa počkať jednu minútu pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).

Napájanie musí zodpovedať špecifikáciám uvedeným na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí nesprávna prevádzka, poškodenie alebo dokonca spálenie zariadenia.

UPOZORNENIE:

V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch kontaktujte autorizované servisné stredisko, aby ste predišli nebezpečenstvu.

Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo poučené o bezpečnom používaní zariadenia, aby pochopili súvisiace riziká.

Zariadenie nie je určené na používanie deťmi. Deti nesmú hrať sa so zariadením.

Nenechávajte zariadenie bez dozoru, ak sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby, ktoré nemajú dostatočné znalosti o používaní zariadenia.

Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko pre zdravie alebo viesť k smrti, preto musí byť spotrebič používaný a skladovaný mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA ZARIADENIA



Použitú elektrickú spotrebič, zariadenia a obaly je potrebné odniesť do recyklačných centier v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia. Elektrické spotrebiče sa nesmú likvidovať v kontajneroch na domový odpad. Dodržiavajte predpisy na likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení by sa použité

elektrické zariadenia by sa mali zbierať oddelene a potom odovzdať do zberných miest.

zber použitých elektronických a elektrických zariadení. Na konci svojej životnosti obsahujú staré zariadenia cenné recyklovateľné komponenty, preto by mali byť odoslané na recykláciu. Mali by byť preto odovzdané na príslušných zberných miestach alebo ich môžete odovzdať spoločnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Zariadenie by sa malo prepravovať pri teplotách od (–) 20 °C do (+) 50 °C, výlučne v pôvodnom obale. Zariadenie by sa malo skladovať na dobre vetranom mieste s relatívnou vlhkosťou nepresahujúcou 75 %. Rozsah prevádzkovej teploty: (+) 10 °C až (+) 40 °C. Počas skladovania a prepravy sa zariadenie nesmie hádzať ani upustiť, vystavovať mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.

