

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>

## NÁVOD NA POUŽITIE

Luxusné elektrické kozmetické kreslo Sillon, 3 motory

C502 3 motory / 150222



Dovozca:  
ACTIVESHOP SP. Z O.O.  
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A  
54-610 Wrocław, Polsko  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/02/2026



Vyhľadajte  
rôzne  
jazyky



Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt.

Pred prvým použitím si prečítajte používateľskú príručku a uchovajte ju pre budúce použitie.

**Luxusné kozmetické kreslo Sillon** kombinuje moderný dizajn, intuitívne ovládanie a širokú funkčnosť. Je vybavené tromi pohony ovládanými káblovým diaľkovým ovládačom, ktoré umožňujú presné nastavenie podľa individuálnych preferencií. Ergonomické sedadlo zaisťuje pohodlie a komfort, vďaka čomu je ideálnym riešením pre každý salón.

| Technické údaje      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Vstupné napätie      | 220-230 V                  |
| Elektrický výkon     | 200 W                      |
| Menovitá frekvencia  | 50                         |
| Materiál čalúnenia   | Syntetická koža            |
| Ovládanie            | Káblové diaľkové ovládanie |
| Teplota v miestnosti | (+)10 °C – (+)40 °C        |
| Okolité vlhkosť      | 30 % – 75                  |

#### Poznámka

Aby bola zabezpečená správna ochrana výrobku počas prepravy, stolička je zabalená v kartónových škatuliach pozostávajúcich z celkom 10 vrstiev papiera. Odporúčame uchovať originálne balenie pre budúce použitie, najmä v prípade vrátenia výrobku počas záručnej doby.

Stoličku je možné zdvihnúť iba za opierku hlavy a opierku nôh, nie za obe strany podrúčok. Z bezpečnostných dôvodov sú na vybalenie stoličky z kartónovej krabice potrebné dve osoby.

Elektrická kozmetická stolička sa musí používať v uzavretých, suchých miestnostiach. Teplota v miestnosti by mala byť medzi (+)10 °C a (+)40 °C a relatívna vlhkosť medzi 30 % a 75 %. Ak bolo toto kozmetické kreslo vystavené teplotám pod 0 °C, napr. počas prepravy, pred spustením počkajte aspoň 5 hodín, aby zariadenie dosiahlo izbovú teplotu.

#### Konštrukcia zariadenia:

1. Opierka hlavy
2. Vankúš
3. Operadlo
4. Podrúčka
5. Sedadlo
6. Opierka nôh
7. Káblové diaľkové ovládanie
8. Zdvihací valec
9. Plastový kryt




## Návod na montáž stoličky

- Umiestnite kreslo na miesto, kde bude používané.
- Pripojte sieťovú zástrčku do elektrickej zásuvky


## Popis funkcií diaľkového ovládania

### 1. Nastavenie výšky sedadla.

Rozsah nastavenia výšky je 60 cm – 82 cm od podlahy

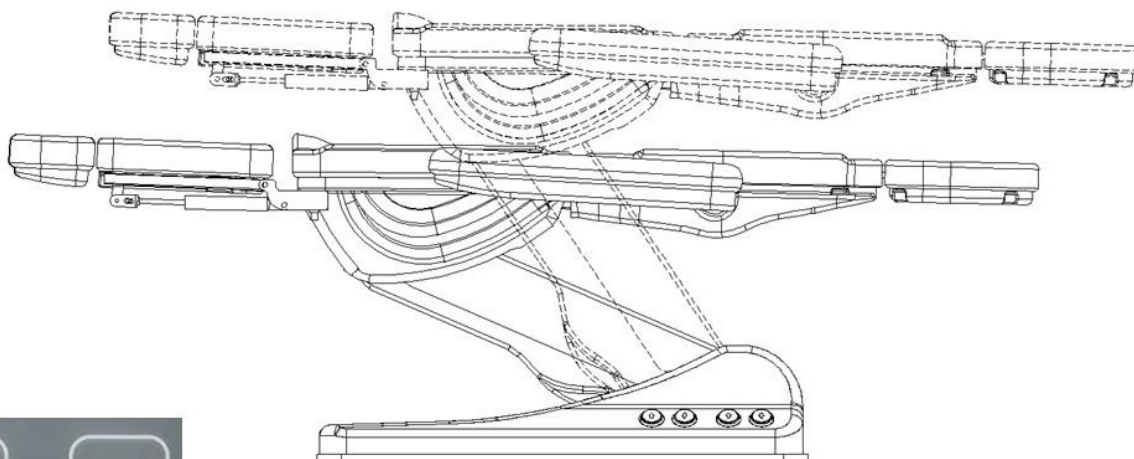


### 2. Nastavenie uhla operadla – rozsah 0 – 80

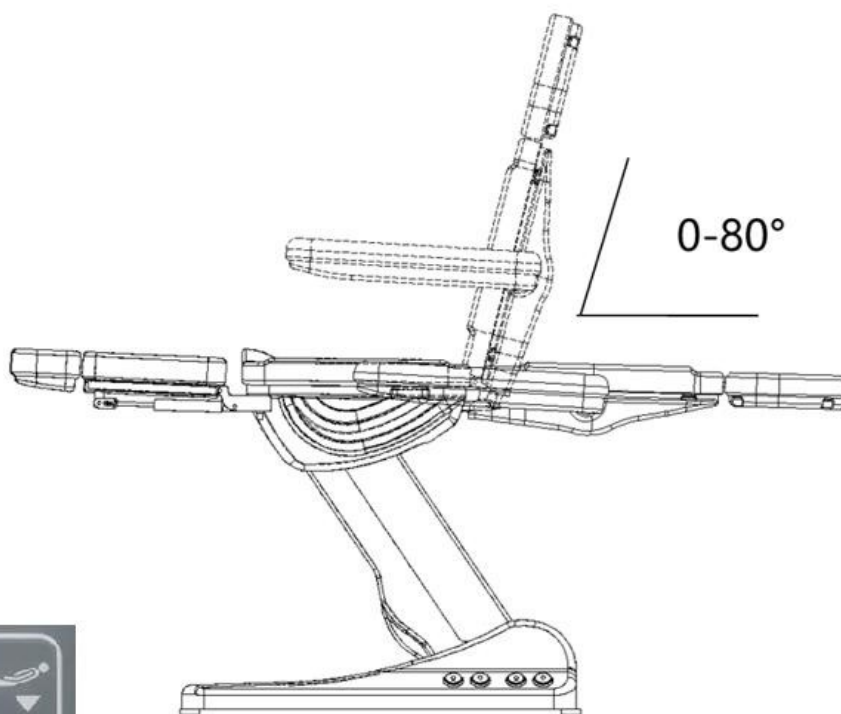

3. **Nastavenie uhla nôh – rozsah 0-90°**

Stlačte rukoväť pneumatického tyčového mechanizmu, aby ste zmenili polohu opierky nôh.

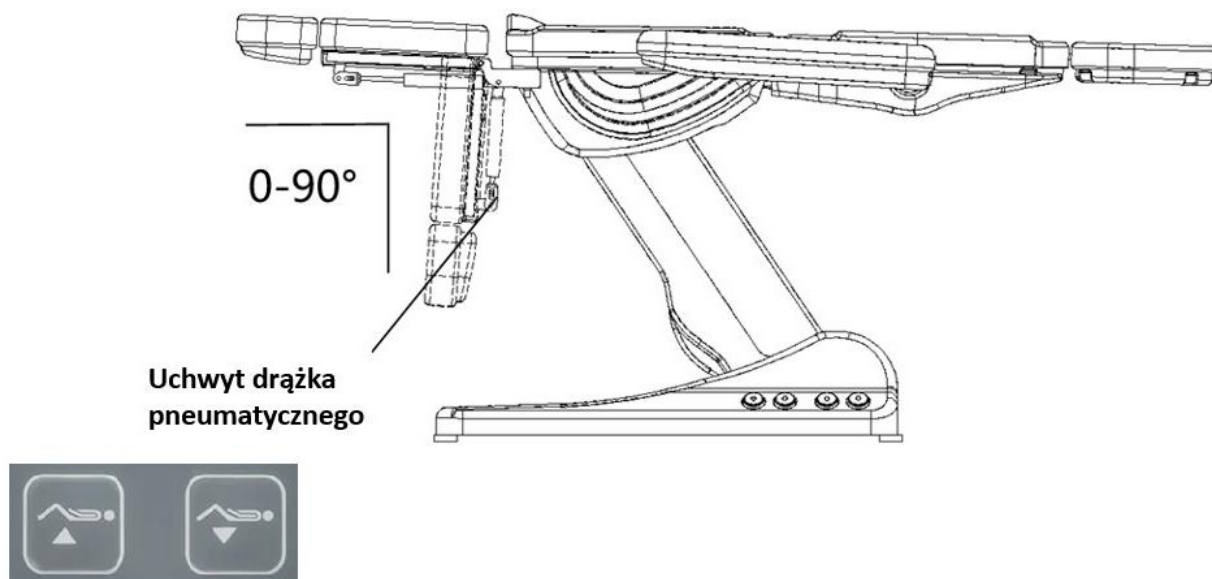


4. **Osvetlenie spodnej časti základne**



5. **Upozornenie! Funkcia vyhrievania nie je v tomto modeli k dispozícii. Diaľkové ovládanie je univerzálne a možno ho používať s mnohými modelmi.**

**Teleskopická opierka hlavy a funkcia predĺženia opierky nôh – predĺženie o 12 cm**

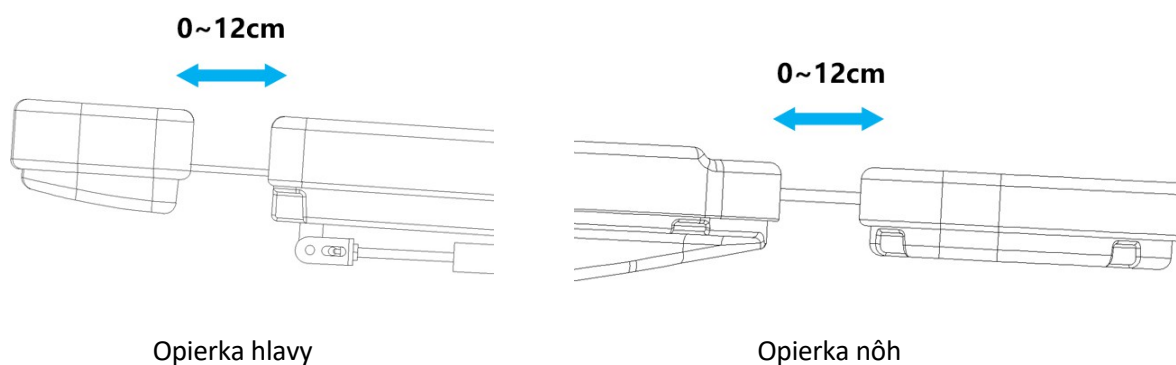


## Inštalácia podrúčok

Stolička musí byť v horizontálnej polohe. Vložte opierku rúk do otvoru na boku operadla, posuňte ju doprava a doľava, kým nezapadne na miesto. To isté urobte s druhou opierkou rúk.

Podrúčka je kolmá k podlahe bez ohľadu na uhol stoličky. Jej rozsah pohybu je 180°.

## Poznámka

Maximálne zaťaženie je 150 kg. Nesadajte si priamo na sklopené operadlo, podrúčky a opierka na nohy.

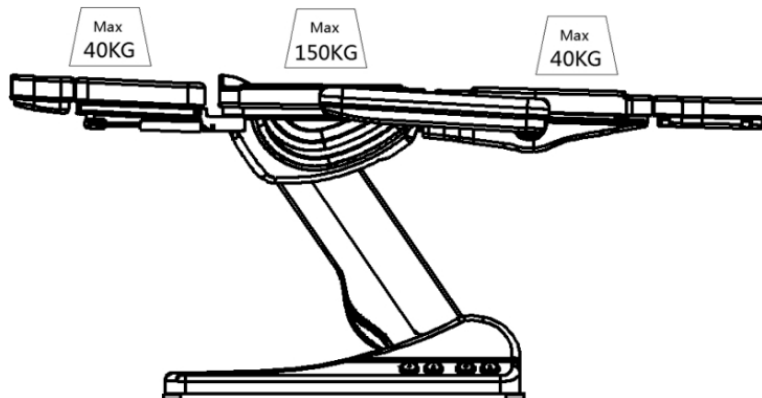

## Údržba

Aby povrch kozmetického lehátka zostal v dobrom stave, je potrebné ho pravidelne čistiť a udržiavať. Pred čistením nezabudnite odpojiť napájací kábel zo zásuvky.

- Kovové a plastové povrchy a ovládacie prvky by sa mali čistiť vlhkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom. V rohoch a na ťažko dostupných miestach použite malú kefku. Pri čistení neodporúčame používať príliš veľa tekutiny.
- Povrchy z nehrzdavejúcej ocele – čistite jemným čistiacim prostriedkom. Na odstránenie ťažkých a odolných škvŕn môžete použiť amoniak a väčšinu rozpúšťadiel. Vyhnite sa roztokom na báze chlóru.
- Lakované alebo pochrómované kovové povrchy – na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani kyseliny.
- Povrch postele – použite čistú, mäkkú handričku. Môžete použiť malé množstvo špeciálneho čistiaceho a impregnačného prostriedku na syntetickú kožu.

Všetky povrchy musia byť suché pred pripojením k napájaniu a opätovným použitím. Nečistite pri vysokých teplotách a vysokej vlhkosti.


Nevystavujte zariadenie faktorom, ktoré môžu viesť k znečisteniu tekutinami.

## Odporúčania:

1. Uistite sa, že ste zariadenie nainštalovali na rovný a stabilný povrch, aby ste znížili riziko jeho pádu a poškodenia.
2. Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru, keď je pripojené.
3. Používajte zariadenie v súlade s určeným použitím opísaným v príručke.
4. Nikdy nepoužívajte toto zariadenie, ak je poškodený kábel alebo zástrčka.
5. Nepoužívajte zariadenie, ak nefunguje správne alebo ak spadlo, bolo poškodené alebo spadlo do vody.
6. Na odpojenie zástrčky zo zásuvky netiahnite priamo za kábel.
7. Tento produkt je určený iba na použitie v interiéri. Nevystavujte ho priamemu pôsobeniu poveternostných vplyvov.

8. Zariadenie pravidelne čistite, aby sa na ňom nehromadili nečistoty. Zariadenie najlepšie čistite vlhkou handričkou.
9. Neomotávajte napájací kábel okolo zariadenia.

### Rozmery zariadenia

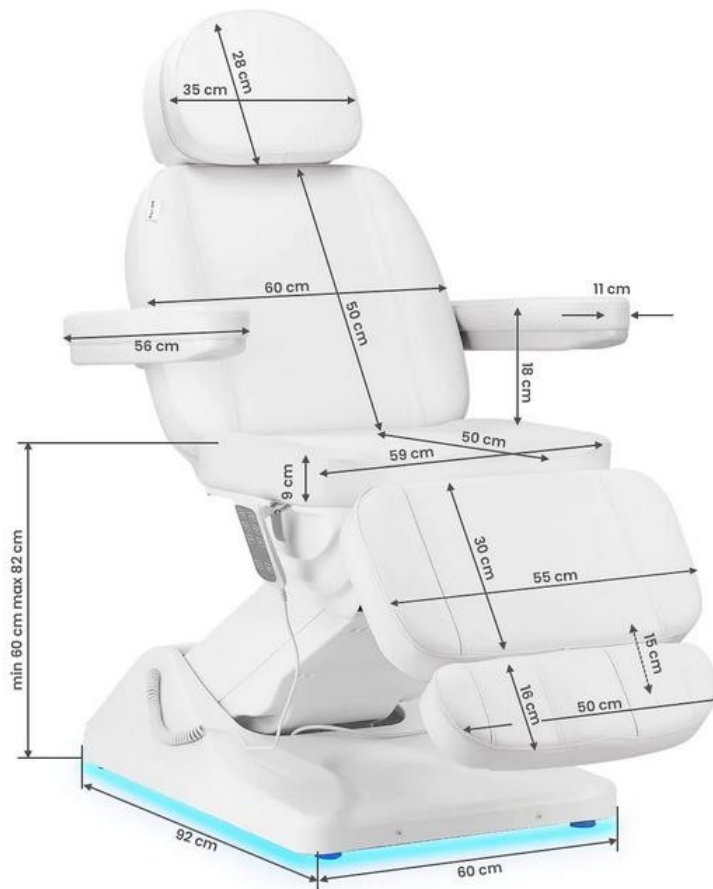

### Bezpečnostné opatrenia:

1. Zariadenie je profesionálny prístroj určený na použitie v kozmetických salónoch. Zariadenie smie obsluhovať iba kvalifikovaný kozmetický personál, aby sa predišlo nežiaducim účinkom počas ošetrovania.
2. Nerozobráňte zariadenie a nepoužívajte ho na iné účely, ako sú uvedené v tejto používateľskej príručke. Všetky servisné a opravárske práce smie vykonávať výlučne autorizovaný servisný technik (ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Neinštalujte ani nepoužívajte zariadenie v blízkosti tekutín, vlhkých miest alebo s mokрыmi rukami. Dbajte na to, aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.
4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte zariadenie od napájania a kontaktujte autorizované servisné stredisko spoločnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.: a) do zariadenia sa dostala tekutina, b) zariadenie vydáva zvláštny zápach, dym alebo zvláštne zvuky, c) napájací kábel je poškodený, d) zariadenie bolo prevrátené alebo je poškodený jeho kryt.
5. Na káble nekladte žiadne predmety. Neinštalujte zariadenie na miesta, kde by niekto mohol šliapnúť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov po každom použití zariadenia odpojte napájací kábel zo zásuvky.
7. Do zariadenia nekladajte cudzie predmety. Ak sa do zariadenia dostane nežiaduci predmet, odpojte napájací kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Neumiestňujte zariadenie na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. Ak zariadenie spadne,

môže dôjsť k jeho poškodeniu.

9. Aby bola zaručená stanovená životnosť zariadenia, odporúča sa počkať jednu minútu pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájanie musí zodpovedať špecifikáciám uvedeným na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí nesprávna prevádzka, poškodenie alebo dokonca spálenie zariadenia.

#### UPOZORNENIE

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch kontaktujte autorizované servisné stredisko, aby ste predišli nebezpečenstvu.
2. Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými a mentálnymi schopnosťami, ako aj osobami, ktoré nie sú oboznámené s prevádzkou tohto zariadenia, ak sú pod primeraným dohľadom alebo sú poučené o bezpečnom používaní a chápu súvisiace riziká.
3. Nenechávajte zariadenie bez dozoru, ak sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby, ktoré nie sú oboznámené s jeho používaním.
4. Zariadenie nie je určené na používanie deťmi. Deti nesmú hrať sa so zariadením.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko pre zdravie alebo viesť k smrti, preto musí byť zariadenie používané a skladované mimo dosahu detí.

#### Likvidácia spotrebiča



V záujme ochrany životného prostredia a v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení je potrebné použité elektrické zariadenia zbierať oddelene a odovzdať do zberných miest pre odpad z elektrických a elektronických zariadení. Dodržiavajte pravidlá likvidácie tohto typ zariadenia a nevyhadzujte ho do kontajnerov na domový odpad.

Na konci svojej životnosti tieto zariadenia stále obsahujú cenné recyklovateľné komponenty, preto by mali byť odovzdané na recykláciu do príslušných zberných miest alebo do spoločnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.

#### Skladovanie a preprava

Zariadenie by sa malo prepravovať pri teplote medzi  $(-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  a  $(+40\text{ }^{\circ}\text{C}$  iba v pôvodnom obale. Malo by sa skladovať v dobre vetranej miestnosti s relatívnou vlhkosťou vzduchu maximálne 90 %. Prevádzková teplota od  $(+10\text{ }^{\circ}\text{C}$  do  $(+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Počas procesov skladovanie a preprava, nehádzte ani neupúšťajte zariadenie, nevystavujte ho mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.