

ACTIVESHOP®

ISTRUZIONI PER L'USO

Pulitore a ultrasuoni ACD-7920



Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/04/2024




Dati tecnici:

Tensione	220 - 240 V 50Hz
Potenza	55 W
Frequenza di vibrazione	42 kHz
Dimensioni	20,3 x 18,3 x 14,5 cm
Dimensioni del contenitore	14,8 x 12,6 x 4,7 cm
Capacità del serbatoio	850 ml
Livello minimo del liquido	400 ml
Livello massimo del liquido	700 ml
Peso	1,09 kg
Timer	90 - 600 s

- Scollegare l'unità prima del riempimento. Non superare la linea "MAX" per evitare un riempimento eccessivo.
- Non riempire il serbatoio con sostanze chimiche abrasive o corrosive. Potrebbe causare perdite e danni.
- Non utilizzare la lavatrice se il cavo o la spina sono danneggiati. Se danneggiati, rivolgersi a un centro di assistenza per l'ispezione e la riparazione. ☐
- Conservare la lavatrice in un luogo sicuro, asciutto e lontano dalla luce diretta del sole. ☐ La lavatrice non deve mai essere lasciata incustodita quando è collegata alla rete elettrica.
- Non utilizzare durante il bagno.
- Dopo l'uso, scollegare la lavatrice dalla presa di corrente.
- Non immergere la lavatrice in acqua per evitare folgorazioni. ☐ Versare l'acqua attraverso lo spazio sulla lavatrice indicato dalla freccia.

Design e accessori della lavatrice:

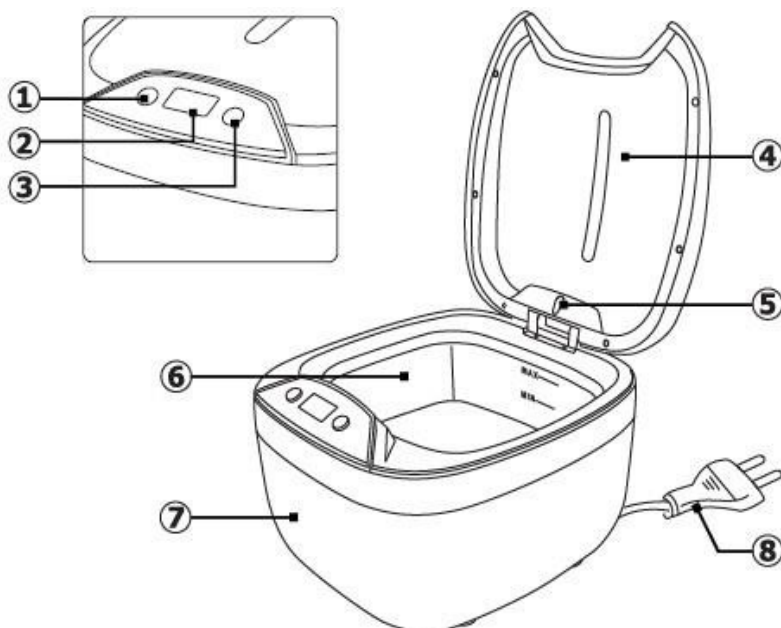

1. Pulsante di accensione/spegnimento
2. Display
3. Pulsante di cambio dell'ora

4. Coperchio
5. Luce a LED
6. Serbatoio

7. Alloggiamento
8. Cavo di alimentazione


Accessori (opzionali)



Porta CD



Supporto per orologio

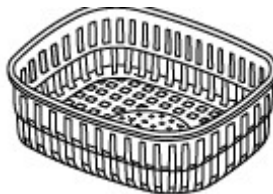

Cestino


CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE



1. Non accendere la lavatrice senza acqua all'interno. L'accensione della lavatrice senza acqua può danneggiarla.
2. Non sovraccaricare la lavatrice con un funzionamento continuo. Dopo 30 minuti di funzionamento continuo, lasciare la lavatrice inattiva per altri 10 minuti.
3. Non lasciare l'acqua nella lavatrice a lungo. È necessario versare l'acqua o la soluzione fuori dalla lavatrice dopo l'uso. Lasciare l'acqua o la soluzione nella lavatrice per lunghi periodi di tempo può danneggiarla.
4. Prendersi cura dell'esterno della lavatrice. Eliminare immediatamente ogni residuo di acqua o soluzione. Utilizzare un panno umido per pulire la lavatrice. Asciugare dopo il lavaggio.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Rimuovere il coperchio. Inserire i prodotti nel cestello e poi nel serbatoio della lavatrice. Per gli oggetti appuntiti che potrebbero danneggiare la lavatrice, assicurarsi di utilizzare il cestello. Ricordare inoltre che il cestello assorbe il 30-40% dell'energia della lavatrice a ultrasuoni.
2. Riempire il serbatoio con acqua. L'acqua deve coprire gli oggetti da pulire, ma non deve superare il livello massimo del liquido.
3. Mettere il coperchio e collegare la lavatrice all'alimentazione. Il display visualizza 180. Questo è il tempo di lavaggio predefinito della lavatrice.
4. Impostare il tempo selezionato utilizzando il tasto di impostazione del tempo. Scelte possibili 180s, 300s, 480s, 600s 90s.

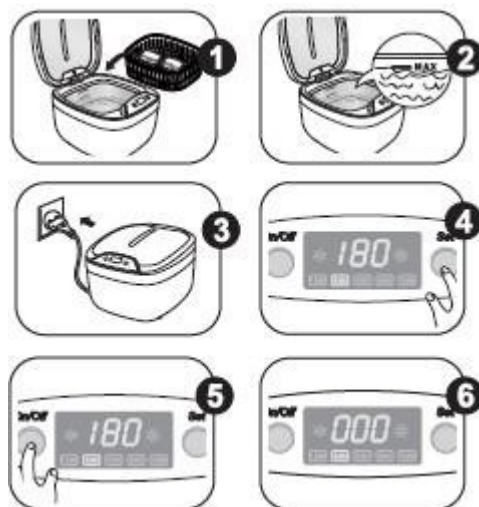

5. Accendere la lavatrice con l'interruttore on/off. Il processo di pulizia si avvia. Il tempo scorre fino a 0.
6. Quando sul display appare lo zero, la lavatrice termina automaticamente.
7. Se si desidera terminare la pulizia prima del tempo, premere l'interruttore. Se si desidera ripetere il ciclo o aumentare il tempo di lavaggio, premere il tasto di impostazione selezionare il tempo appropriato e premere l'interruttore per riavviare l'apparecchio.
8. Al termine del lavoro, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. Aprire il coperchio e rimuovere gli oggetti da pulire.
9. Versare l'acqua rimasta e asciugare l'apparecchio.
10. Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e fresco.



METODI DI PULIZIA



Pulizia ordinaria

Utilizzare l'acqua secondo le istruzioni per l'uso. Versare l'acqua dopo l'uso



Lavaggio in soluzione

Preparare la soluzione detergente secondo le raccomandazioni del produttore. Fare attenzione a non superare la concentrazione della soluzione. Ciò potrebbe danneggiare le guarnizioni della lavatrice, con il conseguente rischio di allagamento dei componenti elettronici. Al termine, riempire la lavatrice con acqua, accenderla per 90 secondi e poi versare i residui fuori dalla lavatrice. In questo modo si evitano danni alla lavatrice dovuti al contatto prolungato con i prodotti chimici.



Lavaggio in lotti

Per i capi più lunghi che non possono essere inseriti interamente nella lavatrice, si consiglia di lavarli in lotti. A tale scopo, mettere prima un lato dell'articolo nell'acqua o nella soluzione detergente e poi girarlo in modo che l'altro lato dell'articolo sia nell'acqua.

ISTRUZIONI PER L'USO DEGLI ACCESSORI OPZIONALI



Cestino

Il cestello è ideale per la pulizia di piccoli oggetti. Collocare gli oggetti nel cestello e poi inserirlo nel serbatoio della lavatrice. Cercate di fare in modo che gli oggetti non entrino in contatto tra loro.



Supporto per orologio

Utilizzare il supporto per tenere l'orologio al di sopra della superficie dell'acqua durante la pulizia del bracciale.



Supporto per CD

Utilizzare il supporto per la pulizia di CD/DVD. Il supporto può contenere 2 dischi alla volta.

PRODOTTI NON ADATTI ALLA PULIZIA CON IL PULITORE A ULTRASUONI

- Alta gioielleria (perle, smeraldi, oggetti in avorio, perline, conchiglie, agata).
- Articoli saldati, rivestiti e incollati
- Altri oggetti come legno, vetro rivestito, ceramica, filtri di macchine fotografiche.

MISURE DI SICUREZZA

1. L'apparecchio è un'apparecchiatura professionale destinata all'uso nei saloni di bellezza. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita conseguenze indesiderate durante il trattamento.
2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o. o.).
3. Non installare o mettere in funzione l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'apparecchio.
4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e contattare il servizio di assistenza autorizzato da ACTIVESHOP Ltd. nei seguenti casi:
(a) un liquido è entrato nell'apparecchio, (b) l'apparecchio emette un odore strano, fuma o emette suoni strani, c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o il suo alloggiamento è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di lavorare con l'apparecchio.

7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire la durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di rispettare un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o incendio dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e familiarità con l'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito nelle vicinanze di bambini o di persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con un apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o causare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.



SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio nel rispetto dei principi di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nei contenitori dei rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di proteggere l'ambiente in conformità con la Direttiva 2012/19/CE

per quanto riguarda i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i rifiuti di apparecchiature elettriche devono essere raccolti separatamente e consegnati ai punti di raccolta per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il riciclaggio. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati, nonché alla ACTIVESHOP Ltd.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'apparecchio deve essere trasportato a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. Conservare l'apparecchio in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.