


GINRAM®

PRODOTTI MONOUSO STERILI PER LA GINECOLOGIA
Gynaecological disposable, sterile devices

AMNIORAM

Ago per amniocentesi transaddominale
Transabdominal amniocentesis needle

**COD.770212 – 770228 – 770222 – 770224 – 770201 – 770226 –
770227 – 770223 – 770202 – 770229 – 770232 – 770233**

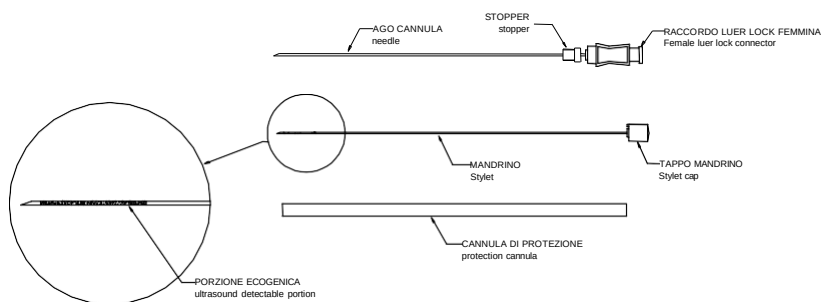

FIN

Käyttöohje

Tarkista, että mandriini on suljettu. Vie neula sisään kohtisuorasti ultraäänikuvan mukaan lapsivesipussiin. Poista mandriini ja liitä neulaan 20 cc:n ruisku.

Ime neste hitaalla, kohtuullisella negatiivisella paineella. Aseta mandriini takaisin ja poista sekä neula että mandriini. Siirrä lapsivesinäyte kuivaan, steriiliin koeputkeen ja säilytä 37 °C:n lämpötilassa.

Varoitus: Käytä ainoastaan lääkärin tiukan valvonnan alaisena. Käytä heti pakkauksen aukaisemisen jälkeen. Säilytä 0 °C:n ja 40 °C:n välisessä lämpötilassa.

Saattaa sisältää vähäisiä määriä nikkeliä.

LOT NUMERO DI LOTTO	REF CODICE PRODOTTO	 LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE	 LATEX FREE	STERILE EO STERILIZZAZIONE CON OSSIDO DI ETILENE
 DATA ENTRO CUI IL DISPOSITIVO PUÒ ESSERE USATO	 LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO	 FABBRICANTE	 DATA DI FABBRICAZIONE	 MONOUSO

LOT BATCH CODE	REF REFERENCE NUMBER	 ATTENTION. SEE INSTRUCTIONS FOR USE	 LATEX FREE	STERILE EO STERILIZED BY ETHYLENE OXIDE
 USE BY MM/YYYY	 CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE	 MANUFACTURER	 DATE OF MANUFACTURE	 DO NOT REUSE