

ACTIVESHOP®

GEBRUIKSAANWIJZING

Loep S4+ statief



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Herz. A/07/2024



Een loeplamp op een vierarmig statief maakt het mogelijk om de huid en huidlaesies van dichtbij te bekijken en verlicht het behandelgebied. Wordt ook gebruikt voor manicure- en pedicurebehandelingen en permanente make-up. De LED's schijnen met een helder licht, wat het werkcomfort verhoogt.

Technische gegevens:

Spanning	220-240V
Vermogen	22W
Frequentie	50/60Hz
Vergroting	5 dioptrieën

Afmetingen apparaat:




Voorzorgsmaatregelen:

1. Gebruik het apparaat niet in de buurt van een badkuip, wastafel of ander water.
2. Raak de metalen onderdelen van de stekker niet aan wanneer u deze aansluit.
3. Reinig het apparaat regelmatig om ophoping van vuil te voorkomen. U kunt het apparaat het beste schoonmaken met een vochtige doek.
4. Wikkel het netsnoer niet rond het apparaat.
5. Controleer of het apparaat is aangesloten op de juiste stroombron en of de stekker goed in het stopcontact zit.
6. Steek de stekker niet in het stopcontact met natte of vochtige handen.
7. Gebruik het apparaat niet als de stekker heet of beschadigd is.
8. Bewaar het apparaat niet in de badkamer of andere ruimtes met een hoge luchtvochtigheid.
9. Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare stoffen.
10. Stoot niet tegen het apparaat en gooi er niet mee.


Specificaties van het apparaat:

1. Stekker
2. Apparaatarm
3. Lamp
4. Aan/uit-schakelaar
5. Lamp afstellen
6. Driepoot
7. Voet
8. Wiel

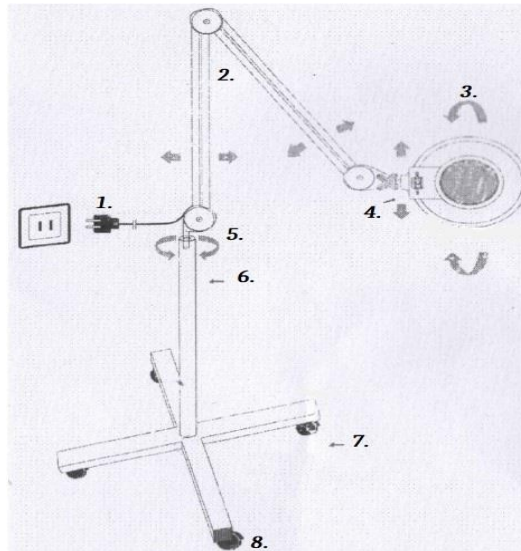

Montage:

1. Zet eerst de lampvoet en het statief in elkaar. Verbind de twee poten en het statief met elkaar met behulp van een sluitring en schroef, zoals in afbeelding 1. Verbind vervolgens de lamp met het statief (afbeelding 2).

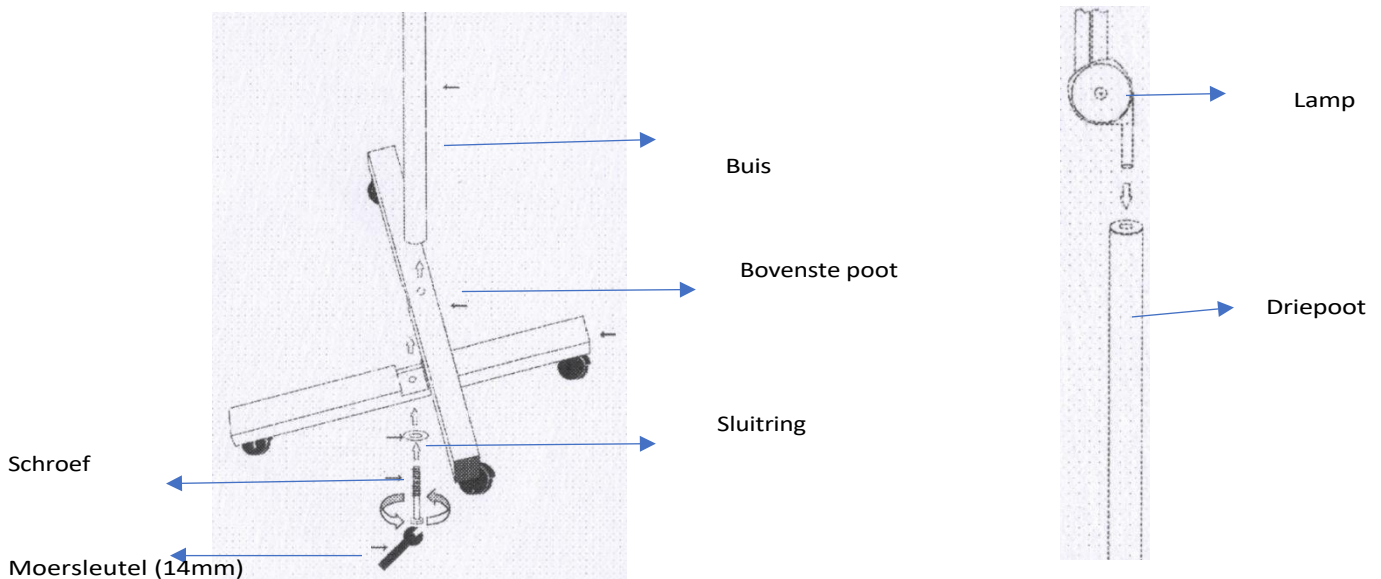

Gebruiksaanwijzing:

1. Zet het apparaat in elkaar.
2. Sluit het aan op een geschikte voedingsbron.
3. Start de lamp.
4. Pas de positie van de lamp naar wens aan.
5. Vergeet niet de stekker uit het stopcontact te halen als je klaar bent.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste effecten tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegde servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de erkende servicedienst van ACTIVESHOP Sp. z o.o:
a) vloeistof in het apparaat is terechtgekomen, b) het apparaat een vreemde geur of rook afgeeft of vreemde geluiden maakt,
c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Haal om veiligheidsredenen het netsnoer uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een wankel karretje, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van één minuut aan te houden voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke en geestelijke vermogens en gebrek aan ervaring en vertrouwdheid met de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden of instructies worden gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met een elektrisch apparaat kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en bewaard.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsprincipes. Elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afval gebruikte elektrische en elektronische gebruikte elektrische apparaten

moeten elektrische apparaten apart worden ingezameld en worden afgegeven bij de volgende inzamelpunten

inzameling van afgedankte elektronische en elektrische apparatuur. Aan het einde van hun levensduur bevatten oude apparaten volledig recycleerbare onderdelen en moeten ze dus worden ingeleverd voor herverwerking. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en bij ACTIVESHOP Ltd.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij temperaturen tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.