

ACTIVESHOP®

GEBRAUCHSANWEISUNG

Glow MX6 / MX3 Tischleuchte zur Behandlung



Importeur:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Graniczna StraÙe 8b,
Gebäude DC 2a 54-610
Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl




Technische Daten:

Modell	HD-M3X	HD-M6X
Eingangsspannung	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Eingangsspannung	12V 2A	24V 1,5A
Leistung Max	20W	36W
Farbe	3000/4500/6000K	3200-5600K
CRI	RA>90	RA>90
Lumen	1800LM	2800LM
Abmessungen	400 x 200 x 40 mm	580 x 190 x 445 mm
Gewicht	1,4 kg	4,6 kg

Aufbau und Montage der Lampe HD-M6X


1. Schrauben Sie den unteren Teil des Stativs (Teil D) in den Sockel. Schrauben Sie dann den oberen Teil des Stativs (Teil C) in den unteren Teil (Teil D).

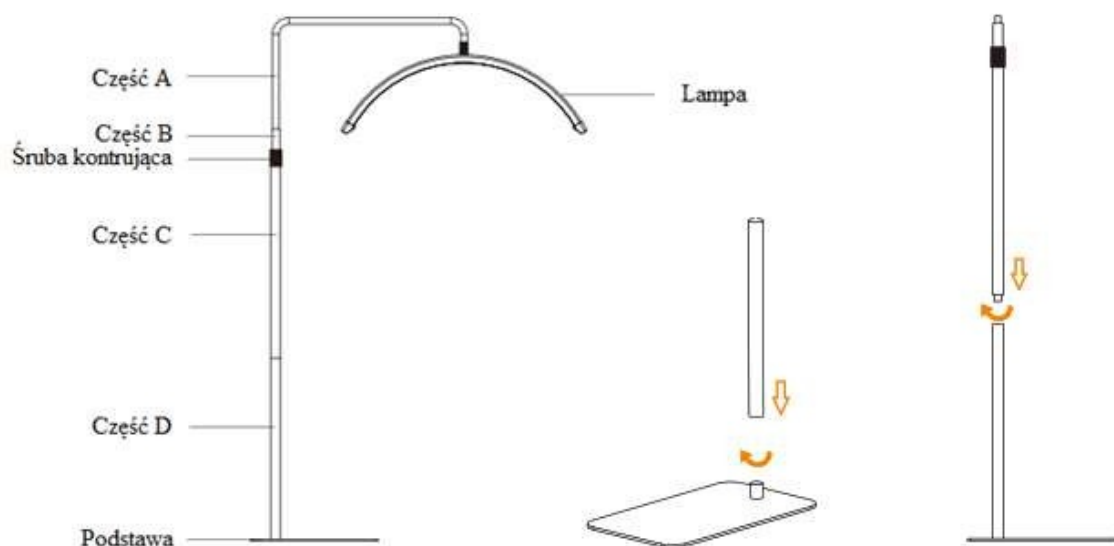


2. Montage der Lampe auf dem Stativ

- Lösen Sie die Befestigungsschraube.
- Ziehen Sie Teil B aus Teil C heraus.
- Drehen Sie Teil A mit Teil B.
- Setzen Sie Teil B in Teil C ein.
- Ziehen Sie die Feststellschraube an.
- Schließen Sie die Kabel für die Stromversorgung an.

Hinweis: Wenn Sie die Lampenhalterung gut über dem Fuß des Stativs positionieren, ist die Lampe am stabilsten.

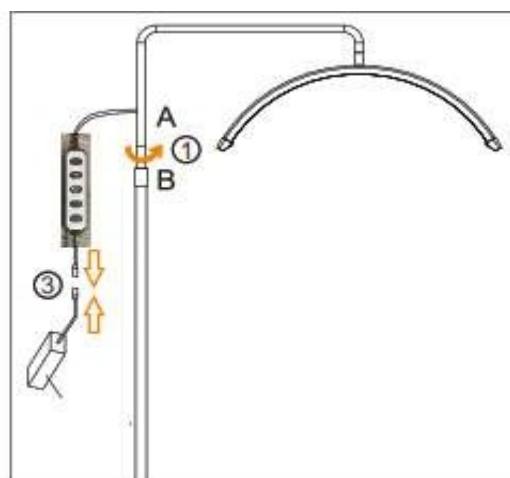


Konstruktion und Montage der Lampe HD-M3X

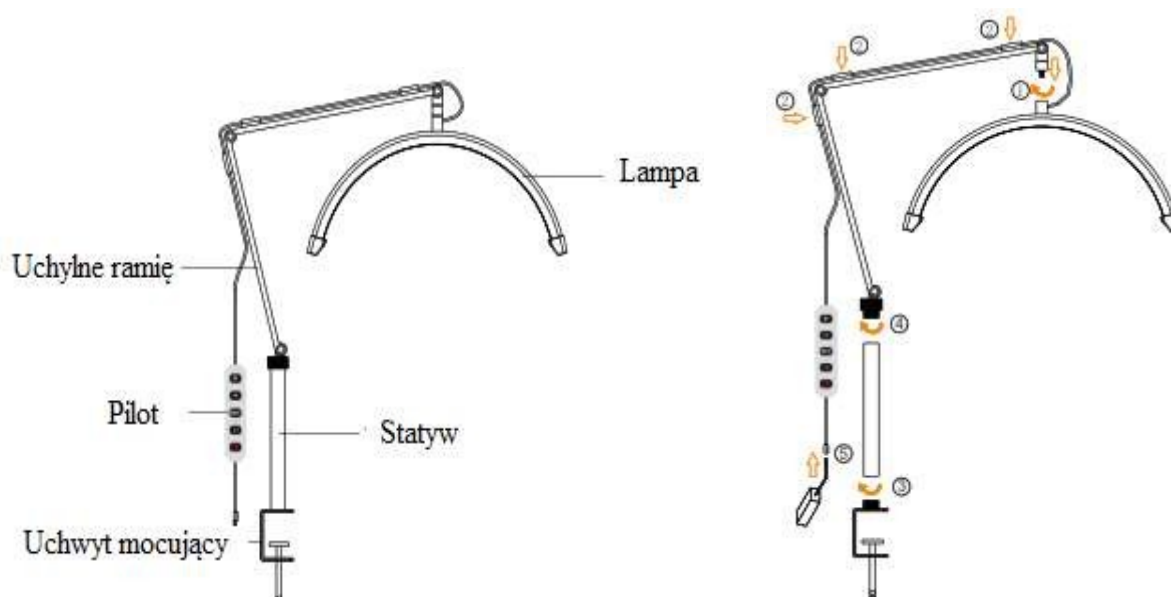

1. Schrauben Sie die Lampe in den oberen Teil des Schwenkarms.
2. Befestigen Sie das Kabel in den speziellen Führungshaltern.
3. Befestigen Sie das Lampenstativ an der Halterung
4. Verbinden Sie die Lampe mit dem Stativ
5. Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Netzteil

Hinweis: Es ist möglich, die Steifigkeit der Schwenkarmgelenke mit einem Inbusschlüssel einzustellen. Nach längerem oder intensivem Gebrauch des Lampenarms kann übermäßiges Gelenkspiel auftreten. Verbessern Sie die Steifigkeit der Gelenke durch Festziehen der Befestigungsschrauben.

Vorsicht! Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an. Es besteht die Gefahr, dass der Lampenarm beschädigt wird, wenn die Befestigungsschrauben zu fest angezogen werden.

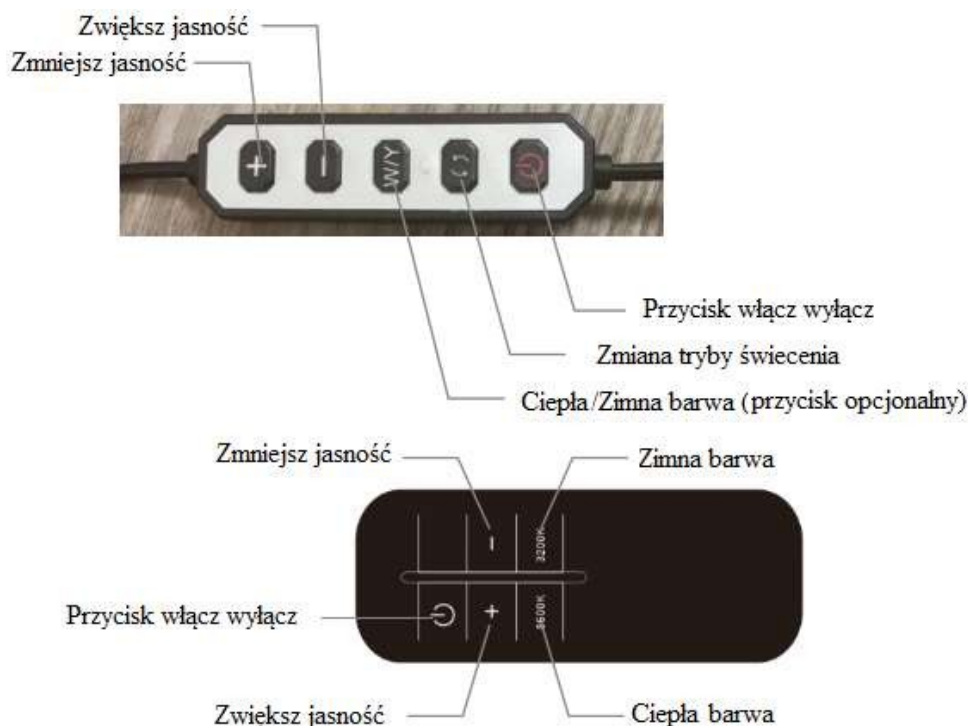

Verwendung der Lampe HD-M3X/HD-M6X

Hinweis: Die Fernbedienung ist optional zur Lampe erhältlich (einige Modelle werden ohne Fernbedienung geliefert).
Hinweis: Die Taste zum Ändern des Lichtmodus ist optional an der Lampensteuerung angebracht (einige Modelle verfügen nicht über diese Taste).

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist eine professionelle Ausrüstung für den Einsatz in kosmetischen Praxen. Die Bedienung des Geräts darf nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal erfolgen, um unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung zu vermeiden.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP SP. Z O.O.) durchgeführt werden.
3. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen auf und betreiben Sie es nicht, damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
4. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum der Firma ACTIVESHOP SP. Z O.O.) in den folgenden Fällen:
(a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, (b) das Gerät gibt einen merkwürdigen Geruch ab, raucht oder macht merkwürdige Geräusche, (c) das Netzkabel wurde beschädigt, (d) das Gerät wurde umgestoßen oder sein Gehäuse wurde beschädigt.
5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
6. Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.
9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, eine Pause von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar abbrennt.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder anderer Störungen an eine autorisierte Kundendienststelle, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts benutzt werden, wenn eine Beaufsichtigung oder Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe befinden.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und aufbewahrt werden.



ENTSORGUNG DES GERÄTES

Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen umweltgerecht bei Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen

Elektro- und Elektronikaltgeräte getrennt gesammelt und zu Sammelstellen für Elektro- und Elektronikaltgeräte gebracht werden.

Altgeräte enthalten vollständig recycelbare Bestandteile und sollten daher der Wiederaufbereitung zugeführt werden. Sie sollten daher bei den entsprechenden Sammelstellen sowie bei ACTIVESHOP SP abgegeben werden. Z O.O.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75%. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.