

ACTIVESHOP®

INSTRUCCIONES DE USO

Lámpara de tratamiento de sobremesa Glow MX6 / MX3



Importador:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
8b Graniczna Street, edificio
DC 2a 54-610 Wrocław,
Polonia
www.activeshop.com.pl




Datos técnicos

Modelo	HD-M3X	HD-M6X
Tensión de entrada	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Tensión de entrada	12V 2A	24V 1.5A
Potencia máxima	20W	36W
Color	3000/4500/6000K	3200-5600K
CRI	RA>90	RA>90
Lumen	1800LM	2800LM
Dimensiones	400 x 200 x 40 mm	580 x 190 x 445mm
Peso	1,4 kg	4,6 kg

Construcción y montaje de la lámpara HD-M6X


1. Atornille la parte inferior del trípode (parte D) en la base. A continuación, atornille la parte superior del trípode (parte C) en la parte inferior (parte D).

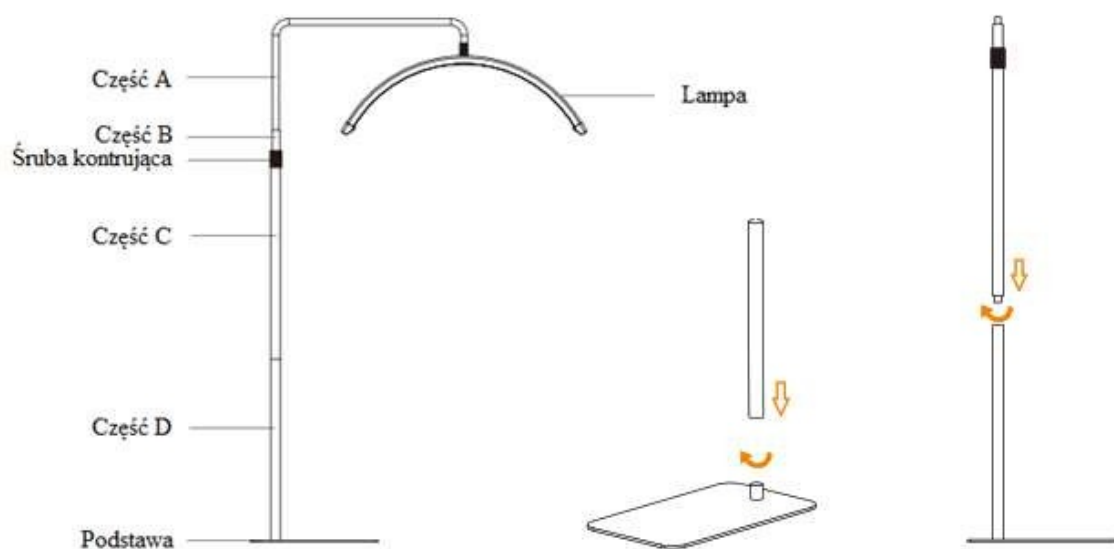


2. Montaje de la lámpara en el trípode

- Afloje el tornillo de fijación.
- Extraiga la parte B de la parte C.
- Enrosque la parte A con la parte B.
- Inserte la parte B en la parte C.
- Apriete el tornillo de fijación.
- Conecte los cables de alimentación.

Nota: La colocación de la base de la lámpara sobre el pie del trípode proporciona la mayor estabilidad para la lámpara.

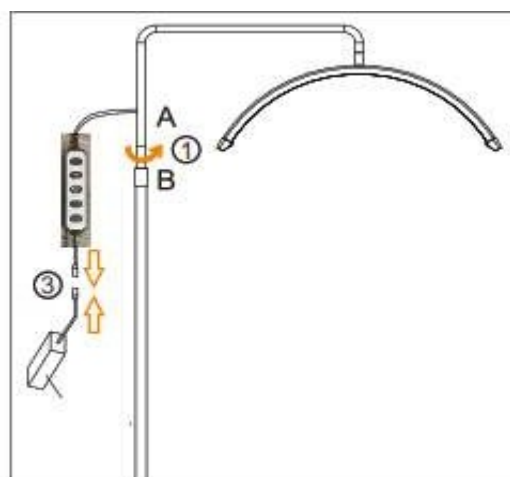

Construcción y montaje de la lámpara HD-M3X

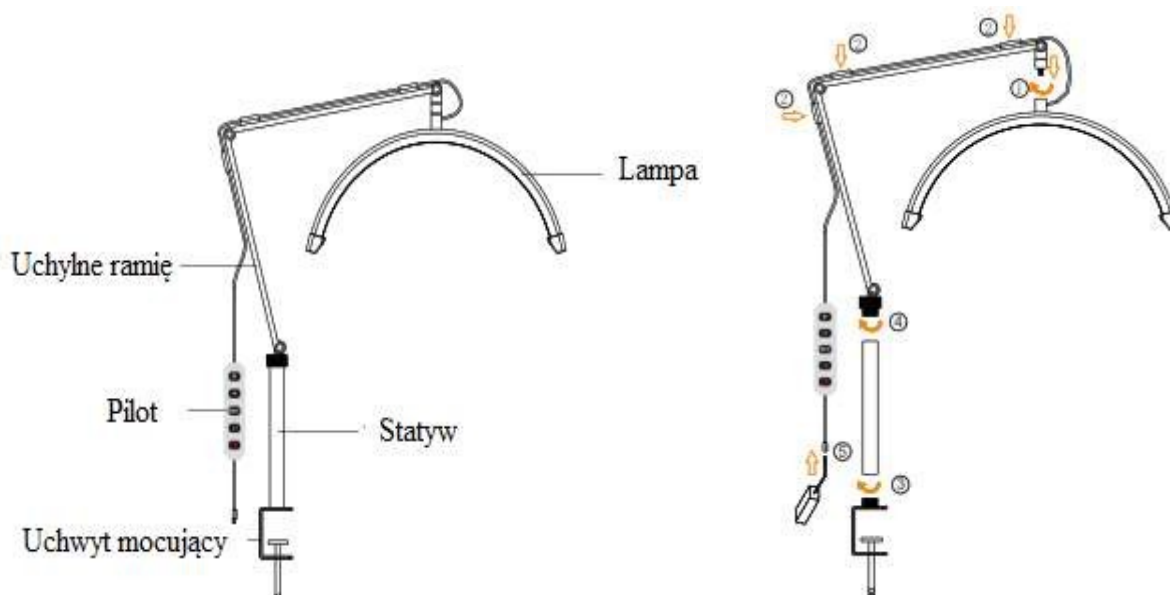


1. Atornille la lámpara en la parte superior del brazo basculante.
2. Monte el cable en los soportes de guía especiales
3. Monte el pie de la lámpara en el soporte
4. Conecte la lámpara al trípode
5. Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación

Nota: Es posible ajustar la rigidez de las articulaciones del brazo giratorio con una llave Allen.

Tras un uso prolongado o intensivo del brazo de la lámpara puede producirse un juego excesivo de las articulaciones. Mejore la rigidez de las articulaciones apretando los tornillos de fijación.

Atención. No apriete demasiado los tornillos. Existe el riesgo de dañar el brazo de la lámpara si se aprietan demasiado los tornillos de fijación.

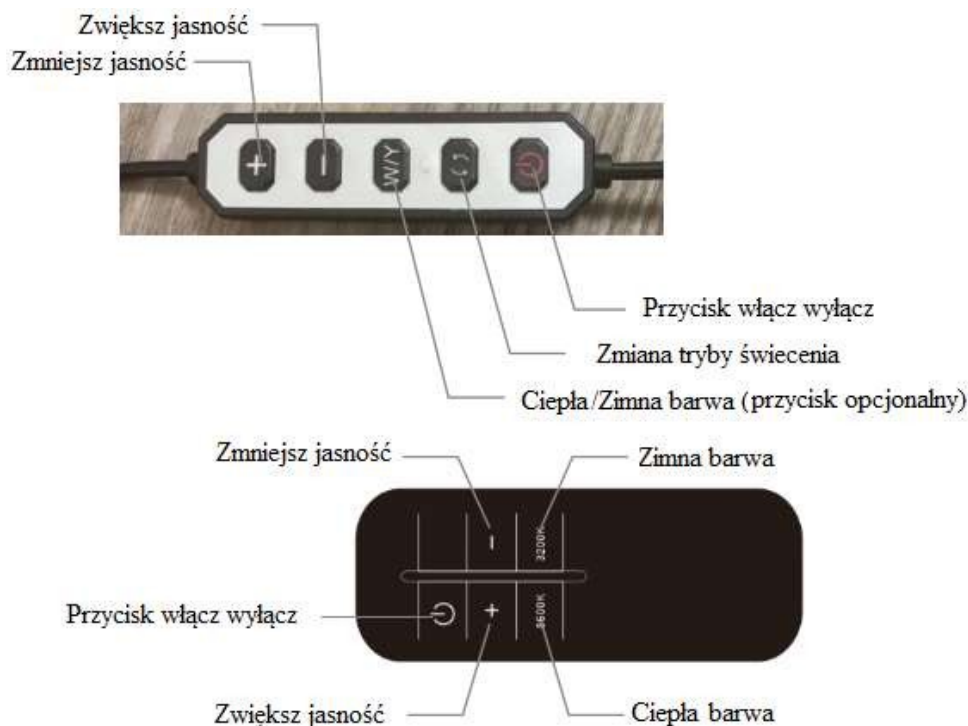

Utilización de la lámpara HD-M3X/ HD-M6X

Nota: El mando a distancia es opcional en la lámpara (algunos modelos no incluyen el mando a distancia)

Nota: El botón de cambio de modo de luz es opcional en el controlador de la lámpara (algunos modelos no incluyen este botón).

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en cirugías estéticas. El manejo del aparato sólo por personal cosmético cualificado evita efectos indeseables durante el tratamiento.
2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en estas instrucciones de uso. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por un técnico autorizado (empresa ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, lugares húmedos o con las manos mojadas, de modo que no penetren líquidos en el aparato.
4. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado por la empresa ACTIVESHOP SP. Z O.O.). en los siguientes casos
(a) ha entrado líquido en el aparato, (b) el aparato emite un olor extraño, humo o hace ruidos extraños, (c) el cable de alimentación está dañado, (d) el aparato ha sido volcado o su carcasa está dañada.
5. No coloque objetos sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si entra algún objeto extraño en la abertura, desenchufe el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.
9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda respetar un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se incendie.

PRECAUCIÓN:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras anomalías de funcionamiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado; de este modo evitará situaciones de peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales disminuidas y con falta de experiencia y familiaridad con el equipo, si se proporciona supervisión o instrucciones sobre cómo utilizar el equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.
3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y guardarse fuera del alcance de los niños.



ELIMINACIÓN DEL APARATO

Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en centros de reciclaje de acuerdo con los principios de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben desecharse en los contenedores de basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Para proteger el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

los aparatos eléctricos y electrónicos usados deben recogerse por separado y llevarse a los puntos de recogida de aparatos electrónicos y eléctricos usados.

Los aparatos viejos y al final de su vida útil contienen componentes totalmente reciclables, por lo que deben enviarse para su reprocesamiento. Por lo tanto, deben entregarse a los puntos de recogida adecuados, así como a ACTIVESHOP SP. Z O.O.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El dispositivo debe ser transportado a temperaturas entre (-) 20 °C y (+) 50 °C solamente en su embalaje original. Almacenar el aparato en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el dispositivo no debe arrojararse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.