

ACTIVESHOP®

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Glow MX6 / MX3 asztali kezelőlámpa



Importőr:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
8b Graniczna Street, building
DC 2a 54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl




Műszaki adatok:

Modell	HD-M3X	HD-M6X
Bemeneti feszültség	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Bemeneti feszültség	12V 2A	24V 1,5A
Teljesítmény Max	20W	36W
Szín	3000/4500/6000K	3200-5600K
CRI	RA>90	RA>90
Lumen	1800LM	2800LM
Méretek	400 x 200 x 40mm	580 x 190 x 445mm
Súly	1,4 kg	4,6 kg

A HD-M6X lámpa felépítése és felszerelése


1. Csavarozza az állvány alsó részét (D rész) a talapzatba. Ezután csavarja az állvány felső részét (C rész) az alsó részbe (D rész).

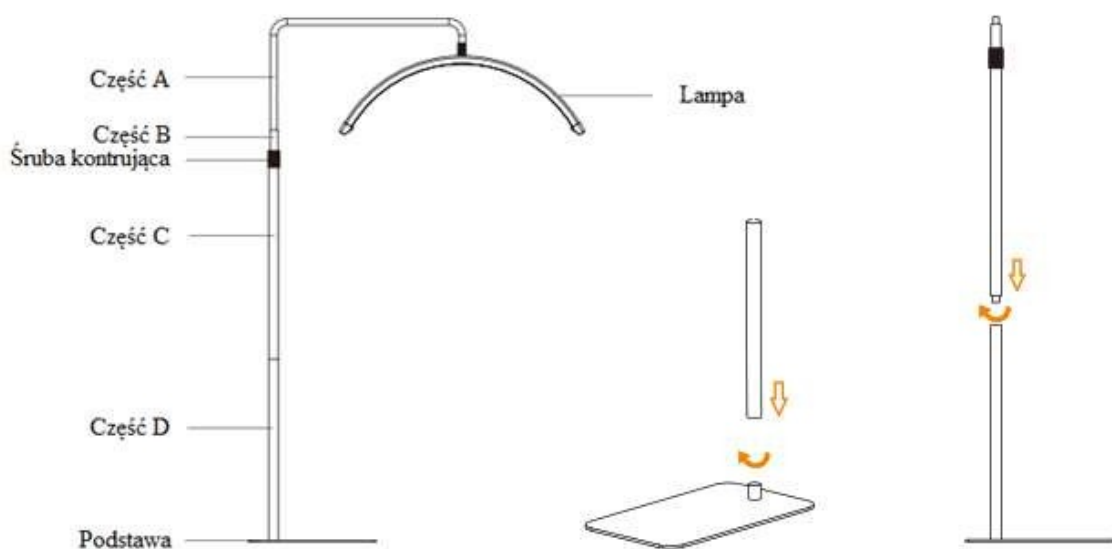


2. A lámpa felszerelése az állványra

- Lazítsa meg a rögzítőcsavart.
- Húzza ki a B részt a C részből.
- Csavarja össze az A részt a B résszel.
- Helyezze a B részt a C részbe.
- Húzza meg a rögzítőcsavart.
- Csatlakoztassa a tápellátás kábeleit.

Megjegyzés: Ha a lámpadokkolót szépen az állvány lába fölé helyezi, az biztosítja a legnagyobb stabilitást a lámpa számára.

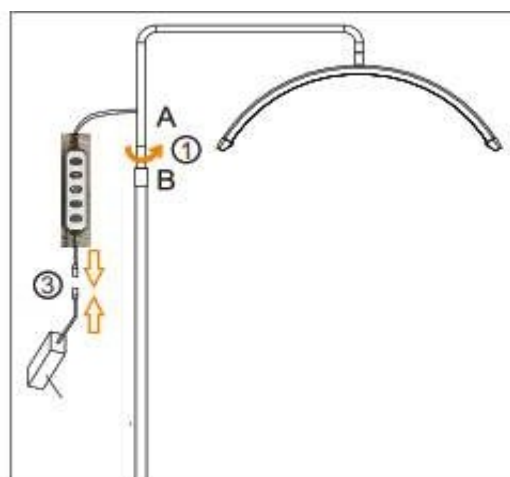

A HD-M3X lámpa felépítése és felszerelése

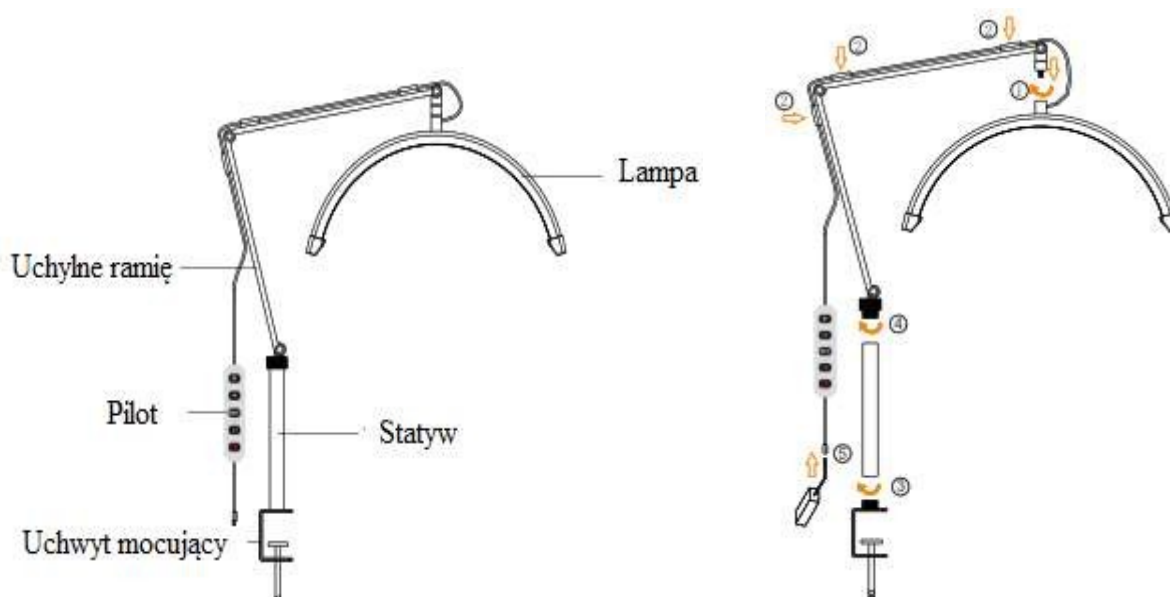


1. Csavarozza a lámpát a billenőkar felső részébe.
2. Szerelje be a kábelt a speciális vezetőtartókba
3. Szerelje fel a lámpaállványt a rögzítőkonzolra
4. Csatlakoztassa a lámpát az állványhoz
5. Csatlakoztassa a tápkábelt a tápegységhez

Megjegyzés: A forgatókarok csuklóinak merevségét egy imbuszkulccsal lehet beállítani.

A lámpakar hosszabb vagy intenzív használata után túlzott ízületi játék léphet fel. A rögzítőcsavarok meghúzásával javítsa az ízületek merevségét.

Vigyázat! Ne húzza túl a csavarokat. A rögzítőcsavarok túlhúzása esetén fennáll a lámpakar sérülésének veszélye.

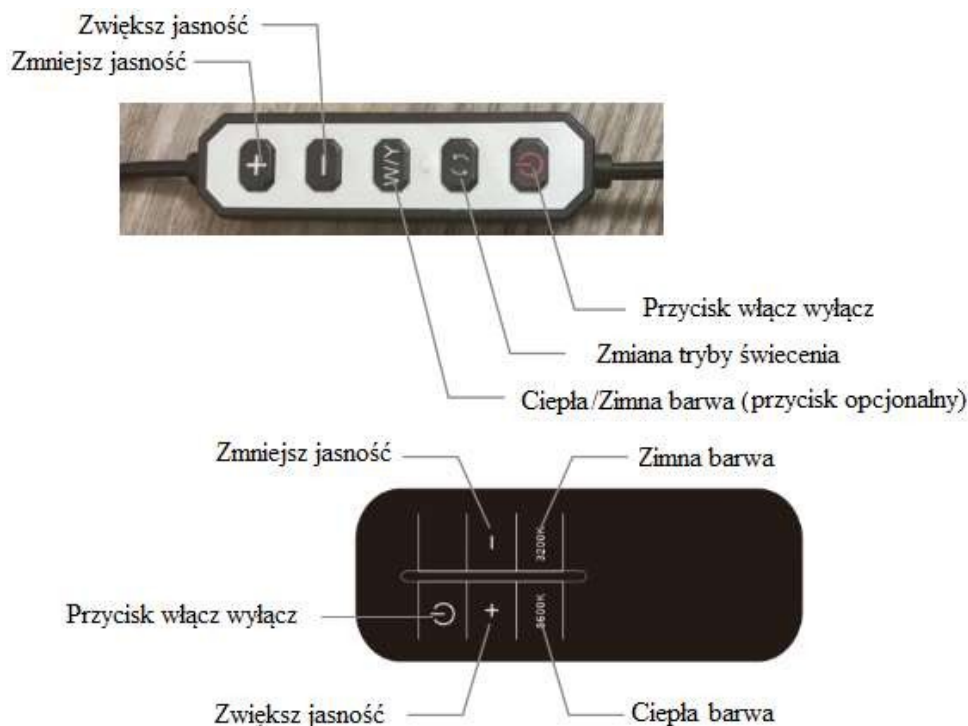

A HD-M3X/ HD-M6X lámpa használata

Megjegyzés: A távirányító opcionálisan jár a lámpához (egyes modellek nem tartalmazzak távirányítót).

Megjegyzés: A fénymódváltó gomb opcionális a lámpavezérlőn (egyes modellek nem rendelkeznek ezzel a gombbal).

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék professzionális berendezés a kozmetikai műtétekhez. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos hatások.
2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a jelen használati utasításban megadott célokon kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP SP. Z O.O. cég) végezhet.
3. A készüléket nem szabad folyadékok, nedves helyek közelében vagy nedves kézzel felszerelni vagy működtetni - úgy, hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.
4. Azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP SP. Z O.O.). a következő esetekben:
(a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt, vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították, vagy a készülék háza megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.
9. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva) egy perces szünetet betartani.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, károsodásának vagy akár leégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizhez - így elkerülhető a veszély.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeret hiánya miatt gyengébb fizikai és szellemi képességű személyek is használhatják, amennyiben felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatokat megértsék.
3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha a közelében gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.



A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolást a környezetvédelmi elveknek megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban

a használt elektromos és elektronikus berendezéseket elkülönítve kell gyűjteni, és a használt elektronikus és elektromos berendezések gyűjtőhelyére kell vinni.

Az elhasználódott és a régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrafeldolgozásra kell küldeni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőhelyeken, valamint az ACTIVESHOP SP-nél kell leadni. Z O.O.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. Az eszközt jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.