

ACTIVESHOP[®]

INSTRUCCIONES DE USO

Sillón cosmético hyd. A 210D con cuna




Importador:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/11/2024

Dimensiones del aparato:

- Asiento en posición tumbada con reposacabezas 63 x 180cm
- Altura min. 64cm
- Altura máx. 80cm
- Base 55 x 106,5cm
- Capacidad de carga máxima de la silla 150kg

Construcción

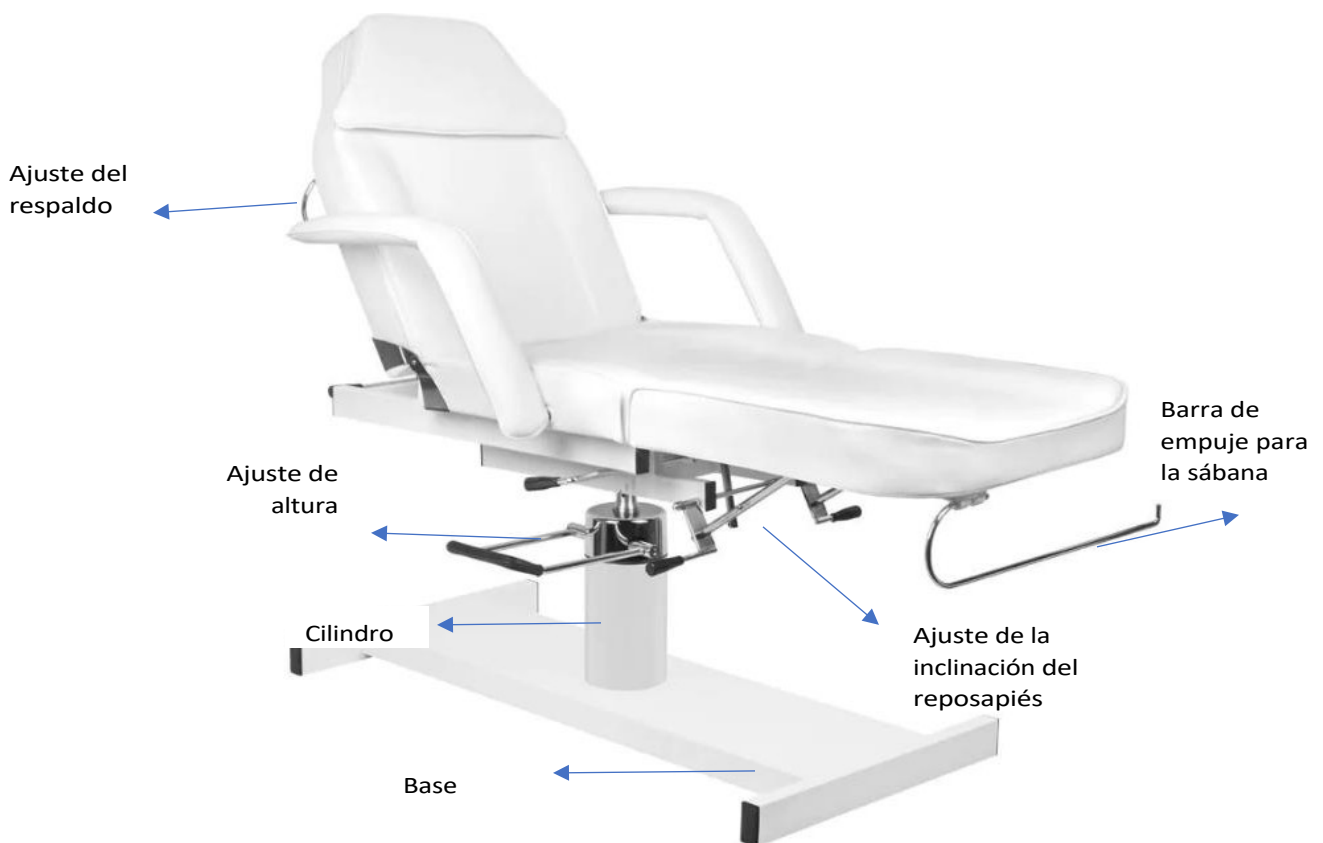


La altura del a s i e n t o puede ajustarse mediante la manivela situada debajo del asiento. Ajuste de altura de 64-80 cm.


La posición del reposapiés puede ajustarse en ángulo (lo que se conoce como función de cuna) mediante un mando situado debajo del reposapiés.

Montaje

1. Fije los pies a la base de la silla. A continuación, fije el actuador (como en la imagen).

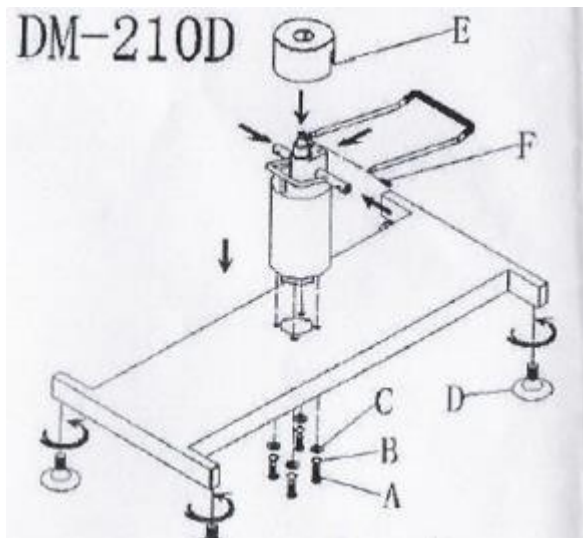

2. A continuación, conecte la base al asiento.
3. Encaje los reposabrazos en los orificios de los laterales de la silla.
4. Coloque las guías de ajuste del respaldo

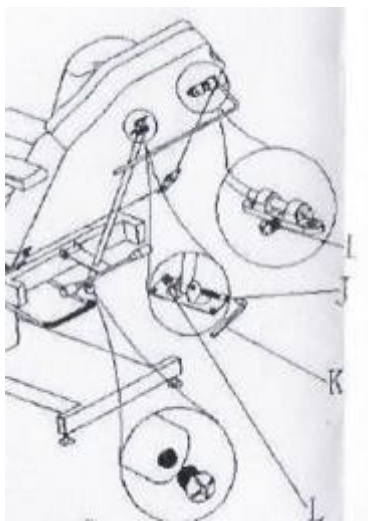

Limpieza y desinfección

Para mantener la superficie de la silla en buen estado, límpiela con regularidad. Recuerde limpiar y desinfectar la silla después de cada uso. Se recomienda realizar una desinfección a fondo una vez al mes.

I Superficies de metal y plástico

Para limpiar las superficies y los mandos de metal y plástico, pásales un paño húmedo. Para limpiar zonas o rincones de difícil acceso, un cepillo pequeño funcionará bien. No utilice demasiado líquido para limpiar el aparato. A continuación, desinfecte el aparato con un líquido adecuado.

II Superficies de acero inoxidable

Lo mejor funciona mejor limpieza limpieza con una solución detergente.

Amoníaco i a mayoría de los disolventes pueden utilizarse para eliminar manchas difíciles. Evite las soluciones a base de cloro. **III Superficies metálicas pintadas o cromadas**

No utilice chorros de agua (duchas, cañones de agua a alta presión) para la limpieza.

No limpie a altas temperaturas ni con mucha humedad, y no exponga la unidad a condiciones que puedan provocar la contaminación por líquidos.

No utilice disolventes ni ácidos para la limpieza.

IV Superficie de la silla

Limpie uniformemente la superficie del asiento con un limpiador especial para cuero y, a continuación, pásele un paño limpio y suave.

Mantenimiento

- Las reparaciones deben ser realizadas por personal experimentado y autorizado por el fabricante. Las reparaciones realizadas por personal no autorizado pueden causar lesiones o daños en la unidad de los que el fabricante no se hace responsable.
- Utilice únicamente piezas de repuesto originales autorizadas por el fabricante.
- No utilice el sillón estético ni los accesorios si no funcionan correctamente.
- Todos los trabajos de mantenimiento y reparación deben documentarse.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en salones de belleza. El manejo del aparato sólo por personal cosmético cualificado evita consecuencias indeseables durante el tratamiento.
2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en este manual. Todas las operaciones de mantenimiento y reparación deben ser realizadas exclusivamente por un técnico autorizado (empresa ACTIVESHOP Ltd.).
3. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, en lugares húmedos o con las manos mojadas, para que no penetren líquidos en el aparato.
4. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de ACTIVESHOP Ltd. en los siguientes casos
(a) ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o emite sonidos extraños,
c) se ha dañado el cable de alimentación, d) se ha volcado el aparato o se ha dañado su carcasa.
5. No coloque objetos sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si un objeto extraño entra en la abertura, desconecte el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.
9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda respetar un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

PRECAUCIÓN:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras anomalías de funcionamiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado; de este modo evitará cualquier peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y falta de experiencia y familiaridad con el equipo, si se proporciona supervisión o instrucciones sobre cómo utilizar el equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.
3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.

5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede constituir un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y almacenarse fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL APARATO



Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en los centros de reciclaje de acuerdo con las normas de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben tirarse al cubo de la basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Con el fin de proteger el medio ambiente, de conformidad con la Directiva 2012/19/CE relativa a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos usados

los aparatos eléctricos deben recogerse por separado y entregarse después a los puntos de recogida de aparatos electrónicos y eléctricos usados. Los aparatos viejos y al final de su vida útil contienen componentes totalmente reciclables, por lo que deben entregarse para su reciclado. Por lo tanto, deben entregarse en los puntos de recogida adecuados, así como en ACTIVESHOP Ltd.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

La unidad debe transportarse a una temperatura comprendida entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en el embalaje original. Almacene la unidad en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el aparato no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.