

ACTIVESHOP[®]

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kozmetikai karosszék hyd. A 210D bölcsővel



Importőr:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud DC2A

54-610 Wrocław,

Lengyelország


www.activeshop.com.pl

Rev. A/11/2024

Készülék méretei:

- Ülés fekvő helyzetben fejtámlával 63 x 180cm
- Magasság min. 64cm
- Magasság max. 80 cm
- Alap 55 x 106,5 cm
- A szék maximális terhelhetősége 150 kg


A készülék felépítése:

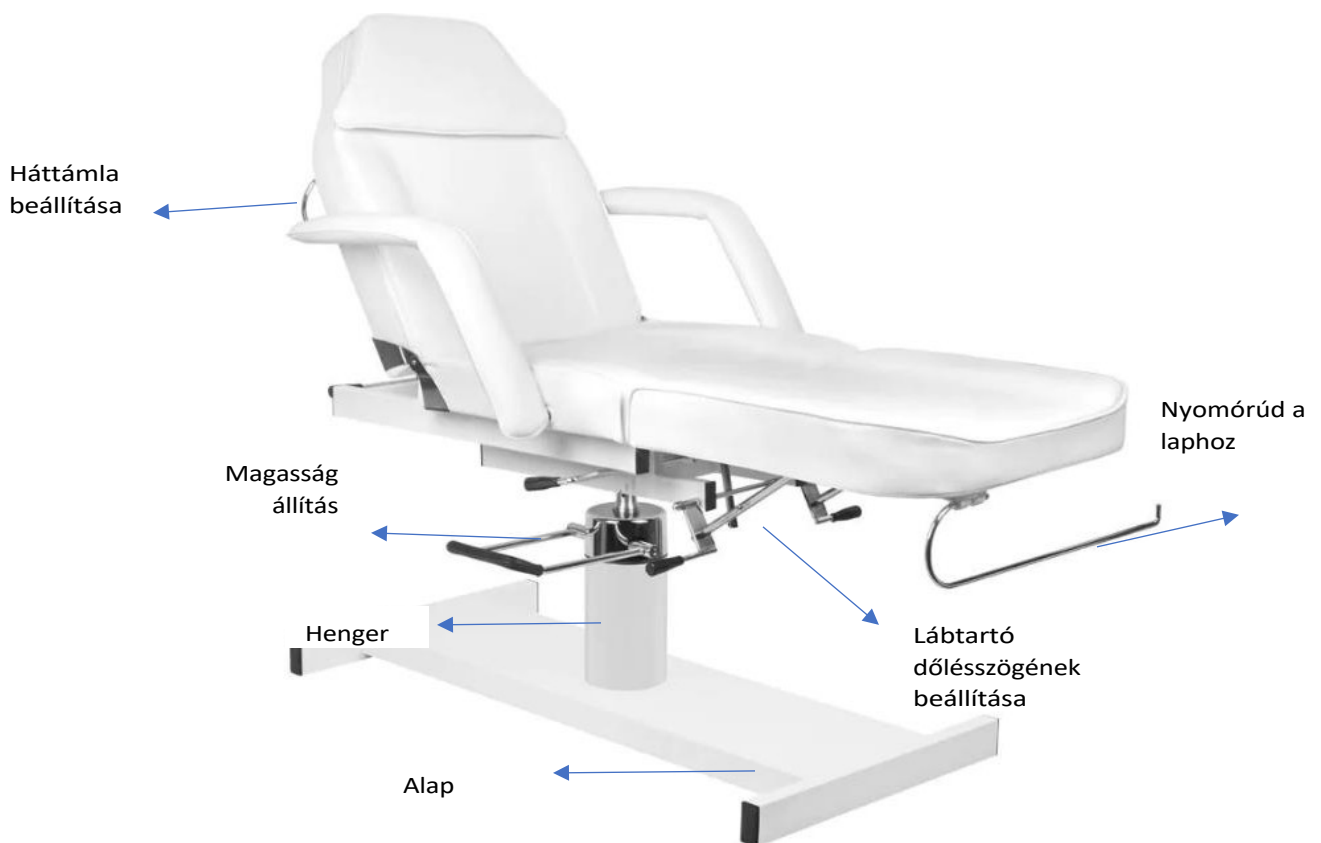


Az ülés magassága az ülés alatt található fogantyúval állítható. Magasságállítás 64-80 cm között.
A lábtartó pozíciója a lábtartó alatt található vezérlővel szögben állítható (úgynevezett bölcsoffunkció).

A készülék felszerelése

1. Csatlakoztassa a lábakat a szék talpához. Ezután csatlakoztassa a működtetőt (a képen látható módon).

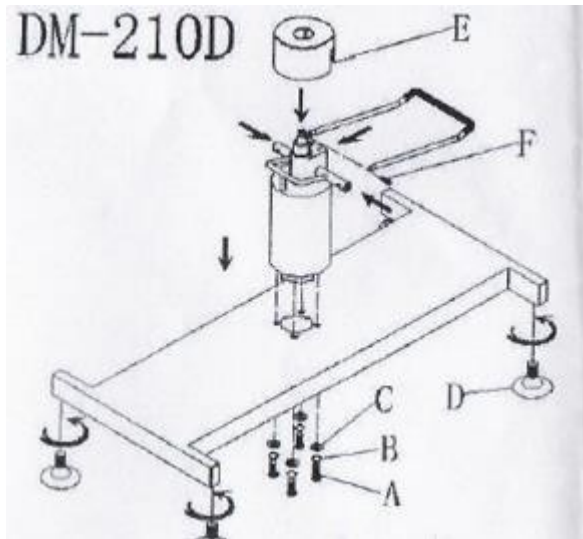

2. Ezután csatlakoztassa a talpat az üléshez.
3. Illessze be a karfákat a szék oldalain lévő lyukakba.
4. Illessze be a háttámla beállítási vezetőit

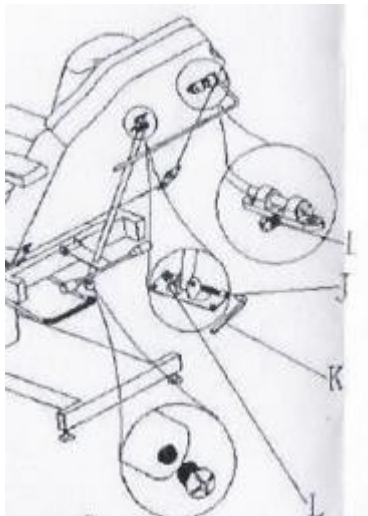

A készülék tisztítása és fertőtlenítése:

A szék felületének jó állapotban tartása érdekében rendszeresen tisztítsa meg. Ne feledje, hogy minden használat után tisztítsa és fertőtlenítse a széket. Havonta egyszer ajánlott alapos fertőtlenítést végezni.

I Fém és műanyag felületek

A fém- és műanyag felületek, valamint a kezelőszervek tisztításához törölje le őket nedves ruhával. A nehezen hozzáférhető területek vagy sarkok tisztításához egy kis kefe is jól használható. Ne használjon túl sok folyadékot a készülék tisztításához. Ezután fertőtlenítse a készüléket megfelelő folyadékkal.

II Rozsdamentes acél felületek

A legjobb működik a legjobban tisztítás tisztítás enyhe oldattal mosószerrel. Ammónia i a legtöbb oldószerrel a kemény foltok eltávolíthatók. Kerülje a klór alapú

oldatokat. III Festett vagy krómozott fémfelületek

Ne használjon vízsugarakat (zuhany, nagynyomású vízágyú) a tisztításhoz.

Ne tisztítsa magas hőmérsékleten és magas páratartalom mellett, és ne t e g y e ki a készüléket olyan körülményeknek, amelyek folyadékszennyeződéshez vezethetnek.

Ne használjon oldószereket vagy savakat a tisztításhoz.

IV A szék felülete

Törölje át egyenletesen az ülés felületét speciális bőrtisztítóval, majd tiszta, puha ruhával törölje át.

Karbantartás

- A javításokat tapasztalt és a gyártó által felhatalmazott személyzetnek kell elvégeznie. Az illetéktelen személyek által végzett javítások sérülést vagy károkat okozhatnak a készülékben, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.
- Csak a gyártó által jóváhagyott eredeti pótalkatrészeket használjon.
- Ne használja a kozmetikai széket vagy a tartozékokat, ha azok nem működnek megfelelően.
- Minden karbantartási és javítási munkát dokumentálni kell.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék szépségszalonokban való használatra szánt professzionális berendezés. A készülék kizárólag képzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos következmények.

2. A készüléket nem szabad szétszerelni, és nem szabad megkísérelni a jelen kézikönyvben megadott célokön kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Kft. cég) végezhet.

3. A készüléket nem szabad folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel felszerelni vagy működtetni - így nem kerülhet folyadék a k é s z ü l é k b e .

4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Kft. által biztosított hivatalos szervizhez:

(a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat ad ki,

c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a háza megsérült.

5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.

6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.

7. Ne helyezzen semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.

8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.

9. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott egy perc szünetet tartani a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva).

10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizhez - így elkerülhető minden veszély.

2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a berendezéssel kapcsolatos tapasztalat és ismeret hiánya miatt korlátozott fizikai és szellemi képességekkel rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a berendezés biztonságos használatáról, és megértik a kapcsolódó kockázatokat.

3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.

4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha a közelében gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak.

5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



A használt elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolásokat a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében a 2012/19/EK irányelvvel összhangban a hulladék használt elektromos és elektronikai használt elektromos készülékek használt elektromos készülékekről szóló irányelvvel összhangban.

az elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni, majd a használt elektronikus és elektromos berendezések gyűjtőhelyein kell leadni. Az elhasználódott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell átadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőhelyeken, valamint az ACTIVESHOP Kft.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.