

ACTIVESHOP[®]

NÁVOD K POUŽITÍ

Kosmetické křeslo hyd. A 210



Dovozce:

z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/03/2025

Skenován
í pro
různé
jazyky




Rozměry:




Montáž:


1. Přišroubujte pohon k základně.
2. Zasuňte jazýček na dříku aktuátoru dovnitř.
3. Nasadte kryt.
4. Zasuňte jazýček na dříku pohonu do polohy na vnější straně dříku.
5. Nasadte sedlo na pohon
6. Utáhněte šrouby
7. Namontujte držáky do opěradla a sedadla.

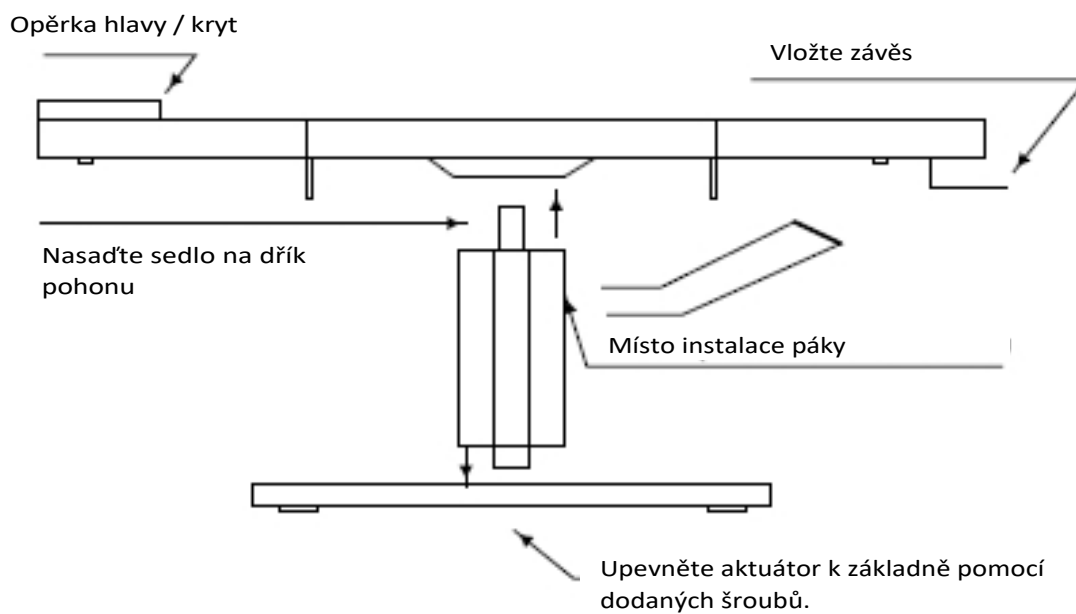

Ovladač:

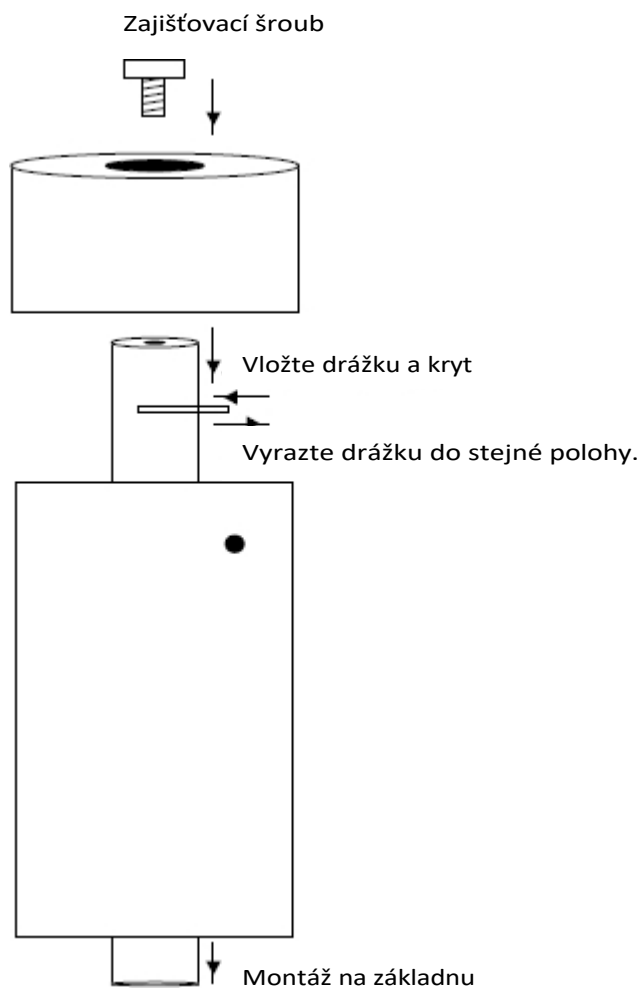

Montáž držáku

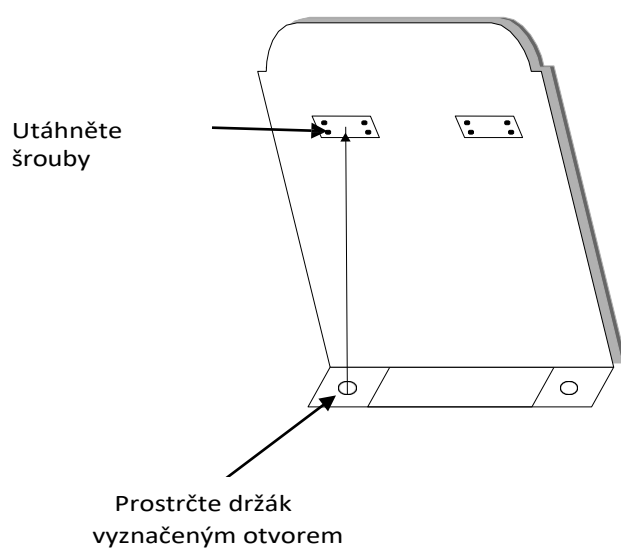

Funkce sedadla:

- Zvedání sedadla: zvedněte sedadlo stisknutím páčky.
- Snížení sedadla: zatlačte na páčku, dokud sedadlo zcela neklesne.
- Zajištění otáčení sedadla: zvedněte páčku co nejvíce nahoru.

Upozornění:

Nesedejte si prudce a nevrhejte se na sedadlo. Je zakázáno pohybovat židlí nebo ji přenášet, pokud se na ní nacházejí osoby nebo břemena. Nestůjte na židli nohama nebo koleny, nehoupejte se, nesedejte si na područky a nesedejte si na více než jednu osobu.

Čištění a dezinfekce přístroje:

Před čištěním jednotku odpojte od sítě.

Chcete-li udržet povrch sedadla v dobrém stavu, pravidelně jej čistěte. Po každém použití nezapomeňte křeslo vyčistit a vydezinfikovat. Doporučujeme provádět důkladnou dezinfekci jednou měsíčně.

I Kovové a plastové povrchy

Kovové a plastové povrchy a ovládací prvky otřete vlhkým hadříkem. K čištění těžko přístupných míst nebo rohů dobře poslouží malý kartáček. K čištění spotřebiče nepoužívejte příliš mnoho tekutiny. Poté spotřebič vydezinfikujte vhodnou tekutinou.

II Povrchy z nerezové oceli

Nejlépe funguje čištění jemným roztokem čisticího prostředku. K odstranění odolných skvrn lze použít čpavek a většinu rozpouštědel. Vyhněte se roztokům na bázi chlóru.

III Lakované nebo chromované kovové povrchy

- K čištění nepoužívejte vodní trysky (sprchy, vysokotlaká vodní děla).
- Nečistěte při vysokých teplotách a vysoké vlhkosti, n e v y s t a v u j t e přístroj podmínkám, které mohou vést ke kontaminaci kapalinou.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani kyseliny.

IV Povrch sedadla

- Povrch sedadla rovnoměrně otřete speciálním čisticím prostředkem na kůži a poté jej otřete čistým měkkým hadříkem.

Údržba:

1. **Denní čištění**
Odstraňte prach měkkým, suchým hadříkem.
2. **Odstraňování odolných nečistot**
Jak víte, odolné nečistoty se běžným suchým hadříkem odstraňují obtížně. V takovém případě nejprve použijte měkký hadřík se zředěným neutrálním čisticím prostředkem a poté jej otřete suchým hadříkem.
3. **Použití benzenu, ředidel, benzínu nebo jiných rozpouštědel je zakázáno.**
Tyto prostředky mohou poškodit pokožku nebo způsobit korozi výrobku.
4. **Skladovací a provozní podmínky**
Výrobek nevystavujte silnému slunečnímu záření ani vlhkosti. V opačném případě může dojít k poškození výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických ordinacích. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabraňuje nežádoucím účinkům během ošetření.

Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřýma rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.

V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis poskytovaný společností ACTIVESHOP Sp. z o.o.:

- (a) do spotřebiče se dostala kapalina, (b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky,
- c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) přístroj byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.

Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neinstalujte spotřebič na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.

Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když ukončíte práci se spotřebičem.

Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.

Nepokládejte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.

Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.

Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o bezpečném používání zařízení tak, aby byla pochopena související rizika.

Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.

Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.

Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do kontejnerů na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních se použité

elektrozařízení sbírat odděleně a odevzdávat na následujících sběrných místech

sběr odpadních elektronických a elektrických zařízení. Staré spotřebiče po skončení své životnosti obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k opětovnému zpracování. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Spotřebič by měl být přepravován při teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Při skladování a přepravě nesmí být zařízení hozeno nebo upuštěno, vystaveno mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.