

ACTIVESHOP[®]

KASUTUSJUHEND

Kosmeetiline tugitool hyd. A 210



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Poola

www.activeshop.com.pl

Rev. A/03/2025

Erinevate
keelte
skaneeri
mine




Mõõtmed:




Kokkupanek:


1. Kruvige käivitusseade aluse külge
2. Lükake ajami varre otsik sissepoole.
3. Paigaldage kate.
4. Viige ajamitüünise tüvel olev saksteel väljapoole tüve.
5. Paigaldage iste ajami külge.
6. Pingutage kruvidega
7. Paigaldage seljatoele ja istmele klambrid.

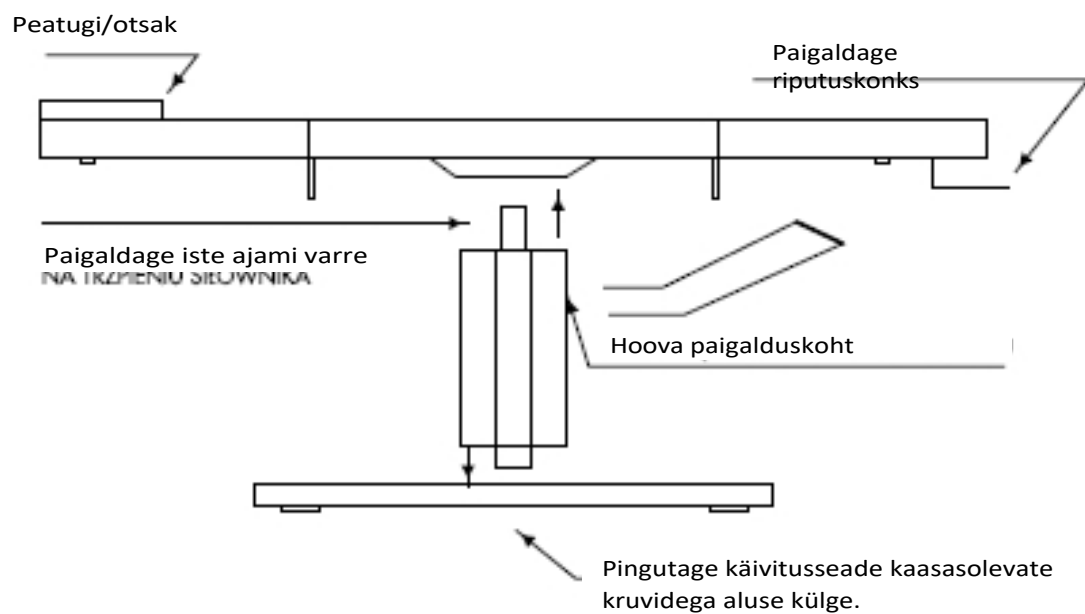

Käivitusseade:

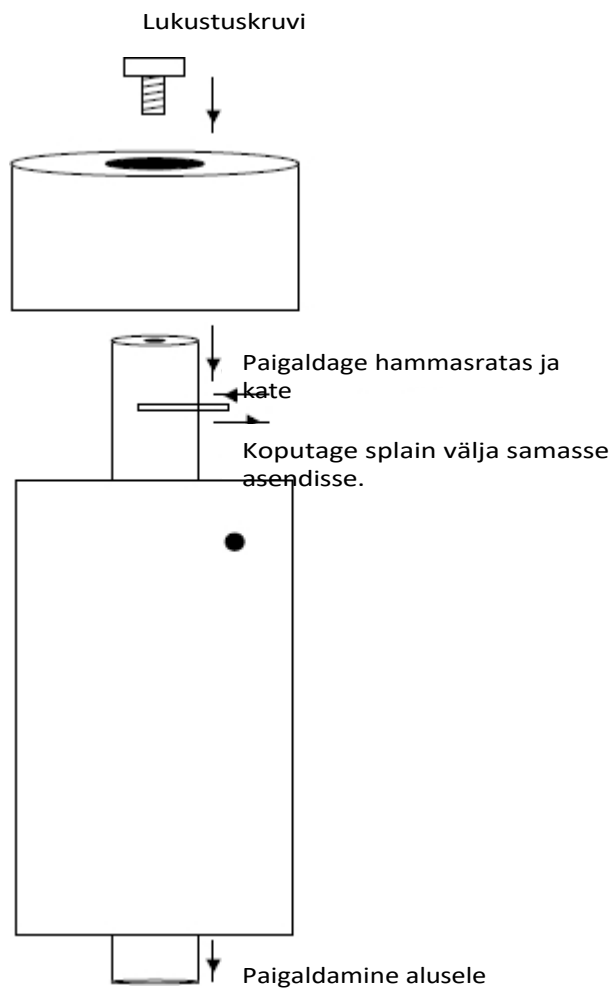

Konsooli paigaldamine

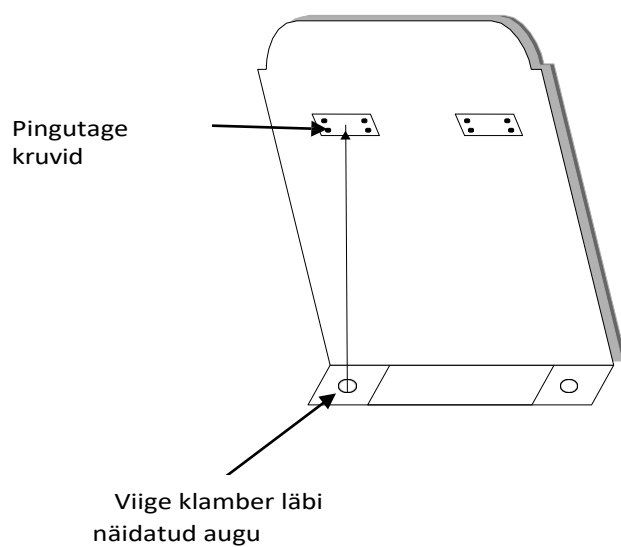

Istme funktsioonid:

- Istme tõstmine: tõstke istet, vajutades hoobile.
- Istme langetamine: vajutage alla, kuni iste langeb täielikult alla.
- Istme pöörlemislukustus: tõstke hoob võimalikult kõrgele.

Ettevaatust

Ärge istuge järsult ega visake oma raskust istmele. Keelatud on tooli liigutada või kanda, kui sellel on inimesed või koormus. Ärge seiske toolile jalgade või põlvedega, ärge kiigutage, ärge istuge käetoole ega istuge rohkem kui ühe inimese peal.

Seadme puhastamine ja desinfitseerimine:

Enne puhastamist tõmmake seade vooluvõrgust välja.

Et istmepind oleks heas seisukorras, puhastage seda regulaarselt. Ärge unustage puhastada ja desinfitseerida tooli pärast iga k a s u t a m i s t . Soovitame põhjalikku desinfitseerimist teostada kord kuus.

I Metallist ja plastist pinnad

Metallist ja plastikust pindade ja juhtelementide puhastamiseks pühkige neid niiske lapiga. Raskesti ligipääsetavate kohtade või nurkade puhastamiseks sobib hästi väike harja. Ärge kasutage seadme puhastamiseks liiga palju vedelikku. Seejärel desinfitseerige seade sobiva vedelikuga.

II Roostevabast terasest pinnad

Puhastamine maheda pesuvahendi lahusega toimib kõige paremini. Tugevate plekkide eemaldamiseks võib kasutada ammoniaaki ja enamikku lahusteid. Vältige klooripõhiseid lahuseid.

III Värvitud või kroomitud metallpinnad

- Ärge kasutage puhastamiseks veepihustit (duššid, kõrgsurvevee pihustid).
- Ärge puhastage kõrge temperatuuri ja kõrge õhuniiskuse juures, ärge pange seadet kokku tingimustega, mis võivad põhjustada vedeliku saastumist.
- Ärge kasutage puhastamiseks lahusteid ega happeid.

IV Istme pind

- Pühkige istme pind ühtlaselt spetsiaalse nahapuhastusvahendiga ja seejärel pühkige see puhta pehme lapiga.

Hooldus:

1. **Igapäevane puhastamine**
Tolmu eemaldamine pehme, kuiva lapiga.
2. **Kangekaelse mustuse eemaldamine**
Nagu te teate, on kangekaelse mustuse eemaldamine tavalise kuiva lapiga keeruline. Sellisel juhul kasutage esmalt pehmet lappi lahjendatud neutraalse pesuvahendiga ja seejärel pühkige kuiva lapiga.
3. **Benseeni, lahjendite, bensiini või muude lahustite kasutamine on keelatud.**
Need ained võivad kahjustada nahka või söövitada toodet.
4. **Säilitamis- ja kasutustingimused**
Ärge pange toodet tugeva päikesevalguse või niiskuse kätte. Vastasel juhul võib toode kahjustada.

OHUTUSMEETMED

Seade on professionaalne seade, mida kasutatakse kosmeetilistes operatsioonides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikute poolt väldib ebasoovitavaid mõjusid ravi ajal.

Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud eesmärgil. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab teostama ainult volitatud hooldustehnik (firma ACTIVESHOP Ltd.).

Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike läheduses, märgades kohtades või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.

Järgnevatel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja võtke ühendust ACTIVESHOP Ltd. poolt pakutava volitatud teenindusega:

- (a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalisi helisid, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber pööratud või selle korpus on kahjustatud.

Ärge asetage kaablitele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet kohta, kus keegi võib toitejuhtmele peale astuda.

Turvalisuse huvides tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.

Ärge pange midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.

Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.

Seadme püsiva eluea tagamiseks soovitatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) järgida üheminutilist intervalli.

Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:

Toitejuhtme kahjustuse või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii vältite ohtu.

Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seadme ohutuks kasutamiseks, et sellega seotud riskidest oleks aru saadud.

Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.

Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kasutamisest.

See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada majapidamisjätmete konteinerites. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonna kaitsmiseks vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta, kasutatud

elektriseadmed tuleb eraldi koguda ja üle anda järgmistes kogumispunktides

elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumine. Vanad seadmed sisaldavad oma kasutusaja lõpus täielikult taaskasutatavaid komponente ja tuleks seetõttu anda ümbertöötlemiseks. Seetõttu tuleks need üle anda asjakohastele kogumispunktile ja ka ACTIVESHOP Ltd-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.