

ACTIVESHOP®

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos kozmetikai szék Sillon Classic 3 motorral

Modell: C501A



**Importőr: Cillon 50101, gyártó: Cillon 501, gyártó: Cillon 50
gyártó: Cillon 501, gyártó: Cillon 501, gyártó: Cillon 501, gy
Cillon 501:**

Z O.O.


Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław,

Lengyelország

www.activeshop.com.pl

Rev. A/04/2024

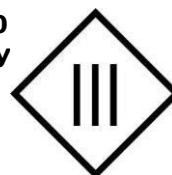

***A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT*.**


Ez a kézikönyv részletes információkat tartalmaz a készülék működésével és karbantartásával kapcsolatban. A készülék használata előtt olvassa el a mellékelt használati utasítást. Használja a készüléket a leírtak szerint. Őrizze meg ezt a kézikönyvet, és gondoskodjon arról, hogy minden személy, aki a készüléket használhatja, megismerje azt.

A Sillon elektromos kozmetikai szék egy professzionális berendezés, amely tökéletes bármely szépségszalonba. Ideális masszázshoz, kozmetikai és fizioterápiás kezelésekhez. A fotel úgy lett kialakítva, hogy teljes kényelmet biztosítson, amikor kezelés közben ráfekszik. A szék négy részből és egy kivehető párnából áll. Az ülés két oldalán fogantyúk találhatók, ahová a távirányítót fel lehet akasztani, hogy mindig kéznél legyen.

A termék terhelhetősége: 150 kg


Az üléstest maximális terhelhetősége 150 kg. Ne emeljen többet a megadott súlynál, mint amit az ülés elbír.

Ne ugráljon a háttámlán, és ne gyakoroljon nagy nyomást a kartámaszra, hogy elkerülje a termék szerkezetének sérülését.

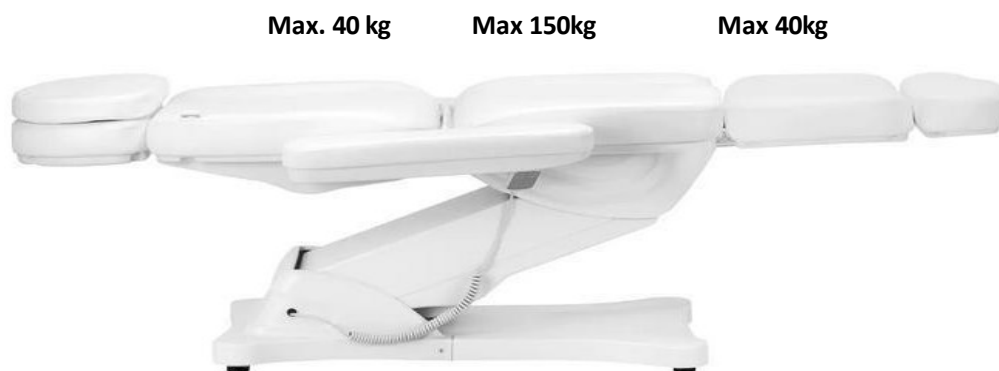

Megjegyzés

A csomagoláshoz kartondobozt és külső kartondobozokat használunk, összesen 10 réteg papírral, hogy biztosítsuk a termékek védelmét. Javasoljuk az eredeti csomagolás megőrzését a későbbi használatra, különösen a garanciális időszak alatti visszaküldések esetén. Biztonsági okokból a szék kartondobozból való kiemeléséhez két emberre van szükség. Emeléskor álljon a szék fejtámlájának és lábtartójának mindkét oldalára. Ne feledje, hogy a széket csak a fejtámla és a lábtartó pozíciójából lehet felemelni, a karfák egyik oldaláról sem.

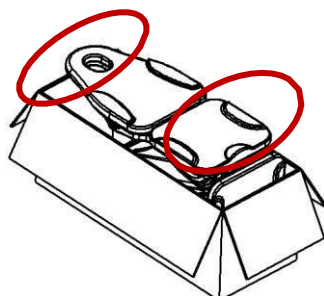

A fotel használata előtt ellenőrizze, hogy a csomagolás sértetlen-e, és nem sérült-e meg a szállítás során. Ha bármilyen probléma merül fel, kérjük, értesítse a szállító céget vagy a

A készülék átvételétől számított 2 napon belül az értékesítés utáni személyzet. Győződjön meg arról, hogy a kiszállításkor minden tartozék teljes. Ha a kiszállításkor hiányzó tartozékokat talál, időben lépjen kapcsolatba az értékesítés utáni munkatársakkal.


Az elektromos kozmetikai széket zárt, száraz helyiségben kell használni. A helyiség hőmérsékletének $+10^{\circ}$ és -40° között, a relatív páratartalomnak pedig 30% és 75% között kell lennie. Ha az elektromos kozmetikai szék 0° alatti hőmérsékletnek volt kitéve, várjon legalább 5 órát a használat előtt, hogy a készüléknek legyen ideje elérni a szobahőmérsékletet.

Az elektromos kozmetikai szék használata előtt olvassa el a használati utasítást, és végezze el a következő lépéseket:

- (1) Győződjön meg róla, hogy minden csomagolóanyagot eltávolítottak.
- (2) Győződjön meg arról, hogy a szék működőképes.
- (3) Helyezze az elektromos kozmetikai széket arra a helyre, ahol használni fogja.
- (4) Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy megfelelő konnektorba.


Tipp! Gyermekek és tapasztalatlan személyek nem használhatják ezt a készüléket. A gyermekeket felügyelni kell, és nem szabad az elektromos kozmetikai szék közelében játszani. Biztonsági okokból húzza ki a készüléket a konnektorból, és ne hagyja felügyelet nélkül. Húzza ki a hálózati kábelt is.

A készülék méretei:

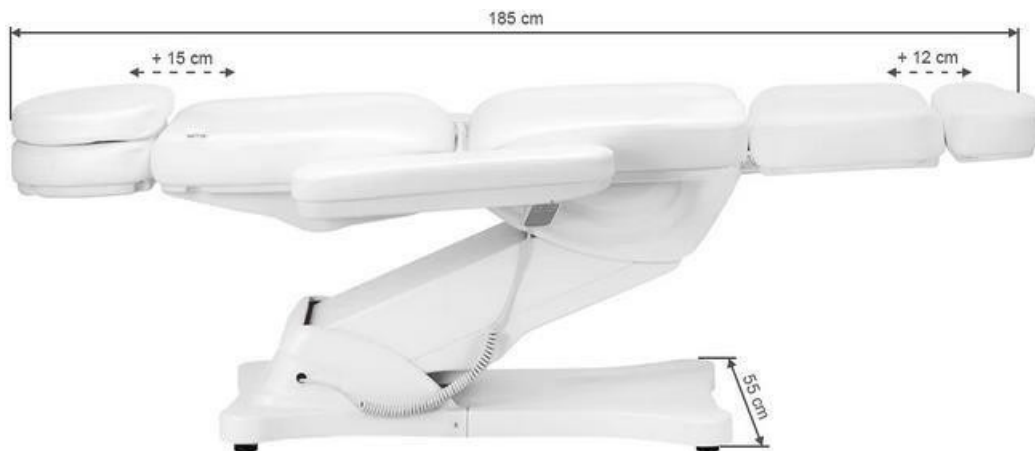



A készülék felépítése:

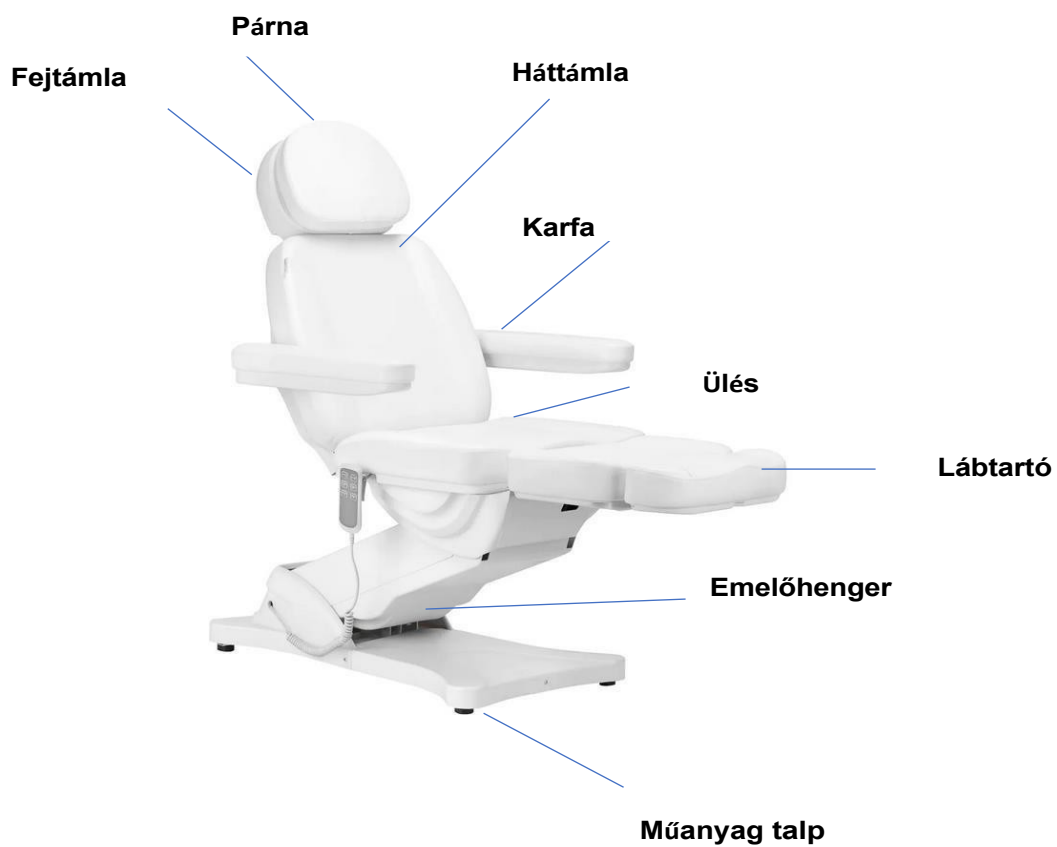

Figyelmeztetés

1. A lábtartót nem úgy tervezték, hogy egy felnőtt teljes súlyát elbírja.
2. Ne üljön közvetlenül a karfára és a lábtartóra.
3. Ne használja az elektromos nőgyógyászati vizsgálószéket gyúlékony gázok közelében.
4. Ne emeljen nagyobb súlyt, mint amekkorát a szék elbír.
5. Ügyeljen arra, hogy a konnektorok közötti távolság ne haladja meg a 2 métert.

Figyelmeztetés

1. Biztonsági okokból a hálózati kábelt mindig földelt konnektorba dugja be.
2. Ne kösse a tápkábelt a készülékhez. A tápkábel megemelése vagy meghúzása károsíthatja azt. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel vészhelyzetben könnyen eltávolítható legyen.
3. Az elektromos szépségfotel mozgatása előtt húzza ki a tápkábelt, hogy az ne akadjon be a szék egyes részei közé.
4. Ha a tápkábel megsérült, azonnal húzza ki a kábelt, ne használja a széket, és forduljon hivatalos szervizközponthoz. Csak az eredeti tápkábelt használja.
5. Ne engedje, hogy a kezelést nem végző személy irányítsa a távirányítót.
6. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szék alá.
7. Győződjön meg arról, hogy a szék körül elegendő szabad tér van ahhoz, hogy a széket szabadon össze- és szét lehessen hajtani.
8. Győződjön meg arról, hogy a szék körül nincsenek éles vagy veszélyes tárgyak, amelyek károsíthatják a készüléket.
9. Ne módosítsa a készüléket saját maga. Ha a szék nem működik megfelelően, hagyja abba a használatát, és forduljon hivatalos szervizközponthoz.


A készülék használata:

1. Csatlakoztassa a tápkábelt egy külső 110V~240V-os tápegységhez.

Karfatámasz telepítési módja:

A karfa felszereléséhez az ülésnek vízszintes helyzetben kell lennie. Csúsztassa a kartámaszt a háttámla oldalán található lyukba. A kartámasznak szilárdan kell rögzülnie. Csavarja el jobbra vagy balra, hogy megfelelően a helyére kerüljön. Ugyanígy járjon el a másik kartámasszal is.


A kartámasz merőlegesen áll a talajra (függetlenül az ülés szögétől). Ez 180°-kal elforgatható.

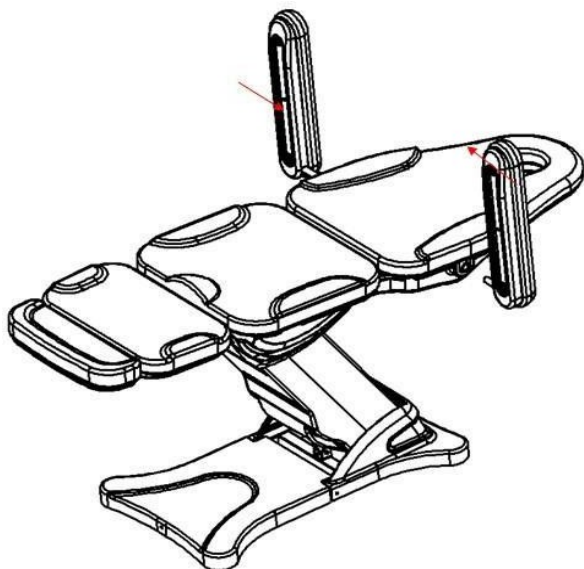


1. Kézi vezérlési funkció (emelési magasság: az ágy 58~ 82 cm-re van a talajtól).



2. Kézi vezérlési funkció (hátmagassági szög 0-80 °, lábmagassági szög 0-90 °)

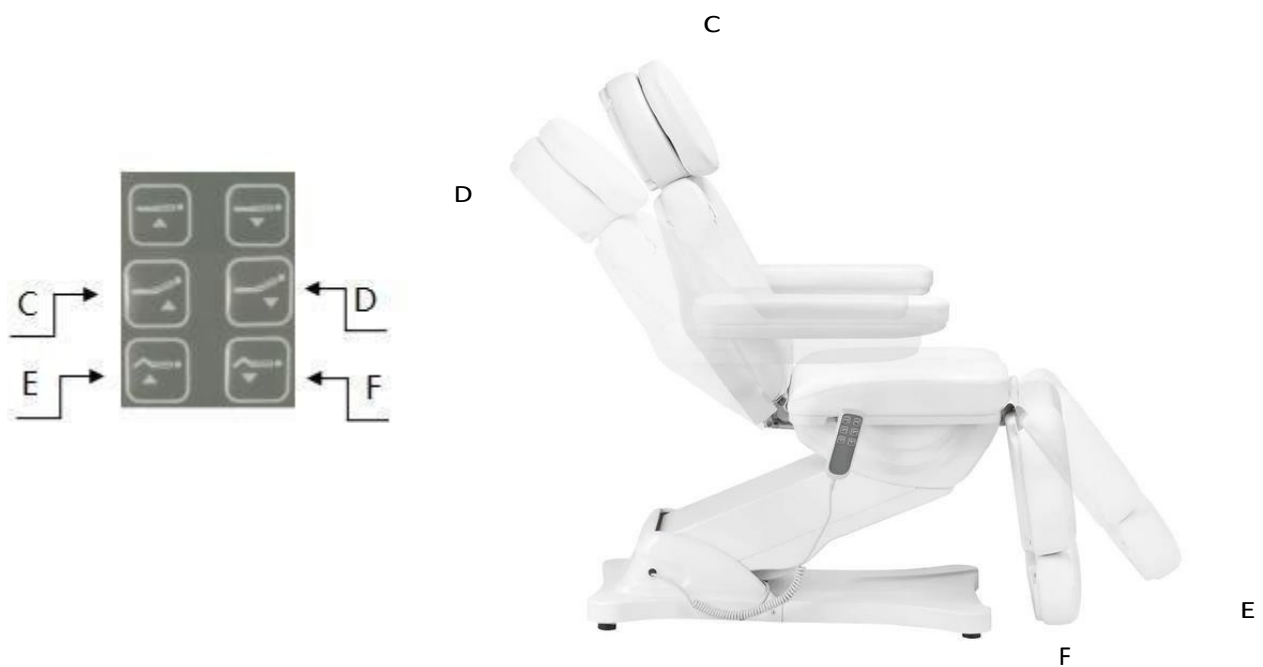

3. Lábtartó behúzási funkció (lábtartó, hossza: 0~ 12cm)

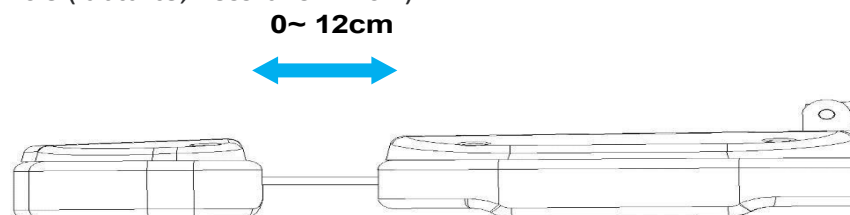

A készülék tisztítása és fertőtlenítése:

- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz.
- A szék felületének jó állapotban tartása érdekében rendszeresen tisztítsa meg. Ne feledje, hogy minden használat után tisztítsa és fertőtlenítse a széket. Javasoljuk, hogy havonta egyszer végezzen alapos fertőtlenítést.

I Fém és műanyag felületek

- A fém- és műanyag felületek, valamint a kezelőszervek tisztításához törölje le őket nedves ruhával. A nehezen hozzáférhető területek vagy sarkok tisztításához egy kis kefe is jól használható. Ne használjon túl sok folyadékot a készülék tisztításához. Ezután fertőtlenítse a készüléket megfelelő folyadékkal.

II Rozsdamentes acél felületek

- A tisztítás enyhe mosószeres oldattal működik a legjobban. A kemény foltok eltávolítására ammónia és a legtöbb oldószer használható. Kerülje a klór alapú oldatokat.

III Festett vagy krómozott fémfelületek

- Ne használjon vízsugarakat (zuhany, nagynyomású vízágyú) a tisztításhoz.
- Ne tisztítsa magas hőmérsékleten és magas páratartalom mellett, ne tegye ki a készüléket olyan körülményeknek, amelyek folyadékszennyezéshez vezethetnek.
- Ne használjon oldószereket vagy savakat a tisztításhoz.

IV Ülőfelület

- Törölje át egyenletesen az ülés felületét egy speciális bőrtisztítóval, majd tiszta, puha ruhával törölje át.

Karbantartás

Karbantartás előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz.

1. A javításokat tapasztalt és a gyártó által felhatalmazott személyzetnek kell elvégeznie. Az illetéktelen személyek által végzett javítások sérülést vagy a készülékben olyan károkat okozhatnak, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.
2. Csak a gyártó által jóváhagyott eredeti pótalkatrészeket használjon.
3. Ne használja az elektromos kozmetikai széket vagy a tartozékokat, ha azok nem működnek megfelelően.
4. Minden karbantartási és javítási munkát dokumentálni kell.

Karbantartási intézkedések

Hetente egyszer ellenőrizze a kezelőszerveket és azok vezetékeit. Hat havonta legalább egyszer ellenőrizze a következő elemek állapotát és működését:

1. tápkábel és annak rögzítése
2. a motor vezetékei
3. A vezérlődoboz és annak vezetékezése
4. a tartozékok csatlakoztatása
5. A zárrendszer normál működése

Ha bármilyen hibát talál, hagyja abba a berendezés használatát, és forduljon hivatalos szervizközponthoz. A működtető/vezérlőegységet csak tapasztalt vagy felhatalmazott személyzet nyithatja ki vagy cserélheti ki.

Ha a berendezés bármelyik része megsérült, húzza ki a tápkábelt és hagyja abba a használatot. Ezután értesítse a szervizt.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldási módszerek
A kézi vezérlés nem reagál	Ellenőrizze, hogy a kézi vezérlés vezetékeit összekötő interfész laza-e. (Ellenőrizze, hogy nincs-e probléma az áramköri lapon) ne felejtse el megjelölni a dugó eredeti helyét.
A motor nem reagál	Változtassa meg a motor dugójának helyzetét

A vezérlődoboz cseréjéhez és egyéb pótalkatrészek megrendeléséhez forduljon a szervizhez, a kapcsolatfelvétel előtt írja le a problémát:

1. Modell
2. Vásárlás dátuma

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. A készülék kozmetikai műtétekhez használt professzionális berendezés. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos következmények.
2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a készüléket a jelen használati útmutatóban megadott célokon kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) végezhet.
3. A készüléket nem szabad folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel felszerelni vagy működtetni - úgy, hogy folyadékok ne kerüljenek a k é s z ü l é k b e .
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Sp. z o.o. által biztosított hivatalos szervizhez:
 - a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt, vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a burkolata megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. A készüléket a készüléket nem szabad elzárni.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtése esetén megsérülhet.
9. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva) egy perces szünetet betartani.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, károsodásának vagy akár leégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizhez - így elkerülhető a veszély.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeret hiánya miatt gyengébb fizikai és szellemi képességű személyek is használhatják, amennyiben felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatok megértésre kerüljenek.
3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolást a környezetvédelmi elveknek megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobni. Tartsa be a következő szabályokat

az ilyen típusú berendezésekre vonatkozó ártalmatlanítási szabályokat. A környezet védelme érdekében

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelv szerint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait elkülönítve kell gyűjteni, és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtőhelyein kell leadni. Az elhasználódott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell küldeni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőhelyeken, valamint az ACTIVESHOP Kft.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.

