

ACTIVESHOP[®]

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Sillón de belleza 557A con bandejas



Importador:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
C/ Graniczna 8b, edif. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2026

Antes de utilizar el sillón de belleza, lea el manual de instrucciones.

1. Asegúrese de que se han retirado todos los materiales de embalaje.
2. Asegúrese de que el sillón funciona correctamente.
3. Coloque el sillón de belleza en el lugar donde se vaya a utilizar.


¡Atención! Los niños y las personas sin experiencia no deben utilizar este aparato. Los niños deben estar supervisados y no deben jugar cerca del sillón de belleza.

Dimensiones:

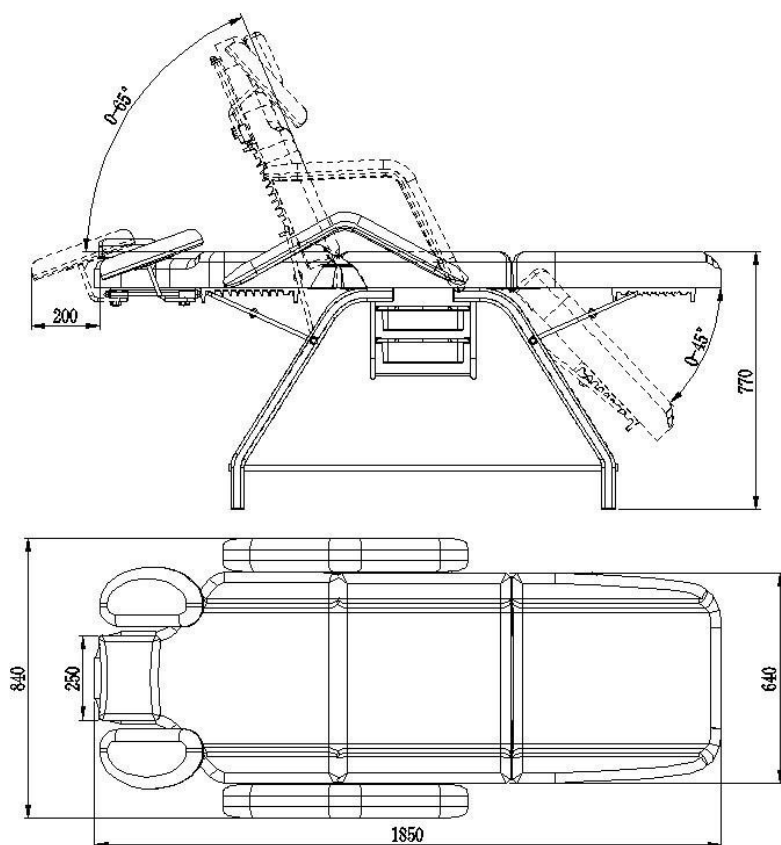


Instrucciones de montaje del dispositivo:

Instala el armazón del sillón. Coloca el reposacabezas sobre una superficie plana y estable; a continuación, fija el armazón del sillón al reposacabezas con tornillos. Coloca en este orden: el soporte plano (1), luego el conector (2) y el tornillo (3).

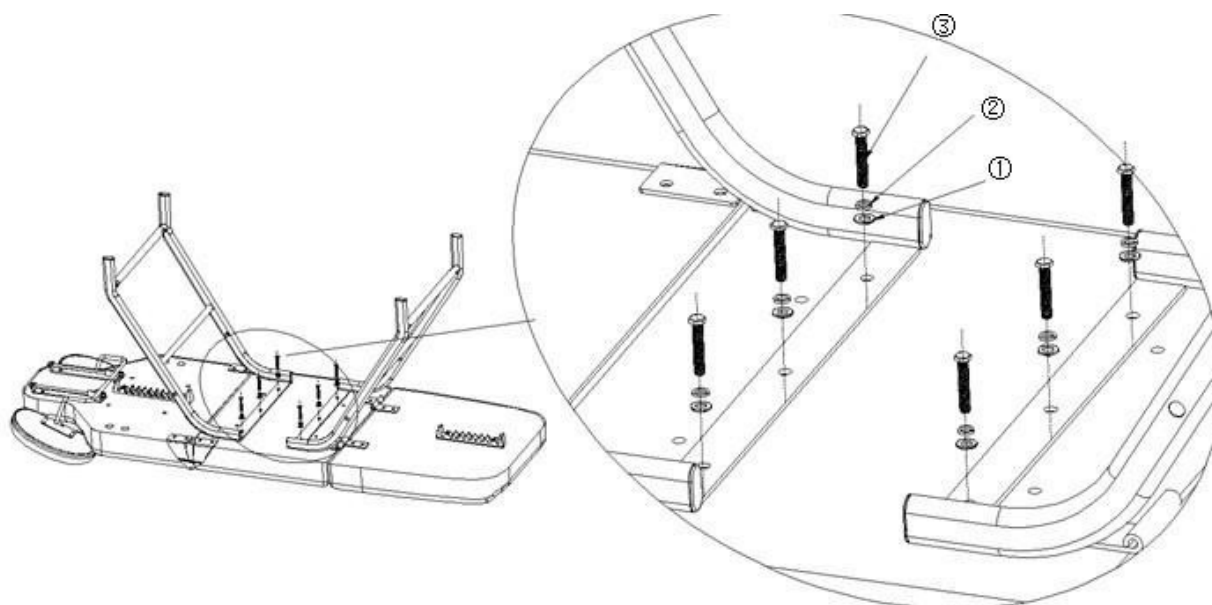


Instala el soporte de la bandeja:


Coloca el soporte de la bandeja sobre el armazón y fíjalo con tornillos.

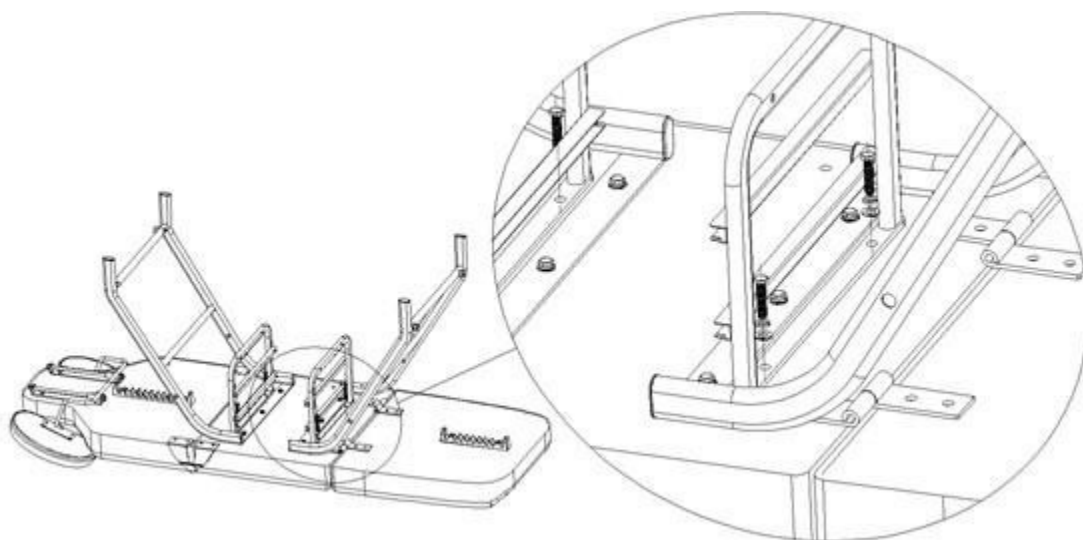


A continuación, une el soporte de la bandeja al tubo de unión y apriétalo con tornillos, tal y como se muestra en la imagen de abajo.

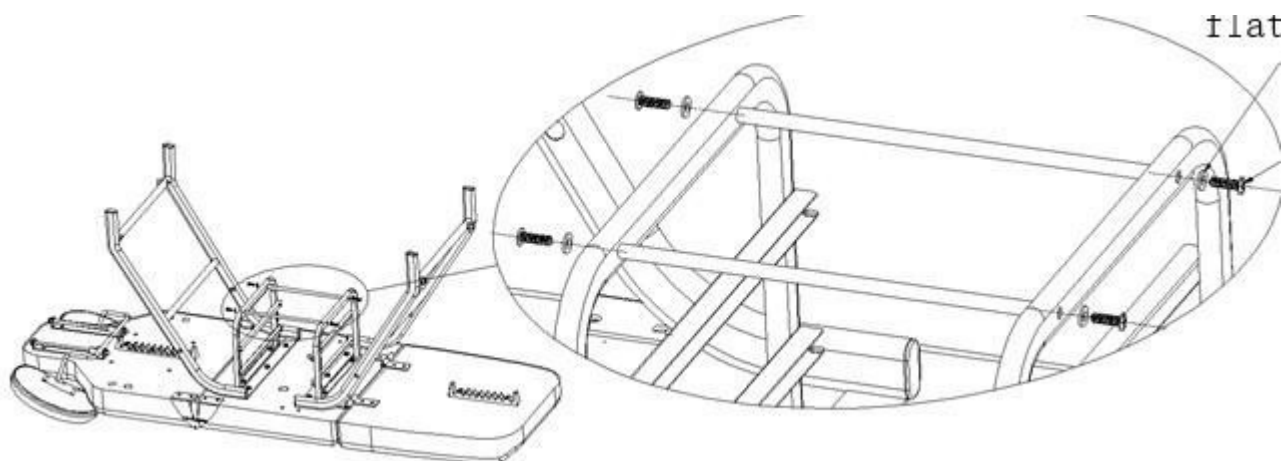

Fija la barra de unión del armazón del sillón: fija la barra de unión a los 4 orificios de las patas del sillón con tornillos.

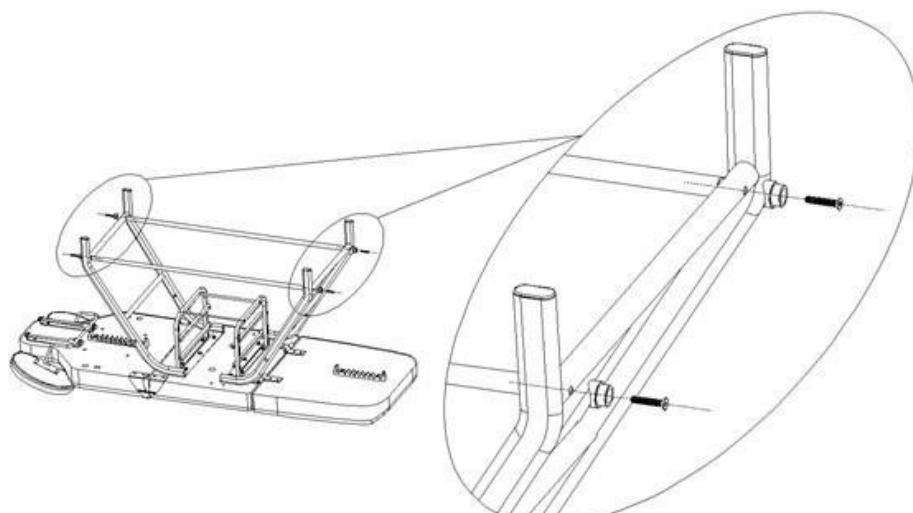


Instala el regulador del respaldo y del reposapiés a ambos lados de las patas del sillón con los tornillos (el muelle más corto debajo del respaldo y el más largo debajo del reposapiés):

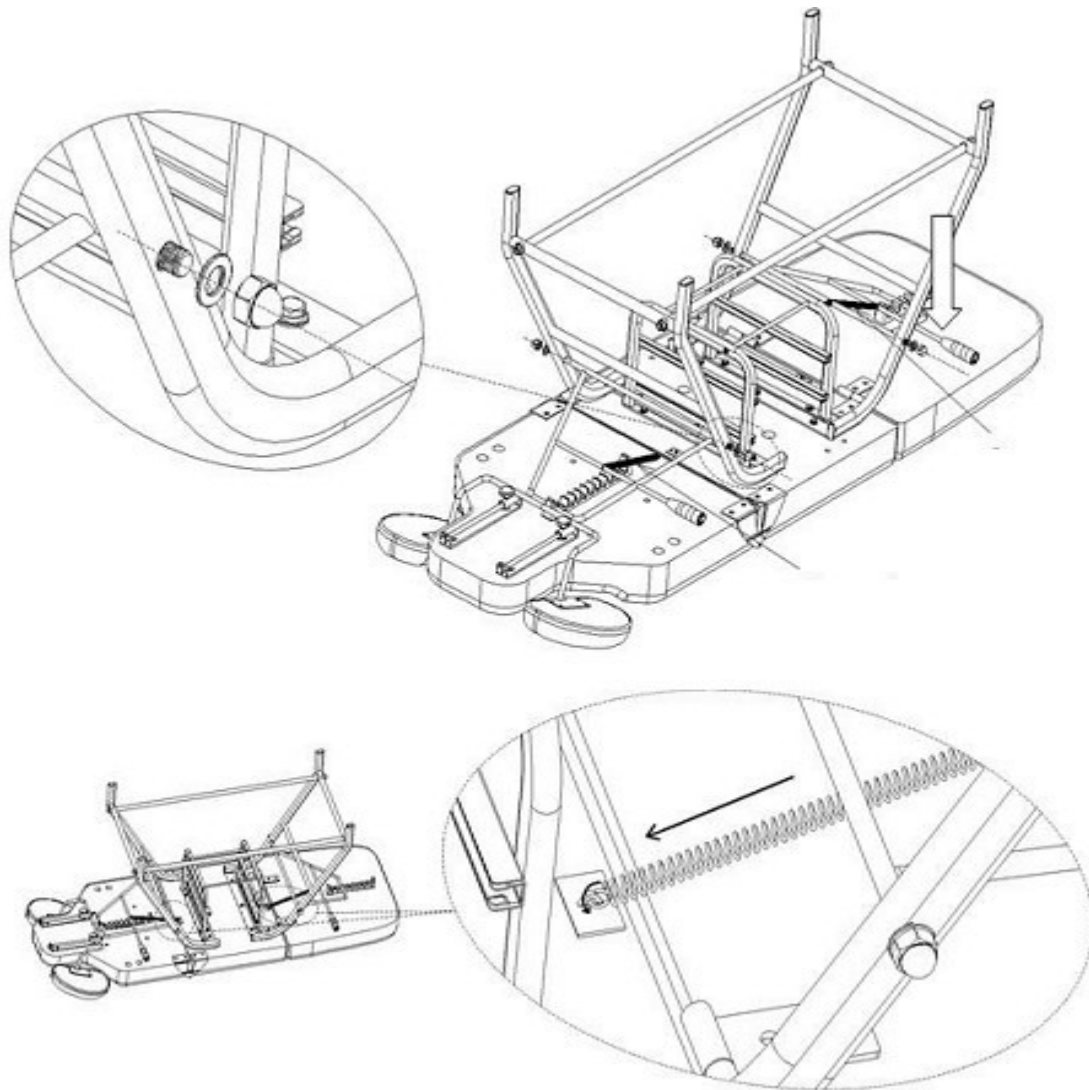


Instale el pomo del reposabrazos:

Coloca el pomo en el orificio de montaje del reposabrazos y apriétalo girándolo en el sentido de las agujas del reloj. Afloja el pomo para cambiar la posición del reposabrazos, tal y como se muestra en la imagen.

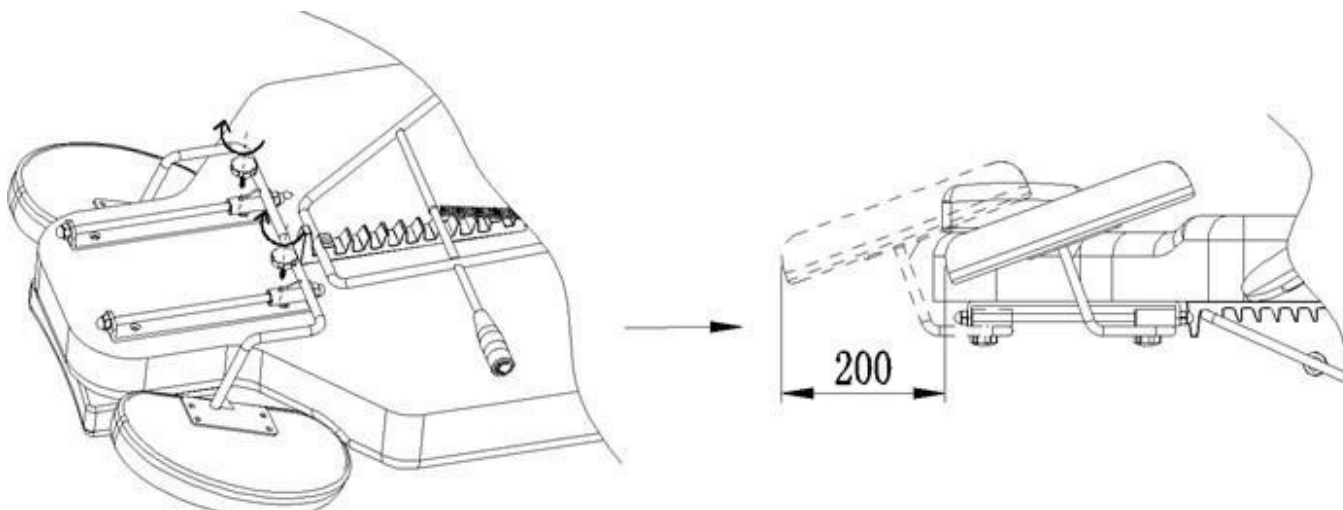


Instalación del reposabrazos:

Introduzca el reposabrazos en el orificio situado en el lateral del respaldo. El reposabrazos debe quedar bien fijado. Gírelo hacia la derecha o hacia la izquierda para que encaje correctamente en su sitio.

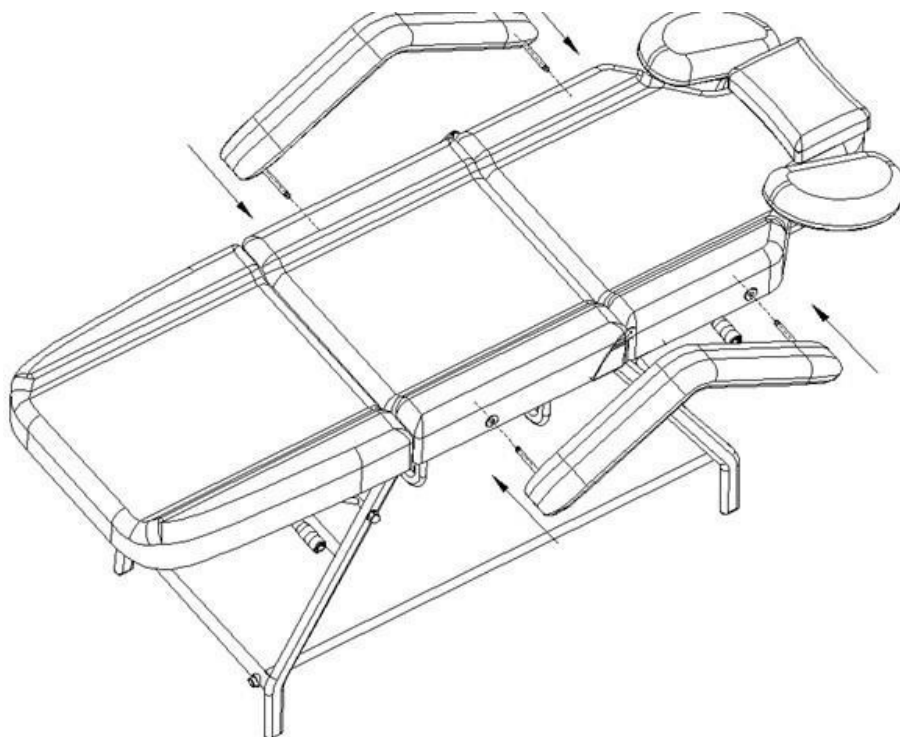

Instala el contenedor tal y como se muestra en la imagen siguiente. Introduce el contenedor en las guías situadas debajo del asiento.

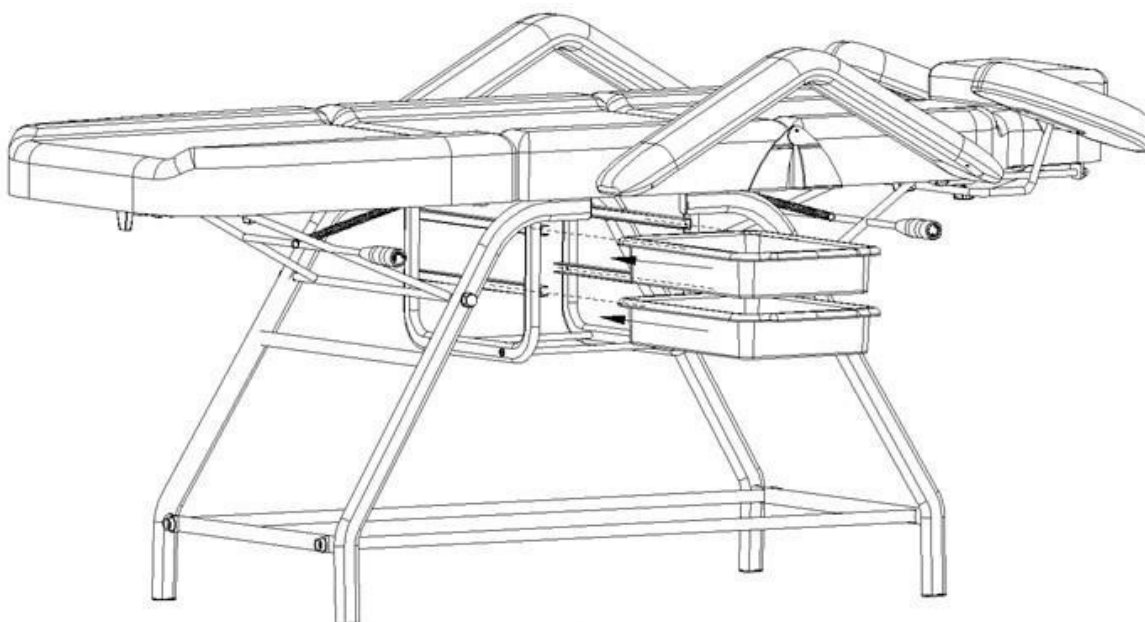

Funciones del asiento:

1. Elevación del respaldo

El ángulo del respaldo y del reposapiés se puede ajustar mediante una palanca manual. Tanto el respaldo como el reposapiés tienen palancas independientes, lo que permite ajustar la altura de cada parte por separado. Esto permite adaptar la configuración del sillón a las necesidades individuales del cliente, para que el tratamiento sea lo más cómodo posible. El sillón se puede reclinar hasta la posición de tumbona.

Para levantar el respaldo, agarre la palanca, levántela y colóquela a la altura deseada.

2. Bajar el respaldo

Sujeta el respaldo del sillón y, con la otra mano, agarra la palanca y bájala hasta alcanzar la posición adecuada. Una vez alcanzada la altura deseada, suelta la palanca.



Limpieza y desinfección del dispositivo:

- Para mantener la superficie del sillón en buen estado, debe limpiarse con regularidad. Recuerde limpiar y desinfectar el sillón después de cada uso. Se recomienda realizar una desinfección a fondo una vez al mes.

I Superficies metálicas y plásticas

- Para limpiar las superficies metálicas y plásticas, así como los elementos de control, frótalas con un paño húmedo. Para limpiar zonas de difícil acceso o esquinas, lo mejor es utilizar un cepillo pequeño. No utilices una cantidad excesiva de líquido limpiador. A continuación, desinfecta el aparato con un líquido adecuado.

II Superficies de acero inoxidable

- Lo mejor es limpiarlas con una solución suave de detergente. El amoníaco y la mayoría de los disolventes pueden utilizarse para eliminar manchas difíciles. Evite las soluciones a base de cloro.

III Superficies metálicas pintadas o cromadas

- No utilice chorros de agua (duchas, cañones de agua a alta presión) para la limpieza.
- No lo limpie en condiciones de alta temperatura y alta humedad; no expongas el dispositivo a condiciones que puedan provocar su contaminación con líquidos.
- No utilice disolventes ni ácidos para la limpieza.

IV Superficie del sillón

- Limpie la superficie del sillón de manera uniforme con un producto especial para la limpieza del cuero y, a continuación, frótela con un paño limpio y suave.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El dispositivo es un equipo profesional destinado al uso en centros de estética. El manejo del dispositivo exclusivamente por parte de personal de estética cualificado permite evitar efectos indeseados durante el tratamiento.
2. No se debe desmontar el dispositivo ni intentar utilizarlo para fines distintos a los indicados en este manual de instrucciones. Todos los trabajos de mantenimiento y reparación deben ser realizados exclusivamente por un técnico del servicio técnico autorizado (la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. No instale ni utilice el dispositivo cerca de líquidos, en lugares húmedos o con las manos mojadas, para evitar que entre líquido en el dispositivo.
4. Desenchufe inmediatamente el dispositivo de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de ACTIVESHOP Sp. z o.o. en los siguientes casos:
 - a) ha entrado líquido en el dispositivo, b) el dispositivo desprende un olor extraño, humo o emite ruidos extraños, c) el cable de alimentación está dañado, d) el dispositivo se ha volcado o se ha dañado su carcasa.
5. No coloque ningún objeto sobre los cables. No instale el dispositivo en lugares donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por motivos de seguridad, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de utilizar el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si se introduce un objeto extraño en la abertura, desenchufe el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el aparato sobre un carrito, estante o vehículo inestable. En caso de caída, el aparato podría sufrir daños.
9. Para garantizar la vida útil prevista del dispositivo, se recomienda esperar un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado, y viceversa).
10. La alimentación eléctrica debe cumplir con las especificaciones indicadas en la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de un funcionamiento del dispositivo, su daño o incluso su incendio.

NOTA:

1. En caso de que el cable de alimentación resulte dañado o se produzcan otras averías, póngase en contacto con un servicio técnico autorizado; así se evitarán riesgos.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas o mentales reducidas, así como por personas sin experiencia ni conocimientos sobre el equipo, siempre que se garantice la supervisión o se les instruya sobre el uso seguro del equipo, de modo que comprendan los riesgos asociados.
3. El dispositivo no está destinado al juego infantil. No permita que los niños jueguen con el dispositivo.
4. No deje el dispositivo sin supervisión cuando haya niños o personas que no tengan los conocimientos suficientes para utilizarlo cerca del mismo.

5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y guardarse fuera del alcance de los niños.

RECICLAJE DEL APARATO



Los aparatos eléctricos, los accesorios y los envases usados deben entregarse a centros de reciclaje de materiales, de conformidad con las normas de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben tirarse en contenedores de residuos domésticos. Se debe

seguir las normas relativas a la eliminación de este tipo de aparatos. Con el fin de proteger el medio ambiente, de conformidad con la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y, a continuación, entregarse en puntos de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Al final de su vida útil, los aparatos antiguos contienen componentes valiosos aptos para el reciclaje, por lo que deben entregarse para su reprocesamiento. Por lo tanto, deben entregarse en los puntos de recogida correspondientes, aunque también pueden entregarse a la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El dispositivo debe transportarse a una temperatura comprendida entre (–) 20 °C y (+) 50 °C, exclusivamente en su embalaje original. El dispositivo debe almacenarse en un lugar bien ventilado y con una humedad relativa no superior al 75 %. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante el almacenamiento y el transporte, no se debe lanzar ni dejar caer el dispositivo, ni exponerlo a golpes mecánicos o a la intemperie.