

ACTIVESHOP®

NAVODILA ZA UPORABO

Kozmetični stol 557A z posodami



Uvoznik:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Poljska

www.activeshop.com.pl


Rev. A/04/2026

Pred uporabo kozmetičnega stola se seznanite z navodili.

1. Prepričajte se, da so vsi embalažni materiali odstranjeni.
2. Prepričajte se, da je stol delujoč.
3. Kozmetični stol postavite na mesto, kjer ga boste uporabljali.


Nasvet! Otroci in neizkušene osebe ne smejo uporabljati te naprave. Otroke je treba nadzorovati in se ne smejo igrati v bližini kozmetičnega stola.

Dimenzije:

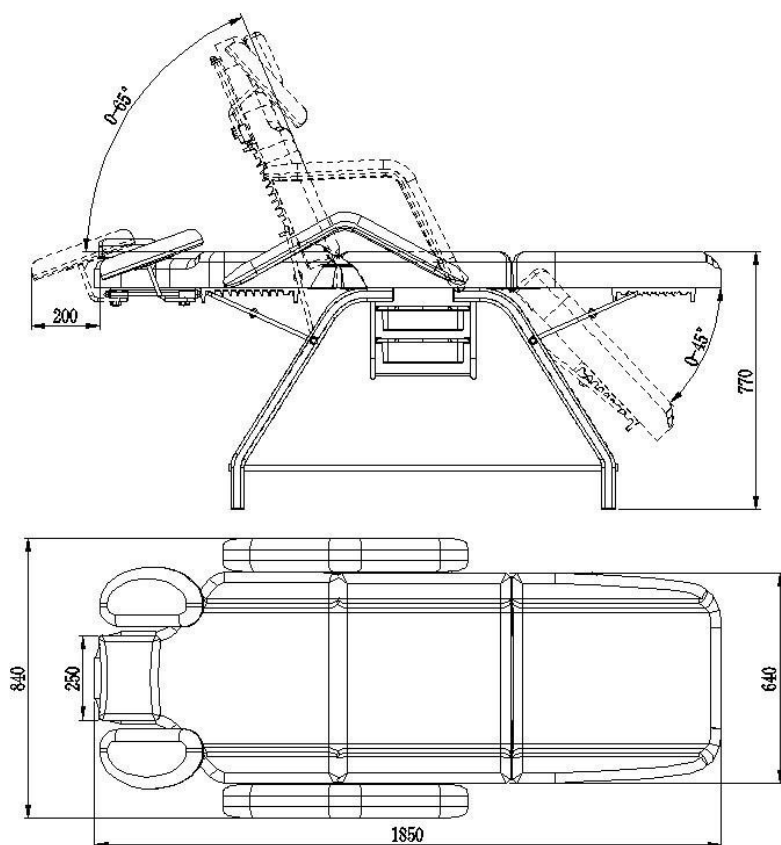


Navodila za montažo naprave:

Namestite okvir ležalnika. Ležalnik položite na ravno, stabilno površino, nato pa okvir ležalnika s pomočjo vijakov pritrdite na ležalnik. Postavite v naslednjem vrstnem redu: ploščati nosilec (1), nato spojko (2) in vijak (3).

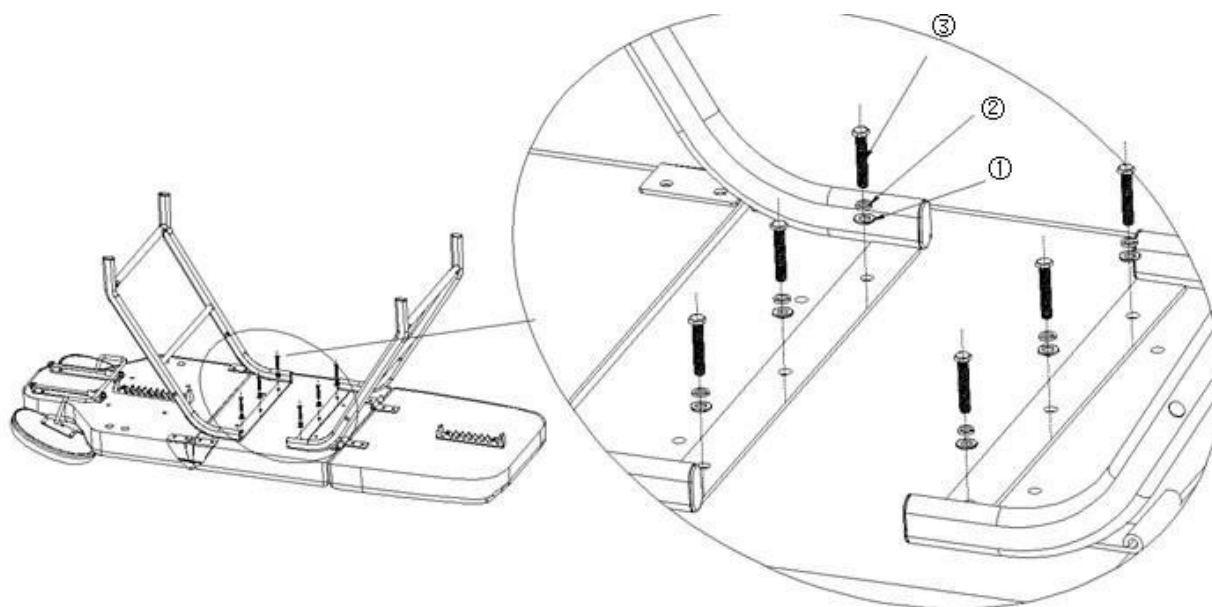


Namestite nosilec pladnja:


Nosilec pladnja namestite na okvir in ga pritrdite z vijaki.

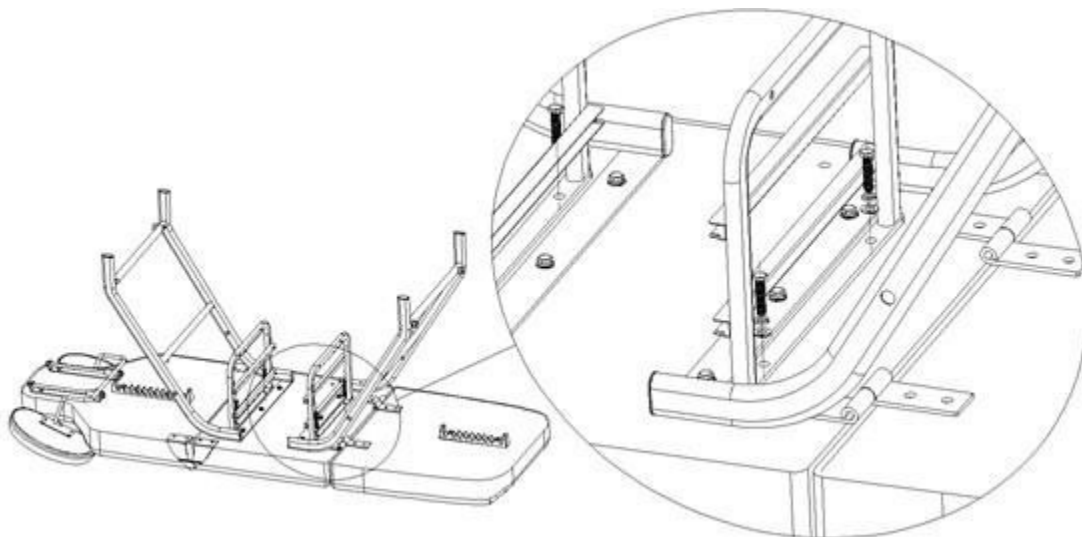


Nato nosilec pladnja povežite s povezovalno cevjo in ga privijte z vijaki, kot je prikazano na sliki spodaj.

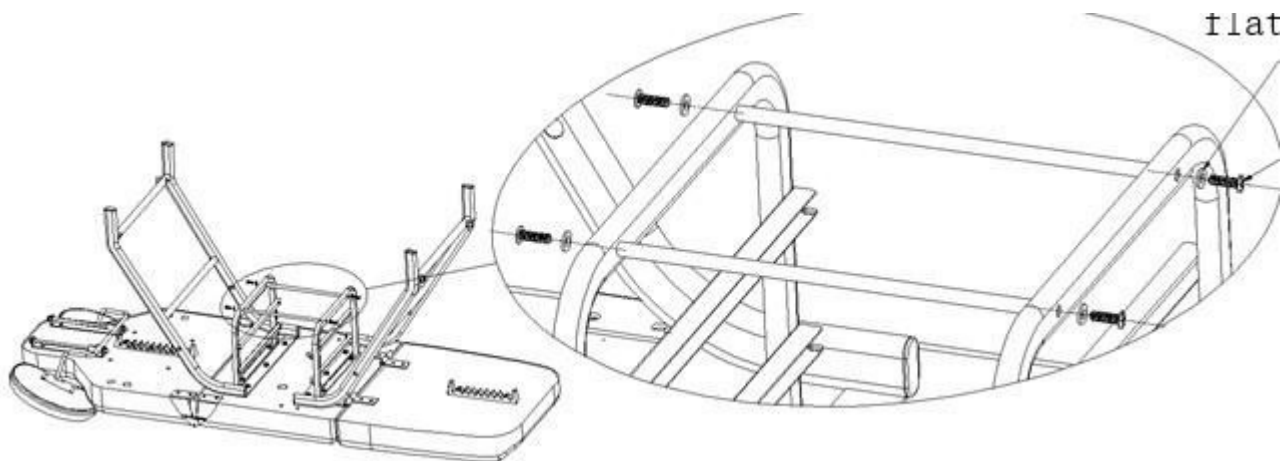

Pritrdite povezovalno palico okvirja fotelja: povezovalno palico pritrdite v 4 luknje v nogah fotelja s pomočjo vijakov.

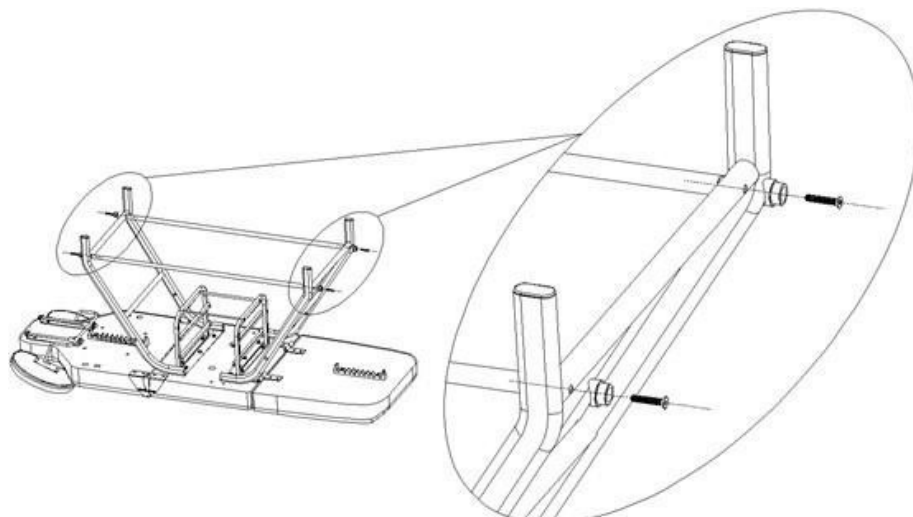


Na obeh straneh nog fotelja s pomočjo vijakov namestite regulator naslona in podnožja (krajša vzmet pod naslonom, daljša pa pod podnožjem):

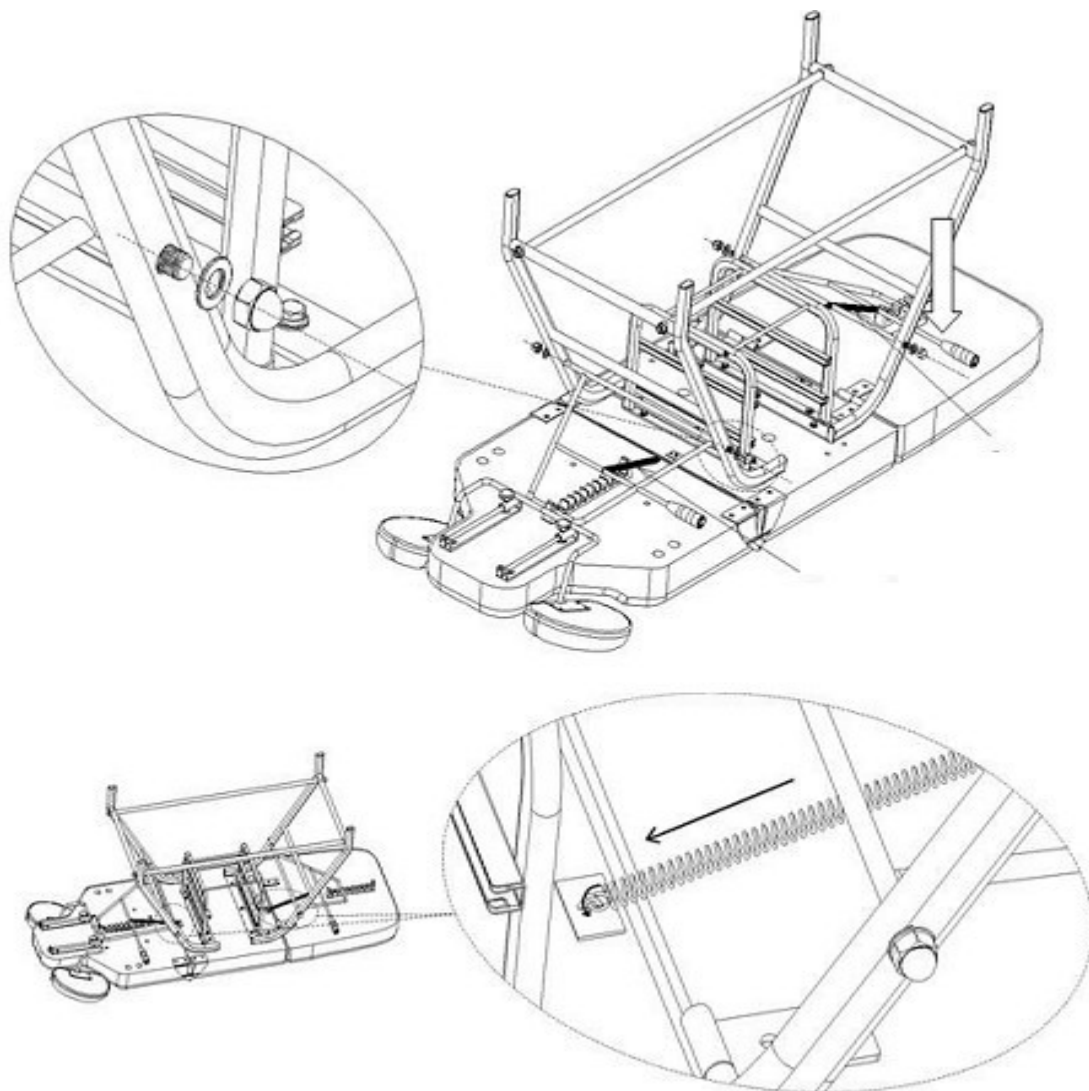


Namestite ročaj naslona za roke:

Usmerite ročaj v montažno odprtino naslona za roke in ga privijte v smeri urinega kazalca. Oslabite ročaj, da premaknete položaj naslona za roke, kot je prikazano na sliki.

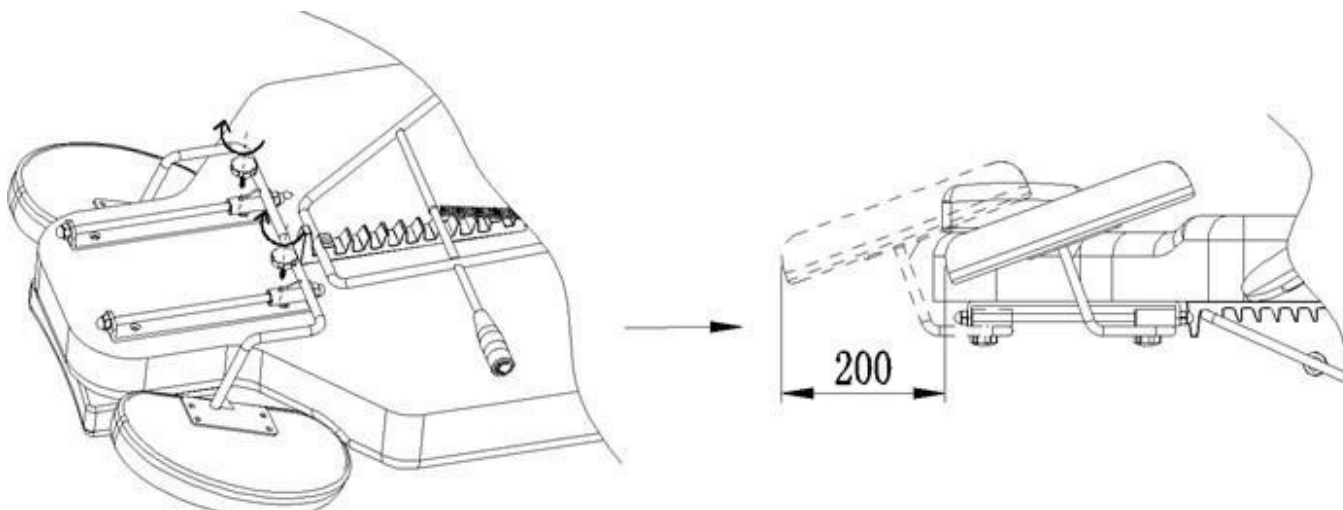


Namestitev naslona za roke:

Vstavite naslon za roke v odprtino na strani naslona. Naslon za roke mora biti trdno pritrjen. Ga zavrtite v desno ali levo, da se pravilno namesti na svoje mesto.

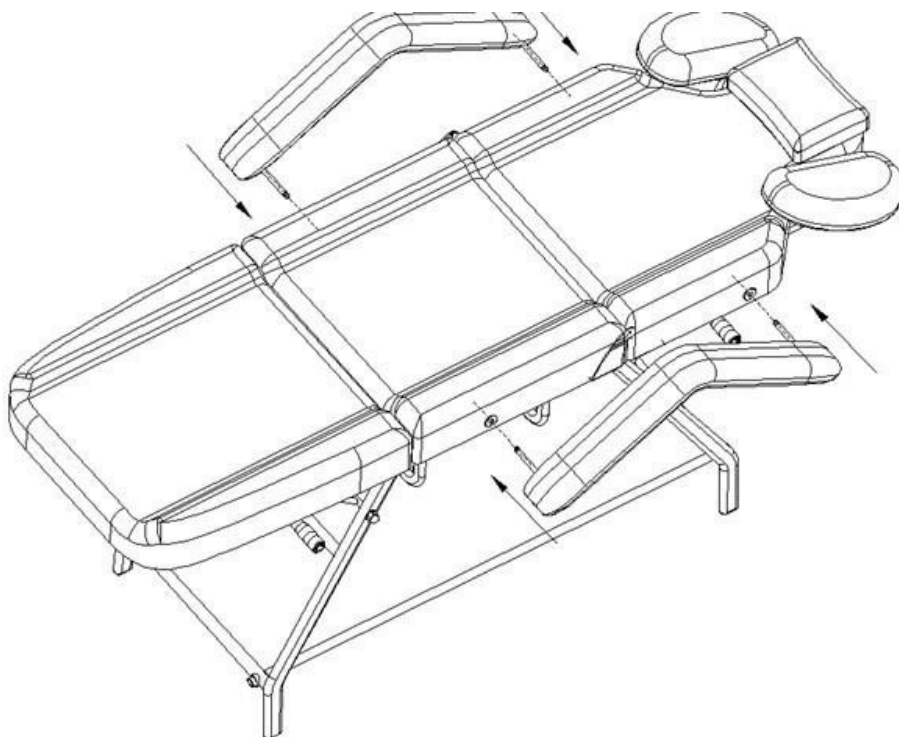

Namestite zaboj, kot je prikazano na spodnji sliki. Zaboj potisnite v vodila, ki se nahajajo pod sedežem.

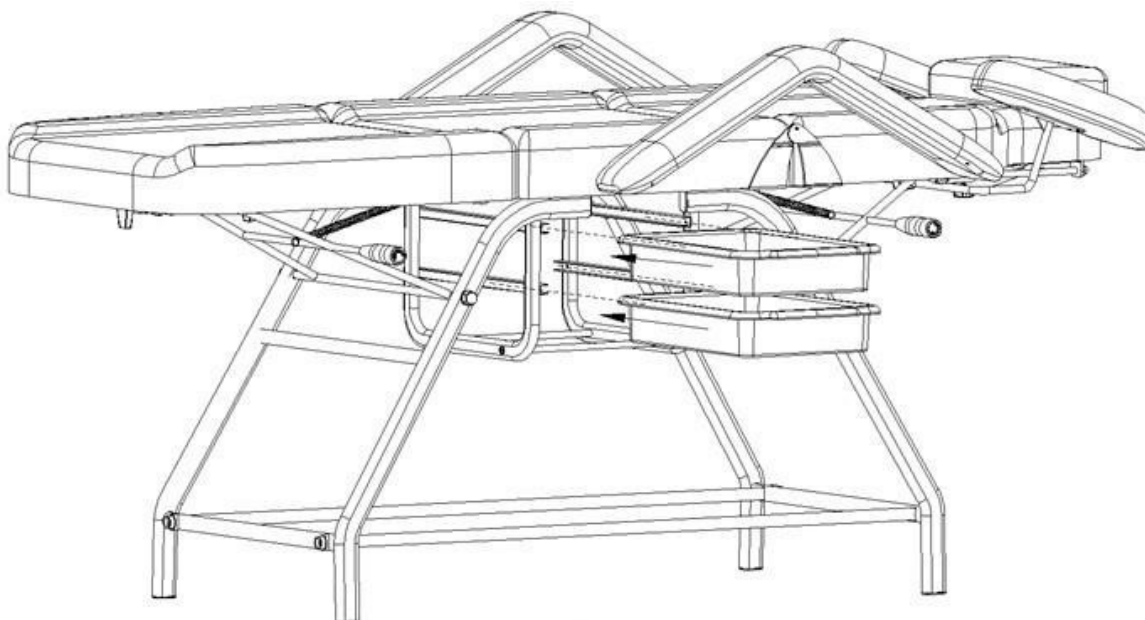

Funkcije sedeža:

1. Dvigovanje naslona

Nastavitev naklona naslona in podnožja je mogoča z ročnim vzvodom. Naslon in podnožje imata ločena vzvoda, zaradi česar se višina vsakega dela nastavlja ločeno. To omogoča prilagoditev nastavitve stola individualno glede na potrebe stranke, da je izvedeni poseg čim bolj udoben. Stol je mogoče raztegniti vse do ležečega položaja.

Za dvig naslona primite ročico, jo dvignite navzgor in nastavite na želeno višino.

2. Spuščanje naslona

Pridržite naslonjalo stola, z drugo roko pa primite ročaj vzvoda in ga spuščajte navzdol, dokler ne dosežete želenega položaja. Ko dosežete želeno višino, spustite vzvod.



Čiščenje in razkuževanje naprave:

- Da bi površino stola ohranili v dobrem stanju, jo je treba redno čistiti. Ne pozabite, da morate stol očistiti in razkužiti po vsaki uporabi. Priporočljivo je enkrat na mesec opraviti temeljito razkuževanje.

I Kovinske in plastične površine

- Za čiščenje kovinskih in plastičnih površin ter upravljalnih elementov jih obrišite z vlažno krpo. Za čiščenje težko dostopnih mest ali kotov je primerna majhna krtačka. Ne uporabljajte preveč čistila za čiščenje naprave. Nato napravo razkužite z ustreznim razkužilom.

II Površine iz nerjavečega jekla

- Najbolje je, da jih očistite z blagim detergentom. Amoniak in večina topil se lahko uporabljajo za odstranjevanje trdovratnih madežev. Izogibajte se raztopinam na osnovi klora.

III Barvane ali kromirane kovinske površine

- Za čiščenje ne uporabljajte vodnih šob (tušev, visokotlačnih vodnih topov).
- Ne čistite pri visoki temperaturi in visoki vlažnosti zraka, naprave ne izpostavljajte razmeram, ki bi lahko povzročile onesnaženje s tekočino.
- Za čiščenje ne uporabljajte topil in kislin.

IV Površina fotelja

- Površino fotelja enakomerno obrišite s posebnim čistilom za usnje, nato pa jo obrišite s čisto, mehko krpo.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Uporaba naprave izključno s strani usposobljenega kozmetičnega osebja preprečuje neželene učinke med postopkom.
2. Naprave ne smete razstavljati niti poskušati uporabljati za namene, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo. Vsa servisna dela in popravila mora opravljati izključno zaposleni v pooblaščenem servisu (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne smete namestiti ali uporabljati v bližini tekočin, na vlažnih mestih ali z mokrimi rokami – tako, da tekočine ne pridejo v stik z napravo.
4. V naslednjih primerih takoj izključite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis podjetja ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
 - a) je tekočina prišla v napravo, b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali čudne zvoke, c) je napajalni kabel poškodovan, d) je naprava prevrnjena ali je poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne smete polagati nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mestih, kjer bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti po vsakem zaključku dela z napravo izključite napajalni kabel iz vtičnice.
7. V odprtino naprave ne smete vstavljati ničesar. Če v odprtino pride tuj predmet, izključite napajalni kabel iz vtičnice in se obrnite na prodajalca ali proizvajalca.
8. Naprave ne smete postaviti na nestabilen voziček, polico ali vozilo. V primeru padca se lahko naprava poškoduje.
9. Da bi zagotovili določeno življenjsko dobo naprave, priporočamo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.
10. Napajanje mora biti v skladu s specifikacijami na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja tveganje za nepravilno delovanja naprave, njene poškodbe ali celo pregretja.

OPOZORILO:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servis – s tem boste preprečili nevarnost.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z omejenimi fizičnimi ali duševnimi sposobnostmi ter osebe brez izkušenj in poznavanja naprave, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo naprave, tako da so s tem povezana tveganja razumljiva.
3. Naprava ni namenjena za igro otrok. Otrokom ne smete dovoliti, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, če so v njeni bližini otroci ali osebe, ki nimajo zadostnega znanja o uporabi naprave.

5. Ta električna naprava ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električno napravo lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba napravo uporabljati in hraniti izven dosega otrok.

ODLAGANJE NAPRAV



Izrabljene električne naprave, orodje in embalažo je treba v skladu s pravili varstva okolja oddati v centre za predelavo surovin. Električnih naprav ne smete odvreči v zabojnike za gospodinjske odpadke. Upoštevati

upoštevati pravila glede odlaganja te vrste opreme. Zaradi varstva okolja v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi je treba rabljeno električno opremo zbrati ločeno in jo nato odnesti na zbirna mesta za rabljeno električno in elektronsko opremo. Ob koncu življenjske dobe in tudi stare naprave vsebujejo polno vredne elemente, primerne za recikliranje, zato jih je treba predati v ponovno predelavo. Zato jih je treba predati na ustrezne zbirne točke, prav tako pa jih lahko predate tudi podjetju ACTIVESHOP Sp. z o.o.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturi med (–) 20 °C in (+) 50 °C izključno v originalni embalaži. Napravo je treba shranjevati v dobro prezračenem prostoru z relativno vlažnostjo največ 75 %. Delovna temperatura je od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati na tla ter je ne smete izpostavljati mehanskim udarcem ali vremenskim vplivom.