

ACTIVESHOP[®]

KASUTUSJUHEND

Balance 3-osaline kokkupandav puidust massaažilaud
186x60 cm



Importija:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, hoone DC2A
54-610 Wrocław, Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026



Skannige
erinev
keeled

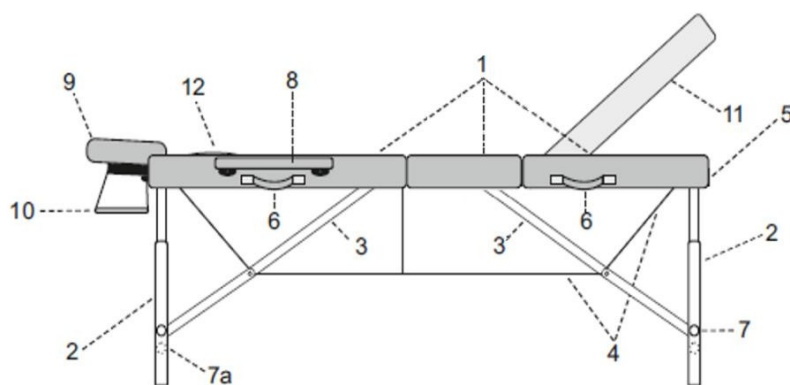
Täname, et valisite meie toote.

Palun lugege enne esimest kasutamist kasutusjuhendit läbi ja hoidke see alles.

Kokkupandav massaažilaud BALANCE puidust jalgadega on praktiline ja mitmekülgne lahendus, mis on loodud massööride, füsioterapeutide ja teiste spetsialistide igapäevatööks. Kolmesegmentiline konstruktsioon tagab stabiilsuse ja mugavuse nii ravi teostajale kui ka patsiendile. Tänu kompaktses Tänu oma mõõtmetele, kergusele ja kaasasolevale kotile sobib see suurepäraselt ka mobiilsesse töösse – võimaldades kiiret ja mugavat kokkupanemist ning kaasaskandmist.

Tehnilised andmed	
Polstermaterjal	Sünteeiline nahk
Täitematerjal	Vah
Maksimaalne kandevõime	225 kg

Seadme konstruktsioon:



1. Lauaplaadid
2. Jalad
3. Laudaplaadi toed
4. Trossi pingutus
5. Kohvri lukk
6. Transpordikahvlid
7. Kõrguse reguleerimise kruvid / tihvtid 7a. Lisakruvid
8. Käetuged
9. Peatoe
10. Käetugi
11. Reguleeritav lauaplaat
12. Näoava kate

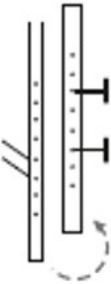
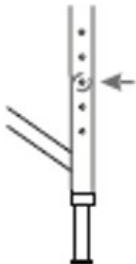
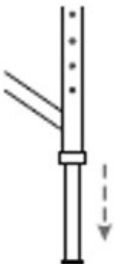
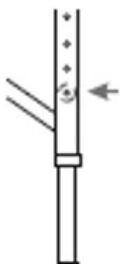
Paigaldusjuhend

1. Kokkupandud laud meenutab kohvrit. Ava lukud ja ava lauaplaadid
2. Võta välja lisatarvikud (käsitoe, peatoe ja õlariba)
3. Aseta jalad laua väliskülgedele



4. Aseta laud jalgadele ja suru see lauaplaatide ühenduskohas kokku
5. Kontrollige köie pinget
6. Reguleeri lauaplaadi soovitud kõrgus vastavalt allpool olevale juhendile
7. Lükka käsitoe laua küljel olevatesse avadesse

-

1	2	3	Lauad	Tegevuse kirjeldus
			Puidust	1. Keerake lahti kruvid, mis kinnitavad toed laua jalgadele. 2. Reguleerige tugisid soovitud kõrgusele. 3. Kruvige kruvid kinni.
			Alumiiniumist	1. Suruge lukustusnupp sisse. 2. Liigutage lauaplaadi kinnitust soovitud asendisse. 3. Kohanda ava tihvti järgi.

-

Tähelepanu

- Enne patsiendi paigutamist veenduge, et välimised jalad on õigesti paigutatud ning köied on heas tehnilises seisukorras ja piisavalt pingul.
- Massaažilauda maksimaalne koormus on 225 kg.

Soovitused:

1. Laua kasutamine on ette nähtud siseruumides.
2. Lauda asendit ei tohi muuta, kui see on koormatud.
3. Keelatud on lauale järsult hüpata, samuti istuda, põlvitada ja toetuda otse peatoele ja käetugedele.
4. Lauad tohib transportida ainult kokkupandud ja lukustatud olekus.
5. Laua kokkupanekul tuleb tähelepanu pöörata nõõride paigutusele. Nõõre ei tohi kinni jääda.
6. Lauad tuleb kasutada ja hoida eemal otsestest tule- ja soojusallikatest.
7. Õigesti kasutatuna võib laud töötada tõrgeteta aastaid.
8. Kui eespool toodud juhiseid ei järgita, ei ole tekkinud kahjustused aluseks kaebuse esitamiseks.

Seadme mõõtmed



Mõõtmed kokkupanduna 93 x 60 x 15 cm

Puhastamine ja hooldus:

Toote hea tehnilise seisukorra säilitamiseks ja maksimaalse kasutusaja tagamiseks tuleb seda regulaarselt puhastada ja hooldada.

- Voodi pind – kasutage puhast, pehmet lappi. Võite kasutada väikest kogust spetsiaalset sünteetilise naha puhastus- ja impregneerimisvahendit.
- Puidust või vineerist pindu tuleb puhastada pehme, kergelt niiske lapiga ja seejärel hoolikalt kuivatada. Keemilisi vahendeid ei tohi kasutada.

Tähelepanu!

Puit kui looduslik materjal võib erineda aastaringide paigutuse, värvitoonide ning looduslike elementide, nagu triibud või täpid, esinemise poolest. Need ei ole toote puudused – vastupidi, need tõendavad toote autentsust ja looduslikku päritolu. Sellised omadused ei ole kaebuse aluseks.

Ohutusnõuded:

1. Seade on professionaalne kosmeetikaseadme, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikupersonali poolt aitab vältida soovimatuid tagajärgi protseduuri ajal.
2. Seadet ei tohi lahti monteerida ega kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis on näidatud. Kõik hooldus- ja remonditööd peab tegema ainult volitatud teeninduskeskuse töötaja (ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Seadet ei tohi paigaldada ega kasutada vedelike läheduses, märgades kohtades ega märgade kätega. Tuleb tagada, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgmistel juhtudel tuleb pistik viivitamatult pistikupesast välja tõmmata ja võtta ühendust ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o. volitatud teenindusega: a) seadmesse on sattunud vedelik, b) seadmest tuleb imelikku lõhna, suitsu või imelikke hääli, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Kaablitele ei tohi asetada mingeid esemeid. Seadet ei tohi paigaldada kohtadesse, kus keegi võib toitejuhtmele astuda.
6. Ohutuse tagamiseks tuleb toitejuhe pärast seadme kasutamist alati pistikupesast välja tõmmata.
7. Seadme sisse ei tohi panna võõrkehi. Kui seadme sisse satub võõrkeha, tuleb toitepistik pistikupesast välja tõmmata ja võtta ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Seadet ei tohi asetada ebastabiilsele alusele, riulile või sõidukile. Kukkumise korral võib seade kahjustuda.
9. Seadme ettenähtud tööea tagamiseks on soovitatav oodata üks minut enne toitenupu uuesti vajutamist (seadme sisse- ja väljalülitamise vahel ja vastupidi).
10. Toiteallikas peab vastama tüübisildil esitatud spetsifikatsioonile. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korrektselt, võib kahjustuda või isegi põlema minna.

TÄHELEPANU

1. Toitekaabli kahjustumise või muude rikete korral tuleb võtta ühendust volitatud teenindusega – see aitab vältida ohtu.
2. Käesolevat seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed, isikud piiratud füüsiliste ja vaimsete võimete ning isikud, kes ei ole seadme tööpõhimõttega tuttavad, kui neile tagatakse asjakohane järelevalve või juhendamine seadme õige ja ohutu kasutamise kohta ning kui seonduvad ohud on neile arusaadavad.
3. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kasutamise kohta.
4. Seade ei ole mõeldud laste mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
5. Käesolev elektriseade ei ole mänguasi. Seadme väärkasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib põhjustada tervisekahjustusi või surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida laste käeulatuses väljas.

Seadme kõrvaldamine



Keskkonna kaitsmiseks tuleb vastavalt kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete direktiivile 2012/19/EL kasutatud elektriseadmed koguda eraldi ja viia need kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunktidesse. Tuleb järgida selle ja neid ei tohi visata olmejäätmete konteineritesse.

Kasutusaja lõpus sisaldavad need seadmed endiselt täisväärtuslikke ringlussevõetavaid komponente, mistõttu tuleb need suunata ringlussevõtuks vastavatesse kogumispunktidesse või ettevõttesse ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ladustamine ja transport

Seadet tuleks transportida temperatuurivahemikus (–)20 °C kuni (+)40 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritavas ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 90%. Kasutustemperatuur on vahemikus (+)10 °C kuni (+)40 °C. Protsesside ajal ladustamisel ja transportimisel ei tohi seadet visata ega maha kukutada, samuti ei tohi seda mehaanilistele löökidele ega ilmastikutingimustele avada.