

ACTIVESHOP[®]

MANUAL DE UTILIZARE

**Masă de masaj pliabilă din lemn Balance, cu 3
segmente, 186x60 cm**



Importator:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
str. Graniczna 8b, cl. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026



Scanează pentru
diferit
limbi

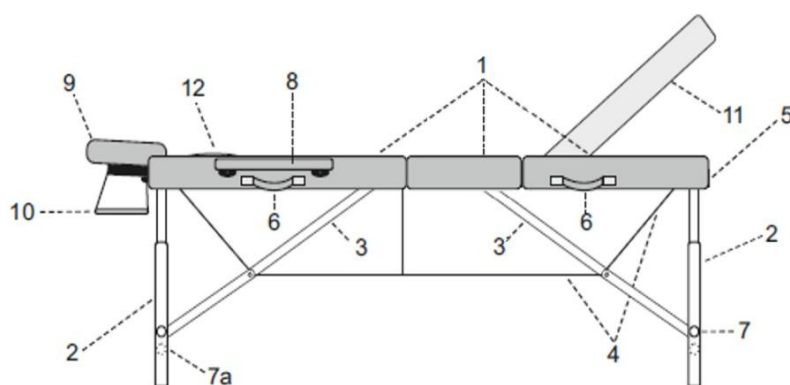
Vă mulțumim că ați ales produsul nostru.

Vă rugăm să citiți manualul de utilizare înainte de prima utilizare și să îl păstrați pentru viitor.

Masa de masaj pliabilă BALANCE cu picioare din lemn este o soluție practică și versatilă, concepută pentru activitatea zilnică a maseurilor, fizioterapeuților și a altor specialiști. Construcția în trei segmente asigură stabilitate și confort atât pentru persoana care efectuează tratamentul, cât și pentru pacient. Datorită dimensiunilor compacte Datorită dimensiunilor, greutatea redusă și husei incluse, se pretează perfect și pentru lucrul în deplasare – permițând pliarea și transportul rapid și comod.

Date tehnice	
Materialul tapițeriei	Piele sintetică
Umplutură	Spumă
Sarcina maximă	225 kg

Structura aparatului:



1. Blaturile mesei
2. Picioare
3. Suporturi pentru blat
4. Tensionare cu cablu
5. Închizătoare tip valiză
6. Mânere de transport
7. Șuruburi / bolțuri pentru reglarea înălțimii
- 7a. Șuruburi suplimentare
8. Cotiere
9. Tetieră
10. Raft pentru brațe
11. Blat reglabil
12. Capac pentru decupajul pentru față

Instrucțiuni de asamblare

1. Masa pliată seamănă cu o valiză. Deschideți fermoarele și desfășurați blaturile mesei
2. Scoateți accesoriile (cotiere, tetieră și raft pentru brațe)
3. Desfășoară picioarele în afara mesei



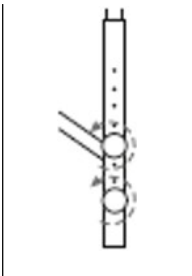
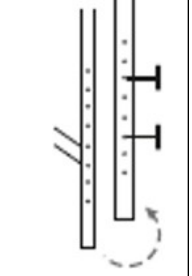
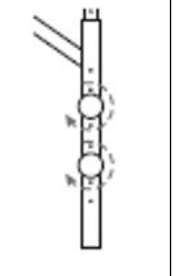
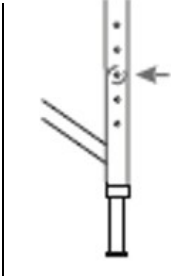
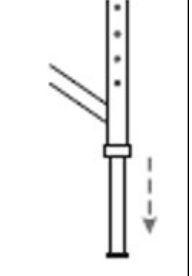
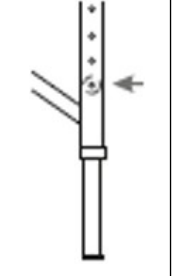
4. Așezați masa pe picioare și apăsați-o la îmbinarea blaturilor
5. Verificați tensiunea cablului
6. Reglați înălțimea preferată a blatului conform instrucțiunilor de mai jos
7. Introduceți cotierele în orificiile situate pe partea laterală a mesei

8. Ataşaţi perna la tăblia de cap cu ajutorul velcro-ului, apoi introduceţi tăblia de cap în orificiile situate în partea superioară a patului. Folosiţi clema pentru a bloca tăblia de cap în poziţia dorită.



Raftul pentru braţe poate fi fixat în două moduri

Reglarea înălţimii:

1	2	3	Mese	Descrierea operaţiunilor
			Din lemn	- Deşurubaţi şuruburile care fixează suporturile de picioarele mesei. - Reglaţi suporturile la înălţimea dorită. - Strângeţi şuruburile.
			Din aluminiu	- Apăsaţi ştiftul de blocare. - Mutaţi suportul pentru blat în poziţia dorită. - Aliniaţi orificiul cu ştiftul.

Reglarea spătarului:

- După deschiderea cataramii situate la capătul mesei (pe partea opusă faţă de tetieră), poţi ridica spătarul şi îl poţi regla în poziţia dorită.
- După reglarea spătarului, fixaţi din nou catarama.



Atenție

- Înainte de a așeza pacientul, asigurați-vă că picioarele exterioare sunt poziționate corect, iar cablurile sunt în stare bună și sunt tensionate corespunzător.
- Sarcina maximă a mesei de masaj este de 225 kg.

Recomandări:

1. Masa este destinată utilizării în interior.
2. Este interzisă schimbarea poziției mesei atunci când aceasta este sub sarcină.
3. Este interzisă urcarea bruscă pe masă, precum și așezarea, îngenuncherea și sprijinirea directă de tetieră și cotiere.
4. Masa poate fi transportată numai în stare pliată și cu încuietoarea asigurată.
5. La plierea mesei, trebuie să se acorde atenție poziționării cablurilor. Nu blocați cablurile.
6. Masa trebuie utilizată și depozitată departe de surse directe de foc și căldură.
7. Utilizată corect, masa poate funcționa fără defecțiuni timp de mulți ani.
8. Deteriorările cauzate de nerespectarea indicațiilor de mai sus nu constituie motiv de reclamație.

Dimensiunile aparatului



Dimensiuni după asamblare 93 x 60 x 15 cm

Curățare și întreținere:

Pentru a menține produsul în stare tehnică bună și a-i asigura o durată de viață cât mai lungă, acesta trebuie curățat și întreținut regulat.

- Suprafața patului – utilizați o cârpă curată și moale. Se poate folosi o cantitate mică de produs special pentru curățarea și impregnarea pieilor sintetice.
- Suprafețele din lemn sau placaj trebuie curățate cu o cârpă moale, ușor umezită, apoi uscate bine. Nu folosiți produse chimice.

Atenție!

Lemnul, ca material natural, poate prezenta diferențe în ceea ce privește dispunerea inelelor de creștere, nuanțele de culoare și de prezența unor elemente naturale, cum ar fi dungi sau puncte. Acestea nu constituie un defect al produsului – dimpotrivă, ele atestă autenticitatea și originea sa naturală. Astfel de caracteristici nu constituie un motiv de reclamație.

Măsuri de siguranță:

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Utilizarea aparatului exclusiv de către personal cosmetic calificat permite evitarea efectelor nedorite în timpul tratamentului.
2. Nu este permisă dezasamblarea aparatului sau încercarea de a-l utiliza în alte scopuri decât cele indicate în prezentul manual de utilizare. Toate lucrările de întreținere și reparații trebuie efectuate exclusiv de către un angajat al unui service autorizat (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu utilizați aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude. Asigurați-vă că niciun lichid nu pătrunde în aparat.
4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați serviciul de service autorizat al firmei ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri: a) a pătruns lichid în aparat, b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau scoate sunete ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul în locuri în care cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză după fiecare utilizare a aparatului.
7. Nu introduceți obiecte străine în interiorul aparatului. În cazul în care un obiect nedorit pătrunde în interior, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, o raftură sau un vehicul instabil. În cazul unei căderi, aparatul se poate deteriora.
9. Pentru a asigura durata de viață stabilită a aparatului, se recomandă să se aștepte un minut înainte de a apăsa din nou butonul de pornire (între pornire și oprire și invers).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să fie conformă cu specificațiile indicate pe plăcuța de identificare. În caz contrar, există riscul de funcționare incorectă a aparatului, de deteriorare a acestuia și chiar de incendiu.

ATENȚIE

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un service autorizat – acest lucru va permite evitarea pericolelor.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani, de persoane cu capacități fizice și mentale reduse, precum și de către persoane care nu sunt familiarizate cu modul de funcționare al acestui echipament, cu condiția să li se asigure supravegherea adecvată sau instruirea cu privire la utilizarea corectă și sigură a acestuia și ca riscurile asociate să fie înțelese.
3. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropierea acestuia se află copii sau persoane care nu dețin cunoștințe suficiente privind utilizarea acestuia.
4. Aparatul nu este destinat jocului copiilor. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu un aparat poate prezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, de aceea aparatul trebuie utilizat și păstrat în afara razei de acțiune a copiilor.

Eliminarea aparatului



În scopul protejării mediului, în conformitate cu Directiva 2012/19/UE privind echipamentele electrice și electronice uzate, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare a echipamentelor electronice și electrice uzate. Respectați regulile privind aruncarea acestui tip de echipamente și nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere.

La sfârșitul duratei de viață, aceste aparate conțin în continuare componente valoroase care pot fi reciclate, de aceea trebuie predate pentru reciclare la punctele de colectare corespunzătoare sau la firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Depozitare și transport

Aparatul trebuie transportat la o temperatură cuprinsă între $(-20\text{ }^{\circ}\text{C})$ și $(+40\text{ }^{\circ}\text{C})$, exclusiv în ambalajul original. Acesta trebuie depozitat într-o încăpere bine ventilată, la o umiditate relativă de maximum 90%. Temperatura de funcționare este cuprinsă între $(+10\text{ }^{\circ}\text{C})$ și $(+40\text{ }^{\circ}\text{C})$. În timpul proceselor de depozitare și transport, nu se permite aruncarea sau scăparea aparatului, nici expunerea acestuia la șocuri mecanice sau la intemperii.