

ACTIVESHOP®

Kasutusjuhend

freespingi JD700



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Activ Powe freespingi JD700. Masinat iseloomustab kvaliteetne töötlus, väikesed mõõtmed ja kaasaegne disain. Selge ja loetav juhtpaneel, intuiitiivne juhtimine, pakub suurepäraseid töövõimalusi nii kogenud kui ka algajale kasutajale. Freesipea on varustatud **TWIST-LOCK** freesilukuga, mis võimaldab freesi vahetada ühe liigutusega. Lõikuri juhtimine on võimalik käsitsi- ja jalgajamiga.



TEHNILISED ANDMED:

- Võimsus: 35 W
- Toiteallikas: 220-230 V, 50-60 Hz.
- Ergonoomiline disain
- Pare- ja vasakpoolne pööramine
- Sisse/välja lüliti ja kiiruse reguleerimine toiteploki/alusel
- Pöörlemiskiiruse sujuvalt reguleeritav reguleerimine vahemikus 0-30 000 p/min.
- TWIST-LOCK käepide (üheastmeline lõikuri vahetus)
- Garantii 12 kuud
- Saadaval kolmes värvitoonis: valge, must, lilla


MÄRKUS!!!

Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised ja vaimsed võimed ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seadme ohutu kasutamise kohta, nii et sellega seotud riskid oleksid arusaadavad. Lapsed, kes ei ole järelevalve all, ei tohiks seadmeid puhastada ega hooldada.

LÕIKURI PAIGALDAMINE:

1. Veenduge, et freespink ei ole ühendatud vooluvõrku
2. Ühendage freesipea valitud freespingiga
3. Lõikuri vahetamiseks veenduge, et freespea ei tööta
4. Seejärel keerake klambrit vasakule, kuni kuulete iseloomulikku "klõpsu" heli
5. Sisestage soovitud lõikur pea sisse
6. Lõugade sulgemiseks keerake lihtsalt klambrit paremale, kuni kostub varem mainitud iseloomulik "klõps" heli.

Ettevaatust!!! eemaldamiseks lõikurist, toimige lõikuri vahetamisel

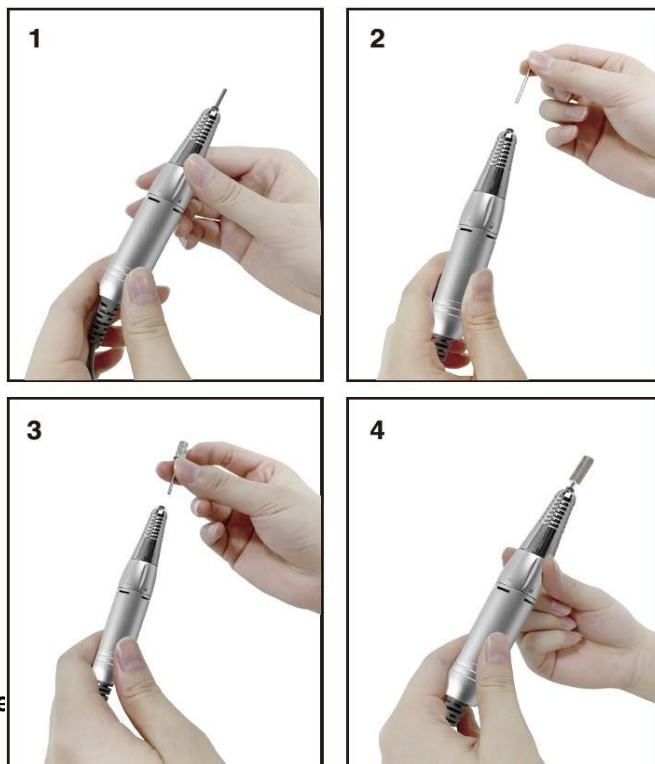

ETTEVAATUST!!!

Ärge käivitage freespingi mootorit, kui freesipesa on avatud asendis ja kui freesipesa ei ole peas (see võib masinat kahjustada või läbi põleda). Pidage meeles, et pärast tööde lõpetamist peab alati olema freespea hoidikusse kinnitatud frees või kinnitatud lõiketapp.

FREESPINGI PAIGALDAMINE:

1. Paigaldage seade töökohta, mis ei ole liiga niiske, kuum või määrdunud
2. Peakabli pistik peab olema ühendatud masina esiküljega.
3. Paigaldage õige lõikur vastavalt lõikuri paigaldusjuhendis toodud sammudele.
4. Pärast lõikuri vahetamist veenduge, et pea lõuad koos lõikuriga on kindlalt suletud
5. Ühendage pistikupesa, seejärel lülitage freespink sisse
6. Pärast freesi valmimist ja puhastamist soovitame, et frees oleks alati käepidemesse (freesipea) sisestatud
7. Kui olete töö lõpetanud, tõmmake alati pistik pistikupesa välja või katkestage vooluvõrk; kiiruse vähendamine 0-le ei tähenda, et freeser on välja lülitatud

FREESPINGI KÄIVITAMIST:

1. Ühendage freeser vooluvõrku.
2. Lülitage freespingi sisse vastava nupu abil.

3. Valige pöörlemissuund (vasakule või paremale).
4. Pea käivitamiseks suurendage pöörlemist.

HOOLDUS:

Metall-, kivi- ja teemantfreesid saab steriliseerida sterilisaatoris. Viltlõikurid ja harjad tuleb puhastada desinfitseerimisvahendiga.

SOOVITUSED

1. Pidage meeles, et ärge kunagi laske ruuterit või pead maha, see kahjustab kuullaagreid ja mõjutab mootori eluiga.
2. Ärge laske vett ega muid vedelikke masinasse sisse sattuda
3. Lülitage freeser iga kord välja, kui vahetate lõiketera välja.
4. Ärge kunagi vahetage freesid töötava freesi ajal, freesi vahetamiseks peate freesi välja lülitama.
5. Ühendage freeser pistikupessa alles siis, kui olete veendunud, et kõik kaablid on paigaldatud õigesti ja ohutult.
6. Soovitame masinat kasutada ainult professionaalide poolt
7. Jalalüliti kaabli pistik peab olema kindlalt ühendatud masina korpuse tagaküljega
8. Veenduge, et lõikur, mida soovite kasutada, ei oleks painutatud, asümmeetriline või kahjustatud. Kasutage alati standardseid lõiketerasid

MÄRKUS!!!

Käepideme avamine töö ajal kahjustab masinat. Lõikurite vahetamine mootori töötamise ajal kahjustab sidurit. Sellele kahjustusele ei kehti garantii. Freesid tuleb vahetada pingi avatud asendis (lukustamata) ja freespink peab sel ajal olema välja lülitatud.

PÕHIPROBLEEMID JA LAHENDUSED:

Freesimismasin ei lülitu sisse.

- kontrollige, et see on ühendatud - ühendage freespink voluvõrku.
- kontrollige, et freespink on sisse lülitatud - lülitage freespink sisse.
- kontrollige, et käsi-jalgade lüliti on asendis "käsi".
- kontrollige, et peakaabel ei ole kahjustatud - vahetage peakaabel välja (saadaval aadressil Activeshop).
- kontrollige, et toitejuhe ei oleks kahjustatud - võtke ühendust Activeshopi teenindusega.
- kontrollige, et pingi muutmise nupp oleks seatud 220 V peale. Kui see ei ole ja ruuter on ühendatud, siis on ruuter kahjustatud - võtke ühendust Activeshopi teenindusega, et seda tasuta remonti teostada.

Pea on ülekuumenenud.

- Kontrollige, et Twist-Lock oleks õigesti suletud.

HOIATUS!!!

Ärge leotage päid. Ärge desinfitseerige liigse vedelikuga. Peasse sattuv vesi või desinfitseerimisvahend võib seda kahjustada. Enne võimalikku desinfitseerimist eemaldage pealt tolmu. Soovitav on hooldada pead spetsiaalsete hooldustoodetega.

OHUTUSMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt võimaldab vältida soovimatuid mõjusid ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muudel kui käesolevas kasutusjuhendis osutatud eesmärkidel. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (ettevõtte ACTIVESHOP Ltd.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike läheduses, märgades kohtades või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgnevatel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja võtke ühendust ACTIVESHOP Sp. z o.o. poolt pakutava volitatud teenindusega:
 - A. seadmesse on sattunud vedelikku,
 - B. seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra,
 - C. toitejuhe on kahjustatud,
 - D. seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet kohta, kus keegi võib toitejuhtmele peale astuda.
6. Turvalisuse huvides eemaldage toitejuhe pistikupesast iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.

7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Juhul, kui võõrkeha satub sisse auku, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks on soovitatav, et enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja v a s t u p i d i) jääks üheminutilise intervall sisse- ja väljalülitamise vahele.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil esitatud spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole, see väldib ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised ja vaimsed võimed ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seadme ohutuks kasutamiseks, et sellega seotud riske mõistetakse.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada majapidamisjätmete konteinerites. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Selleks, et kaitsta keskkonda vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ, mis käsitleb kasutatud elektrilisi seadmeid ja elektroonilisi kasutatud elektrilisi seadmeid, tuleks kasutatud elektrilised seadmed la, ja seejärel viia kogumispunktidest kasutatud kasutatud elektroonikaseadmete kogumiseks ja elektriseadmeid.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need ringlussevõtuks ära anda. Seetõttu tuleks need anda üle asjakohastes kogumispunktides, samuti võib neid üle anda ACTIVESHOP OÜ-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril vahemikus (-)20°C kuni (+)40°C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 90%. Töötemperatuur on vahemikus (+)10°C kuni (+)40°C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.