

ACTIVESHOP®

GEBRUIKSAANWIJZING

Schoonheidsstoel Azzurro Special 152



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, gebouw DC2A 54-610
Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026

LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT

Deze handleiding bevat gedetailleerde informatie over het gebruik en onderhoud van het apparaat. Lees de bijgevoegde handleiding voordat u het apparaat gebruikt. Gebruik het apparaat zoals beschreven. Bewaar deze handleiding en zorg ervoor dat iedereen die het apparaat kan gebruiken, ermee vertrouwd is.

Technische gegevens:

Afmetingen: 119 x 60 x 53 cm
Gewicht: 14 kg
Maximale belasting: 150 kg
Hoogteverstelling: 55 - 75 cm Verstelling
rugleuning naar voren/achteren: 0 - 5
cm Hoekverstelling: 10°

Constructie:

1. Rugleuning en zitting van de stoel
2. Gasveer
3. Onderstel van de stoel
4. Wieltjes



Montage:

1. Bij sommige modellen zijn de rugleuning en de zitting van de stoel niet aan elkaar gemonteerd. In dat geval moet u de rugleuning in de bevestiging in de zitting schuiven en vastzetten met de 3 meegeleverde schroeven.
 2. Bevestig de wieltjes aan het onderstel door ze erin te drukken.
 3. Schuif de gasveer met de dickere kant in het onderstel.
 4. Plaats de zitting op de gasveer
- Let op. Bij sommige modellen is de gasveer voorzien van een plastic beschermkap (op de plaats waar deze aan de zitting wordt bevestigd). Controleer voordat u de zitting monteert of de plastic beschermhoes is verwijderd. Anders is het na de montage niet mogelijk om de hoogte aan te passen.

Bediening:

Verticale verstelling:

Om de zitting naar beneden te laten zakken, drukt u op de in de afbeelding aangegeven hendel terwijl u op de zitting zit of deze op een andere manier belast.

Om de zitting omhoog te brengen, drukt u op de in de afbeelding aangegeven hendel zonder de zitting tegelijkertijd te belasten.




Hoekverstelling van de rugleuning:

Schuif het uiteinde van de hendel naar buiten om de hellingsverstelling te ontgrendelen. Druk op de rugleuning en stel deze in de gewenste positie in.

Schuif vervolgens het uiteinde van de hendel naar binnen om de positie van de rugleuning te vergrendelen.


Let op: vanwege het type vergrendelingsmechanisme moet u, om de rugleuning dicht bij de zitting te plaatsen, deze eerst in de tegenovergestelde richting indrukken (volgens de pijl op afbeelding.)

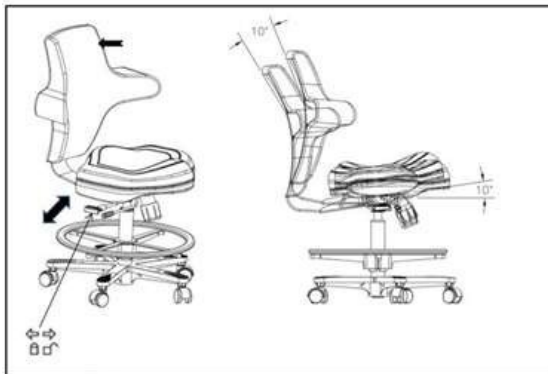

of laten vallen, noch worden blootgesteld aan mechanische schokken of weersinvloeden.

Horizontale verstelling van de zitting:

Om de zitting naar voren of naar achteren te verplaatsen, moet u de gemarkeerde op afbeelding gemarkeerde hendel omhoog en schuif vervolgens de zitting naar de gewenste positie. Wanneer u de hendel loslaat, blijft de zitting in de gekozen positie staan.

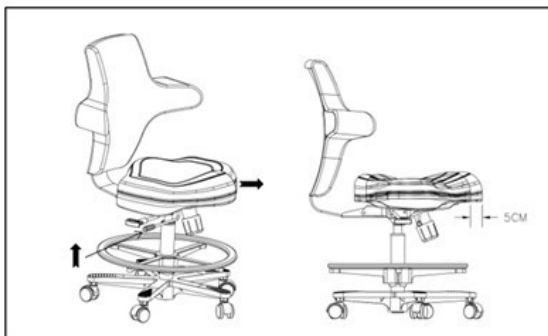

Aanbevelingen:

1. Overschrijd de aanbevolen belasting van de stoel niet; het overschrijden van het aanbevolen gewicht kan permanente schade veroorzaken (max. 150 kg).
2. Gebruik geen producten die bijtende stoffen of kleurstoffen bevatten, noch olieachtige reinigingsmiddelen voor de stoel.
3. Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen leiden tot beschadiging van het materiaal, corrosie of andere verschijnselen.
4. Reinig de stoel regelmatig om te voorkomen dat vuil zich vastzet. Bij vlekken op de bekleding kunt u het beste lauwwarm zeepwater gebruiken.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij temperaturen tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C.

Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 75%.

Gebruikstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Dit apparaat is een professioneel apparaat voor gebruik in schoonheidssalons. Door het apparaat uitsluitend door gekwalificeerd schoonheidsspecialisten te laten bedienen, worden ongewenste bijwerkingen tijdens de behandeling voorkomen.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd en er mogen geen pogingen worden ondernomen om het voor andere doeleinden te gebruiken dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een medewerker van een geautoriseerde service (het bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Het apparaat mag niet worden geïnstalleerd of bediend in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen – zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service van ACTIVESHOP Sp. z o.o. in de volgende gevallen:
a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden, c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgevallen of de behuizing is beschadigd.
5. Leg geen voorwerpen op de snoeren. Installeer het apparaat niet op plaatsen waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Om veiligheidsredenen moet u de stekker uit het stopcontact halen telkens wanneer u klaar bent met het gebruik van het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening terechtkomt, trek dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant. 8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele kar, plank of voertuig. Bij een val kan het apparaat beschadigd raken.
9. Om de opgegeven levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen om een minuut te wachten voordat u de aan/uit-knop opnieuw indrukt (tussen het in- en uitschakelen en vice versa).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico op een onjuiste werking van het apparaat, beschadiging of zelfs brand.

LET OP:

1. Neem bij beschadiging van het netsnoer of andere storingen contact op met een erkende servicepartner – zo voorkomt u gevaar.
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar en door personen met beperkte fysieke of mentale capaciteiten en personen zonder ervaring en kennis van de apparatuur, mits er toezicht of instructies worden gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur, zodat de daarmee samenhangende risico's duidelijk zijn.
3. Het apparaat is niet bedoeld om door kinderen te worden gebruikt. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer kinderen of personen die onvoldoende kennis hebben over het gebruik van het apparaat zich in de buurt bevinden.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Onjuist gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan een risico voor de gezondheid vormen of tot de dood leiden; gebruik en bewaar het apparaat daarom buiten het bereik van kinderen.

AFVOER VAN HET APPARAAT

Afgedankte elektrische apparaten, toebehoren en verpakkingen moeten worden ingeleverd bij recyclingcentra in overeenstemming met de milieuregels. Elektrische apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Volg de voorschriften met betrekking tot afvalverwerking van dit soort apparatuur. Ter bescherming van het milieu

moeten afgedankte elektrische apparaten, overeenkomstig Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, gescheiden worden ingezameld en vervolgens worden ingeleverd bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur. Aan het einde van hun levensduur bevatten ook oude apparaten waardevolle onderdelen die geschikt zijn voor recycling, daarom moeten ze worden ingeleverd voor herverwerking. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de juiste inzamelpunten, maar ze kunnen ook worden ingeleverd bij het bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.

