

ACTIVESHOP®

NAVODILA ZA UPORABO

Kozmetični stol Azzurro Special 152



Uvoznik:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A 54-610
Wrocław, Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026

PRED UPORABO IZDELKA SE SEZNANITE Z NAVODILI ZA UPORABO

Ta navodila vsebujejo podrobne informacije o uporabi in vzdrževanju naprave. Pred uporabo naprave se seznanim z vsebino priloženih navodil. Napravo uporabljajte v skladu z navodili. Shranite ta navodila in poskrbite, da se z njimi seznanim vse osebe, ki lahko uporabljajo napravo.

Tehnični podatki:

Dimenzije: 119 x 60 x 53 cm

Teža: 14 kg

Največja nosilnost: 150 kg Nastavitev


višine: 55–75 cm Nastavitev naslona

naprej in nazaj: 0–5 cm Nastavitev

naklona: 10°

Konstrukcija:

1. Naslonjalo in sedež stola
2. Plinski vzmet
3. Podnožje stola
4. Kolesa

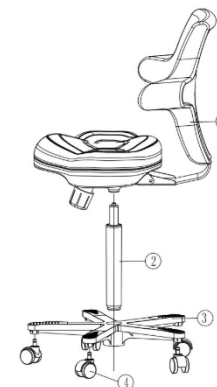

Sestavljanje:

1. Pri nekaterih modelih naslonjalo in sedež stola nista sestavljena skupaj. V tem primeru vstavite naslonjalo v pritrditev v sedežu in ga pritrdite s 3 priloženimi vijaki.
2. Kolesa namestite na podnožje tako, da jih pritisnete vanj.
3. Vstavite vzmetni mehanizem z debelejšo stranjo v podnožje.
4. Namestite sedež na vzmet

Opomba. Pri nekaterih modelih je vzmet zavarovana s plastičnim pokrovom (na mestu priključka s sedežem). Pred namestitvijo sedeža preverite, ali je bila plastična zaščitna folija odstranjena. V nasprotnem primeru po sestavi ne bo mogoče spreminjati višinske lege.

Uporaba:

Vertikalno nastavljanje:

Za spust sedeža navzdol pritisnite ročico, označeno na sliki, medtem ko sedite na sedežu ali ga obremenite na drug način.

Za dvig sedeža navzgor pritisnite ročico, označeno na sliki, ne da bi hkrati obremenili sedež.




Nastavitev naklona naslona:

Potegnite konico ročice navzven, da odklenete nastavitev naklona. Pritisnite naslonjalo in ga nastavite v zeleno lego.

Nato potisnite konico ročice nazaj, da zaklenete položaj naslona.


Pozor, zaradi vrste uporabljenega

blokirnega mehanizma, da nastavite naslonjalo bližje sedežu – ga morate najprej pritisniti v nasprotno smer (v skladu s puščico na priloženi sliki).

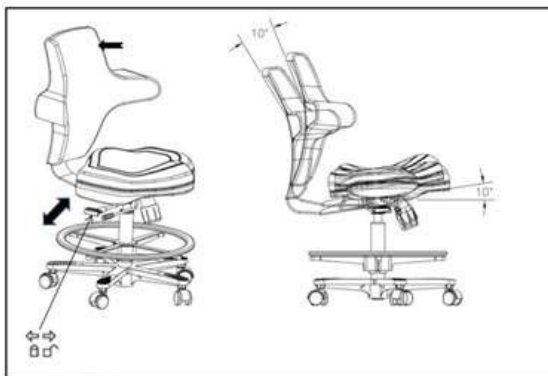

Vodoravna nastavitev sedeža:

Če želite sedež premakniti naprej ali nazaj, dvignite označeno na sliki, nato pa sedež premaknite v zeleno lego. Ko sprostite ročico, sedež ostane v izbrani legi.

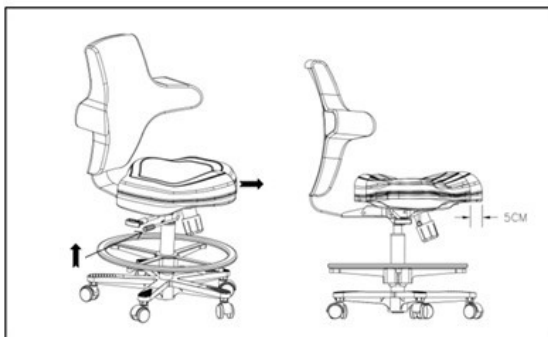

Priporočila:

1. Ne presegajte priporočene nosilnosti stola, saj lahko preseganje priporočene teže povzroči trajne poškodbe (maks. 150 kg).
2. Za čiščenje stola ne uporabljajte izdelkov, ki vsebujejo jedke snovi in barvila, ter oljnih čistil.
3. Neprimerna čistila lahko povzročijo poškodbe materiala, korozijo ali druge pojave.
4. Sedež je treba redno čistiti, da se ne naberejo trdovratne nečistoče. Če je oblažljenje umazano, je najvarneje uporabiti mlačno milnico.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturi od (–) 20 °C do (+) 50 °C izključno v originalni embalaži. Napravo je treba shranjevati v dobro prezračenem prostoru, kjer relativna vlažnost ne presega 75 %. Delovna temperatura je od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati na tla, izpostavljati mehanskim udarcem ali vremenskim vplivom.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Uporaba naprave izključno s strani usposobljenega kozmetičnega osebja preprečuje neželene učinke med posegom.
2. Naprave ne smete razstavljati niti poskušati uporabljati za namene, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo. Vsa servisna dela in popravila mora opravljati izključno osebje pooblaščenega servisa (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne smete namestiti ali uporabljati v bližini tekočin, na vlažnih mestih ali z mokrimi rokami – tako, da tekočine ne pridejo v stik z napravo.
4. V naslednjih primerih takoj izključite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis podjetja ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
 - a) je v napravo vdrla tekočina, b) naprava oddaja nenavaden vonj, dim ali nenavadne zvoke, c) je napajalni kabel poškodovan, d) je naprava prevrnjena ali je poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne smete polagati nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mestih, kjer bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti po vsakem zaključku dela z napravo izključite napajalni kabel iz vtičnice.
7. V odprtino naprave ne smete vstavljati ničesar. Če v odprtino pride tuj predmet, izključite napajalni kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne smete postaviti na nestabilen voziček, polico ali vozilo. V primeru padca se lahko naprava poškoduje.
9. Da bi zagotovili predvideno življenjsko dobo naprave, priporočamo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop počakate eno minuto (med vklopom in izklopom ter obratno).
10. Napajanje mora biti v skladu s specifikacijami na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja naprave, njene poškodbe ali celo pregretja.

OPOZORILO:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servis – s tem boste preprečili nevarnost.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z omejenimi fizičnimi ali duševnimi sposobnostmi ter osebe brez izkušenj in poznavanja opreme, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, tako da so s tem povezana tveganja razumljiva.
3. Naprava ni namenjena otrokom. Otrokom ne smete dovoliti, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, če so v njeni bližini otroci ali osebe, ki nimajo zadostnega znanja o uporabi naprave.
5. Ta električna naprava ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električno napravo lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato napravo uporabljajte in shranjujte izven dosega otrok.

ODLAGANJE NAPRAVE



Izrabljena električna naprava, oprema in embalaža morajo biti v skladu s pravili varstva okolja predane centrom za predelavo surovin. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnike za gospodinske odpadke. Upoštevajte pravila glede odlaganja te vrste opreme. Zaradi varstva okolja

v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi je treba rabljeno električno opremo zbrati ločeno in jo nato odnesti v zbirne točke za rabljeno elektronsko in električno opremo. Ob koncu življenjske dobe in tudi stare naprave vsebujejo polno vredne elemente, primerne za recikliranje, zato jih je treba predati v ponovno predelavo. Zato jih je treba predati na ustrezne zbirne točke, prav tako pa jih lahko predate tudi podjetju ACTIVESHOP Sp. z o.o.