

ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽITIE

Kozmetické kreslo hyd. A 210D s kolískou



Dovozca:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud DC2A

54-610 Wrocław, Polsko


www.activeshop.com.pl

Rev. A/11/2024

Rozmery zariadenia:

- Sedačka v polohe ležmo s opierkou hlavy 63 x 180 cm
- Výška min. 64cm
- Výška max. 80 cm
- Podstavec 55 x 106,5 cm
- Maximálna nosnosť stoličky 150 kg

Konštrukcia jednotky:

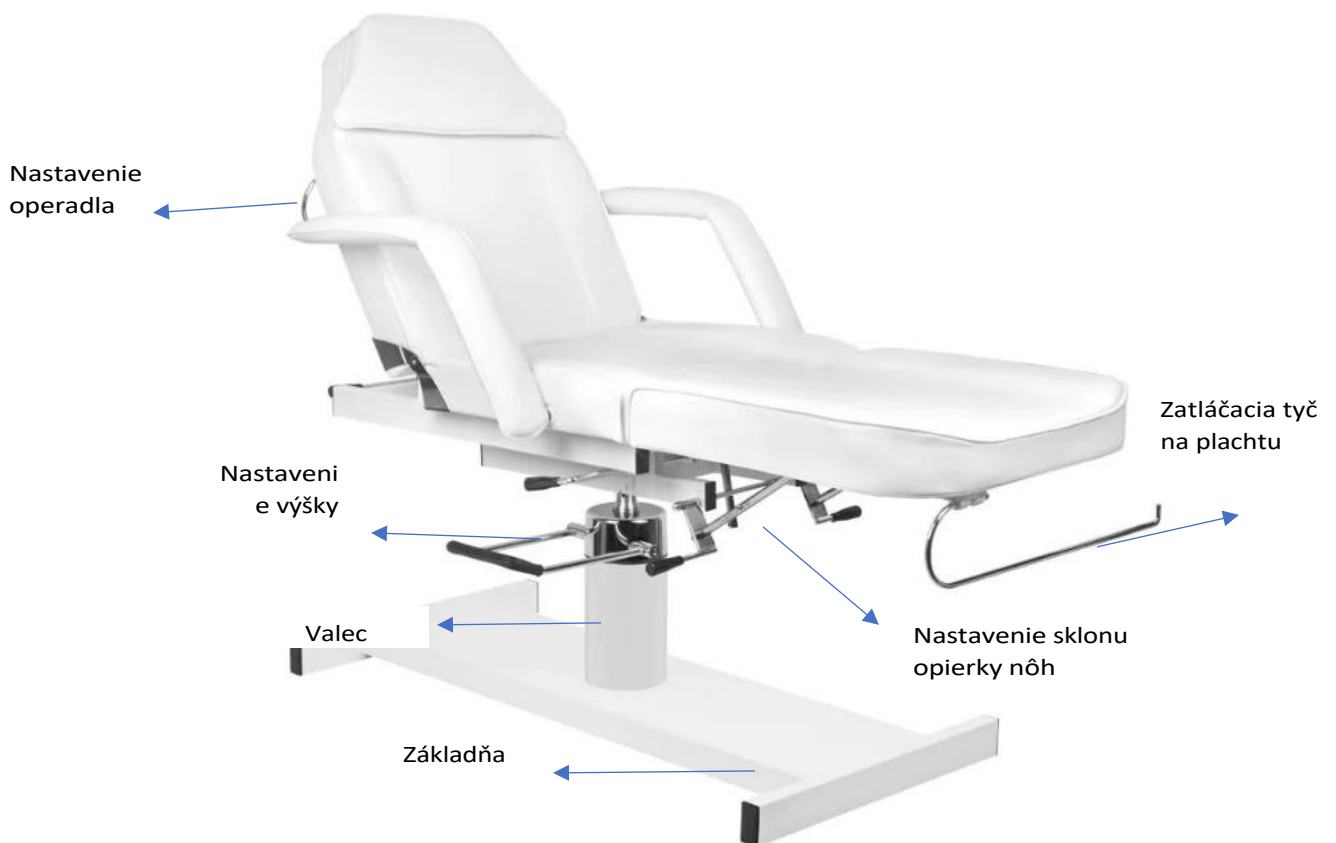


Výšku sedadla možno nastaviť pomocou rukoväte umiestnenej pod sedadlom. Nastavenie výšky od 64 do 80 cm.


Polohu opierky nôh možno nastaviť pod uhlom (tzv. kolísková funkcia) pomocou ovládača umiestneného pod opierkou nôh.

Montáž jednotky

1. Pripevnite nožičky k základni stoličky. Potom pripevnite pohon (podľa obrázka).

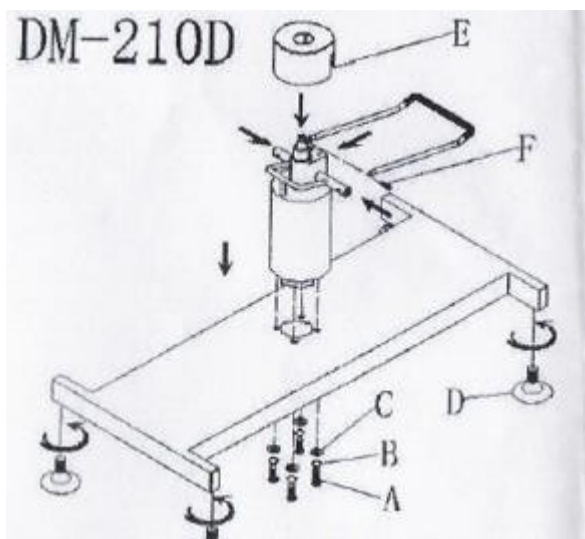

2. Potom pripojte základňu k sedadlu.
3. Namontujte podrúčky do otvorov na bokoch stoličky.
4. Namontujte vodidlá na nastavenie operadla

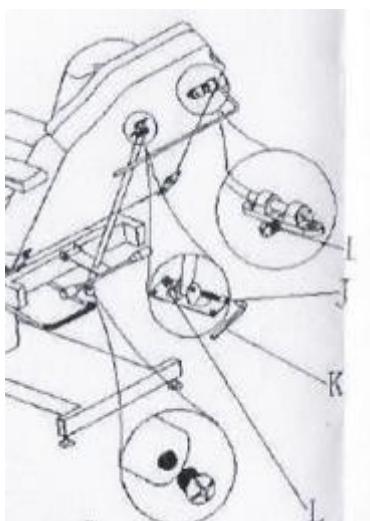

Čistenie a dezinfekcia jednotky:

Aby ste udržali povrch kresla v dobrom stave, pravidelne ho čistite. Nezabudnite stoličku vyčistiť a vydezinfikovať po každom použití. Dôkladnú dezinfekciu sa odporúča vykonávať raz za mesiac.

I Kovové a plastové povrchy

Kovové a plastové povrchy a ovládacie prvky čistite vlhkou handričkou. Na čistenie ťažko prístupných miest alebo rohov dobre poslúži malá kefka. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte príliš veľa tekutiny. Potom spotrebič vydezinfikujte vhodnou tekutinou.

II Povrchy z nehrdzavejúcej ocele

Najlepšie funguje najlepšie čistenie čistenie s jemným roztokom čistiaceho prostriedku. Amoniak i na odstránenie odolných škvŕn možno použiť väčšinu rozpúšťadiel. Vyhnite sa roztokom na báze chlóru. **III Lakované alebo pochrómované kovové povrchy**

Na čistenie nepoužívajte vodné prúdy (sprchy, vysokotlakové vodné delá).

Nečistite pri vysokých teplotách a vysokej vlhkosti a ne v y s t a v u j t e prístroj podmienkam, ktoré môžu viesť ku kontaminácii tekutinou.

Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani kyseliny.

IV Povrch stoličky

Povrch sedadla rovnomerne utrite špeciálnym čistiacim prostriedkom na kožu a potom ho utrite čistou, mäkkou handričkou.

Údržba

- Opravy by mal vykonávať skúsený a výrobcom autorizovaný personál. Opravy vykonávané neautorizovaným personálom môžu spôsobiť zranenie alebo poškodenie zariadenia, za ktoré výrobca nezodpovedá.
- Používajte len originálne náhradné diely schválené výrobcom.
- Kozmetické kreslo ani príslušenstvo nepoužívajte, ak nefungujú správne.
- Všetky práce na údržbe a opravách musia byť zdokumentované.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Prístroj je profesionálne zariadenie určené na používanie v kozmetických salónoch. Obsluha zariadenia len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabráni nežiaducim následkom počas ošetrovania.
2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tejto príručke. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP s.r.o.).
3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokrými rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.
4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte prístroj zo zásuvky a obráťte sa na autorizovaný servis poskytnutý spoločnosťou ACTIVESHOP Ltd:
(a) do spotrebiča sa dostala kvapalina, (b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky,
c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) došlo k prevrhnutiu prístroja alebo k poškodeniu jeho krytu.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Prístroj neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov odpojte napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s jednotkou.
7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vytiahnite kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Spotrebič neumiestňujte na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. V prípade pádu sa môže prístroj poškodiť.
9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa dodržať interval jednej minúty pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a n a o p a k).
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak akémukoľvek nebezpečenstvu.
2. Tento prístroj môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami s týmto zariadením, ak je zabezpečený dohľad alebo inštruktáž o bezpečnom používaní zariadenia, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.

5. Tento elektrický spotřebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly likvidujte v recyklačných centrách v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do koša na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES týkajúcou sa odpadu použitých elektrických a elektronických použitých elektrických spotrebičov

elektrické zariadenia by sa mali zbierať oddelene a potom odovzdať na zberných miestach pre použité elektronické a elektrické zariadenia. Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na recykláciu. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Prístroj by sa mal prepravovať pri teplote od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Jednotku skladujte v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.