

ACTIVESHOP®

MANUALE D'ISTRUZIONI

Sedia estetica elettrica Sillon Classic 3 motori

Modello: C501A



Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024



***PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO, LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI*.**


Questo manuale contiene informazioni dettagliate sul funzionamento e la manutenzione dell'unità. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere le istruzioni che lo accompagnano. Utilizzare l'apparecchio come descritto. Conservare questo manuale e assicurarsi che tutte le persone che possono utilizzare l'apparecchio lo conoscano.

La poltrona cosmetica elettrica Sillon è un'apparecchiatura professionale perfetta per qualsiasi salone di bellezza. È ideale per massaggi, trattamenti cosmetici e fisioterapici. La poltrona è stata progettata per garantire il massimo comfort quando ci si sdraia durante il trattamento. La poltrona è composta da quattro parti e da un cuscino rimovibile. Su entrambi i lati della poltrona sono presenti delle maniglie alle quali è possibile appendere il telecomando, in modo da averlo sempre a portata di mano.

Capacità di carico del prodotto: 150 kg


La portata massima della scocca del sedile è di 150 kg. Non sollevare pesi superiori a quelli che la sedia può sostenere.

Non saltate sullo schienale e non fate molta pressione sui braccioli per non danneggiare la struttura del prodotto.

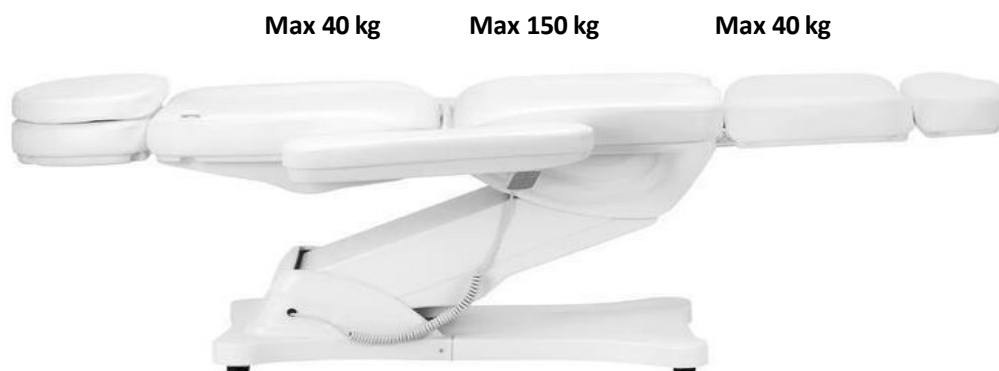

Nota

Per l'imballaggio vengono utilizzati cartone e cartoni esterni, con un totale di 10 strati di carta per garantire la protezione dei vostri prodotti. Si consiglia di conservare l'imballaggio originale per un uso futuro, soprattutto per le restituzioni durante il periodo di garanzia. Per motivi di sicurezza, è necessario che due persone sollevino la sedia dalla scatola di cartone. Durante il sollevamento, posizionarsi su entrambi i lati del poggiatesta e del poggiapiedi della sedia. Ricordare che la poltrona può essere sollevata solo dalle posizioni del poggiatesta e del poggiapiedi, non da entrambi i lati dei braccioli.

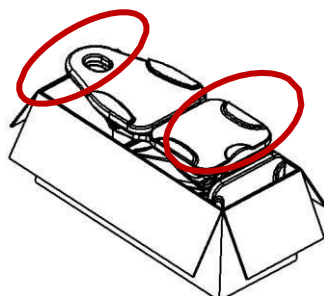

Prima di utilizzare la poltrona, verificare che l'imballaggio sia integro e non abbia subito danni durante il trasporto. In caso di problemi, si prega di informare la società di trasporto o di

Personale post-vendita entro 2 giorni dal ricevimento dell'unità. Assicurarsi che tutti gli accessori siano completi al momento della consegna. In caso di mancanza di accessori al momento della consegna, contattare tempestivamente il personale post-vendita.


La poltrona elettrica cosmetica deve essere utilizzata in un ambiente chiuso e asciutto. La temperatura dell'ambiente deve essere compresa tra + 10° e -40° e l'umidità relativa tra il 30% e il 75%. Se la poltrona elettrica è stata esposta a temperature inferiori a 0°, attendere almeno 5 ore prima di utilizzarla in modo che l'apparecchio abbia il tempo di raggiungere la temperatura ambiente.

Prima di utilizzare la poltrona elettrica, leggere le istruzioni ed eseguire le seguenti operazioni:

- (1) Assicurarsi che tutti i materiali di imballaggio siano stati rimossi.
- (2) Assicurarsi che la poltrona sia funzionante.
- (3) Posizionare la poltrona elettrica nell'area in cui verrà utilizzata.
- (4) Inserire la spina di rete in una presa di corrente adeguata.


Suggerimento! I bambini e le persone inesperte non devono utilizzare questo apparecchio. I bambini devono essere sorvegliati e non devono giocare vicino alla poltrona elettrica. Per motivi di sicurezza, staccare la spina dell'apparecchio e non lasciarlo incustodito. Staccare anche il cavo di alimentazione.

Dimensioni dell'apparecchio:

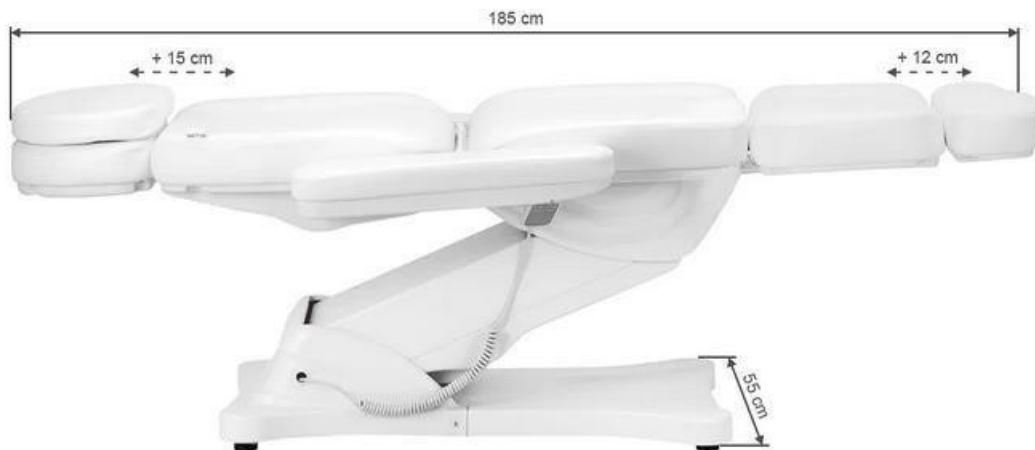



Struttura dell'apparecchio:

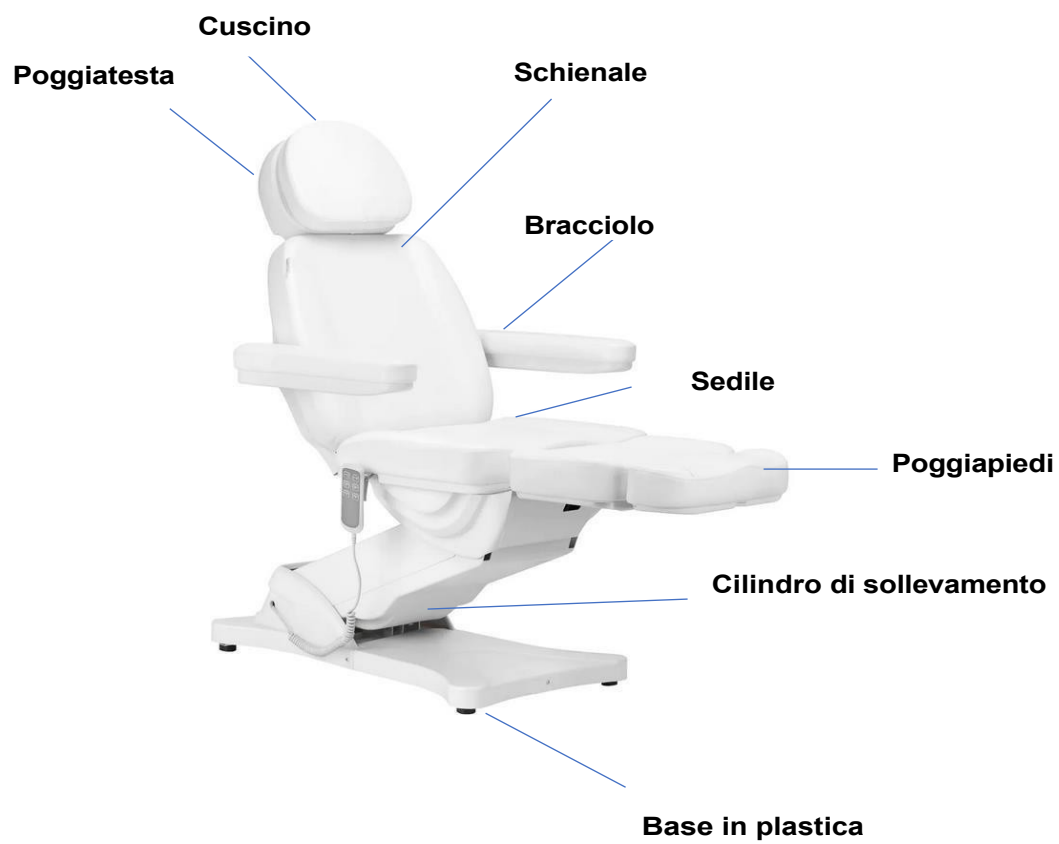

Attenzione

1. Il poggiapiedi non è progettato per sostenere l'intero peso di un adulto.
2. Non sedersi direttamente sul bracciolo e sul poggiapiedi.
3. Non utilizzare la poltrona elettrica per visite ginecologiche in prossimità di gas infiammabili.
4. Non sollevare un peso superiore a quello che la poltrona può sostenere.
5. Assicurarsi che la distanza tra le prese di corrente non superi i 2 metri.

Attenzione

1. Per motivi di sicurezza, collegare sempre il cavo di alimentazione a una presa con messa a terra.
2. Non legare il cavo di alimentazione all'unità. Sollevando o tirando il cavo di alimentazione si rischia di danneggiarlo. Assicurarsi che il cavo di alimentazione possa essere facilmente rimosso in caso di emergenza.
3. Rimuovere il cavo di alimentazione prima di spostare la poltrona elettrica, per evitare che rimanga incastrato tra le parti della poltrona.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, scollegarlo immediatamente, non utilizzare la poltrona e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato. Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione originale.
5. Non permettere a una persona che non esegue il trattamento di controllare il telecomando.
6. Non collocare oggetti sotto la poltrona.
7. Assicurarsi che intorno alla poltrona vi sia uno spazio sufficiente per poterla piegare e dispiegare liberamente.
8. Assicurarsi che intorno alla poltrona non vi siano oggetti appuntiti o dannosi che potrebbero danneggiare l'unità.
9. Non modificare l'unità da soli. Se la sedia non funziona correttamente, smettere di usarla e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.


Utilizzo del dispositivo:

1. Collegare il cavo di alimentazione a un alimentatore esterno da 110V~240V.

Metodo di installazione del bracciolo:

Il sedile deve essere in posizione orizzontale per potervi installare il bracciolo. Far scorrere il bracciolo nel foro situato sul lato dello schienale. Il bracciolo deve essere fissato saldamente. Ruotarlo a destra o a sinistra in modo che si inserisca correttamente. Procedere allo stesso modo con l'altro bracciolo.


Il bracciolo è perpendicolare al suolo (indipendentemente dall'angolo del sedile). Può essere ruotato di 180°.

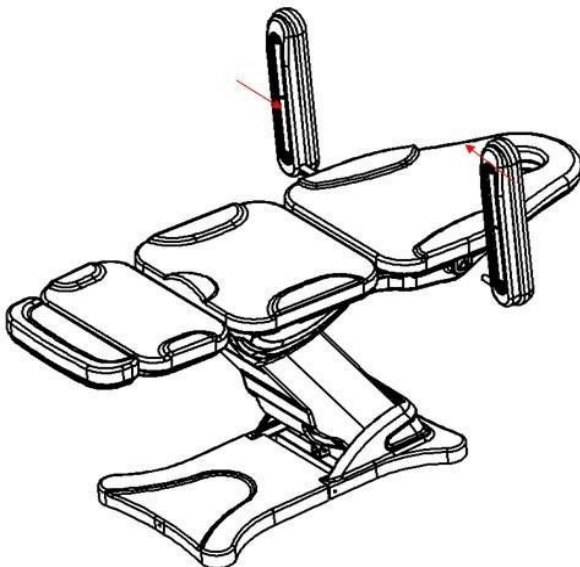

1. Funzione di controllo manuale (altezza di sollevamento: il letto è a 58~ 82 cm da terra)




2. Funzione di controllo manuale (angolo di elevazione della schiena 0-80°, angolo di elevazione delle gambe 0-90°)

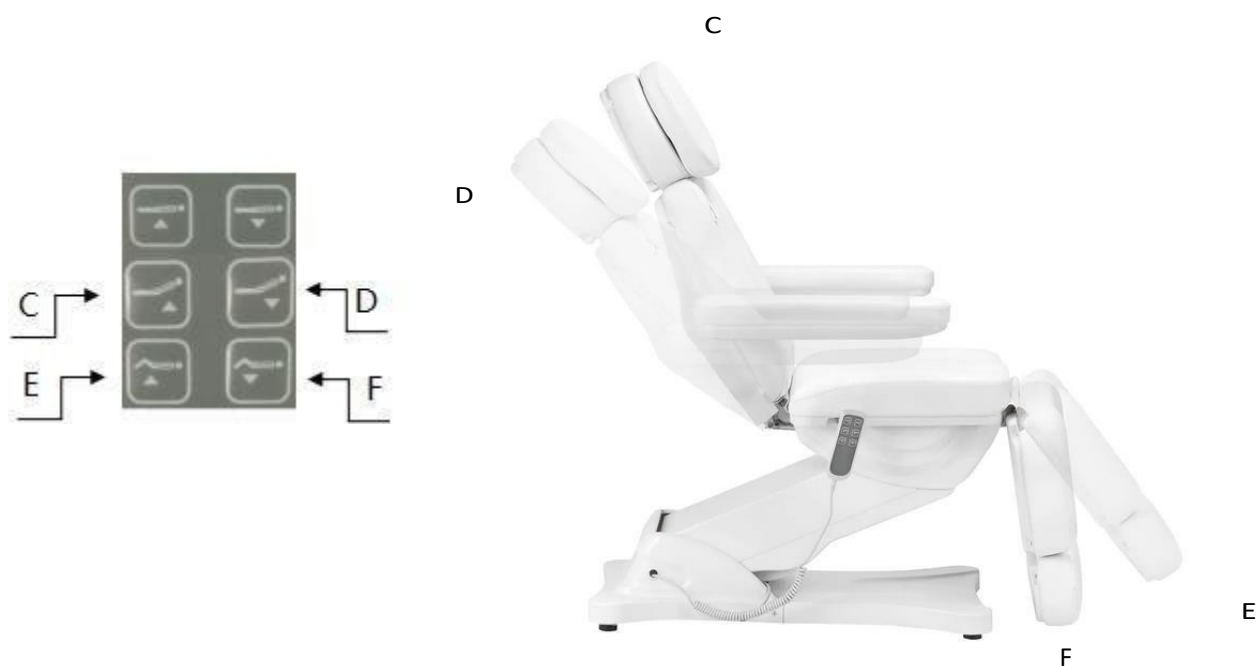

3. Funzione di ritrazione del poggiapiedi (poggiapiedi, lunghezza: 0~ 12cm)

0~ 12cm

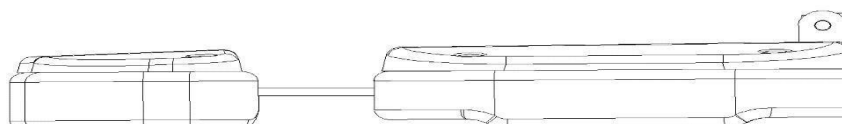

Pulizia e disinfezione dell'apparecchio:

- Scollegare l'apparecchio prima di pulirlo.
- Per mantenere la superficie della sedia in buone condizioni, pulirla regolarmente. Ricordarsi di pulire e disinfettare la sedia dopo ogni utilizzo. Si consiglia di eseguire una disinfezione accurata una volta al mese.

I Superfici in metallo e plastica

- Per pulire le superfici e i comandi in metallo e plastica, passare un panno umido. Per pulire le aree o gli angoli più difficili da raggiungere, è sufficiente una piccola spazzola. Non usare troppo liquido per pulire l'apparecchio. Disinfettare poi l'apparecchio con un liquido adatto.

II Superfici in acciaio inox

- La pulizia con una soluzione detergente delicata è la soluzione migliore. L'ammoniaca e la maggior parte dei solventi possono essere utilizzati per rimuovere le macchie più resistenti. Evitare le soluzioni a base di cloro.

III Superfici metalliche verniciate o cromate

- Non utilizzare getti d'acqua (docce, cannoni a alta pressione) per la pulizia.
- Non pulire in presenza di temperature e umidità elevate e non esporre l'unità a condizioni che potrebbero causare la contaminazione da parte di liquidi.
- Non utilizzare solventi o acidi per la pulizia.

IV Superficie del sedile

- Pulire uniformemente la superficie del sedile con un detergente speciale per la pelle e poi passarlo con un panno pulito e morbido.

Manutenzione

Prima di effettuare la manutenzione, scollegare l'unità.

1. Le riparazioni devono essere effettuate da personale esperto e autorizzato dal produttore. Le riparazioni effettuate da personale non autorizzato possono causare lesioni o danni all'apparecchio per i quali il produttore non è responsabile.
2. Utilizzare solo ricambi originali approvati dal produttore.
3. Non utilizzare la poltrona elettrica o gli accessori se non funzionano correttamente.
4. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere documentati.

Misure di manutenzione

Controllare i comandi e il loro cablaggio una volta alla settimana. Controllare lo stato e il funzionamento dei seguenti elementi almeno una volta ogni sei mesi:

1. Cavo di alimentazione e relativo attacco
2. Cablaggio del motore
3. La centralina di controllo e il suo cablaggio
4. se gli accessori sono montati
5. Il normale funzionamento del sistema di chiusura

Se si riscontrano difetti, interrompere l'uso dell'apparecchiatura e contattare un centro di assistenza autorizzato. Solo personale esperto o autorizzato può aprire o sostituire l'attuatore/unità di comando.

Se una parte dell'apparecchiatura è danneggiata, scollegare il cavo di alimentazione e interrompere l'utilizzo. Avvisare quindi il servizio di assistenza.

Risoluzione dei problemi

Problema	Metodi di soluzione
Il controllo manuale non risponde	Verificare che l'interfaccia che collega la linea di controllo manuale sia allentata (verificare che non vi siano problemi con la scheda di circuito) e ricordarsi di segnare la posizione originale della spina.
Il motore non risponde	Cambiare la posizione della spina del motore

Per sostituire la centralina e ordinare altri pezzi di ricambio, contattare il servizio di assistenza, descrivendo il problema prima di contattarlo:

1. Modello
2. Data di acquisto

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. L'apparecchio è un'apparecchiatura professionale da utilizzare negli interventi di chirurgia estetica. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita conseguenze indesiderate durante il trattamento.
2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Non installare o utilizzare il dispositivo in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo da evitare che i liquidi penetrino nel dispositivo.
4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato fornito da ACTIVESHOP Sp. z o.o. nei seguenti casi:
(a) il dispositivo è entrato nel liquido, (b) il dispositivo emette uno strano odore, fumo o fa strani rumori, (c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, (d) il dispositivo è stato urtato o il suo alloggiamento è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa di corrente e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio in un luogo in cui il cavo di alimentazione possa essere calpestato da qualcuno.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e familiarità con l'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con l'apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o provocare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso centri di riciclaggio compatibili con l'ambiente. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nei contenitori dei rifiuti domestici. Seguire le regole per lo

norme di smaltimento per questo tipo di apparecchiature. Per proteggere l'ambiente

Secondo la Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i rifiuti di apparecchiature elettriche devono essere raccolti separatamente e consegnati ai punti di raccolta per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere inviati al riciclaggio. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati, oltre che ad ACTIVESHOP Ltd.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'unità deve essere trasportata a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nell'imballaggio originale. Conservare l'unità in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.

