

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>

## MANUEL D'INSTRUCTION

Fauteuil cosmétique électrique Sillon Classic 3 moteurs

Modèle : C501A



**Importateur :**

ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A  
54-610 Wrocław, Poland  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/04/2024



**\*AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, VEUILLEZ LIRE LE MANUEL D'INSTRUCTIONS\*.**


Ce manuel contient des informations détaillées sur le fonctionnement et l'entretien de l'appareil. Avant d'utiliser l'appareil, lisez les instructions qui l'accompagnent. Utilisez l'appareil comme décrit. Conservez ce manuel et veillez à ce que toutes les personnes susceptibles d'utiliser l'appareil en prennent connaissance.

Le fauteuil cosmétique électrique Sillon est un équipement professionnel qui convient parfaitement à tout institut de beauté. Il est idéal pour les massages, les soins cosmétiques et les traitements de physiothérapie. Le fauteuil a été conçu pour assurer un confort total lorsqu'on s'y allonge pendant le traitement. Le fauteuil se compose de quatre parties et d'un coussin amovible. Des poignées situées de part et d'autre du siège permettent de suspendre la télécommande afin de l'avoir toujours à portée de main.

**Capacité de charge du produit : 150 kg**


La capacité de charge maximale du corps du siège est de 150 kg. Ne soulevez pas un poids supérieur à celui que le siège peut supporter.

Ne sautez pas sur le dossier et n'exercez pas une forte pression sur les accoudoirs pour éviter d'endommager la structure du produit.

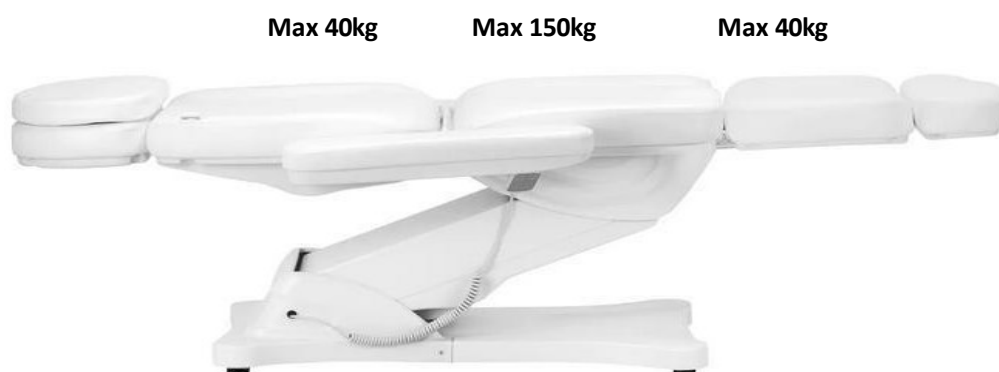

**Remarque**

Le carton et les cartons extérieurs sont utilisés pour l'emballage, avec un total de 10 couches de papier pour assurer la protection de vos produits. Nous vous recommandons de conserver l'emballage d'origine pour un usage ultérieur, en particulier pour les retours pendant la période de garantie. Pour des raisons de sécurité, deux personnes sont nécessaires pour soulever la chaise hors du carton. Lors du levage, tenez-vous des deux côtés de l'appui-tête et du repose-pieds de la chaise. N'oubliez pas que le fauteuil ne peut être soulevé qu'à partir des positions de l'appui-tête et du repose-pieds, et non des deux côtés des accoudoirs.

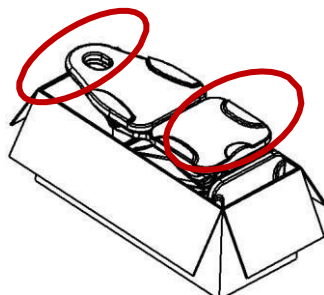

Avant d'utiliser le fauteuil, vérifiez que l'emballage est intact et n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de problème, veuillez le signaler à la société de transport ou à l'agence de voyage.

Le personnel du service après-vente dans les 2 jours suivant la réception de l'appareil. Assurez-vous que tous les accessoires sont complets au moment de la livraison. Si vous constatez qu'il manque des accessoires au moment de la livraison, contactez le service après-vente à temps.


Le fauteuil cosmétique électrique doit être utilisé dans une pièce fermée et sèche. La température de la pièce doit être comprise entre + 10° et -40° et l'humidité relative entre 30% et 75%. Si le fauteuil cosmétique électrique a été exposé à des températures inférieures à 0°, attendez au moins 5 heures avant de l'utiliser afin que l'appareil ait le temps d'atteindre la température ambiante.

Avant d'utiliser le fauteuil cosmétique électrique, il convient de lire les instructions et d'effectuer les opérations suivantes :

- (1) Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage ont été retirés.
- (2) Assurez-vous que le fauteuil est en état de marche.
- (3) Placer le fauteuil de beauté électrique dans l'endroit où il sera utilisé.
- (4) Brancher la fiche d'alimentation dans une prise de courant appropriée.


**Conseil !** Les enfants et les personnes inexpérimentées ne doivent pas utiliser cet appareil. Les enfants doivent être surveillés et ne doivent pas jouer à proximité du fauteuil de beauté électrique. Pour des raisons de sécurité, débranchez l'appareil et ne le laissez pas sans surveillance. Débranchez également le cordon d'alimentation.

#### Dimensions de l'appareil :

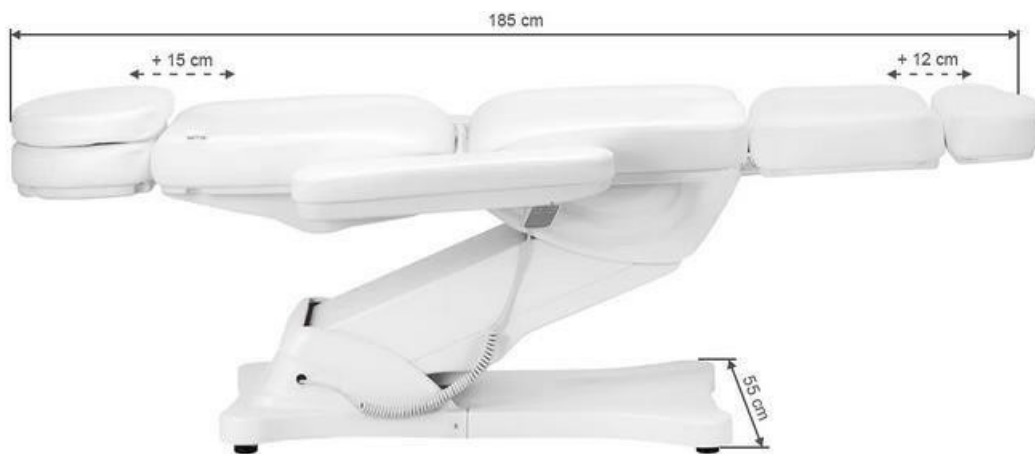



### Construction de l'appareil :

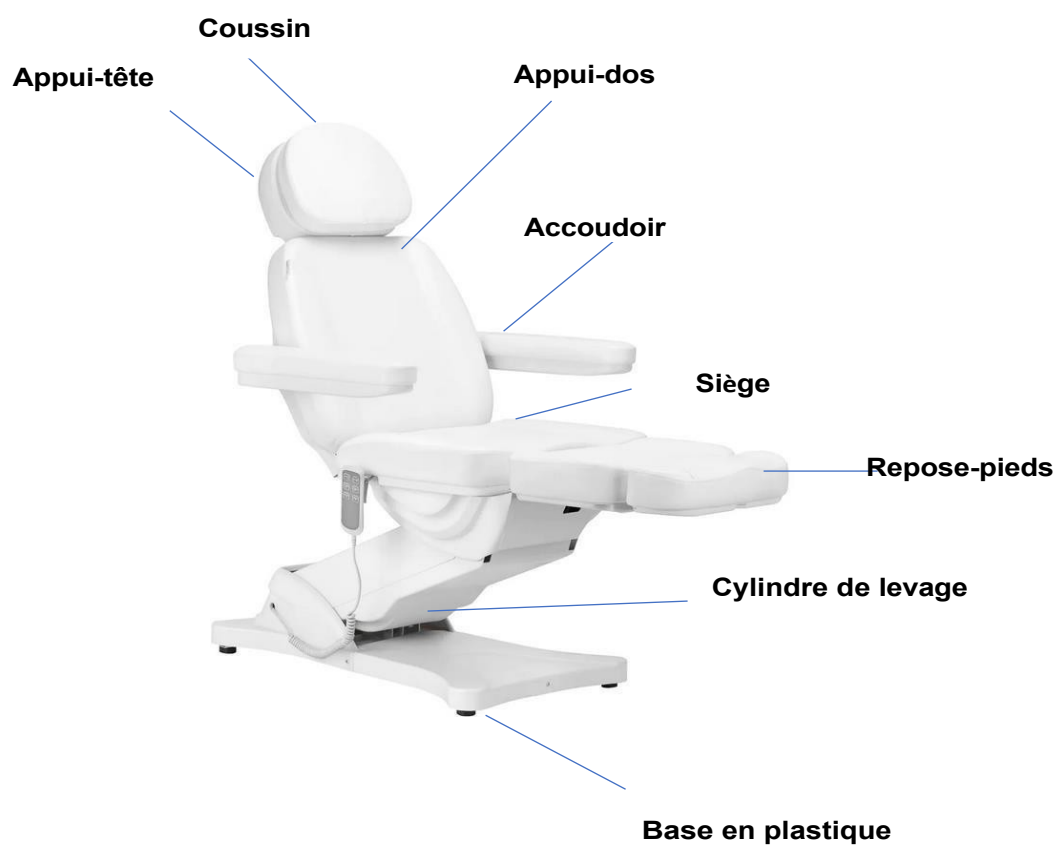

**Attention, le repose-pieds n'est pas conçu pour supporter le poids total d'un adulte.**

1. Le repose-pieds n'est pas conçu pour supporter le poids total d'un adulte.
2. Ne pas s'asseoir directement sur l'accoudoir et le repose-pieds.
3. Ne pas utiliser le fauteuil d'examen gynécologique électrique à proximité de gaz inflammables.
4. Ne pas soulever un poids supérieur à celui que le fauteuil peut supporter.
5. Veillez à ce que la distance entre les prises ne dépasse pas 2 mètres.

**Attention**

1. Pour des raisons de sécurité, branchez toujours le cordon d'alimentation sur une prise de terre.
2. Ne pas attacher le cordon d'alimentation à l'appareil. Soulever ou tirer sur le cordon d'alimentation peut l'endommager. Veillez à ce que le cordon d'alimentation puisse être facilement retiré en cas d'urgence.
3. Retirer le cordon d'alimentation avant de déplacer le fauteuil de beauté électrique afin qu'il ne reste pas coincé entre certaines parties du fauteuil.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, débranchez-le immédiatement, n'utilisez pas le fauteuil et contactez un centre de service agréé. N'utilisez que le cordon d'alimentation d'origine.
5. Ne permettez pas à une personne qui n'effectue pas le traitement de contrôler la télécommande.
6. Ne placez aucun objet sous le fauteuil.
7. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace autour du fauteuil pour pouvoir le plier et le déplier librement.
8. Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'objets pointus ou dangereux autour du fauteuil qui pourraient endommager l'appareil.
9. Ne modifiez pas l'appareil vous-même. Si le fauteuil ne fonctionne pas correctement, cessez de l'utiliser et contactez un centre de service agréé.


**Utilisation de l'appareil :**

1. Brancher le cordon d'alimentation sur une source d'alimentation externe de 110V~240V.

**Méthode d'installation de l'accoudoir :**

Le siège doit être en position horizontale pour pouvoir y installer l'accoudoir. Faites glisser l'accoudoir dans le trou situé sur le côté du dossier. L'accoudoir doit être fermement fixé. Tournez-le vers la droite ou la gauche pour qu'il se mette en place correctement. Faites de même avec l'autre accoudoir.


L'accoudoir est perpendiculaire au sol (quel que soit l'angle du siège). Il peut être tourné de 180°.

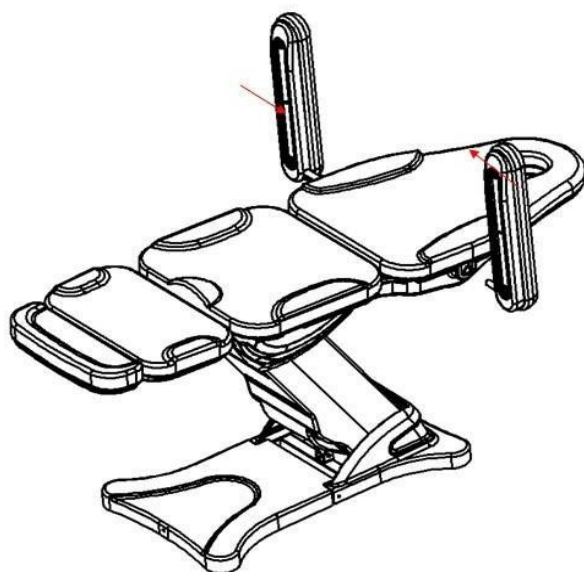


1. Fonction de commande manuelle (hauteur de levage : le lit est à 58~ 82 cm du sol)



2. Fonction de contrôle manuel (angle d'élévation du dos 0-80 °, angle d'élévation des jambes 0-90 °)

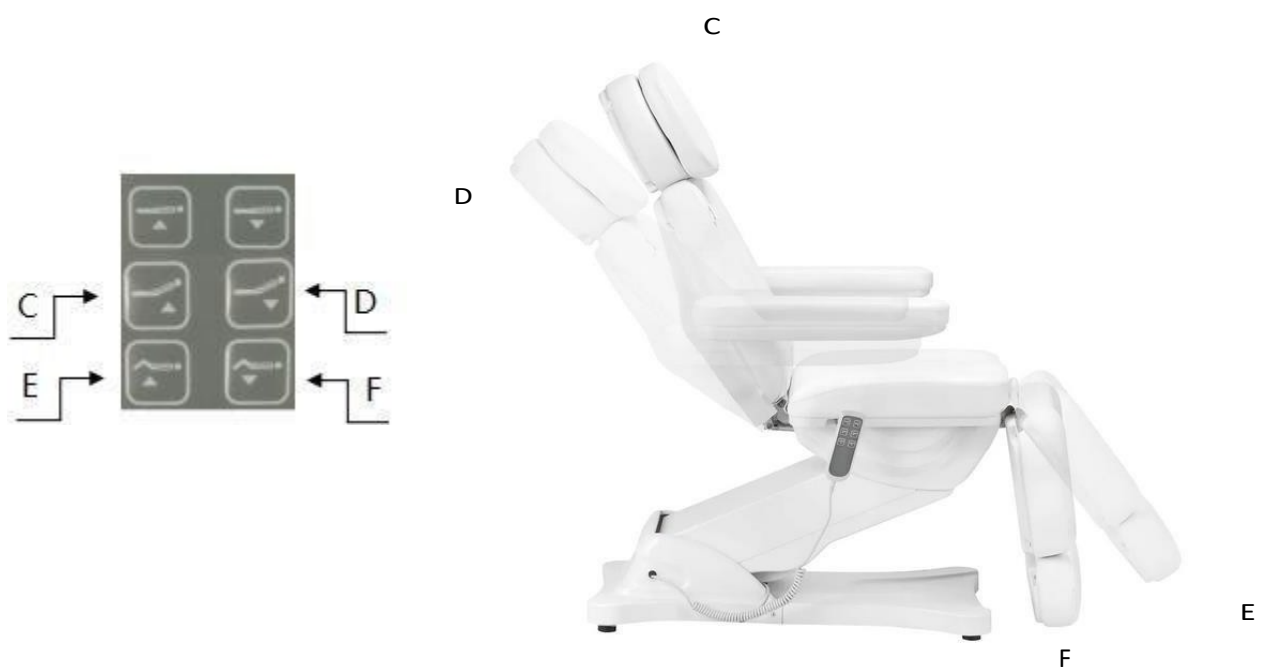

3. Fonction de rétraction du repose-pieds (repose-pieds, longueur : 0~ 12cm)

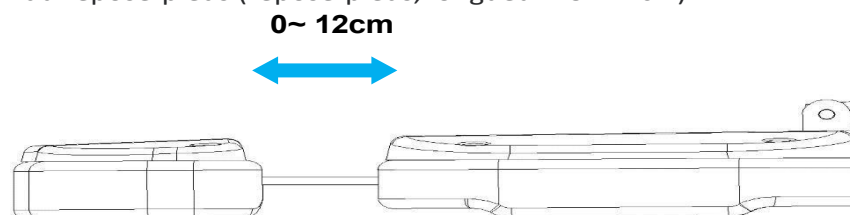

## **Nettoyage et désinfection de l'appareil :**

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Pour maintenir la surface du fauteuil en bon état, nettoyez-la régulièrement. N'oubliez pas de nettoyer et de désinfecter le fauteuil après chaque utilisation. Il est recommandé de procéder à une désinfection complète une fois par mois.

### **I Surfaces métalliques et plastiques**

- Pour nettoyer les surfaces et les commandes en métal et en plastique, il suffit de les essuyer avec un chiffon humide. Pour nettoyer les zones ou les coins difficiles à atteindre, une petite brosse fera l'affaire. N'utilisez pas trop de liquide pour nettoyer l'appareil. Désinfectez ensuite l'appareil avec un liquide approprié.

### **II Surfaces en acier inoxydable**

- Le nettoyage à l'aide d'une solution détergente douce est le plus efficace. L'ammoniaque et la plupart des solvants peuvent être utilisés pour éliminer les taches tenaces. Évitez les solutions à base de chlore.

### **III Surfaces métalliques peintes ou chromées**

- Ne pas utiliser de jets d'eau (douches, canons à eau à haute pression) pour le nettoyage.
- Ne pas nettoyer à des températures et à des taux d'humidité élevés, ne pas exposer l'appareil à des conditions susceptibles d'entraîner une contamination par des liquides.
- Ne pas utiliser de solvants ou d'acides pour le nettoyage.

### **IV Surface du siège**

- Essuyez uniformément la surface du siège avec un nettoyant spécial pour le cuir, puis essuyez-la avec un chiffon propre et doux.

## **Entretien de l'appareil**

### **Débranchez l'appareil avant toute opération d'entretien.**

1. Les réparations doivent être effectuées par du personnel expérimenté et autorisé par le fabricant. Les réparations effectuées par du personnel non autorisé peuvent entraîner des blessures ou des dommages à l'appareil pour lesquels le fabricant n'est pas responsable.
2. N'utiliser que des pièces de rechange d'origine approuvées par le fabricant.
3. Ne pas utiliser le fauteuil de beauté électrique ou les accessoires s'ils ne fonctionnent pas correctement.
4. Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être documentés.

### **Mesures d'entretien**

Vérifier les commandes et leur câblage une fois par semaine. Vérifiez l'état et le fonctionnement des éléments suivants au moins une fois tous les six mois :

1. Câble d'alimentation et sa fixation
2. Câblage du moteur
3. Le boîtier de commande et son câblage
4. La présence d'accessoires
5. Le fonctionnement normal du système de fermeture

Si vous constatez des défauts, cessez d'utiliser l'équipement et contactez un centre de service agréé. Seul un personnel expérimenté ou autorisé peut ouvrir ou remplacer l'unité de commande/actionnement.

Si une partie de l'appareil est endommagée, débranchez le cordon d'alimentation et cessez de l'utiliser. Informez ensuite le service après-vente.

## Dépannage

| Problème                           | Méthodes de solution                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La commande manuelle ne répond pas | Vérifiez que l'interface reliant la ligne de commande manuelle est desserrée (vérifiez qu'il n'y a pas de problème avec la carte de circuit imprimé). N'oubliez pas de marquer la position d'origine de la fiche. |
| Le moteur ne répond pas            | Changez la position de la fiche du moteur.                                                                                                                                                                        |

Pour remplacer le boîtier de commande et commander d'autres pièces de rechange, contactez le service après-vente, décrivez le problème avant de prendre contact :

1. Modèle
2. Date d'achat

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les instituts de beauté. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en cosmétique permet d'éviter des conséquences indésirables pendant le traitement.
2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans ce manuel. Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un technicien agréé (société ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - de manière à ce qu'aucun liquide ne puisse pénétrer dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant et contactez un centre de service agréé par ACTIVESHOP Sp. z o.o. dans les cas suivants :  
(a) du liquide a pénétré dans l'appareil, (b) l'appareil émet une odeur étrange, de la fumée ou fait des bruits bizarres, (c) le cordon d'alimentation a été endommagé, (d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.
5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
7. N'introduisez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, retirez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé en cas de chute.
9. Afin de garantir la durée de vie fixe de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

**ATTENTION :**

1. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, contactez un centre de service agréé afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de familiarité avec l'équipement, si une surveillance ou des instructions sont fournies sur la manière d'utiliser l'équipement en toute sécurité, de sorte que les risques associés soient compris.
3. L'équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut constituer un risque pour la santé ou entraîner la mort, c'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et rangé hors de portée des enfants.

**ÉLIMINATION DE L'APPAREIL**

Les appareils électriques usagés, les accessoires et l'emballage doivent être déposés dans des centres de recyclage respectueux de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les conteneurs d'ordures ménagères. Suivez les règles de mise au rebut pour ce type d'équipement.

règles de mise au rebut pour ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement

Conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets d'équipements électriques doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques. Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être envoyés au retraitement. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à ACTIVESHOP Ltd.

**STOCKAGE ET TRANSPORT**

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-) 20 °C et (+) 50 °C uniquement dans son emballage d'origine. Stocker l'appareil dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement comprise entre (+) 10 °C et (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.

