

ACTIVESHOP®

NAVODILA ZA UPORABO

Električni kozmetični stol Sillon Classic 3 motorji

Model: C501A



Uvoznik:


z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Poljska

www.activeshop.com.pl

Rev. A/04/2024

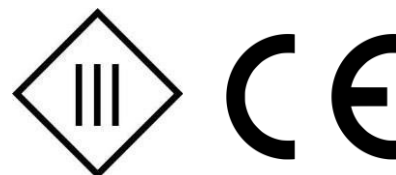

***PRED UPORABO TEGA IZDELKA PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO*.**

Ta priročnik vsebuje podrobne informacije o delovanju in vzdrževanju enote. Pred uporabo enote preberite priložena navodila. Napravo uporabljajte v skladu z opisom. Shranite ta priročnik in poskrbite, da bodo z njim seznanjene vse osebe, ki lahko uporabljajo napravo.

Električni kozmetični stol Sillon je profesionalen kos opreme, ki je kot nalašč za vsak kozmetični salon. Idealen je za masaže, kozmetične in fizioterapevtske tretmaje. Fotelj je zasnovan tako, da zagotavlja popolno udobje, ko med zdravljenjem ležite na njem. Fotelj je sestavljen iz štirih delov in odstranljive blazine. Na obeh straneh sedeža so ročaji, na katere lahko obesite daljinski upravljalnik, da ga imate vedno pri roki.

Nosilnost izdelka: 150 kg


Največja nosilnost telesa sedeža je 150 kg. Ne dvigujte večje teže, kot je navedena teža, ki jo sedež lahko prenese.

Ne skačite po naslonjalu ali močno pritiskajte na naslonjala za roke, da ne poškodujete strukture izdelka.



Opomba:

Za pakiranje se uporabljajo kartonska škatla in zunanji kartoni s skupno 10 plastmi papirja, ki zagotavljajo zaščito vaših izdelkov. Priporočamo, da originalno embalažo shranite za nadaljnjo uporabo, zlasti za vračilo v garancijskem roku. Iz varnostnih razlogov sta za dvig stola iz kartonske škatle potrebni dve osebi. Pri dvigovanju stojte na obeh straneh naslona za glavo in naslona za noge stola. Ne pozabite, da lahko stol dvignete le s položajev naslona za glavo in noge, ne pa tudi z obeh strani naslonjal za roke.

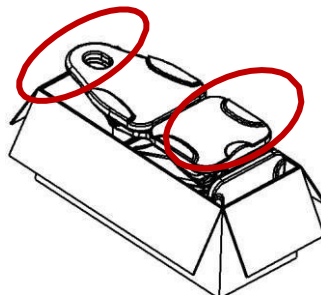

Pred uporabo fotelja preverite, ali je embalaža nepoškodovana in ali ni bila poškodovana med prevozom. Če je prišlo do kakršne koli težave, obvestite prevozno podjetje ali

Poprodajno osebje v 2 dneh po prejemu enote. Prepričajte se, da je ob dostavi vsa dodatna oprema popolna. Če ob dobavi ugotovite, da dodatna oprema manjka, se pravočasno obrnite na poprodajno osebje.

Električni kozmetični stol je treba uporabljati v zaprtem in suhem prostoru. Temperatura v prostoru mora biti med $+10^{\circ}$ in -40° , relativna vlažnost pa med 30 % in 75 %. Če je bil električni kozmetični stol izpostavljen temperaturam pod 0° , pred uporabo počakajte vsaj 5 ur, da ima naprava čas doseči sobno temperaturo.

Pred uporabo električnega kozmetičnega stola preberite navodila in izvedite naslednje korake:

- (1) Prepričajte se, da ste odstranili ves embalažni material.
- (2) Prepričajte se, da stol deluje brezhibno.
- (3) Električni kozmetični stol postavite na mesto, kjer ga boste uporabljali.
- (4) Vtič za električno omrežje vtaknite v ustrezno vtičnico.

Nasvet! Otroci in neizkušene osebe te naprave ne smejo uporabljati. Otroci morajo biti pod nadzorom in se ne smejo igrati v bližini električnega kozmetičnega stola. Iz varnostnih razlogov aparat izključite iz električnega omrežja in ga ne puščajte brez nadzora. Izklopite tudi napajalni kabel.

Dimenzije naprave:





Konstrukcija naprave:



Opozorilo

1. Podstavek za noge ni zasnovan tako, da bi prenesel celotno težo odrasle osebe.
2. Ne sedite neposredno na naslon za roke in noge.
3. Električnega ginekološkega preiskovalnega stola ne uporabljajte v bližini vnetljivih plinov.
4. Ne dvigujte večje teže, kot jo stol lahko prenese.
5. Poskrbite, da razdalja med vtičnicami ne bo večja od 2 metrov.

Opozorilo

1. Iz varnostnih razlogov napajalni kabel vedno priključite v ozemljeno vtičnico.
2. Napajalnega kabla ne privezujte na enoto. Dvigovanje ali vlečenje za napajalni kabel ga lahko poškoduje. Prepričajte se, da lahko napajalni kabel v nujnih primerih enostavno odstranite.
3. Pred premikanjem električnega kozmetičnega stola odstranite napajalni kabel, da se ne zatakne med nekatere dele stola.
4. Če je napajalni kabel poškodovan, ga takoj odklopite, stola ne uporabljajte in se obrnite na pooblaščen servisni center. Uporabljajte samo originalni napajalni kabel.
5. Osebi, ki ne izvaja zdravljenja, ne dovolite, da bi upravljala daljinski upravljalnik.
6. Pod stol ne postavljajte nobenih predmetov.
7. Prepričajte se, da je okoli stola dovolj prostora, da ga je mogoče prosto zložiti in razložiti.
8. Prepričajte se, da v okolici stola ni ostrih ali škodljivih predmetov, ki bi lahko poškodovali napravo.
9. Enote ne spreminjajte sami. Če stol ne deluje pravilno, ga prenehajte uporabljati in se obrnite na pooblaščen servisni center.


Uporaba naprave:

1. Napajalni kabel priključite na zunanji napajalnik 110V~240V.

Način namestitve naslona za roke:

Sedež mora biti v vodoravnem položaju, da lahko nanj namestite naslon za roke. Naslonjalo za roko potisnite v odprtino na strani naslona za hrbet. Naslon za roko mora biti trdno pritrjen. Zavrtite ga v desno ali levo, da se pravilno n a m e s t i. Enako naredite z drugim naslonom za roke.


Naslon za roko je pravokoten na tla (ne glede na naklon sedeža). Lahko ga obrnete za 180°.

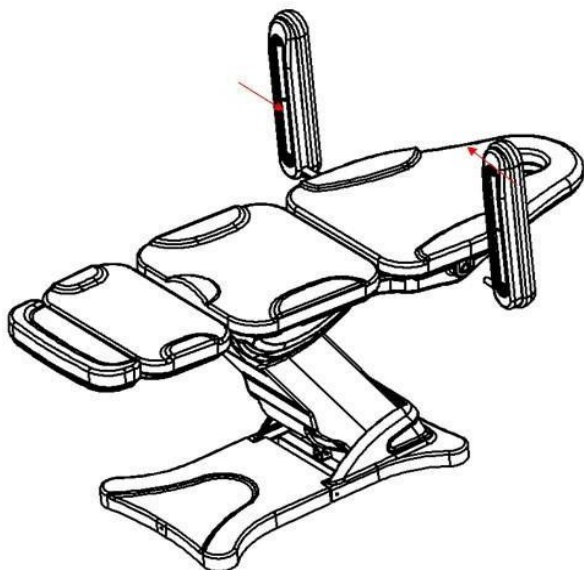

1. Funkcija ročnega upravljanja (višina dviga: postelja je 58~ 82 cm od tal)




2. Funkcija ročnega upravljanja (kot dviga hrbta 0-80 °, kot dviga nog 0-90 °)

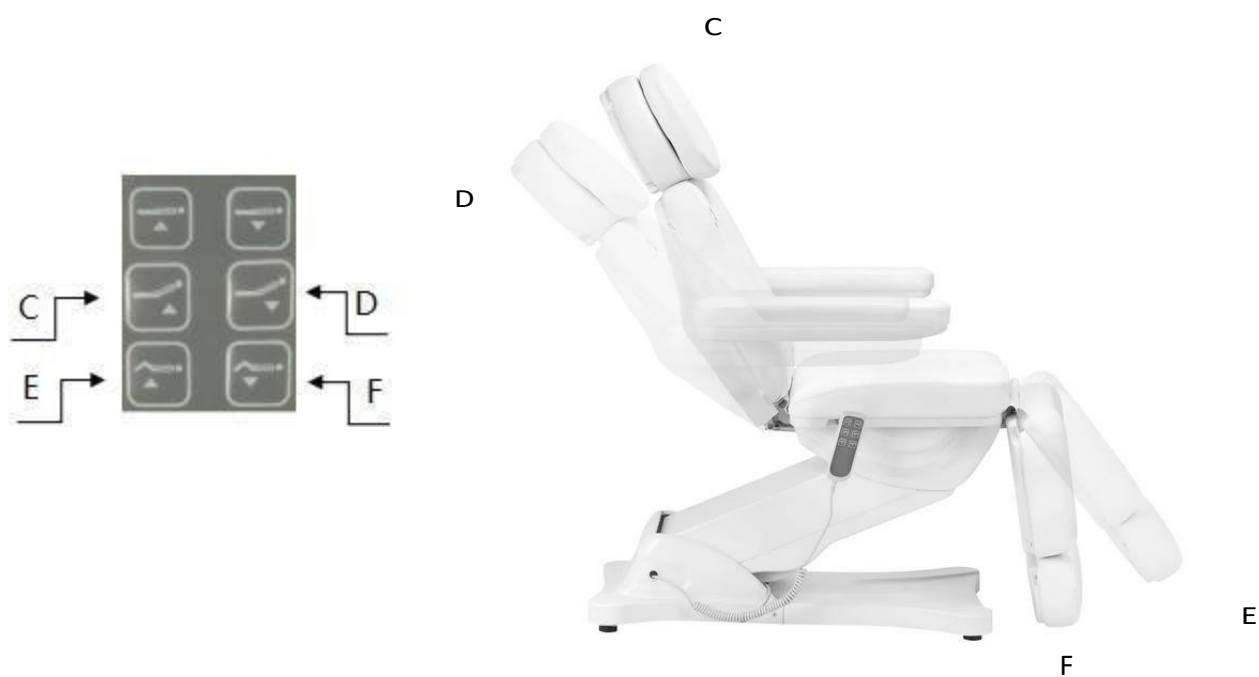

3. Funkcija umikanja naslona za noge (naslon za noge, dolžina: 0~ 12 cm)

0~ 12cm

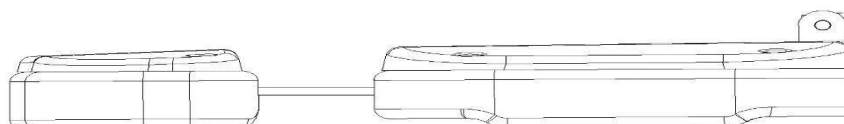

Čiščenje in razkuževanje naprave:

- Pred čiščenjem napravo izključite iz električnega omrežja.
- Da bi ohranili površino stola v dobrem stanju, jo redno čistite. Ne pozabite očistiti in razkužiti stola po vsaki uporabi. Priporočamo, da temeljito razkuževanje opravite enkrat na mesec.

I Kovinske in plastične površine

- Kovinske in plastične površine ter upravljalne elemente očistite tako, da jih obrišete z vlažno krpo. Za čiščenje težko dostopnih območij ali kotov se dobro obnese majhna krtačka. Za čiščenje naprave ne uporabljajte preveč tekočine. Nato aparat razkužite z ustrezno tekočino.

II Površine iz nerjavečega jekla

- Najbolje se obnese čiščenje z blago raztopino detergenta. Za odstranjevanje težkih madežev lahko uporabite amoniak in večino topil. Izogibajte se raztopinam na osnovi klora.

III Lakirane ali kromirane kovinske površine

- Za čiščenje ne uporabljajte vodnih curkov (prhe, visokotlačni vodni topovi).
- Ne čistite pri visokih temperaturah in visoki vlažnosti, enote ne izpostavljajte pogojem, ki bi lahko povzročili onesnaženje s tekočino.
- Za čiščenje ne uporabljajte topil ali kislin.

IV Površina sedeža

- Površino sedeža enakomerno obrišite s posebnim čistilom za usnje in jo nato obrišite s čisto, mehko krpo.

Vzdrževanje

Pred vzdrževanjem izklopite napravo iz električnega omrežja.

1. Popravila naj opravlja izkušeno in od proizvajalca pooblaščen osebje. Popravila, ki jih izvaja nepooblaščen osebje, lahko povzročijo poškodbe ali škodo na napravi, za katero proizvajalec ni odgovoren.
2. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele, ki jih je odobril proizvajalec.
3. Električnega kozmetičnega stola ali dodatne opreme ne uporabljajte, če ne delujejo pravilno.
4. Vsa vzdrževalna dela in popravila je treba dokumentirati.

Ukrepi za vzdrževanje

Enkrat tedensko preverite krmilnike in njihovo ožičenje. Vsaj enkrat na šest mesecev preverite stanje in delovanje naslednjih elementov:

1. napajalni kabel in njegovo pritrditev
2. ožičenje motorja
3. krmilno omarico in njeno ožičenje
4. ali je pritrjena dodatna oprema
5. normalno delovanje sistema za zaklepanje

Če odkrijete kakršne koli napake, prenehajte uporabljati opremo in se obrnite na pooblaščen servisni center. Pogon/krmilno enoto lahko odpre ali zamenja samo izkušeno ali pooblaščen osebje.

Če je kateri koli del opreme poškodovan, izključite napajalni kabel in jo prenehajte uporabljati. Nato obvestite servisno službo.

Odpravljanje težav

Težava	Metode rešitve
Ročno upravljanje se ne odziva	Preverite, ali je vmesnik, ki povezuje linijo za ročno upravljanje, zrahljan (Preverite, ali ni težav s ploščo tiskanega vezja), ne pozabite označiti prvotnega položaja vtiča.
Motor se ne odziva	Preklopite položaj vtiča motorja

Če želite zamenjati krmilno enoto in naročiti druge nadomestne dele, se obrnite na servisno službo, pred tem pa opišite težavo:

1. Model
2. Datum nakupa

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih ordinacijah. Z upravljanjem naprave samo s strani usposobljenega kozmetičnega osebja se izognete neželenim posledicam med zdravljenjem.
2. Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščen servisier (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, na mokrih mestih ali z mokrimi rokami - tako da v napravo ne morejo priti tekočine.
4. V naslednjih primerih napravo takoj izključite iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servisni center družbe ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
(a) je v napravo vstopila tekočina, (b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke, (c) je poškodovan napajalni kabel, (d) je naprava prevrnjena ali je poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti izvlcite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. V odprtino naprave ne vstavljajte nobenih predmetov. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. V primeru, da se v odprtini pojavi tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko ob padcu poškoduje.
9. Da bi zagotovili določeno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se aparat pokvari, poškoduje ali celo pregoreva.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili morebitni nevarnosti.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi in duševnimi sposobnostmi ter brez izkušenj in poznavanja opreme, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki nimajo zadostnega znanja o uporabi naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE



Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo odvrzite v okoljsko primernih centrih za recikliranje. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnike za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za

za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje

V skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi je treba odpadno električno opremo zbirati ločeno in jo oddati na zbirnih mestih za odpadno električno in elektronsko opremo. Izrabljene in stare naprave vsebujejo komponente, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba poslati v ponovno predelavo. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enoto shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.

