

ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽITIE

Kozmetické kreslo hyd. Basic 210



Dovozca:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/06/2024

Pred použitím kozmetického kresla si prečítajte obsah priloženého návodu a vykonajte nasledujúce kroky:

1. Uistite sa, že boli odstránené všetky časti obalu.
2. Uistite sa, že je kreslo v prevádzkyschopnom stave.
3. Umiestnite kreslo na miesto, kde sa bude používať.

Pozor.

Toto zariadenie by nemali používať deti a neoprávnené osoby. Deti musia byť pod dohľadom a nesmú sa hrať v blízkosti kozmetického kresla.

Rozmery zariadenia:




Dĺžka pri úplnom vysunutí: 184 cm, výška min. 65 cm,

Maximálna výška 79 cm

Maximálne zaťaženie stoličky: 150kg.



- Kreslo je manuálne nastaviteľné pomocou pák pod ním. Týmto spôsobom možno nastaviť uhol opierky nôh a operadla.
- Výška kresla sa nastavuje pomocou páčky na nastavenie sedadla.
- Okrem toho sú podrúčky odnímateľné, aby bol ľahký prístup do ošetrovacích priestorov.
- Vankúš umiestnený na opierke hlavy je tiež odnímateľný, čo uľahčuje vykonávanie ošetrov, keď osoba leží na bruchu.
- Kreslo možno rozložiť do polohy na ležanie.
- Kreslo sa dá otáčať o 360°.

Ak chcete nastaviť polohu operadla/opierky nôh, zatiahnite za páčku pod stoličkou a potom operadlo/opierku nôh sklopte do správnej polohy.

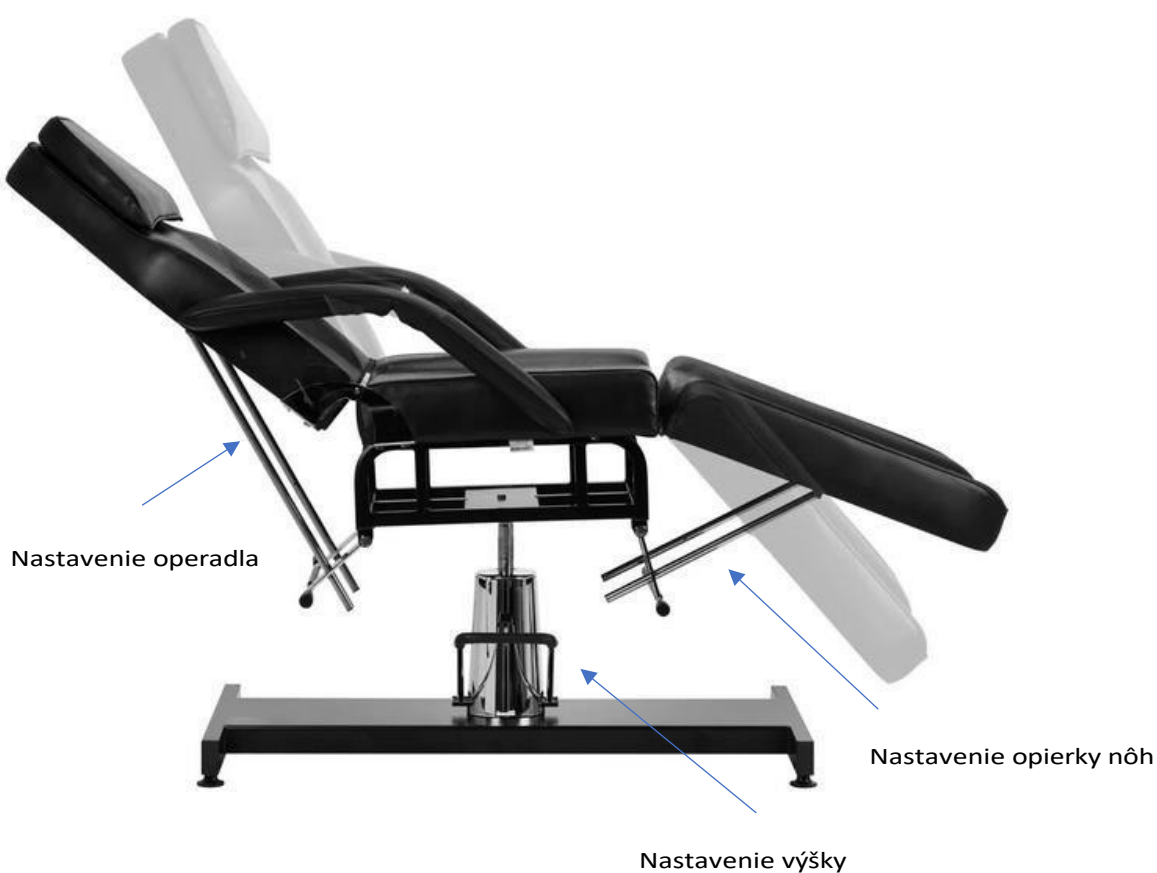

Montáž:

1. Naskrutkujte sedadlo k rámu.
2. Namontujte sedadlo na valec pomocou "push fit".
3. Utiahnite poistnú skrutku pohonu a sedadla.
4. Namontujte držiaky do operadla a sedadla.
5. Namontujte konzoly do opierky nôh a sedadla.

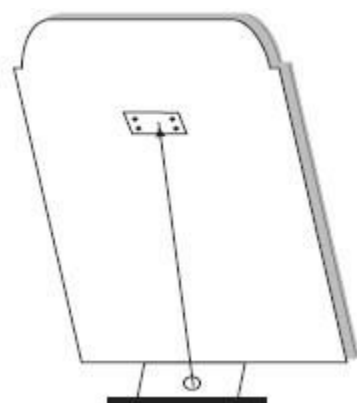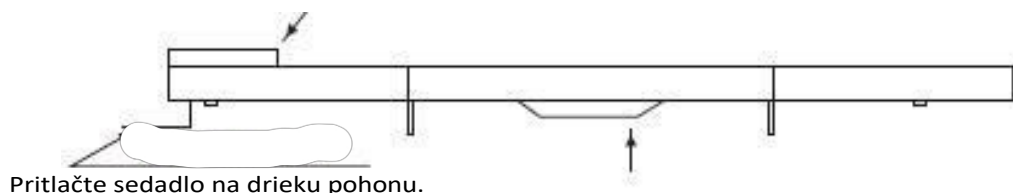

Prestrčte podperu cez otvor a utiahnite ju skrutkou.

Na mieste na operadle priskrutkujte konzolu tak, že ju zaistíte skrutkou cez otvor (to isté platí pre opierky nôh).

Čistenie a údržba:

- Aby bol povrch stoličky v dobrom stave, musí sa pravidelne čistiť. Nezabudnite stoličku po každom použití vyčistiť a vydezinfikovať. Odporúčame vykonávať dôkladnú dezinfekciu raz za mesiac.

I Kovové a plastové povrchy

- Ak chcete vyčistiť kovové a plastové povrchy a ovládacie prvky, utrite ich vlhkou handričkou. Na čistenie ťažko prístupných miest alebo rohov sa najlepšie hodí malá kefka.

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte príliš veľa tekutiny. Potom spotrebič vydezinfikujte vhodnou tekutinou.

II Povrchy z nehrdzavejúcej ocele

- Čistenie jemným roztokom čistiaceho prostriedku bude najlepšie. Na odstránenie odolných škvŕn možno použiť čpavok a väčšinu rozpúšťadiel. Nemali by ste sa vyhýbať ani roztokom na báze chlóru.

III Lakované alebo pochrómované kovové povrchy

- Na čistenie nepoužívajte vodné prúdy (sprchy, vysokotlakové vodné delá).

- Nečistite pri vysokých teplotách a vysokej vlhkosti. Ne v y s t a v u j t e prístroj podmienkam, ktoré môžu viesť ku kontaminácii tekutinou.

- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani kyseliny.

IV Povrch stoličky

- Povrch sedadla rovnomerne utrite špeciálnym čistiacim prostriedkom na kožu a potom ho utrite čistou, mäkkou handričkou.

Údržba

Pred údržbou odpojte zariadenie od elektrickej siete.

1. Opravy by mal vykonávať skúsený a výrobcom autorizovaný personál. Opravy vykonávané neautorizovaným personálom môžu spôsobiť zranenie alebo poškodenie spotrebiča, za ktoré výrobca nezodpovedá.
2. Používajte len originálne náhradné diely schválené výrobcom.
3. Elektrické kozmetické kreslo ani príslušenstvo nepoužívajte, ak nefungujú správne.
4. Všetky práce na údržbe a opravách musia byť zdokumentované.

Opatrenia na údržbu

Raz týždenne skontrolujte ovládacie prvky a ich zapojenie. Najmenej raz za šesť mesiacov skontrolujte stav a funkčnosť nasledujúcich položiek:

1. napájací kábel a jeho upevnenie
2. zapojenie motora
3. ovládacia skrinka a jej zapojenie
4. či je pripojené príslušenstvo
5. Normálna prevádzka uzamykacieho systému

Ak zistíte akékoľvek poruchy, prestaňte zariadenie používať a obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pohon/riadiacu jednotku môže otvoriť alebo vymeniť len skúsený alebo autorizovaný personál. Ak je niektorá časť zariadenia poškodená, odpojte napájací kábel a prestaňte ho používať. Potom to oznámte servisnému oddeleniu.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Zariadenie je profesionálne zariadenie určené na používanie v kozmetických salónoch. Obsluha zariadenia len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabráni nežiaducim následkom počas ošetrovania.
2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokrými rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.
4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte prístroj zo zásuvky a obráťte sa na autorizovaný servis poskytovaný spoločnosťou ACTIVESHOP Sp. z o. o:
(a) do spotrebiča sa dostala tekutina, (b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky,
c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) spotrebič bol prevrhnutý alebo bol poškodený jeho kryt.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Neinštalujte prístroj na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s prístrojom.
7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Neumiestňujte spotrebič na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. Prístroj sa môže pri páde poškodiť.

9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržať interval jednej minúty.

10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak nebezpečenstvu.

2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo poučenie o používaní zariadenia bezpečným spôsobom tak, aby boli pochopené súvisiace riziká.

3. Spotrebič nie je určený na hranie deťom. Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali.

4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.

5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly likvidujte v recyklačných centrách v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do koša na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou

2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení by sa mal elektroodpad zbierať oddelene a potom odovzdať na zberných miestach pre e l e k t r o o d p a d . Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali posilať na opätovné spracovanie. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Prístroj by sa mal prepravovať pri teplote od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Jednotku skladujte v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.