

ACTIVESHOP[®]

NÁVOD NA POUŽITIE

Lupa S4+ statív



Dovozca:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/07/2024



Zväčšovacia lampa na štvorramennom statíve umožňuje detailný pohľad na kožu a kožné lézie a osvetľuje ošetrovanú oblasť. Používa sa aj na ošetrovanie manikúry a pedikúry a permanentný make-up. LED diódy svietia jasným svetlom, ktoré zvyšuje pracovný komfort.

Technické údaje:

Napätie	220-240V
Napájanie	22W
Frekvencia	50/60Hz
Zväčšenie	5 dioptrií

Rozmery zariadenia:




Bezpečnostné opatrenia:

1. Spotrebič nepoužívajte v blízkosti vane, umývadla alebo iného vodného zdroja.
2. Pri pripájaní zástrčky sa nedotýkajte jej kovových častí.
3. Spotrebič pravidelne čistite, aby ste zabránili hromadeniu nečistôt. Najlepšie je čistiť spotrebič vlhkou handričkou.
4. Neobtáčajte napájací kábel okolo spotrebiča.
5. Uistite sa, že je spotrebič pripojený k správnomu napájaniu a že je zástrčka správne zasunutá do zásuvky.
6. Spotrebič nezapájajte mokrými alebo vlhkými rukami.
7. Spotrebič nepoužívajte, ak je zástrčka horúca alebo poškodená.
8. Prístroj neskladujte v kúpeľni ani v iných miestnostiach s vysokou vlhkosťou.
9. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horľavých látok.
10. Do zariadenia nenarážajte a nehádzte ho.


Špecifikácie zariadenia:

1. Napájacia zástrčka
2. Rameno zariadenia
3. Lampa
4. Spínač zapnutia/vypnutia
5. Nastavenie lampy
6. Statív
7. Základňa
8. Koliesko

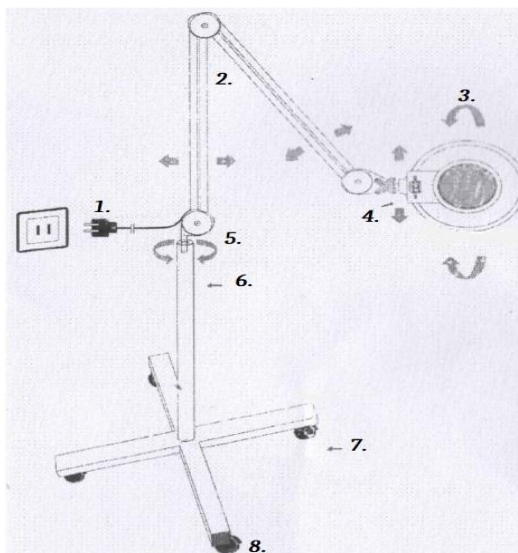

Montáž:

1. Najprv zostavte základňu a statív. Spojte obe nohy a statív pomocou podložky a skrutky, ako je to na obrázku 1. Potom pripojte lampu k statívu (obrázok 2).

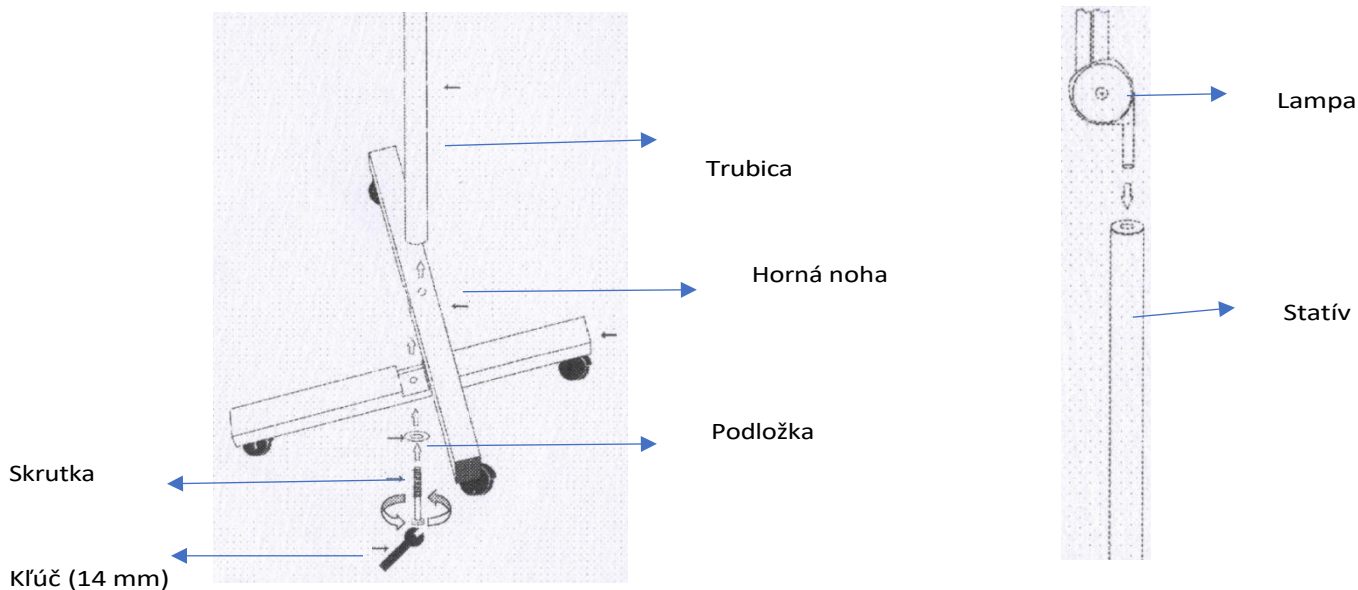

Návod na použitie:

1. Zostavte jednotku.
2. Pripojte ju k vhodnému zdroju napájania.
3. Zapnite lampu.
4. Podľa potreby nastavte polohu svietidla.
5. Po dokončení nezabudnite jednotku odpojiť od elektrickej siete.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Zariadenie je profesionálne zariadenie určené na používanie v kozmetických salónoch. Obsluha zariadenia len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabráni nežiaducim účinkom počas ošetrovania.
2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokrými rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.
4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte prístroj zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis poskytovaný spoločnosťou ACTIVESHOP Sp. z o.o:
a) do spotrebiča sa dostala kvapalina, b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky,
c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) spotrebič bol prevrhnutý alebo bol poškodený jeho kryt.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Prístroj neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s prístrojom.
7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Neumiestňujte spotrebič na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. Prístroj sa môže pri páde poškodiť.
9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a n a o p a k) dodržať interval jednej minúty.
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak nebezpečenstvu.
2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo inštrukciá o používaní zariadenia bezpečným spôsobom tak, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať zdravotné riziko alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly zlikvidujte v recyklačných strediskách v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do nádob na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES týkajúcou sa odpadu použitých elektrických a elektronických použitých elektrických spotrebičov.

sa elektrické zariadenia musia zbierať oddelene a odovzdať na nasledujúcich zberných miestach

zber odpadových elektronických a elektrických zariadení. Staré spotrebiče po skončení svojej životnosti obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na opätovné spracovanie. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Spotrebič by sa mal prepravovať pri teplote od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj skladujte v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.