

ACTIVESHOP[®]

KASUTUSJUHEND

**Balance Lux 2-osaline kokkupandav puidust massaažilaud
190x70 cm**



Importija:
ACTIVESHOP sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, hoone DC2A
54-610 Wrocław, Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026



Skannige
erinev
keeled


Täname, et valisite meie toote.

Palun lugege enne esimest kasutamist kasutusjuhendit läbi ja hoidke see alles.

Kokkupandav massaažilaud BALANCE Lux puidust jalgadega on praktiline ja mitmekülgne lahendus, mis on loodud massööride, füsioterapeutide ja teiste spetsialistide igapäevatööks. Kaheosaline konstruktsioon tagab stabiilsuse ja mugavuse nii ravi teostajale kui ka patsiendile. Tänu Tänu kompaksetele mõõtmetele, kergele kaalule ja kaasasolevale kotile sobib see suurepäraselt ka mobiilsesse töökeskkonda – võimaldades seda kiiresti ja mugavalt kokku panna ning kaasas kanda.

Tehnilised andmed	
Polstermaterjal	Süntheetiline nahk
Täitematerjal	Vahupolster
Maksimaalne kandevõime	225 kg

Seadme konstruktsioon:

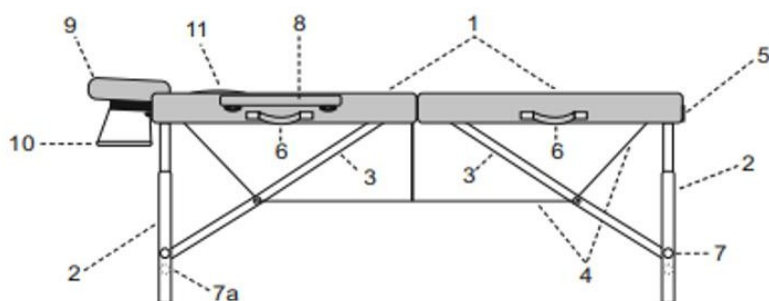

1. Lauaplaadid
2. Jalad
3. Laudaplaadi toed
4. Trossi pingutus
5. Kohvri lukk
6. Transpordikahvlid
7. Kõrguse reguleerimise kruvid / tihvtid 7a.
Lisakruvid
8. Käetuged
9. Peatoe
10. Käetugi
11. Näoava kate

Paigaldusjuhend

1. Kokkupandud laud meenutab kohvrit. Ava lukud ja ava lauaplaadid
2. Võta tarvikud välja (käsitoe, peatoe ja õlariba)
3. Lükka jalad laua väliskülgedele



4. Aseta laud jalgadele ja suru see lauaplaatide ühenduskohas kokku
5. Kontrolli trossi pinget
6. Reguleeri lauaplaadi soovitud kõrgus vastavalt allpool olevale juhendile
7. Lükka käetoed laua küljel asuvatesse avadesse

Seadme mõõtmed



Mõõtmed kokkupanduna 95 x 70 x 15 cm

Puhastamine ja hooldus:

Toote hea tehnilise seisukorra säilitamiseks ja võimalikult pika kasutusaja tagamiseks tuleb seda regulaarselt puhastada ja hooldada.

- Voodi pind – kasutage puhast ja pehmet lappi. Võite kasutada väikest kogust spetsiaalset sünteetilise naha puhastus- ja impregneerimisvahendit.
- Puidust või vineerist pindu tuleb puhastada pehme, kergelt niiske lapiga ja seejärel hoolikalt kuivatada. Keemilisi vahendeid ei tohi kasutada.

Tähelepanu!

Puit on looduslik materjal, millel võivad esineda erinevused puidukiudude paigutuses, värvitoonides ning looduslike elementide, nagu triibud või täpid, esinemisega. Need ei ole toote puudused – vastupidi, need tõendavad toote autentsust ja looduslikku päritolu. Sellised omadused ei ole kaebuse aluseks.

Ohutusnõuded:

1. Seade on professionaalne kosmeetikaseadme, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikupersonali poolt aitab vältida soovimatuid tagajärgi protseduuri ajal.
2. Seadet ei tohi lahti monteerida ega proovida seda kasutada muudel eesmärkidel kui käesolevas kasutusjuhendis on näidatud. Kõik hooldus- ja remonditööd peab tegema ainult volitatud teeninduse töötaja (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Seadet ei tohi paigaldada ega kasutada vedelike läheduses, niisketes kohtades ega märgade kätega. Tuleb tagada, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgmistel juhtudel tuleb pistik viivitamatult pistikupesast välja tõmmata ja võtta ühendust ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o. volitatud teenindusega: a) seadmesse on sattunud vedelik, b) seadmest tuleb imelikku lõhna, suitsu või kummalisi hääli, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Kaablitele ei tohi asetada mingeid esemeid. Seadet ei tohi paigaldada kohtadesse,

kus keegi võib toitejuhtmele astuda.

6. Ohutuse tagamiseks tuleb toitejuhe pärast seadme kasutamist alati pistikupesast välja tõmmata.
7. Seadme sisse ei tohi panna võõrkehi. Kui seadme sisse satub võõrkeha, tuleb vooluvõrgust pistik välja tõmmata ja võtta ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Seadet ei tohi asetada ebastabiilsele alusele, riivilile või sõidukile. Kukkumise korral võib seade kahjustuda.
9. Seadme ettenähtud kasutaja tagamiseks on soovitatav oodata üks minut enne toitenupu uuesti vajutamist (siselülitamise ja väljalülitamise vahel ja vastupidi).
10. Toiteallikas peab vastama tüübisildil esitatud spetsifikatsioonile. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korrektselt, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

HOIATUS

1. Toitekaabli kahjustumise või muude rikete korral pöörduge volitatud teenindusse – nii vältite ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed, isikud füüsiliste ja vaimsete võimete piirangutega ning isikud, kes ei ole seadme tööpõhimõtetega tuttavad, kui neile tagatakse asjakohane järelevalve või juhendamine seadme õige ja ohutu kasutamise kohta ning kui seotud ohud on neile arusaadavad.
3. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kasutamise kohta.
4. Seade ei ole mõeldud laste mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
5. Käesolev elektriseade ei ole mänguasi. Seadme väärkasutamine või sellega kokkupuutumine võib põhjustada tervisekahjustusi või surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida laste käeulatuses väljas.

Seadme kõrvaldamine



Keskkonnakaitse eesmärgil tuleb vastavalt kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete direktiivile 2012/19/EL kasutatud elektriseadmed koguda eraldi ja viia need kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunktidest. Järgige selle seadmete kõrvaldamist ja ärge visake neid olmejäätmete konteineritesse.

Kasutusaja lõpus sisalduvad need seadmed endiselt täisväärtuslikke ringlussevõetavaid komponente, mistõttu tuleb need suunata ringlussevõtuks vastavatesse kogumispunktidest või ettevõttesse ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Hooldus ja transport

Seadet tuleks transportida temperatuurivahemikus (–)20 °C kuni (+)40 °C ainult

originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritavas ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 90%. Kasutustemperatuur on vahemikus (+)10 °C kuni (+)40 °C.

ei tohi seadet visata ega kukutada, samuti ei tohi seda mehaanilistele löökidele ega ilmastikutingimustele avada.