

ACTIVESHOP[®]

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Hordozható marógép aku VIVA 305



Importőr:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław,

Lengyelország

www.activeshop.com.pl Rev.

A/08/2024



Műszaki adatok

Névleges feszültség	5V 2A
Kimeneti feszültség	7,4V 3A
Teljesítmény	36W
Forgási sebesség	35,000 RPM

Méretetek



Figyelem


1. A készüléket rendszeresen tisztítani kell, hogy megakadályozza a szennyeződés, por és egyéb nemkívánatos anyagok felhalmozódását. A fentiek felhalmozódása a készülék hibás működéséhez vagy akár a berendezés károsodásához is vezethet.
2. Tilos a hálózati kábelt a készülék köré tekerni, ez a kábel meghibásodását okozhatja.
3. Mindig ügyeljen arra, hogy a készüléket a megfelelő feszültségű forrásból táplálja. Ügyeljen arra, hogy a dugó helyesen legyen behelyezve a konnektorba. Ennek elmulasztása tüzet, áramütést vagy égési sérüléseket okozhat.
4. A kábel nem módosítható, nem nyújtható, nem hajlítható vagy csavarható túlságosan.
5. A kábelre nem szabad semmilyen nehézséget helyezni.
6. Porelnyelők használatával akadályozza meg, hogy por vagy más káros elemek kerüljenek a dugóba, a talpba vagy a fejbe.

7. Ne üsse vagy dobja meg a készüléket. Ha a készülék megsérül a következők következtében ütés vagy esés következtében, a használata nem folytatható.
8. Ne kísérelje meg a készülék szétszerelését vagy javítását. Javítással kapcsolatban forduljon a forgalmazóhoz akitől a készüléket vásárolta, vagy egy hivatalos szervizközponthoz.

A berendezés felépítése



A fej csatlakoztatása USB C
kábel bemenet

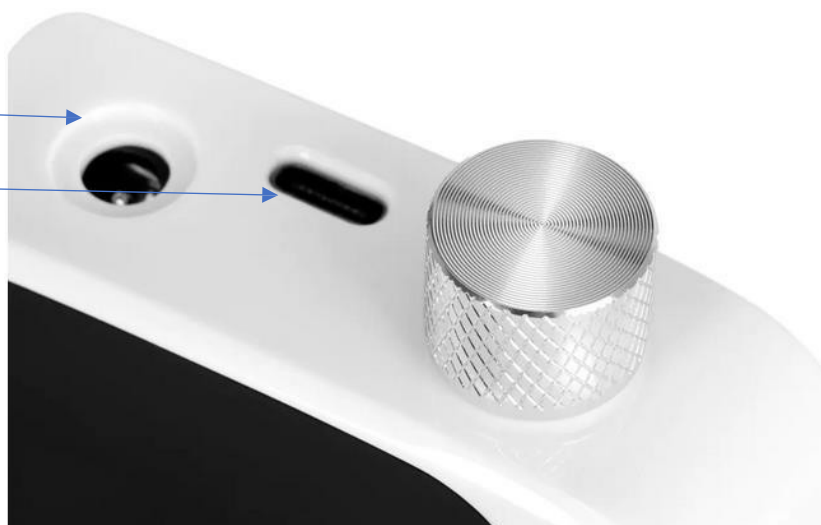

Használati utasítás:

1. Győződjön meg róla, hogy a vágófej megfelelően van elhelyezve és rögzítve. A fej csavaros reteszelésű rendszerrel rendelkezik így a vágófej könnyen felszerelhető és eltávolítható.
2. Indítsa el a gépet a Start/Stop gombbal.
3. A gomb segítségével állítsa be a fordulatszámot (RPM) a gomb jobbra vagy balra fordításával.
4. A gomb megnyomásával kiválaszthatja a forgás irányát.
5. Ha végzett, csökkentse a fordulatszámot a minimumra, és kapcsolja ki a készüléket.
6. A készülék 200 mAh-s akkumulátorral rendelkezik, amely 8-10 órás üzemidőt tesz lehetővé egyetlen üzemórával. töltéssel. Ha szükséges, csatlakoztassa a készüléket a töltéshez, ha végzett.

A vágóeszköz cseréje

1. A vágószerkezet cseréjéhez fordítsa a Twist Lock gombot az óramutató járásával ellentétes irányba a nyitott lakatjel felé.
2. Ekkor kicserélheti a vágót úgy, hogy kicsúsztatja az orsóból és kicseréli egy újjal.
3. Ha a vágóeszköz az orsóban van, fordítsa a Twist Lock gombot az óramutató járásával megegyező irányba a zárt lakat" felé, amíg nem hallja a jellegzetes "kattanást".
4. A kívánt vágási sebesség a vágógép típusától és anyagától függ. Ezzel kapcsolatban kérjük, olvassa el a gyártó tájékoztatóját.

Vigyázat

Er1 hiba jelenhet meg a képernyőn, ha a vágógép nem megfelelően van behelyezve vagy nem blokkolva van.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék szépségszalonokban való használatra szánt professzionális berendezés. Ha a készüléket csak szakképzett személyzet kezeli, elkerülhetők a kezelés során a nemkívánatos következmények.
2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad a jelen használati utasításban megadott céltól eltérő célra használni. Minden szervizelést és javítást csak egy erre felhatalmazott szervíz (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) végezhet.
3. Ne telepítse vagy működtesse a készüléket folyadékok, nedves területek közelében vagy nedves kézzel - annak érdekében, hogy a folyadékok ne kerüljenek a k é s z ü l é k b e .
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Kft. által biztosított hivatalos szervizhez:
A) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt, vagy furcsa hangokat ad ki, c) a hálózati kábel megsérült, d) a készüléket felborították, vagy a háza megsérült.
5. Ne helyezzen tárgyakat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.
9. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva) egy perces szünetet tartani.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb **m e g h i b á s o d á s** esetén forduljon egy hivatalos szervizzel a veszélyek elkerülése érdekében.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek és csökkent fizikai és szellemi képességű személyek, valamint a berendezéssel kapcsolatos tapasztalatlan és ismeretekkel nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet vagy a berendezés biztonságos használatára vonatkozó oktatást biztosítanak, hogy a kapcsolódó kockázatok megértésre kerüljenek.
3. A berendezés nem arra szolgál, hogy a gyermekek játszanak vele. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatát nem kellően ismerő személyek tartózkodnak a közelben.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek elől elzárva használja és tárolja.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



A használt elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolásokat a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében a 2012/19/EK irányelvvel összhangban a használt elektromos készülékekről szóló irányelvvel összhangban a használt elektromos készülékeket ki kell

külön kell gyűjteni, és a használt elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőhelyein kell leadni. elektronikus berendezések.

Ezért a teljesen újrahasznosítható alkatrészeket tartalmazó használaton kívüli és régi készülékeket újrahasznosításra kell küldeni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni, és az ACTIVESHOP Sp. z o.o. részére is átadhatók.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett kell tárolni. Működési hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.